

PL

EVE



ROTARY
**GRINDING &
POLISHING**
INSTRUMENTS

smart**ROTO**
Profesjonalne Instrumenty Rotacyjne

MADE IN GERMANY

DENTAL

TWIST

JEDEN KSZTAŁT DO KAŻDEJ POWIERZCHNI



Łatwiej i szybciej

Specjalna geometria polerek TWIST umożliwia perfekcyjne polerowanie wszystkich powierzchni za pomocą jednego instrumentu. Efekt wysokiego połysku uzyskiwany w znacznie krótszym czasie.



Wygodne polerowanie
każdej powierzchni



Zachowanie
polerowanej struktury



Wyjątkowa
trwałość



Ograniczona
produkcja ciepła




Intuicyjne
zastosowanie



Efekt doskonałego
połysku

OCCLUFLEX

PATENT NA OKLUZJĘ

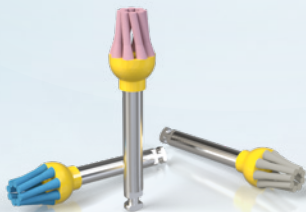

Patent na okluzję

Instrumenty OCCLUFLEX zostały zaprojektowane specjalnie do polerowania trudno dostępnych powierzchni okluzyjnych. Skręcone włókna polerujące docierają nawet do najgłębszych bruzd.



Kształt dopasowany do powierzchni okluzyjnych



Skręcone włókna polerujące docierają do głębokich bruzd



PASTE

Stosowane bez pasty polerskiej



134 °C

Łatwe czyszczenie i sterylizacja



Intuicyjne zastosowanie




Efekt doskonałego połysku

CERASTONE

Kompozyt, Porcelana Skaleniowa, Amalgamat, Złoto

SYSTEM SZLIFOWANIA

- Kamienie ze spoiwem ceramicznym
- Drobiny ściernie z węgla krzemu oraz korundu
- Do precyzyjnego kształtowania materiałów dentystycznych

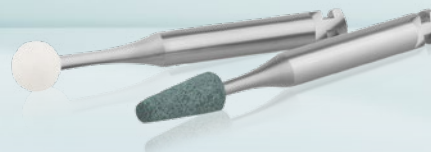

ZASTOSOWANIE:

ZIARNISTOŚĆ:

SPOIWO:

Kamienie z węgla krzemu do porcelany

DROBNA

ŚREDNIE

RA

Kamienie Arkansas do wypełnień kompozytowych

BARDZO DROBNA

TWARDE

RA
FG

DROBNA

BARDZO DROBNA

RA: 15.000 - 25.000 min⁻¹
maks. 30.000 min⁻¹

FG: 80.000 - 100.000 min⁻¹
maks. 120.000 min⁻¹

10,100 Sztuk



Produkt:	CSG-RA-645	CSG-RA-661	CSW-RA-601	CSW-RA-645	CSW-RA-661	CSW-RA-666	RA
REF:	8603	8605	8631	8633	8636	8637	
Wymiary (mm):	–	–	CSW-FG-601	CSW-FG-645	CSW-FG-661	CSW-FG-666	FG
Zalecane obroty (min⁻¹):	–	–	8694	8696	8698	8699	
Maks. Obroty (min⁻¹):	3 x 7	2,5 x 7	3 x 3	3 x 7	2,5 x 7	2,5 x 6,5	

ECOCOMP

Kompozyt

SYSTEM POLEROWANIA

- Do efektywnego polerowania powierzchni kompozytu
- Drobiny ściernie z węgla krzemu
- Twarde spoiwo gwarantuje dłuższą trwałość



Set RA 210 **REF** 9071

EC11m | EC7m | EC3Km | EC18m
EC11f | EC7f | EC3Kf | EC18f



ŚREDNIA
Polerowanie wstępne



DROBNA
Polerowanie właściwe



- 7.000 - 10.000 min⁻¹
maks. 20.000 min⁻¹
- 10, 100 Sztuk



EC11m	EC3Km	EC7m	EC18m	EC11f	EC3Kf	EC7f	EC18f
5181	5173	5177	5188	5281	5273	5277	5288
3 x 7,5	6,5 x 9,5	5 x 10	10 x 2,5	3 x 7,5	6,5 x 9,5	5 x 10	10 x 2,5

Produkt:

REF:

Wymiary (mm):

DIACOMP® plus

Kompozyt, Ceramika Hybrydowa,
Materiały Hybrydowe Drukowane w 3D



SYSTEM POLEROWANIA
IMPREGNOWANY DIAMENTEM

- Dwuetapowy system o wyjątkowej wydajności
- Zastosowanie ze wszystkimi rodzajami kompozytu
- Perfekcyjne efekty także w przypadku bardzo twardego kompozytu

Set RA 344 REF 9094


DCP-W11m | DCP-OFm | DCP3m | DCP2m
DCP-W11f | DCP-OFF | DCP3f | DCP2f




2 SYSTEM DWUETAPOWY



ŚREDNIA
Polerowanie wstępne

 3.000 - 8.000 min⁻¹
maks. 20.000 min⁻¹

 1, 10 Sztuk



Produkt:	DT-DCP10m	DT-DCP14m	DCP-OFm	DCP-W11m	DCP2m	DCP1m	DCP3m	DCP-W2Bm
REF:	6180	6184	6175	6181	6172	6171	6173	6192
Wymiary (mm):	11 x 1,6	14 x 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	10 x 2,5	4 x 10	6 x 7,5	5 x 10

Set RA 343 REF 9087

DT-DCP10m | DT-DCP10f

Set RA 342 REF 9086

DT-DCP14m | DT-DCP14f

Set RA 345 REF 9095

DCP-OFm | DCP-OFF



2 DROBNA
Polerowanie na wysoki połysk



3.000 - 8.000 min⁻¹
maks. 20.000 min⁻¹
 1, 10 Sztuk

DT-DCP10f	DT-DCP14f	DCP-OFF	DCP-W11f	DCP2f	DCP1f	DCP3f	DCP-W2Bf	Produkt:
6280	6284	6275	6281	6272	6271	6273	6292	REF:
11 x 1,6	14 x 1,6	5,5 x 8,8	3 x 7,5	10 x 2,5	4 x 10	6 x 7,5	5 x 10	Wymiary (mm):

DIAPOL®

Porcelana Skaleniowa, Dwukrzemian Litu, Cyrkon



SYSTEM POLEROWANIA
IMPREGNOWANY DIAMENTEM

- Trzystopniowy system do polerowania porcelany
- Drobinny diamentowy gwarantują wyjątkową efektywność
- Korekty bez dodatkowego glazurowania

3 SYSTEM TRZYETAPOWY



GRUBA
Wygładzanie




ŚREDNIA
Polerowanie wstępne



7.000 - 12.000 min⁻¹
* 3.000 - 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



1, 10 Sztuk

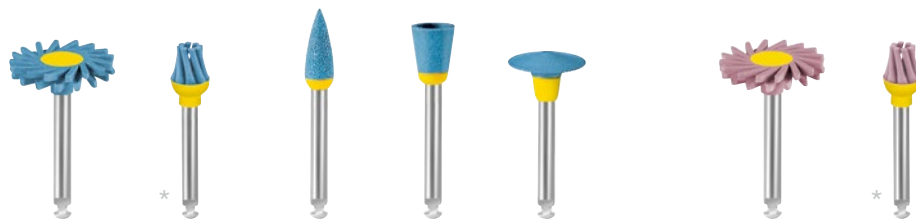

Produkt:	DT-W14Dg	OF-Dg	W16Dg	W17Dg	W18Dg	DT-W14Dmf	OF-Dmf
REF:	7084	7075	7086	7087	7088	7184	7175
Wymiary (mm):	14 x 1,6	5,5 x 8,8	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5	14 x 1,6	5,5 x 8,8


Set RA 307 REF 9061

W16Dg | OF-Dg | W17Dg | W18Dg
 W16Dmf | OF-Dmf | W17Dmf | W18Dmf
 W16D | OF-D | W17D | W18D



Set RA 308 REF 9060

OF-Dg | OF-Dmf | OF-D

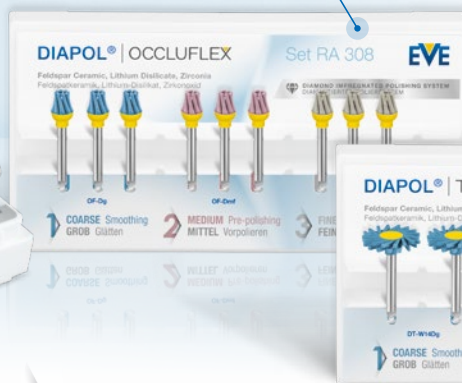

Set RA 306 REF 9088

DT-W14Dg | DT-W14Dmf | DT-W14D



DROBNA

Polerowanie na wysoki połysk



- 7.000 - 12.000 min⁻¹
- * 3.000 - 8.000 min⁻¹
- max. 20.000 min⁻¹
- 1, 10 Sztuk

W16Dmf	W17Dmf	W18Dmf	DT-W14D	OF-D	W16D	W17D	W18D	Produkt:
7186	7187	7188	7284	7275	7286	7287	7288	REF:
4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5	14 x 1,6	5,5 x 8,8	4 x 10	6 x 7,5	10 x 2,5	Wymiary (mm):

DIACERA

Cyrkon



SYSTEM POLEROWANIA
IMPREGNOWANY DIAMENTEM

- Szczególnie przydatne przy odbudowach pełnocyrkonowych
- Większa koncentracja diamentu w celu zwiększenia efektywności
- Poprawy bez konieczności ponownego glazurowania



Set RA 323 REF 9091

DT-W14DCmf | DT-W14DC



Set HP 325 REF 9063

W16DCmf | OF-DCmf | W17DCmf | W18DCmf
W16DC | OF-DC | W17DC | W18DC

+ DIASYNT^{plus} (Szlifowanie)
DYP-W13g

2 SYSTEM
DWUETAPOWY



ŚREDNIA
Polerowanie wstępne




DROBNA
Polerowanie na wysoki połysk



7.000 - 10.000 min⁻¹
* 3.000 - 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹



1, 10 Sztuk

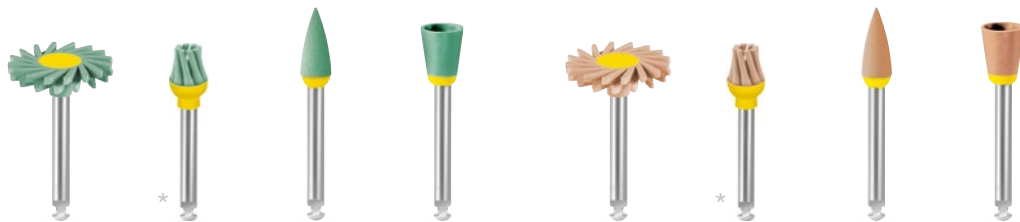

Produkt:	DT-W14DCmf	OF-DCmf	W16DCmf	W17DCmf	DT-W14DC	OF-DC	W16DC	W17DC
REF:	7684	7675	7686	7687	7784	7775	7786	7787
Wymiary (mm):	14 x 1,6	5,5 x 8,8	4 x 10	6 x 7,5	14 x 1,6	5,5 x 8,8	4 x 10	6 x 7,5

DIAPRO

Dwukrzemian Litu

 SYSTEM POLEROWANIA
IMPREGNOWANY DIAMENTEM

- Szczególnie polecane do porcelany silikatowej
- Drobinny diamentowy gwarantują wyjątkową efektywność
- Polerowanie odpowiadające efektowi glazury



1 ŚREDNIA
Polerowanie wstępne

2 DROBNA
Polerowanie na wysoki połysk



DT-W14DPmf	DT-W14DPmf	W16DPmf	W17DPmf	DT-W14DP	OF-DP	W16DP	W17DP
7884	7884	7886	7887	7984	7975	7986	7987
14 x 1,6	14 x 1,6	4 x 10	6 x 7,5	14 x 1,6	5,5 x 8,8	4 x 10	6 x 7,5

2 SYSTEM
DWUETAPOWY

 7.000 - 10.000 min⁻¹
* 3.000 - 8.000 min⁻¹
max. 20.000 min⁻¹
 1, 10 Sztuk

Set RA 365 REF 9065

W16DPmf | OF-DPmf | W17DPmf | W18DPmf
W16DP | OF-DP | W17DP | W18DP

+ DIASYN[®] plus (Szlifowanie)
DYP-W13m



Set RA 363 REF 9092

DT-W14DPmf | DT-W14DP



Set HP 365 REF 9065

W16DPmf | OF-DPmf | W17DPmf | W18DPmf
W16DP | OF-DP | W17DP | W18DP

+ DIASYN[®] plus (Szlifowanie)
DYP-W13m

UNIVERSAL

Kompozyt, Porcelana Skaleniowa, Amalgamat, Złoto

SYSTEM POLEROWANIA


- Do wygładzania wszelkich materiałów dentystycznych
- Miękkie tworzywo silikonowe dopasowuje się do polerowanej powierzchni
- Polerki z węglikiem krzemu


Set RA 101 REF 9070

W11 | W1 | W2 | W2B |
W5 | W7 | W8 | W9



1 SYSTEM JEDNOETAPOWY

 7.000 - 10.000 min⁻¹
maks. 20.000 min⁻¹

 10, 100 Sztuk

 ŚREDNIA
Wygładzanie



Produkt:	W1	W2	W5	W7	W9
REF:	1071	1072	1075	1077	1079
Wymiary (mm):	5,5 x 15	4,5 x 12	9 x 8,5	7 x 10	11 x 2,5

EVEFLEX

Amalgamat, Złoto

SYSTEM POLEROWANIA

- Do polerowania amalgamatu oraz złota
- System trzystopniowy
- Drobinny ścierny z węgla krzemowego

Set RA 209 REF 9075

AF11 | AF7 | AF3K
BV11 | BV7 | BV3K
GH11 | GH7 | GH3K



1 GRUBA
Wygładzanie

2 ŚREDNIA
Polerowanie wstępne

3 DROBNA
Polerowanie właściwe

3 SYSTEM
TRZYETAPOWY



7.000 - 12.000 min⁻¹
maks. 20.000 min⁻¹

10, 100 Sztuk

AF11	AF3K	AF7	BV11	BV3K	BV7	GH11	GH3K	GH7
4681	4673	4677	4781	4773	4777	4881	4873	4877
3 x 7,5	6,5 x 9,5	5 x 10	3 x 7,5	6,5 x 9,5	5 x 10	3 x 7,5	6,5 x 9,5	5 x 10

Produkt:

REF:

Wymiary (mm):

FLEXI-DIA

Porcelana Skaleniowa, Dwukrzemian Litu,
Cyrkon, Ceramika Hybrydowa



SYSTEM POLEROWANIA
IMPREGNOWANY DIAMENTEM

- Elastyczne dyski polerujące pokryte diamentem (jednostronnie)
- Do stosowania w ruchu pchającym lub ciągnącym
- Wyjątkowo cienka plastikowa folia

Starter Set 14 REF 9006

FD-14Dxg | FD-14Dg | FD-14Dmf | FD-14D

+ MANDRYLKA
95RA



4 SYSTEM
CZTEROETAPOWY



1 GRUBA
Kształtowanie



2 ŚREDNIA
Wygladzanie



3 DROBNA
Polerowanie wstępne




4 EXTRA DROBNA
Polerowanie właściwe



7.000 - 10.000 min⁻¹
maks. 20.000 min⁻¹



100 Sztuk
z lub bez mandrylki

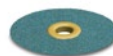

Produkt:	FD-14Dxg	FD-14Dg	FD-14Dmf	FD-14D	95RA
REF:	9146	9147	9148	9149	9595
Wymiary (mm):	14 x 0,21	14 x 0,17	14 x 0,14	14 x 0,11	—

FLEXI-D

Kompozyt, Amalgamat, Złoto

SYSTEM POLEROWANIA

- Elastyczne dyski polerujące pokryte jednostronnie tlenkiem glinu
- Do opracowania i polerowania powierzchni stycznych
- Do stosowania w ruchu pchającym lub ciągnącym



Starter Set 14 REF 9001

FD-14g | FD-14m | FD-14f | FD-14sf

+ MANDRYLKA
95RA

Starter Set 10 REF 9000

FD-10g | FD-10m | FD-10f | FD-10sf

+ MANDRYLKA
95RA

1 GRUBA
Kształtowanie

2 ŚREDNIA
Wygładzanie

3 DROBNA
Polerowanie wstępne

4 EXTRA DROBNA
Polerowanie właściwe

4 SYSTEM
CZTEROETAPOWY



7.000 - 10.000 min⁻¹
maks. 20.000 min⁻¹

100 Sztuk
z lub bez mandrylki

FD-10g	FD-14g	FD-10m	FD-14m	FD-10f	FD-14f	FD-10sf	FD-14sf	95RA	Produkt:
9121	9141	9122	9142	9123	9143	9124	9144	9595	REF:
14 x 0,21	14 x 0,21	14 x 0,17	14 x 0,17	14 x 0,14	14 x 0,14	14 x 0,11	14 x 0,11	-	Wymiary (mm):

DIABRUSH

Kompozyt, Porcelana Skaleniowa



SYSTEM POLEROWANIA
IMPREGNOWANY DIAMENTEM

- Do polerowania na wysoki połysk porcelany i kompozytu
- Do polerowania wypełnień na powierzchniach okluzyjnych
- Włókno z drobinami diamentu
- Używać bez pasty polerskiej
- Włókno poliamidowe odporne na ciepło i sterylizację w autoklawie



DROBNA • TWARDOŚĆ: średnia



maks. 10.000 min⁻¹



1, 10 Sztuk



Produkt:

WTD1

WZD1

WSD1

REF:

9481

9482

9483

Wymiary (mm):

6 x 5,5

4 x 6,5

4 x 6,5

EVEBRUSH

Kompozyt



SYSTEM POLEROWANIA

- Do polerowania na wysoki połysk porcelany i kompozytu
- Do polerowania wypełnień na powierzchniach okluzyjnych
- Włókno z drobinami węgla krzemowego
- Używać bez pasty polerskiej
- Włókno poliamidowe odporne na ciepło i sterylizację w autoklawie



DROBNA • TWARDOŚĆ: twarde



WT1
9491
6 x 5,5

WZ1
9492
4 x 6,5

WS1
9493
4 x 6,5



maks. 10.000 min⁻¹



1, 10 Sztuk

Produkt:

REF:

Wymiary (mm):

UNIBRUSH

Oczyszczanie Zębów

SYSTEM POLEROWANIA

- Nylonowe szczoteczki do stosowania z pastami polerującymi
- Używane w profilaktyce oraz przy uzupełnieniach protetycznych
- Nie zmieniają struktury polerowanej powierzchni



GRUBA

ŚREDNIA

SUPER MIĘKKA



maks. 10.000 min⁻¹



10, 100 Sztuk



Produkt:	WTH	WZH	WSH	WTM	WZM	WSM	WTS	WZS	WSS
REF:	9451	9452	9453	9461	9462	9463	9471	9472	9473
Wymiary (mm):	6 x 5,5	4 x 6,5	4 x 6,5	6 x 5,5	4 x 6,5	4 x 6,5	6 x 5,5	4 x 6,5	4 x 6,5

BRACKET *plus*

Usuwanie Kleju

SYSTEM POLEROWANIA

- Do usuwania resztek kleju po zdjęciu aparatu ortodontycznego
- Nie uszkadzają szkliwa
- Do usuwania resztek zamków rekomenduje się PROPHYCLEAN

Set RA 431 **REF** 9097

BRP11 | BRP7 | BRP3 | BRP6

+ PROPHYCLEAN
(Oczyszczanie selektywne)
PC-100



BRP11

BRP7

BRP3

BRP6

5681

5677

5673

5676

3 x 7,5

5 x 10

5,5 x 8,5

10 x 0,7



5.000 - 7.000 min⁻¹
maks. 20.000 min⁻¹



10, 100 Sztuk

Produkt:

REF:

Wymiary (mm):

PROPHYCLEAN

Oczyszczanie Zębów, Usuwanie Kleju

SYSTEM POLEROWANIA

- Usuwają kamień nazębny i przebarwienia
- Specjalne tworzywo zapobiega uszkodzeniom szkliwa
- Do stosowania mechanicznego w zabiegach profilaktycznych
- Nie zawiera włókna szklanego
- Niebieska wersja na silne przebarwienia

Set RA 411 **REF** 9081

PC-100g | PC-102g | PC-103g | PC-111g
PC-100 | PC-102 | PC-103 | PC-111



2 SYSTEM DWUETAPOWY



- **5.000 - 10.000 min⁻¹**
max. 20.000 min⁻¹
- **1, 10 Sztuk**



Produkt:	PC-100g	PC-102g	PC-103g	PC-111g	PC-100	PC-102	PC-103	PC-111
REF:	8700	8702	8703	8711	8800	8802	8803	8811
Wymiary (mm):	2,35 x 9	2,35 x 7	2,35 x 7,5	3 x 6,5	2,35 x 9	2,35 x 7	2,35 x 7,5	3 x 6,5

DIASTRIPS

Kompozyt, Porcelana Skaleniowa, Dwukrzemian Litu, Cyrkon,
Ceramika Hybrydowa, Stopy Metali Nieszlachetnych, Tytan



PASKI DIAMENTOWE
PERFOROWANE

- Do manualnego opracowania powierzchni
- Aplikacja międzyzębowa
- Perforacje ułatwiają usuwanie opiłków

Set PDL4 REF 9014

PDL-45/4 | PDL-35/4 | PDL-10/4



Set PDL2,5 REF 9012

PDL-45/2,5 | PDL-35/2,5 | PDL-10/2,5



GRUBA



ŚREDNIA



MIĘKKA



SYSTEM
TRZYETAPOWY



PDL-45/4

9101

4 x 150

0,11



PDL-45/2,5

9106

2,5 x 150

0,11



PDL-35/4

9102

4 x 150

0,10



PDL-35/2,5

9107

2,5 x 150

0,10



PDL-10/4

9103

4 x 150

0,07



PDL-10/2,5

9108

2,5 x 150

0,07



9 Sztuk

Produkt:

REF:

Wymiary (mm):

Grubość (mm):

DIASYNT® plus

Porcelana Skaleniowa, Dwukrzemian Litu, Cyrkon



SYSTEM SZLIFOWANIA
IMPREGNOWANY DIAMENTEM

- Syntetyczne spoiwo impregnowane diamentem
- Duża wydajność ścierna
- Minimalne nagrzewanie
- Można stosować bez chłodzenia wodą



GRUBA
Szlifowanie

ŚREDNIA
Wyglądanie



8.000 - 12.000 min⁻¹
maks. 25.000 min⁻¹



1, 10 Sztuk



Produkt:	DYP-22/4g	DYP-8g	DYP-13g	DYP-14g	DYP-22/4m	DYP-8m	DYP-13m	DYP-14m
REF:	8000	8048	8053	8054	8100	8148	8153	8154
Wymiary (mm):	22 x 4	12 x 2	4 x 10	5 x 13	22 x 4	12 x 2	4 x 10	5 x 13


DIADUR®

Porcelana Skaleniowa



SYSTEM SZLIFOWANIA
IMPREGNOWANY DIAMENTEM

- Tworzywo ceramiczne impregnowane diamentem
- Zachowują kształt podczas aplikacji
- Doskonała trwałość
- Odporne na ciepło

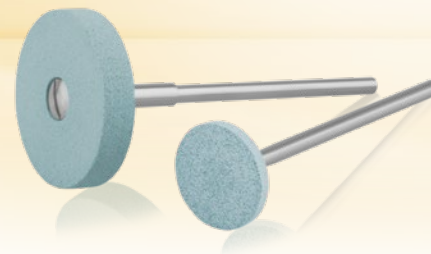

ŚREDNIA
Wygładzanie



DD-22/4m	DD-17m	DD-13m	DD-14m
8300	8304	8353	8354
22 x 4,5	15 x 3,5	3,5 x 11	4,8 x 13



10.000 - 15.000 min⁻¹
maks. 35.000 min⁻¹



1, 10 Sztuk

Produkt:

REF:

Wymiary (mm):


DIACON

Porcelana Skaleniowa, Dwukrzemian Litu, Cyrkon, Stopy Metali Niezslachetnych



SYSTEM SZLIFOWANIA
IMPREGNOWANY DIAMENTEM

- Pozwala na precyzyjną redukcję brzegów licówek i koron bez ryzyka odpryskiwania
- Efektywna redukcja materiału przy jednoczesnym uzyskaniu wstępnie wypolerowanej powierzchni
- Niskie zużycie dzięki mocnemu spoiwu
- Zmniejszone wydzielanie ciepła

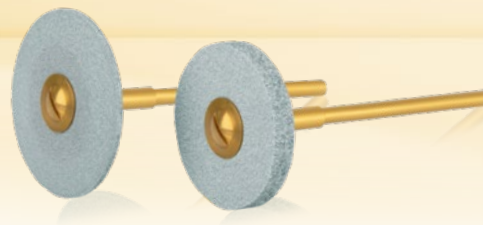

ŚREDNIA



10.000 - 15.000 min⁻¹
maks. 20.000 min⁻¹



1, 10 Sztuk



Produkt:	DI-L26m	DI-R22m	DI-R17m	DI-13m
REF:	6700	6701	6704	6753
Wymiary (mm):	26 x 2,5	22 x 3	17 x 3	4 x 10

DIACOMP® *paste*

Kompozyt, Ceramika Hybrydowa



PASTA
DIAMENTOWA

- Do polerowania na wysoki połysk wypełnień kompozytowych
- Wysoka koncentracja drobinek diamentu
- Do stosowania z EVE UNIBRUSH (p. 18)

DIAPOL® *paste*

Porcelana Skaleniowa,
Dwukrzemian Litu, Cyrkon



PASTA
DIAMENTOWA

- Do polerowania na wysoki połysk wszystkich rodzajów porcelany
- Wysoka koncentracja drobinek diamentu
- Do stosowania z EVE UNIBRUSH (p. 18)



POJEMNOŚĆ: 2 g



1 Sztuk

DP3

9705

8 - 12

DP2

9702

4 - 8

Produkt:

REF:

Ziarnistość (μ):

DIAPOL®

Porcelana Skaleniowa, Dwukrzemian Litu, Cyrkon, Tytan



SYSTEM POLEROWANIA
IMPREGNOWANY DIAMENTEM

- System do polerowania wszystkich rodzajów porcelany
- Diamentowe drobiny zapewniają wyjątkową efektywność
- Korekty powierzchni bez konieczności glazurowania

3 SYSTEM TRZETAPOWY

1

GRUBA
Wyglądanie

2

ŚREDNIA
Polerowanie wstępne

3


DROBNA
Polerowanie na wysoki połysk



7.000 - 12.000 min⁻¹
maks. 20.000 min⁻¹





1, 10 Sztuk

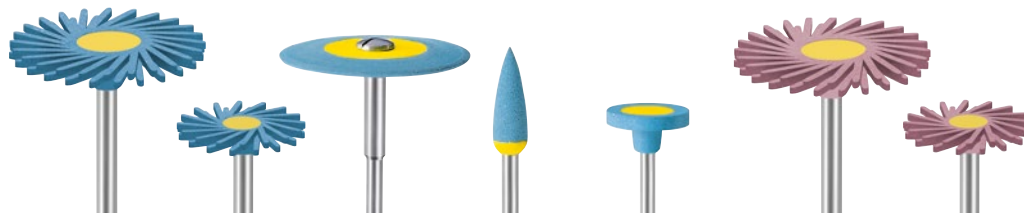

Produkt:	DT-H26Dg	DT-H17Dg	L26Dg	H2Dg	H8Dg	DT-H26Dmf	DT-H17Dmf
REF:	7066	7057	7000	7042	7048	7166	7157
Wymiary (mm):	26 x 2	17 x 1,6	26 x 2	4 x 13	11 x 2	26 x 2	17 x 1,6

Set RA 311 REF 9047


DT-H14Dg | DT-H14Dmf | DT-H14D
DT-H17Dg | DT-H17Dmf | DT-H17D

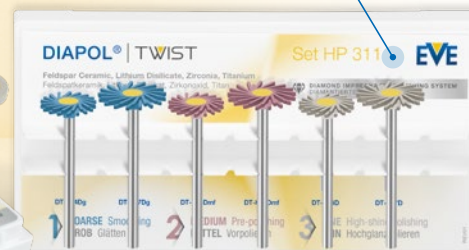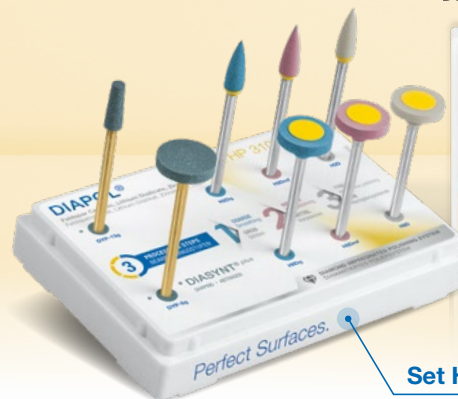



Set HP 310 REF 9040

H2Dg | H8Dg | H2Dmf | H8Dmf | H2D | H8D

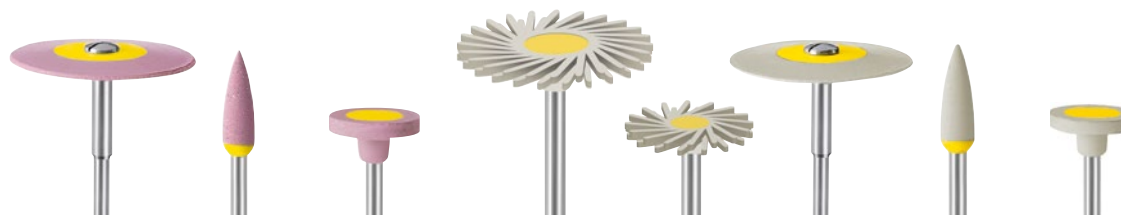+ DIASYNT^{plus} (Szlifowanie)
DYP-13g | DYP-8g (p. 24)



 7.000 - 12.000 min⁻¹
maks. 20.000 min⁻¹
 1, 10 Sztuk

L26Dmf	H2Dmf	H8Dmf	DT-H26D	DT-H17D	L26D	H2D	H8D	Produkt:
7100	7142	7148	7266	7257	7200	7242	7248	REF:
26 x 2	4 x 13	11 x 2	26 x 2	17 x 1,6	26 x 2	4 x 13	11 x 2	Wymiary (mm):

DIACERA

Cyrkon



SYSTEM POLEROWANIA
IMPREGNOWANY DIAMENTEM

- Szczególnie przydatne przy odbudowach pełnocyrkonowych
- Większa koncentracja diamentu w celu zwiększenia efektywności
- Poprawki bez konieczności ponownego glazurowania
- Przed polerowaniem wykonuje się szlifowanie za pomocą DIASYNT^{® plus} (s. 22)



ŚREDNIA
Polerowanie wstępne



7.000 - 12.000 min⁻¹
maks. 20.000 min⁻¹





1, 10 Sztuk



Produkt:	DT-H26DCmf	DT-H17DCmf	L26DCmf	H2DCmf	H8DCmf
REF:	7666	7657	7600	7642	7648
Wymiary (mm):	26 x 2	17 x 1,6	26 x 2	4 x 13	11 x 2

Set HP 324 REF 9048

DT-H14DCmf | DT-H17Cmf
DT-H14DC | DT-H17DC

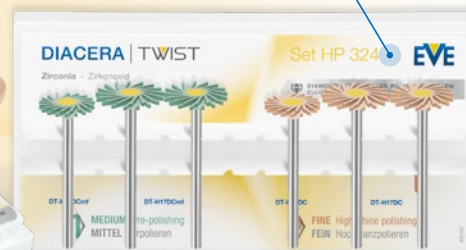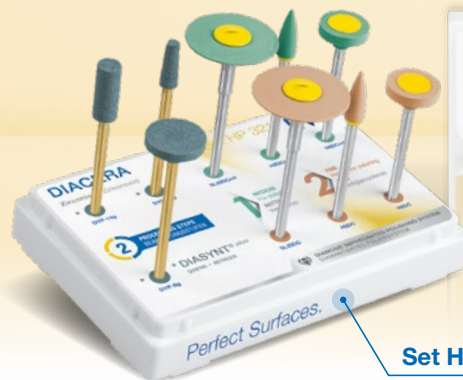


Set HP 321 REF 9041

SL20DCmf | H2DCmf | H8DCmf
SL20DC | H2DC | H8DC

+ DIASINT^{plus} (Szlifowanie)
DYP-14g | DYP-13g | DYP-8g (p. 24)

2

DROBNA
Polerowanie na wysoki połysk

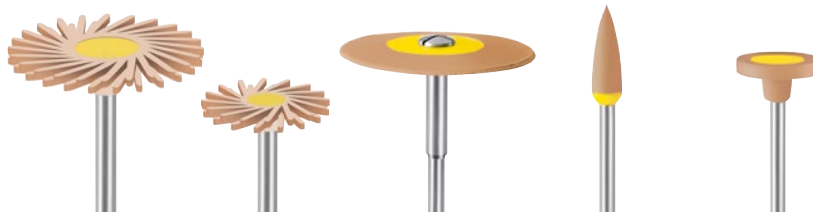

7.000 - 12.000 min⁻¹
maks. 20.000 min⁻¹



1, 10 Sztuk

DT-H26DC

7766

26 x 2

DT-H17DC

7757

17 x 1,6

L26DC

7700

26 x 2

H2DC

7742

4 x 13

H8DC

7748

11 x 2

Produkt:

REF:

Wymiary (mm):

DIAPRO

Dwukrzemian Litu



SYSTEM POLEROWANIA
IMPREGNOWANY DIAMENTEM

- Opracowane specjalnie do polerowania ceramiki krzemianowej
- Diamentowe drobiny ściernie zapewniają wyjątkową efektywność
- Połysk odpowiadający efektowi glazury
- Przed polerowaniem wykonuje się szlifowanie za pomocą DIASYNT® plus (s. 22)



ŚREDNIA
Polerowanie wstępne



7.000 - 12.000 min⁻¹
maks. 20.000 min⁻¹




1, 10 Sztuk



Produkt:	DT-H26DPmf	DT-H17DPmf	L26DPmf	H2DPmf	H8DPmf
REF:	7866	7857	7800	7842	7848
Wymiary (mm):	26 x 2	17 x 1,6	26 x 2	4 x 13	11 x 2

Set HP 364 REF 9049

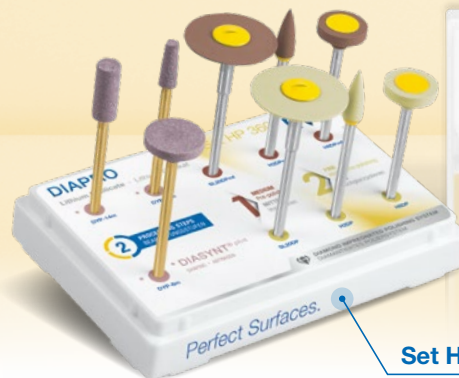 DT-H14DPmf | DT-H17DPmf
 DT-H14DP | DT-H17DP

2
DROBNA
 Polerowanie na wysoki połysk

Set HP 360 REF 9042

 SL20DPmf | H2DPmf | H8DPmf
 SL20DP | H2DP | H8DP

 + DIASYNT^{plus} (Szlifowanie)
 DYP-14m | DYP-13m | DYP-8m (p. 24)

 7.000 - 12.000 min⁻¹
 maks. 20.000 min⁻¹


1, 10 Sztuk

DT-H26DP

DT-H17DP

L26DP

H2DP

H8DP

Produkt:

7966

7957

7900

7942

7948

REF:

26 x 2

17 x 1,6

26 x 2

4 x 13

11 x 2

Wymiary (mm):

UNIVERSAL

Porcelana Skaleniowa, Stopy Metali Nieszlachetnych, Złoto

SYSTEM POLEROWANIA

- Do wygładzania wszystkich tworzyw dentystycznych
- Miękkie tworzywo silikonowe dopasowuje się do polerowanej powierzchni
- Zróżnicowane kształty do różnych zastosowań
- Polerki z węglikiem krzemu

GRUBA
Wygładzanie



7.000 – 10.000 min⁻¹
maks. 20.000 min⁻¹



10, 100 Sztuk



Produkt:	R22	L22	S6	C7	61HP	78HP
REF:	1000	1001	1016	1017	9551	9553
Wymiary (mm):	22 x 3	22 x 4	6 x 24	7 x 20	–	5


UNITRIM

Protezy Akrylowe, Technologia Termoformowania



SYSTEM SZLIFOWANIA

- Opracowuje bez efektu topienia
- Porowata powierzchnia minimalizuje produkcję ciepła
- Pozostawiają gładkie brzegi opracowanej powierzchni

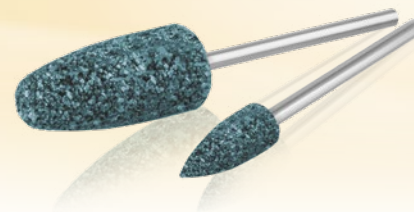

UT-H334K

8534

10 x 24

GRUBA
Szlifowanie



UT-H338

8538

5,5 x 16



3.000 - 5.000 min⁻¹
maks. 20.000 min⁻¹



1, 10 Sztuk

Produkt:

REF:

Wymiary (mm):

TECHNIK

Akryl, Technologia Termoformowania

SYSTEM POLEROWANIA

- Do wygładzania oraz polerowania wstępnego i właściwego
- Zróżnicowane kształty do różnych obszarów
- Polerka z węgla krzemu

Set HP 115 REF 9044

H332K | H334K | H338 | H336K
 H332Km | H334Km | H338m | H336Km
 H332Kf | H334Kf | H338f | H336Kf





3 SYSTEM TRZETAPOWY

1 GRUBA
Wygładzanie

2 ŚREDNIA
Polerowanie wstępne

3 DROBNA
Polerowanie właściwe

 5.000 - 7.000 min⁻¹
maks. 15.000 min⁻¹

 10, 100 Sztuk



Produkt:	H332K	H334K	H338	H332Km	H334Km	H338m	H332Kf	H334Kf	H338f
REF:	2032	2034	2038	2132	2134	2138	2232	2234	2238
Wymiary (mm):	10 x 20	10 x 24	5,5 x 16	10 x 20	10 x 24	5,5 x 16	10 x 20	10 x 24	5,5 x 16

SOFTWHEELS

Tworzywa Dentystyczne,
Technologia Termoformowania, Złoto

SYSTEM POLEROWANIA

- Zaimpregnowane środkiem polerującym
- Brak konieczności użycia pasty polerującej
- Wysoki połysk na tworzywach
- Polerka z tlenkiem glinu

ŚREDNIA
Polerowanie wstępne

DROBNA
Polerowanie na wysoki połysk



SW-R22m

9801

22 x 3



SW-R22f

9802


22 x 3



78HP

9553

5

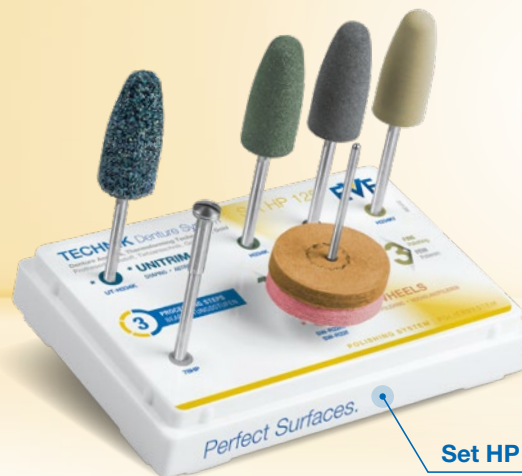

Set HP 125 REF 9045

H334K | H334Km | H334Kf

- + UNITRIM (Wygładzanie)
UT-H334K (p. 15)
- + SOFTWHEELS
(Polerowanie na wysoki połysk)
SW-R22m | SW-R22f
- + MANDREL
78HP



5.000 - 7.000 min⁻¹
maks. 10.000 min⁻¹



10, 100 Sztuk

Produkt:

REF:

Wymiary (mm):



MADE IN GERMANY

Perfect Surfaces.

EVE Ernst Vetter GmbH

Neureutstr. 6
75210 Keltern, Germany

☎ +49 (0) 72 31 97 77 -0
☎ +49 (0) 72 31 97 77 -99
@ info@eve-rotary.com



Dane techniczne i wygląd produktu mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Kolor wydruku może różnić się od rzeczywistego. Zastrzega się możliwość zmian, odchyżeń i błędów.
Uwagi: www.eve-rotary.com/downloads

www.eve-rotary.com


SCAN ME!

Interested in EVE products?

Scan the QR code and find an
EVE distributor in your country.

Jesteś zainteresowany produktami EVE?

Zeskanuj kod QR i znajdź EVE
w swoim kraju.

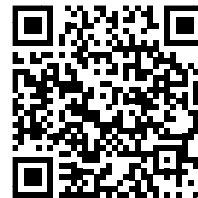

Wyłączny przedstawiciel:

smartROTO

SMART ROTO Piotr Zieliński

ul. Morawska 12
40-218 Katowice, Polska

☎ +48 32 44 000 43
☎ +48 733 011 300
@ biuro@smartroto.pl

www.smartroto.pl