

Meisinger since
1888



DENTAL CATALOGUE





EDITION II







	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
1/10 mm	005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029	
mm	0.5	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0	1.2	1.4	1.6	1.8	2.1	2.3	2.5	2.7	2.9	
Inches	0.020	0.024	0.028	0.031	0.035	0.039	0.047	0.055	0.063	0.071	0.083	0.091	0.098	0.106	0.114	
	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
1/10 mm	031	033	035	037	040	042	045	047	050	055	060	065	070	075	080	
mm	3.1	3.3	3.5	3.7	4.0	4.2	4.5	4.7	5.0	5.5	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	
Inches	0.122	0.130	0.138	0.148	0.157	0.165	0.177	0.185	0.197	0.217	0.236	0.256	0.276	0.295	0.315	

SCHAFTARTEN UND GESAMTLÄNGEN | TYPES OF SHANKS AND OVERALL LENGTHS | TIPOS DE MANDRIL Y LONGITUDES TOTALES

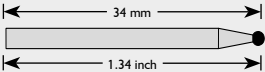
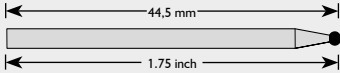
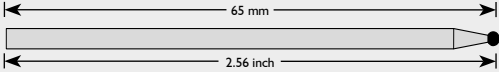
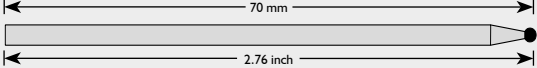
HANDSTÜCK** | HANDPIECE (HP)** | PIEZA DE MANO**

103		ø 2,35 mm HP S HP S HP S
104		ø 2,35 mm HP HP HP
105		ø 2,35 mm HP L HP L HP L
106		ø 2,35 mm HP XL HP XL HP XL

WINKELSTÜCK** | RIGHT ANGLE (RA)** | CONTRA-ÁNGULO**

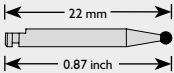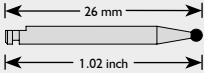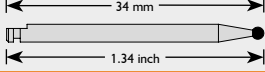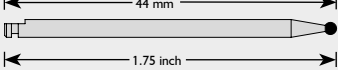204		ø 2,35 mm RA RA RA
205		ø 2,35 mm RA L RA L RA L
206		ø 2,35 mm RA XL RA XL RA XL
207		ø 2,35 mm RA XXL RA XXL RA XXL

FRICITION GRIP | FRICTION GRIP (FG) | FRICTION GRIP

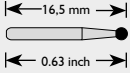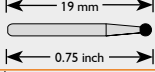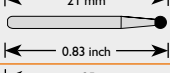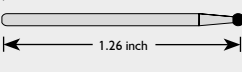313		ø 1,60 mm FG S FG S FG S
314		ø 1,60 mm FG FG FG
315		ø 1,60 mm FG L FG L FG L
316		ø 1,60 mm FG XL FG XL FG XL
317		ø 1,60 mm FG XXL FG XXL FG XXL

900 UNMONTIERT | UNMOUNTED (UNM) | NO MONTADO

Die Gesamtlängen der Instrumente können je nach Konstruktionstyp kürzer oder länger ausfallen. | The total lengths of instruments can be shorter or longer according to type of construction. | Las longitudes totales de los instrumentos pueden ser más cortas ó más largas según tipo de construcción.

** Hinweis: Bei Stahl- und Hartmetallfräsern weicht die Gesamtlänge des Instruments von dieser Übersicht ab. Hier entspricht die Gesamtlänge ISO 7787. | Note: In the case of steel and tungsten carbide cutters, the overall length of the instrument differs from this overview. Here the overall length corresponds to ISO 7787. | Nota: La longitud total del instrumento en las fresas de acero y de carburo de tungsteno es diferente a la longitud que se recoge en esta sinopsis. Aquí la longitud total se corresponde con ISO 7787.

In 3 Schritten zur Bestellung

How to order in 3 steps | 3 pasos para un pedido

Das MEISINGER Bestellsystem – schnell, einfach, präzise! Folgen Sie einfach der unten beschriebenen Anleitung und Sie haben in nur 3 Schritten Ihre Bestellung abgeschlossen.

The MEISINGER order system – fast, easy, exact! Please follow the guidance below and your ordering is done in 3 easy steps.

El sistema de pedidos de MEISINGER – rapido, facil, exactamente! Siga simplemente las instrucciones indicadas abajo y Usted tendrá completado su pedido en a penas 3 pasos.

- 1** Fig.-Nr. Wählen Sie die Figur-Nr. des gewünschten Instruments aus.
Fig.-No. Please choose the figure number of the requested instrument.
Fig.-No. Seleccione el número del artículo del instrumento deseado.
 - 2** Schaft Wählen Sie die Schaftart des gewünschten Instruments aus.
Shank Please choose the shank type of the requested instrument.
Mandril Seleccione el mandril del instrumento deseado.
 - 3** Größe Wählen Sie die Arbeitsteilgröße des gewünschten Instruments aus.
Size Please choose the size of the requested instrument's working part.
Tamaño Seleccione el tamaño de la parte activa del instrumento deseado.
- !** VPE Eine Verpackungseinheit kann mehrere Instrumente enthalten.
(hier: Bestellung von 2 Verpackungen à 5 Stück = 10 Instrumente)
PU One packaging unit may contain several instruments. (In this case, unit contains 5 instruments – order two units, get 10 instruments)
UN. Un embalaje puede contener múltiples instrumentos.
(Aquí por paquete 5 – 2 piezas pedidas = 10 instrumentos)

808
808H mittel / medium
808G super grob / super coarse
808F grob / coarse
808C fein / fine
extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5
808	FG	806 314 233 524	009	010	012	014	016	
808H	FG	806 314 233 544			012	014	016	
808G	FG	806 314 233 534		010	012	014	016	
808F	FG	806 314 233 514	009	010	012	014		
808C	FG	806 314 233 504	009					

1 2 3 !

Schon haben Sie Ihre individuelle Bestellnummer zusammengestellt. This is how you compile your individual order code. Usted acaba de ordenar su pedido individual.

Nr.	Figur Figure / Figura	Schaft Shank / Mango	Größe Size / Tamaño	Anzahl Verpackungen Number of packages / Número de embalajes
1.	808G	314	014	2
2.				

Bestellfax auf Seite 259 | Order fax on page 259 | Fax para pedidos en la página 259

Kontaktieren Sie uns um Ihre Bestellung abzuschließen.
MEISINGER Germany
Tel.: +49 2131 2012-0
Fax: +49 2131 2012-222
E-Mail: info@meisinger.de

Contact us to complete your order.
MEISINGER USA
Phone: +1 (303) 268-5400
Toll free: +1 (866) 634-7464
Fax: +1 (303) 268-5407
E-Mail: info@meisingerusa.com

Póngase en contacto con nosotros para confirmar su pedido.
MEISINGER Germany
Tel.: +49 2131 2012-0
Fax: +49 2131 2012-222
E-Mail: info@meisinger.de

INNOVATION TRIFFT PRÄZISION: QUALITÄT „MADE IN GERMANY“

Seit 1888 stellt unser Familienunternehmen Hager & Meisinger hochspezialisierte Produkte für die Dental- und Medizintechnik her. An unserem Produktionsstandort in Neuss arbeiten 350 engagierte Mitarbeiter jeden Tag mit Hingabe daran, die vielfältigen Anforderungen unserer Kunden in Laboren und Praxen zu erfüllen. „Made in Germany“ ist dabei mehr als eine Herkunftsbezeichnung – es steht für unser Streben nach höchster Präzision, Qualität und Zuverlässigkeit.

Unser rotierendes Portfolio ist damals wie heute eine wichtige Säule unseres Unternehmens und umfasst eine beeindruckende Vielfalt. Dabei verfolgen wir immer das Ziel, Sicherheit und Anwendungserfolg für unsere Kunden erlebbar zu machen. In der Neuauflage unseres Dentalkatalogs finden Sie neben bewährten Standard-Instrumenten viele spannende Neuerungen, die wir in enger Zusammenarbeit mit führenden Experten und Meinungsbildnern entwickelt haben.

In mehr als 135 Jahren Firmengeschichte spiegelt sich aber auch unser Innovationsgeist wider.

Neben unserer langjährigen Expertise im Bereich der rotierenden Instrumente tragen wir der wachsenden Ausdifferenzierung und Spezialisierung in der Zahnmedizin Rechnung. So steht die Marke MEISINGER für eine große Bandbreite hochwertiger Dental-Instrumente, Chirurgie-Systeme und

Implantate. Unser rotierendes Portfolio unterstützt Sie zudem auch bei modernen digitalen Workflows und der Bearbeitung von CAD/CAM-gefertigten Materialien.

Leidenschaftlicher Teamarbeit und nachhaltigen sowie verantwortungsbewussten Entscheidungen ist es zu verdanken, dass der Marke MEISINGER national sowie international ein exzellenter Ruf voraussetzt. Über 100 internationale Vertriebspartner und Tochterfirmen in Italien, Frankreich, den USA und Asien machen MEISINGER zu einem anerkannten Global Player der Medizintechnik.

Auch in der Zukunft möchten wir unser Qualitätsversprechen einhalten und in der Zahnmedizin mit unseren innovativen Produkten Akzente setzen.



Dr. Burkard Höchst

Sebastian Voss



♥ Made for you!

Innovation meets Precision: Quality “Made in Germany”

La innovación se une a la precisión: Calidad «Made in Germany»

Since 1888, Hager & Meisinger has been producing highly specialized products for dental and medical technology. At our headquarters in Neuss 350 dedicated employees work every day to meet the diverse needs of our customers in the laboratory and in the medical practice. “Made in Germany” is much more than just a label of origin – it represents our commitment to the highest precision, quality and reliability.

As it has always been, our rotating product line is an important pillar of our business and includes an impressive range of products. In doing so, our aim is always to ensure that safety and successful applications are brought to life for our customers. In the new edition of our dental catalogue, you will find proven standard dental instruments as well as many exciting innovations that we have developed in close collaboration with leading experts and key opinion leaders.

More than 135 years of our company history also reflects our innovative spirit. In addition to our many years of expertise in the field of rotating instruments we also recognize the increasing diversification and specialisation in dentistry. Therefore, the brand MEISINGER represents a wide range of high-quality dental instruments, surgical systems and implants. Furthermore, our rotating portfolio supports you with modern digital workflows and the processing of CAD/CAM-manufactured materials.

It is thanks to passionate teamwork and sustainable and responsible decision-making that the MEISINGER brand has an excellent reputation nationally and internationally. With over 100 international distributors worldwide and subsidiaries in Italy, France, the USA and Asia, MEISINGER is a notable global player in medical technology. In the future, too, we will continue to deliver on our promise of quality and make a lasting mark in dentistry with our innovative products.

Desde 1888, Hager & Meisinger fabrica productos altamente especializados para la tecnología dental y médica. En nuestra sede de Neuss, 350 empleados especializados trabajan cada día para satisfacer las diversas necesidades de nuestros clientes en el laboratorio y en la consulta médica. «Made in Germany» es mucho más que una etiqueta de origen: representa nuestro compromiso con la máxima precisión, calidad y fiabilidad.

Como siempre, nuestra línea de productos rotativos es un pilar importante de este negocio e incluye una impresionante gama de productos. Con ello, nuestro objetivo es siempre garantizar la seguridad y el éxito de las aplicaciones de nuestros clientes. En la nueva edición de nuestro catálogo dental encontrará instrumentos dentales estándar de eficacia probada, así como muchas innovaciones interesantes que hemos desarrollado en estrecha colaboración con destacados expertos y líderes de opinión.


Los más de 135 años de historia de nuestra empresa también reflejan nuestro espíritu innovador. Además de nuestros muchos años de experiencia en el ámbito de los instrumentos rotativos, también somos conscientes de la creciente diversificación y especialización de la odontología. Por ello, la marca MEISINGER representa una amplia gama de instrumentos dentales, sistemas quirúrgicos e implantes de alta calidad. Además, nuestra cartera de productos rotativos le ayuda con los flujos de trabajo digital modernos y con el procesamiento de materiales fabricados mediante CAD/CAM.

Gracias a un apasionado trabajo en equipo y a una toma de decisiones sostenible y responsable, la marca MEISINGER goza de una excelente reputación a escala nacional e internacional. Con más de 100 distribuidores internacionales en todo el mundo y filiales en Italia, Francia, EE. UU. y Asia, MEISINGER es una destacada marca mundial en tecnología médica. También en el futuro seguiremos cumpliendo nuestra promesa de calidad y dejaremos una huella duradera en la odontología con nuestros productos innovadores.

Dr. Burkard Höchst

Sebastian Voss


01	EINLEITUNG
	Introduction Introducción
04	MEISINGER GESCHICHTE
	MEISINGER History La historia de MEISINGER
06	WELTWEITER SERVICE
	Worldwide Shipment Las entregas universales
08	ANWENDUNGS- UND HYGIENESYMBOL
	Application and Hygiene Symbols Etiquetado/símbolos de indicación e higiene
09	VERPACKUNG UND REF.-NR. SYSTEM
	Packing and Ref.-No.-System El empaque y sistema de numeración de N° referencia

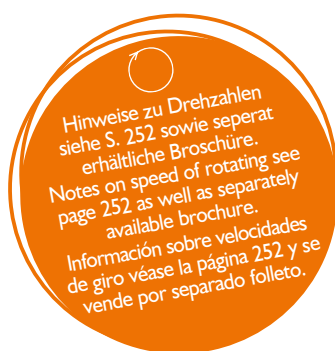


10	DIAMANTINSTRUMENTE
	Diamond Instruments Instrumentos de Diamante
52	HARTMETALLINSTRUMENTE
	Tungsten Carbide Instruments Instrumentos de Carburo de Tungsteno
84	ELASTISCHE POLIERER
	Flexible Polishers Pulidores Elásticos
118	KERAMISCHE SCHLEIFER
	Ceramic Abrasives Abrasivos Cerámicos
136	STAHLINSTRUMENTE
	Steel Instruments Instrumentos de Acero
148	CHIRURGIE
	Surgery Cirugía
166	EINWEGINSTRUMENTE
	SINGLE Instruments Instrumentos de un solo uso
176	ENDODONTIE
	Endodontia Endodoncia
182	KIEFERORTHOPÄDIE (KFO)
	Orthodontia Ortodoncia
190	SORTIMENTE
	Assortments Freseros
240	BOHRERSTÄNDER & ZUBEHÖR
	Bur Blocks and Accessories Freseros Vacíos y Accesorios

Hinweis: Nicht alle Produkte, die in diesem Katalog
gezeigt werden, sind in allen Ländern erhältlich.
Note: Not all products contained in this catalogue are
available in all countries.
Nota: No todos los productos en este catálogo
son disponibles en todos los países.

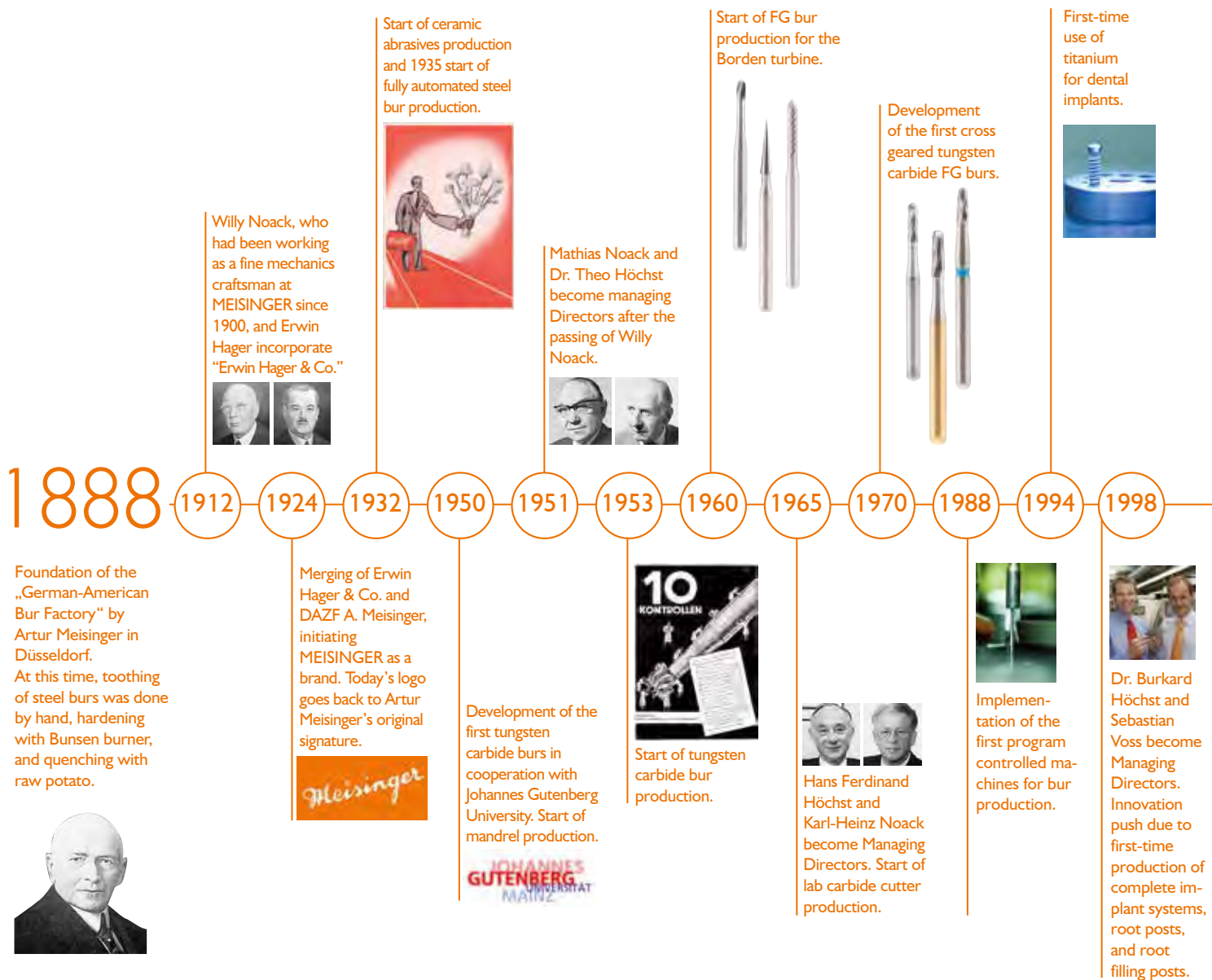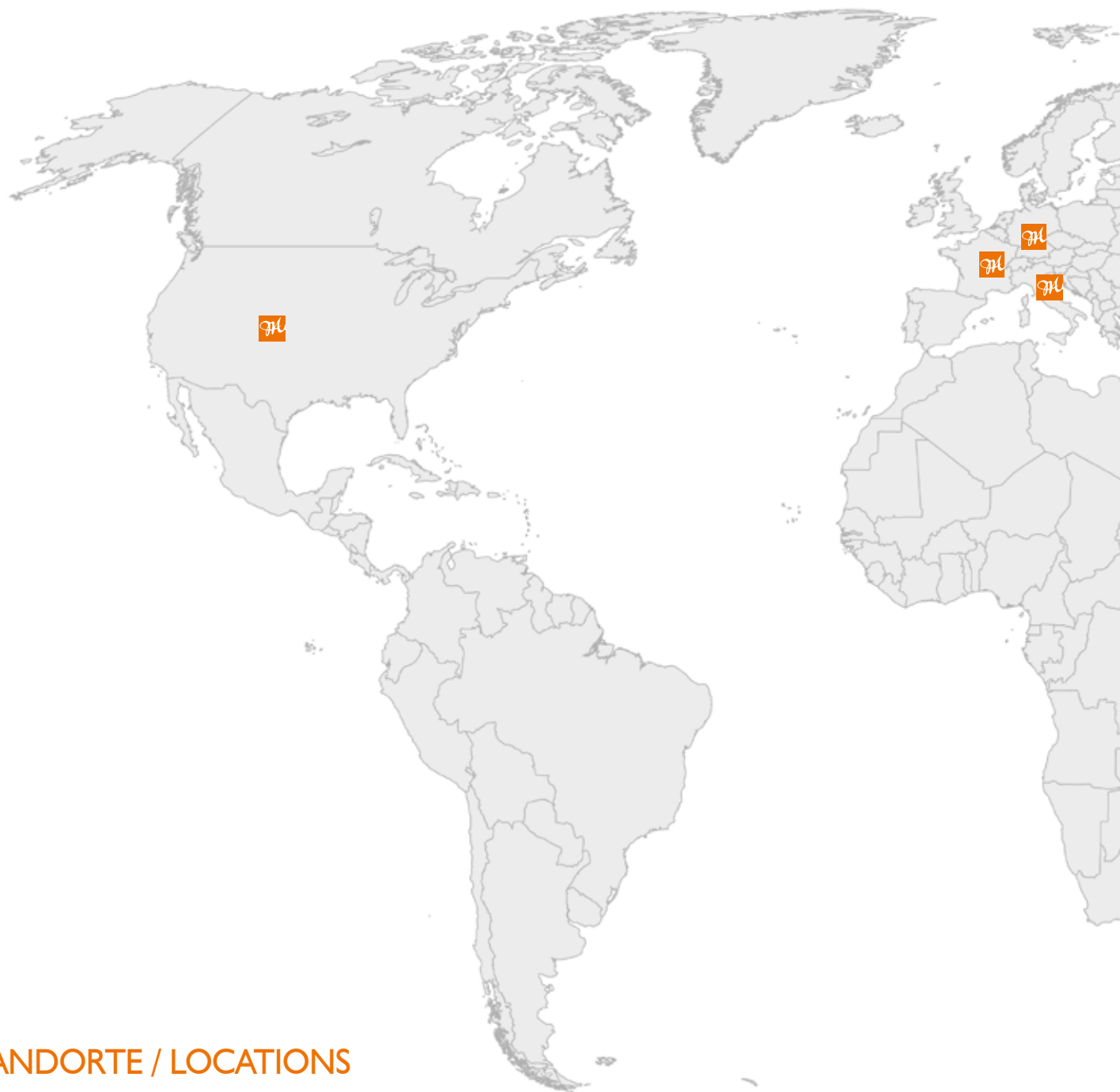MEISINGER history







STANDORTE / LOCATIONS HAGER & MEISINGER GMBH:



MEISINGER GERMANY



MEISINGER USA



MEISINGER FRANCE SARL



MEISINGER ITALY S.R.L.



MEISINGER ASIA CO. LTD.



MEISINGER Headquarters Neuss



MEISINGER Headquarters Neuss

Hager & Meisinger GmbH

Hansemannstr. 10
41468 Neuss | Germany
Phone: +49 2131 2012-0
Fax: +49 2131 2012-222
E-Mail: info@meisinger.de
Internet: www.meisinger.de



MEISINGER USA Headquarters, Colorado

Meisinger USA. L.L.C.

10150 E. Easter Avenue
Centennial, Colorado 80112 | USA
Phone: +1 (303) 268-5400
Toll free: +1 (866) 634-7464
Fax: +1 (303) 268-5407
E-Mail: info@meisingerusa.com
Internet: www.meisingerusa.com

Die Symbole geben lediglich Hinweise zu Anwendungsmöglichkeiten der Produkte. Über den konkreten Einsatz entscheidet der Anwender in eigener Verantwortung je nach vorliegender Indikation.

The symbols give merely suggestions for the possible application of the products. The user decides and takes full responsibility about the precise deployment according to existing indications.

Los símbolos dan solamente detalles de las posibilidades de aplicación de los productos. Sin embargo el profesional dentro de su propia responsabilidad decide la aplicación concreta según cada caso.



Bitte beachten Sie auch die Allgemeinen Anwendungs- und Sicherheitshinweise zu MEISINGER Produkten im medizinischen Bereich und auch die Hinweise zur Aufbereitung (Reinigung, Desinfektion und Sterilisation) von Medizinprodukten der Hager & Meisinger GmbH. Diese finden Sie im Internet unter www.meisinger.de oder unter dem nebenstehendem QR-Code sowie auf Anfrage auch gerne auf dem Postweg. | Please follow general application and safety instructions for MEISINGER products in the medical area and also the advice for processing (cleaning, disinfection and sterilisation) of medical devices from Hager & Meisinger GmbH. Details can be found on the internet under www.meisinger.de or under the adjacent QR Code. You can also request them by mail. | Por favor siga Ud. también las instrucciones generales de aplicación y seguridad de los productos de MEISINGER y las notas para el procesamiento (limpieza, desinfección y esterilización) de los productos médicos de Hager & Meisinger GmbH. Las encontrará en el sitio web www.meisinger.de o a través de este código QR y también se puede solicitar su recepción por correo.



ZAHNHEILKUNDE | DENTISTRY ODONTO-ESTOMATOLOGÍA



Prophylaxe | Prophylaxis | Profilaxis



Kieferorthopädie | Orthodontics | Ortodoncia



Kieferchirurgie | Jaw surgery | Cirugía maxilo-facial



Implantologie | Implantology | Implantología



Aufbaustiftsystem | Post system | Sistema de postes

DENTALLABOR | DENTAL LABORATORY LABORATORIO DENTAL



Feinwerktechnik | Precision technique | Técnica de precisión



Modellgusstechnik | Model casting technique | Técnica de esqueleticos



Modellherstellung | Model fabrication | Elaboración de modelos



Kunststofftechnik | Acrylic technique | Técnica de acrílico



Kronen- und Brückentechnik | Crown and bridge technique | Técnica de coronas y puentes



Verblend- und Keramiktechnik | Veneer and ceramic technique | Técnica de revestimiento y cerámica

ZAHNBEHANDLUNG | DENTAL TREATMENT TRÉPICA DENTAL



Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Preparación de cavidades



Ausbohren alter Füllungen | Removal of old fillings | Perforación de obturaciones antiguas



Füllungsbearbeitung | Use on fillings | Acabado de obturaciones



Kronenpräparation | Crown preparation | Preparación de coronas



Kronentrennen | Crown cutting | Separación de coronas



Wurzelkanalaufbereitung | Root canal preparation | Preparación de conductos radiculares



Wurzelglättung | Root planing | Alisado radicular



Innendurchmesser | Internal diameter | Diámetro interno



Außendurchmesser | External diameter | Diámetro externo



Minimaldurchmesser | Minimal diameter | Diámetro mínimo



Drehzahl | Revolution speed | Velocidad de giro

DESINFEKTION/STERILISATION | DISINFECTION/ STERILIZATION | DESINFECCIÓN/ESTERILIZACIÓN



Sterilisierbar im Dampf-Sterilisator (Autoklav) bei der angegebenen Temperatur | Sterilizable in a steam sterilizer (autoclave) at the temperature specified | Esterilizable en esterilizador de vapor (autoclave) a la temperatura indicada



Reinigungs-Desinfektionsgerät für die thermische Desinfektion | Washer-disinfector for thermal disinfection | Equipo de limpieza y desinfección para la desinfección térmica



Ultraschallbad | Ultrasonic bath | Baño de ultrasonido



CAS:
7440-48-4

Enthält gefährliche Substanzen: Cobalt, CAS: 7440-48-4

Dieses Produkt enthält Cobalt in mehr als 0,1 Masseprozent und ist damit, gemäß aktuellen Regularien, kennzeichnungspflichtig als CMR Stoff Klasse 1B (krebserzeugend, erbgutverändernd und/oder fortpflanzungsgefährdend (en: carcinogenic, mutagenic, reprotoxic)). Es wurde nachgewiesen, dass bei zweckbestimmter Anwendung kein erhöhtes Krebsrisiko oder nachteilige Auswirkungen in Hinblick auf Fortpflanzung oder Erbgutveränderung entstehen.

Contains hazardous substances: Cobalt, CAS: 7440-48-4

This product contains cobalt in more than 0.1 percent by mass and is therefore, in accordance with current regulations, to be labeled as CMR material class 1B (carcinogenic, mutagenic and/or reprotoxic). It has been proven that there is no increased risk of cancer or adverse reproductive or genetic effects when the product is used according to the directions for its intended use.


Contiene sustancias peligrosas: Cobalto, CAS: 7440-48-4

Este producto contiene cobalto en más del 0,1 % en masa, por lo que está sujeto conforme a la normativa actual a la obligación de ser etiquetado como sustancia CMR de categoría 1B (carcinógena, mutágena o tóxica para la reproducción (inglés: carcinogenic, mutagenic, reprotoxic)). Se ha demostrado que, si el producto se aplica conforme al uso previsto, no existe un mayor riesgo de cáncer ni produce efectos adversos con respecto a la reproducción o a la alteración genética.



Bei Wiederverwendung von Einmalprodukten kann ein Infektionsrisiko nicht ausgeschlossen werden und eine risikofreie Funktionssicherheit nicht gewährleistet werden. | With the reuse of disposable products, the risk of infection cannot be excluded and a risk-free functional safety cannot be guaranteed. | En el caso de reutilización de productos indicados para una sola utilización hay el peligro de riesgos de infección y una seguridad funcional fuera de riesgo no está garantizada.


VERPACKUNG | PACKAGING | EL EMPAQUE

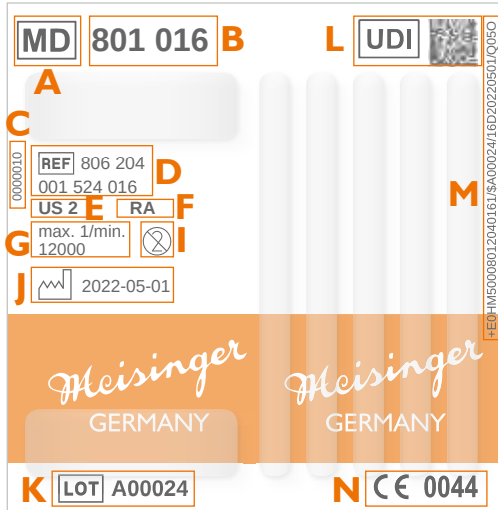

Standardblisterverpackung | Standard blister packaging | Embalaje estándar de blister



Rückseite | Rear | Dorso

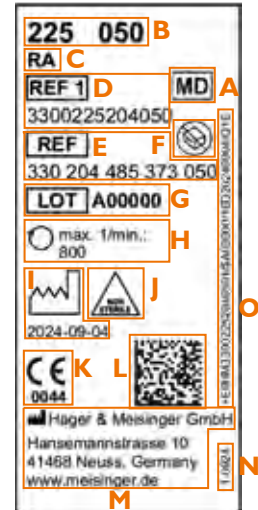

Etikett | Label | Etiqueta

Blister | Blister | Blister:

A	Symbol Medizinprodukt Symbol Medical Device Símbolo de producto médico
B	Figur + /Größe + /Produktname Figure + /Size + /Product Name Figura + /Tamaño + /Nombre del producto
C	Kennzeichnung zur internen Rückverfolgbarkeit Marking for internal traceability Marcado para trazabilidad interna
D	Artikelnummer Item number Número de artículo
E	US-Nummer, wenn anwendbar US-Number, if applicable Numero de US, si es aplicable
F	Schaftart Type of shank Tipo de mango
G	Maximale Drehzahlen (S. 252) Maximum speed of Rotating (p. 252) Velocidades máxima (p. 252)
H	Maximales Drehmoment, wenn anwendbar Maximum Torque, if applicable Máximo par de apriete, si es aplicable
I	Nicht zur Wiederverwendung Single use only Para uso unico
J	Herstellungsdatum + Symbol Manufacturing Date + Symbol Fecha de fabricación + símbolo
K	LOT-Nummer + Symbol LOT-Number + Symbol Numero de lote + símbolo
L	UDI Data-Matrix-Code HIBC-Standard UDI Data-Matrix-Code HIBC-Standard UDI Código de matriz de datos estándar HIBC
M	Klartext HIBC-Standard Plain text HIBC standard Texto sin codificar estándar HIBC
N	CE-Kennzeichnung CE marking Marcado CE
O	Symbole Symbols Símbolos
P	Herstelleradresse + Internetadresse Manufacturer's address + web address Dirección del fabricante + Dirección de internet
Q	Adresse Vertriebspartner, falls vorhanden Distributor's address, if applicable Dirección del socio comercial, si es aplicable
R	Ablösbares Etikett, falls vorhanden Adhesive label, if applicable Etiqueta despegable, si es aplicable
S	Ggf. enthält gefährliche Substanzen If nec. contains hazardous substances Symbol Puede contener sustancias peligrosas

Etikett | Label | Etiqueta:

A	Symbol Medizinprodukt Symbol Medical Device Símbolo de producto médico
B	Figur + /Größe + /Produktname Figure + /Size + /Product Name Figura + /Tamaño + /Nombre del producto
C	Schaftart Type of shank Tipo de mango
D	REFI-Nummer (Artikel Nummer) + Symbol REFI-Number (article number) + Symbol Número REFI (número de artículo) + símbolo
E	REF Nummer + Symbol REF-Number + Symbol Número REF + símbolo
F	bei Beschädigung nicht verwenden Do not use if the packaging is damaged No utilizar si el envase está dañado
G	LOT-Nummer + Symbol LOT-Number + Symbol Numero de lote + símbolo
H	Maximale Drehzahlen (S. 252) Maximum speed of Rotating (p. 252) Velocidades máxima (p. 252)
I	Herstellungsdatum + Symbol Manufacturing Date + Symbol Fecha de fabricación + símbolo
J	Symbole Symbols Símbolos
K	CE-Kennzeichnung CE marking Marcado CE
L	UDI Data-Matrix-Code HIBC-Standard UDI Data-Matrix-Code HIBC-Standard UDI Código de matriz de datos estándar HIBC
M	Herstelleradresse + Internetadresse Manufacturer's address + web address Dirección del fabricante + Dirección de internet
N	Revisionsstand Revision status Estado de revisión
O	Klartext HIBC-Standard Plain text HIBC standard Texto sin codificar estándar HIBC

REF.-NUMMERNSYSTEM | REF.-NUMBERING SYSTEM | SISTEMA DE NUMERACIÓN DE N° REFERENCIA

Viele Bereiche der rotierenden Instrumente, wie z. B. Anschlussmaße mit Schaftdurchmesser und Schaftart sowie Größenangaben, sind international genormt. Die artikelspezifische Ref.-Nr. ist an die ISO-Norm angelehnt. Dadurch können der Ref.-Nr. zahlreiche Informationen über Form, Größe und Beschaffenheit entnommen werden, die eine eindeutige Identifizierung der Instrumente ermöglichen.

Many ranges of rotary instruments (e.g. fitting dimensions with shaft diameter and shaft size as well as size information) have already been internationally standardized. The specific article Ref.-No. is based on the ISO standard (International Organization for Standardization). From the Ref.-No., a great amount of information about the design, size and consistence can be attained allowing explicit identification of the instrument.

Gran parte de las características de los instrumentos rotatorios como p.e. medidas de conexión con diámetro y tipo de mango así como indicación de los amaños están estandarizadas internacionalmente. El n° de referencia de un determinado artículo está basado en la norma ISO. De este modo, están indicadas varias informaciones en el n° de referencia relativas a su forma, tamaño y características, lo que permite una clara identificación de los instrumentos.



A	B+C	D	E
806	314	233 534	014
Werkstoff des Arbeitsteils (Hartmetall, Diamant, etc.) Material of working part (tungsten carbide, diamond, etc.) Material de la parte activa (carburo, diamante, etc.)	Schaft und Gesamtlänge (HP, RA, FG, etc.) Shank and overall length (HP, RA, FG, etc.) Mango y longitud total (HP, RA, FG, etc.)	Form und Ausführung (rund, Zylinder, Diamant-körnung mittel, Verzahnung grob, etc.) Shape and type of finish (round, cylinder, diamond grit medium, toothing coarse, etc.) Forma y tipo (redondo, cilindro, grano de diamante mediano, dentado grueso, etc.)	Nenngröße (ISO 2157), größter Ø des Arbeitsteils in 1/10 mm Nominal size (ISO 2157), largest working part diameter in 1/10 mm Tamaño nominal (ISO 2157) más ancha diámetro de la parte activa en 1/10 mm
Ref.-No.: A + BC + D + E =			806 314 233 534 014

Diamantinstrumente

Diamond Instruments | Instrumentos de diamante

MEISINGER Diamantinstrumente bestehen im Kern aus einem Schaft und einem gehärteten, rostfreien Profilkörper, der mittels modernster Galvanotechnologie nur mit ausgewählten natürlichen Diamantkörnern belegt wird. Dies garantiert eine äußerst homogene, sichere und nachhaltige Diamantierung der Instrumente und damit optimale Arbeitsergebnisse. Diese werden außerdem durch die Auswahlmöglichkeit des Anwenders aus bis zu sieben verschiedenen Korngrößen garantiert.

MEISINGER diamond instruments consist of a shank and a hardened, stainless profile body coated by means of the most modern galvanizing process with selected diamond grains. This guarantees an extremely homogenous, safe and lasting diamond coating of the instruments and thus optimal working results. In addition, the user is guaranteed a choice from up to seven different grain sizes.

Los instrumentos de diamante MEISINGER están compuestos de mango y perfil como núcleo de acero templado e inoxidable. El perfil se cubre con granos de diamante naturales y seleccionados, mediante la más reciente galvanotécnica lo que garantiza un diamantado homogéneo, sólido y seguro y por tanto un óptimo resultado de trabajo favorecido además por la selección de siete grados diferentes de grano.



30-fache Vergrößerung | 30-fold magnification | Aumento de 30x

50 – 70 % der Kornoberfläche werden eingefasst, sodass einem Ausbrechen der Diamantkörner vorgebeugt wird. Dies führt zu der hohen Qualität der schnittfreudigen MEISINGER Diamantinstrumente.



100-fache Vergrößerung | 100-fold magnification | Aumento de 100x

50 – 70 % of the grain surface are bordered so that a break out of the diamond grains is prevented. This results in the high quality of the cutting features of the MEISINGER diamond instruments.

50 – 70 % de la superficie del grano se reviste para evitar la rotura de los granos de diamante. Esto garantiza la alta calidad de los afilados instrumentos de diamante MEISINGER.

Sehr grobes Vorschleifen

Super coarse pre-grinding
Desbaste ultra rápido



Grobes Vorschleifen

Coarse pre-grinding
Desbaste super rápido



Vorschleifen

Pre-grinding
Desbaste rápido



Universelles Schleifen

Universal grinding
Preparación universal



Glätten

Smoothing
Suavizado



Vorfinieren

Prefinishing
Pre-acabado



Endfinieren und Glätten

Final finishing and smoothing
Acabado y bruñido



2 schwarze Ringe

2 black rings
2 anillos negros

ultra grob

ultra coarse
ultra grueso

= S

554

425–500 µm



schwarzer Ring

black ring
anillo negro

super grob

super coarse
super grueso

= H

544

151–213 µm



grüner Ring

green ring
anillo verde

grob

coarse
grueso

= G

534

107–181 µm



blauer Ring

blue ring
anillo azul

mittel

medium
mediano

524

64–126 µm



roter Ring

red ring
anillo rojo

fein

fine
fino

= F

514

27–76 µm



gelber Ring

yellow ring
anillo amarillo

extra fein

extra fine
extra fino

= C

504

10–36 µm



weißer Ring

white ring
anillo blanco

ultra fein

ultra fine
ultra fino

= U

494

4–14 µm

Der Einsatz grobkörniger Diamanten (ISO 534, 544 und 554) kann zu erhöhter thermischer Entwicklung führen. Daher ist insbesondere beim Einsatz dieser Produkte auf ausreichende Kühlung und minimale Anwendungskraft zu achten. Zur Erzielung optimaler Rautiefen ist nach Einsatz dieser Diamantinstrumente ein nachträgliches Finieren erforderlich. Instrumente ab ISO-Größe 031 mit zusätzlicher Kühlung einsetzen (Wasserspritze). Bei intraoraler Anwendung von Diamantscheiben immer Scheibenschutz verwenden!

The use of the coarse grain diamonds (ISO 534, 544 and 554) can lead to increased thermal development. Therefore, while using these products please take particular note of adequate cooling and minimal applied pressure. After obtaining ideal rough depths with the diamond instrument, the subsequent use of a finishing bur is essential. Instruments from size 031 should be used with additional cooling (syringe). Always use protector when using diamond discs intraorally.

Las fresas de diamante de grano grueso (ISO 534, 544 y 554) pueden llevar a un elevado desarrollo térmico en su aplicación, por lo que deben fijarse en la refrigeración suficiente y la mínima presión, trabajando con estas fresas. Para conseguir la óptima calidad de superficie se requiere un acabado posterior a la aplicación de estos instrumentos de diamante. Instrumentos a partir del tamaño 031 deben utilizarse con refrigeración adicional (jeringa). Siempre utilizar protector operando con discos diamantados en la boca!

BLACK COBRA DIAMANTINSTRUMENTE

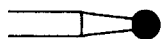
BLACK COBRA DIAMOND INSTRUMENTS

BLACK COBRA INSTRUMENTOS DE DIAMANTE 12-13

PRÄPARATIONS-INSTRUMENTE

PREPARATION-INSTRUMENTS


INSTRUMENTOS DE PREPARACIÓN 14-38




Rund
Round
Redonda 14-15



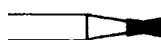
Umgekehrter Kegel
Inverted Cone
Cono invertido 15




Diabolo
Diabolo, Hourglass
Diábolo 16

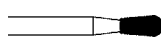


Birne
Pear
Pera 16-17

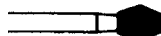

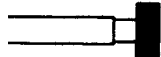
Doppelkegel
Double Cone, Barrel
Cone doble 17




Rad
Wheel
Rueda 18

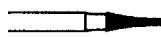

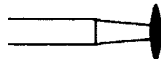
Interdental
Interproximal
Interdental 18




Linse
Lens
Lenteja 18

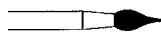

Zwiebel
Onion
Cebolla 19

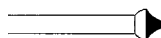

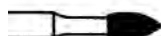
Kavitätenabschräger
Margin Trimmer, Acorn
Ajuste de margen de cavidad 19



Knospe
Bud, Pointed Football
Capullo 19



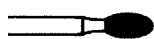Knospe, rund
Bud, Round End
Pimpollo, redondeado 20



Ei
Egg, Football
Huevo 20



Tiefenmarkierer
Depth Cutter
Marcadores de profundidad 21



Zylinder
Cylinder
Cilíndrico 22



Zylinder, rund
Cylinder, Round End
Cilíndrico con borde redondeado 23



Zylinder mit abgerundeter Kante
Cylinder, Round Edge
Cilíndrico de punta plana 24



Zylinder, Stirn belegt
Cylinder, End Cutting Only
Cilíndrico con revestimiento en la punta 25



Zylinder, Ende nicht belegt
Cylinder, End Non-Coated
Cilíndrico sin revestimiento en la punta 25



Zylinder, spitz
Cylinder, Pointed
Cilíndrico con chaffán 26



Konisch mit scharfer Kante
Tapered, Flat End
Cónica con borde afilado 26-27



Konisch mit abgerundeter Kante
Tapered, Round Edge
Cónico con borde redondeado 28



Konisch, rund
Tapered, Round End
Cónico con borde redondeado 29-31



Konisch spitz, Nadel
Tapered Point, Needle
Cónica de punta, Aguja 32-33



Flamme
Flame
Llama 34-35



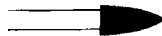
Torpedo
Torpedo
Torpedo 36



Torpedo, konisch
Torpedo, Tapered
Torpedo, cónico 37



Spezialform
Special
Forma especial 38



Granate
Grenade, Flame
Granada 38



Okklusal-/Palatalschleifer
Occlusal-/Palatal Grinder
Reducción de la oclusión 38

PRÄPARATION MIT FÜHRUNGSSPITZE

PREPARATION WITH GUIDED TIP

PREPARACIÓN CON PUNTA DE GUÍA 39

OKKLUSALE REDUKTION

OCCLUSAL REDUCTION

REDUCCIÓN DE OCLUSIÓN 40-41

DIAMANTEN FÜR ZIRKONOXID

DIAMONDS FOR ZIRCONIA

DIAMANTES PARA ÓXIDO DE CIRCONIO 42

CE DIAMANTEN

CE DIAMONDS

DIAMANTE CE 43

MIKRO-DIAMANTEN

MICRO-DIAMONDS

MICRO-DIAMANTE 44

SPEZIALINSTRUMENTE

SPECIAL INSTRUMENTS

INSTRUMENTOS ESPECIALES 45



Spiralbohrer, diamantiert
Twist drill, diamond coated
Broca espiral, diamantada 45

DIAMANTSCHLEIBEN

DIAMOND DISCS

DISCOS DE DIAMANTE 46-49

SINTERDIAMANTEN

SINTERED DIAMONDS

ABRASIVOS MACIZOS DE DIAMANTE 50

SINTERDIAMANTSCHLEIBEN

SINTERED DIAMOND DISCS

DISCOS MACIZOS DE DIAMANTE 51

ZURICHTSTEINE

DRESSING STONES

PIEDRAS PARA AFILAR 51

BLACK COBRA DIAMANTINSTRUMENTE | BLACK COBRA DIAMOND INSTRUMENTS |

BLACK COBRA INSTRUMENTOS DE DIAMANTE



Die hervorragenden Leistungseigenschaften der Cobra Diamanten werden durch die besondere CARBOCER® (diamond-like carbon) Beschichtung noch optimiert. Durch ein spezielles Verfahren wird auf den Cobra Diamanten eine diamantähnliche Kohlenstoffschicht appliziert. Diese sorgt für extreme Härte, geringen Verschleiß, niedrigste Reibwerte sowie hohe Korrosionsfestigkeit bei gleichbleibenden Oberflächeneigenschaften.

The excellent features of the Cobra diamonds, carbide cutters, and carbide burs are enhanced by the special CARBOCER® (diamond-like carbon) coating. A specially developed process applies a diamond-like carbon coating to the Cobra diamonds, carbide cutters, and carbide burs with extremely hard, wear-resistant, low-friction, high corrosion-resistant surfaces while retaining the original surface properties.

Las extraordinarias propiedades de los diamantes Cobra se vuelven a optimizar gracias al revestimiento especial CARBOCER® (diamond-like carbon). Es decir han sido sometidos a un proceso especial y se les ha aplicado un revestimiento de carbono similar al del diamante, que le confiere una dureza y resistencia a la corrosión extremas con un mínimo desgaste y coeficiente de fricción muy bajo, conservando al mismo tiempo sus propiedades de superficie.

Vorteile der Black Cobra Diamanten

Black Cobra Diamond Advantages | Ventajas de los diamantes Black Cobra



Beschichtung der Diamanten | Armor-Plated Diamonds | Revestimiento de los diamantes

Die patentierte, Diamant-ähnliche CARBOCER® Beschichtung sorgt für extreme Härte und Langlebigkeit des Instruments.

The patented diamond-like CARBOCER® coating ensures extreme hardness and durability of the instrument.

El revestimiento patentado CARBOCER®, similar al diamante, garantiza una dureza y durabilidad extremas del instrumento.



Kühlrillen | Cooling Channels | Ranuras de refrigeración

Der undiamantisierte Bereich der Rillen optimiert die Kühlung des Instruments und der Restauration. Unter anderem verhindern die Rillen vorsorglich das Zusetzen der Diamanten.

The diamond-free channels optimize cooling of the bur and the restoration site. They also increase cutting efficiency by preventing clogging of the diamonds.

La zona no diamantada de las ranuras optimiza la refrigeración del instrumento y la restauración. Entre otras cosas, las ranuras evitan que los diamantes se atasquen, como medida de precaución.

B811




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	4,0
B811	FG	809 314 038 544		033



B830

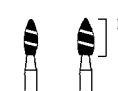



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	4,5	4,5
B830	FG	809 314 257 544		018	023



B833




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	4,2
B833	FG	809 314 277 544		023



B837




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	8,0
B837	FG	809 314 110 544		014



B837L




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	10,0
B837L	FG	809 314 111 544		012



B837R

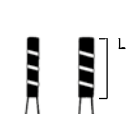



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	8,0	8,0
B837R	FG	809 314 113 544		014	018



Runde Kante | Round Edge | Borde redondo

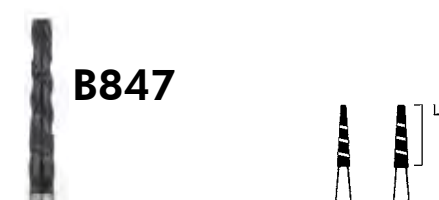
**B847**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	8,0	8,0

B847	FG	809 314 172 544	016	018	
------	----	-----------------	-----	-----	--

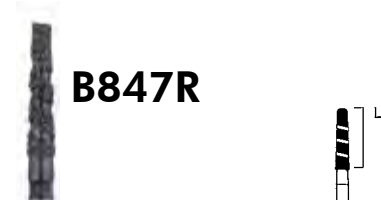
**B847R**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	8,0

B847R	FG	809 314 546 544	018	
-------	----	-----------------	-----	--



Runde Kante | Round Edge | Borde redondo


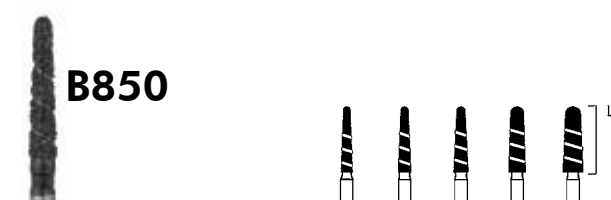
**B850**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5
			L mm	8,5	8,5	8,5	8,5	8,5

B850	FG	809 314 198 544	014	016	018	021	025	
------	----	-----------------	-----	-----	-----	-----	-----	--

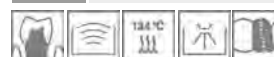

Zum Trennen aller Keramikkrone, mehr Informationen auf Seite 56 | To cut all ceramic crowns, more information on page 56 | Para separar todas las coronas de cerámica, más información en la página 56

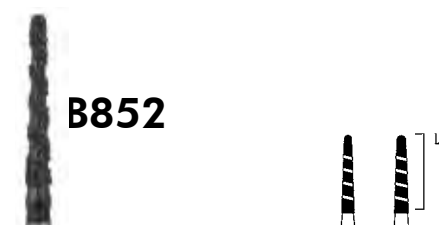
**B852**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	10,0	10,0

B852	FG	809 314 199 544	016	018	
------	----	-----------------	-----	-----	--

**B855**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5
			L mm	6,5	6,5	7,5	7,5

B855	FG	809 314 196 544	016	018	021	023	
------	----	-----------------	-----	-----	-----	-----	--



Zum Trennen aller Keramikkrone, mehr Informationen auf Seite 56 | To cut all ceramic crowns, more information on page 56 | Para separar todas las coronas de cerámica, más información en la página 56

**B862**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	8,0	8,0

B862	FG	809 314 249 544	012	014	
------	----	-----------------	-----	-----	--

**B863**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	10,0

B863	FG	809 314 250 544	014	
------	----	-----------------	-----	--

**B868**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	8,0	8,0	8,0

B868	FG	809 314 289 544	012	014	018	
------	----	-----------------	-----	-----	-----	--

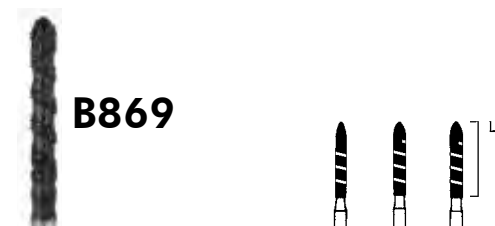
**B869**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	10,0	10,0	10,0

B869	FG	809 314 290 544	012	014	016	
------	----	-----------------	-----	-----	-----	--

**B878**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	8,0	8,0	8,0

B878	FG	809 314 298 544	014	016	018	
------	----	-----------------	-----	-----	-----	--

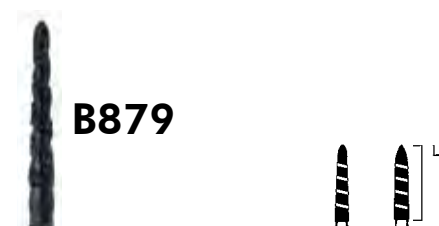
**B879**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	10,0	10,0

B879	FG	809 314 299 544	016	018	
------	----	-----------------	-----	-----	--

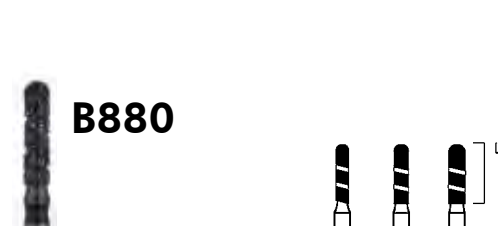
**B880**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	8,0	8,0	8,0

B880	FG	809 314 139 544	012	014	016	
------	----	-----------------	-----	-----	-----	--

**B886**


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	10,0

B886	FG	809 314 131 544	016	
------	----	-----------------	-----	--



PRÄPARATIONS-INSTRUMENTE | PREPARATION-INSTRUMENTS | INSTRUMENTOS DE PREPARACIÓN

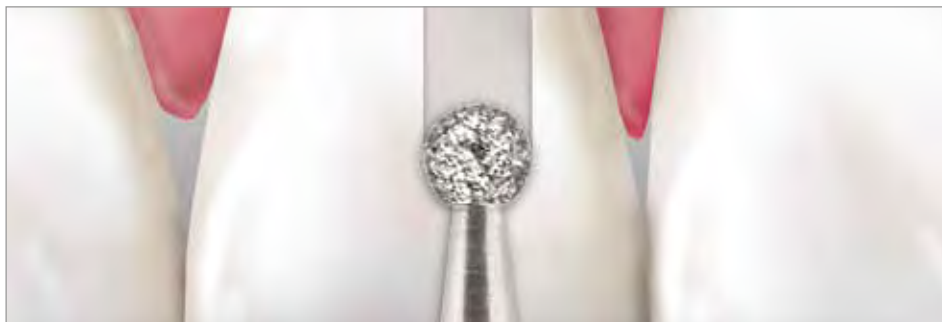Rund | Round | Redonda

**801** mittel / medium

801H super grob / super coarse
 801G grob / coarse
 801F fein / fine
 801C extra fein / extra fine

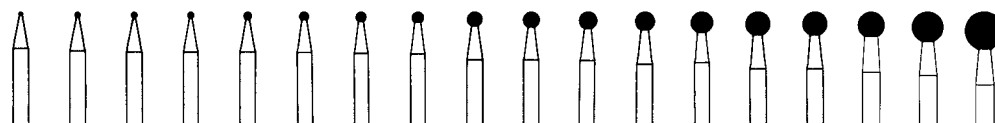


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2
801	HP	806 104 001 524				009*	010*	012*	014*	016*	018*	021*	023*		027*			033*		050*
	RA	806 204 001 524					010	012	014	016	018	021	023		027			033		050
	FG s	806 313 001 524					010	012	014											
	FG	806 314 001 524	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029		033*	035	042	
	FG XL	806 316 001 524				010	012	014	016	018										
801H	HP	806 104 001 544																		050*
	RA	806 204 001 544																		050
	FG	806 314 001 544						014	016	018	021	023	025	027	029					
	FG XL	806 316 001 544						014	016	018		023			029	031				
801G	HP	806 104 001 534				010*		014*	016*	018*		023*					033*			050*
	FG	806 314 001 534			009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029					
	FG XL	806 316 001 534						014	016	018		023								
801F	RA	806 204 001 514							016	018		023					033			
	FG	806 314 001 514				010	012	014	016	018	021	023	025	027	029		033*	035		
801C	HP	806 104 001 504										023*								
	RA	806 204 001 504										023								
	FG	806 314 001 504					012	014	016	018	021	023	025	027	029		033*			



* = 2

**801L** mittel / medium

801LG grob / coarse

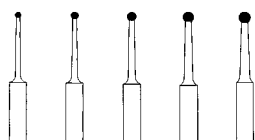


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5	5
801L	HP	806 104 697 524	008*	010*			
	FG	806 314 697 524		010	012	014	016
801LG	FG	806 314 697 534		010	012	014	016

**802** mittel / medium

802G grob / coarse




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5	5	5
			L mm	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5
802	FG	806 314 002 524	009	010	012	014	016	018
802G	FG	806 314 002 534		010	012	014	016	



Einige der auf dieser Seite aufgeführten Artikel erhalten Sie zur Einmalverwendung gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung gilt nur für die chirurgische Anwendung. Im Dentalbereich ist bei entsprechender Aufbereitung die Mehrfachverwendung möglich. Bitte beachten Sie hierfür die Hinweise zur Aufbereitung.
 Some of the items listed on this page are available marked for single use. This marking applies only to surgical use. In the dental sector, multiple use is possible with appropriate preparation. Please observe the instructions for preparation.
 Algunos de los artículos que se muestran en esta página son de uso único y están debidamente marcados. Este marcado se refiere únicamente a las aplicaciones quirúrgicas. En el ámbito de la odontología se pueden emplear varias veces con la preparación adecuada. Siga las instrucciones de preparación.

**802LG** grob / coarse

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	10,0	10,0	10,0
802LG	FG	806 314 494 534		012	016	019

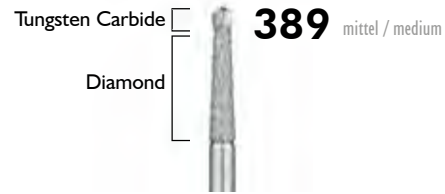Tungsten Carbide **389** mittel / medium

Diamond


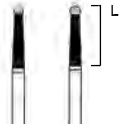


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
			L mm	8,0	8,0
389	FG XL	806 316 494 020		012	014

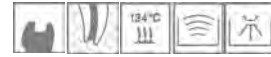

Umgekehrter Kegel | Inverted Cone | Cono invertido

**805** mittel / medium

805H super grob / super coarse
805G grob / coarse
805F fein / fine

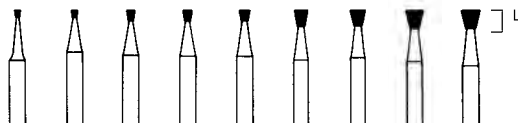


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	5	5	5	5
			L mm	0,9	1,0	1,5	1,5	1,5	2,3	2,3	2,5	2,5
805	HP	806 104 012 524			010*	012*	014*	016*	018*	021*	025*	027*
	FG	806 314 012 524		009	010	012	014	016	018	021	025	
805H	FG	806 314 012 544						016				
805G	FG	806 314 012 534				012	014	016	018			
805F	FG	806 314 012 514					014					



Kavitätenpräparation, Kante scharf | Cavity preparation, Flat end | Preparación de cavidad, Cono invertido

**807** mittel / medium

807G grob / coarse



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	5
			L mm	3,5	3,5	4,0	5,0	5,0	6,0
807	HP	806 104 225 524					018*	021*	025*
	FG	806 314 225 524		012	014	016			
807G	FG	806 314 225 534			014	016	018		



Kavitätenpräparation, Kante scharf | Cavity preparation, Flat end | Preparación de cavidad, Cono invertido


**813** mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	3,0
813	HP	806 104 014 524		060



Diabolo | Diabolo, Hourglass | Diábolo

806 mittel / medium
806G grob / coarse

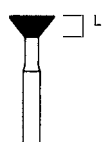






Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5
806	FG	806 314 019 524	2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
806G	FG	806 314 019 534	010	012	014	016	018	



870 mittel / medium




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5
870	FG	806 314 032 524	2,0	018



Birne | Pear | Pera



808 mittel / medium
808H super grob / super coarse
808G grob / coarse








Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5
808	FG	806 314 233 524	2,7	2,7	2,7	3,0	3,0	3,0
808H	FG	806 314 233 544				014		
808G	FG	806 314 233 534		010	012	014	016	



Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Preparación de cavidad

808L mittel / medium
808LH super grob / super coarse
808LG grob / coarse
808LF fein / fine








Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5
808L	FG	806 314 234 524	4,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
808LH	FG	806 314 234 544			014	016		
808LG	FG	806 314 234 534		012	014	016	018	
808LF	FG	806 314 234 514		012	014			



Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Preparación de cavidad

808R mittel / medium
808RH super grob / super coarse
808RG grob / coarse
808RF fein / fine








Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5
808R	FG	806 314 238 524	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
808RH	FG	806 314 238 544			014	016	
808RG	FG	806 314 238 534		012	014	016	018
808RF	FG	806 314 238 514		012	014	016	018



Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Preparación de cavidad

809 mittel / medium
809F fein / fine





Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5
809	FG	806 314 232 524	2,0	008	009
809F	FG	806 314 232 514		008	



Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Preparación de cavidad

809R mittel / medium

809RH super grob / super coarse
809RG grob / coarse
809RF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm
809R	FG	806 314 237 524	010 012 014 016 018
809RH	FG	806 314 237 544	012 014 016 018
809RG	FG	806 314 237 534	010 012 014 016
809RF	FG	806 314 237 514	010 012 014

Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Preparación de cavidad

Doppelkegel | Double Cone, Barrel | Cone doble



811 mittel / medium

811H super grob / super coarse
811G grob / coarse

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm
811	FG	806 314 038 524	033
811H	FG	806 314 038 544	033
811G	FG	806 314 038 534	033

Okklusaler Abtrag | Occlusal Reduction | Reducción de la oclusión

811L mittel / medium

811LH super grob / super coarse
811LG grob / coarse

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm
811L	FG	806 314 039 524	037
811LH	FG	806 314 039 544	037
811LG	FG	806 314 039 534	037

Okklusaler Abtrag | Occlusal Reduction | Reducción de la oclusión

Rad | Wheel | Rueda



818 mittel / medium

Präparationstiefe (FG)
Preparation depth (FG)
Profundidad de preparación (FG)

1,3 mm 1,55 mm

Fig. Schaft / Shank Ref.-Nr. / Ref.-No. L mm

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm
818	HP	806 104 041 524	0,6
	FG	806 314 041 524	0,6
			0,6
			0,75*

134°C

*

907 mittel / medium
907G grob / coarse

Präparationstiefe (FG)
Preparation depth (FG)
Profundidad de preparación (FG)

1,75 mm

Fig. Schaft / Shank Ref.-Nr. / Ref.-No. L mm

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm
907	FG	806 314 067 524	1,0
907G	FG	806 314 067 534	0,41

134°C

Okklusaler Abtrag | Occlusal Reduction | Reducción de la oclusión

909 mittel / medium
909H super grob / super coarse
909G grob / coarse
909F fein / fine

Präparationstiefe (FG)
Preparation depth (FG)
Profundidad de preparación (FG)

0,8 mm 0,85 mm 1,1 mm 1,55 mm 1,85 mm 2,05 mm

Fig. Schaft / Shank Ref.-Nr. / Ref.-No. L mm

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm
909	HP	806 104 068 524	0,8
	RA	806 204 068 524	1,3
	FG	806 314 068 524	1,8
909H	FG	806 314 068 544	1,7
909G	FG	806 314 068 534	2,0
909F	FG	806 314 068 514	2,3

134°C

*

Okklusaler Abtrag | Occlusal Reduction | Reducción de la oclusión

Interdental | Interproximal | Interdental

820 mittel / medium
820F fein / fine
820C extra fein / extra fine
820U ultra fein / ultra fine

Fig. Schaft / Shank Ref.-Nr. / Ref.-No. L mm

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm
820	FG	806 314 465 524	5,0
820F	RA	806 204 465 514	5,0
	FG	806 314 465 514	4,0
820C	FG	806 314 465 504	0,16
820U	FG	806 314 465 494	0,16

134°C

Die Größen 014 und 016 sind für die Bearbeitung interdentaler Flächen geeignet | Sizes 014 and 016 are intended for use on interdental surfaces | Tamaños 014 y 016 son para tallar los espacios interproximales

Linse | Lens | Lenteja

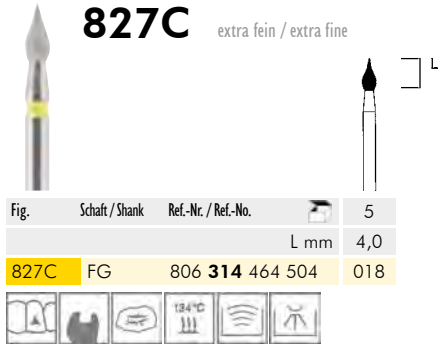
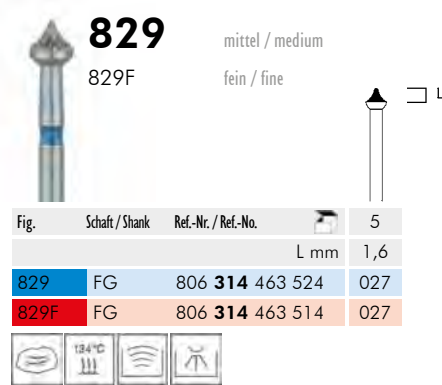
825 mittel / medium

Fig. Schaft / Shank Ref.-Nr. / Ref.-No. L mm

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm
825	HP	806 104 304 524	0,6
			0,8
			0,8


134°C

Zwiebel | Onion | Cebolla


Kavitätenabschräger | Margin Trimmer, Acorn |
Ajuste de margen de cavidad

Für die Kauflächengestaltung – nach Kotschy |
For the occlusal surface design – according to Kotschy |
Para modelar las superficies oclusales – según Kotschy


Knospe | Bud, Pointed Football | Capullo

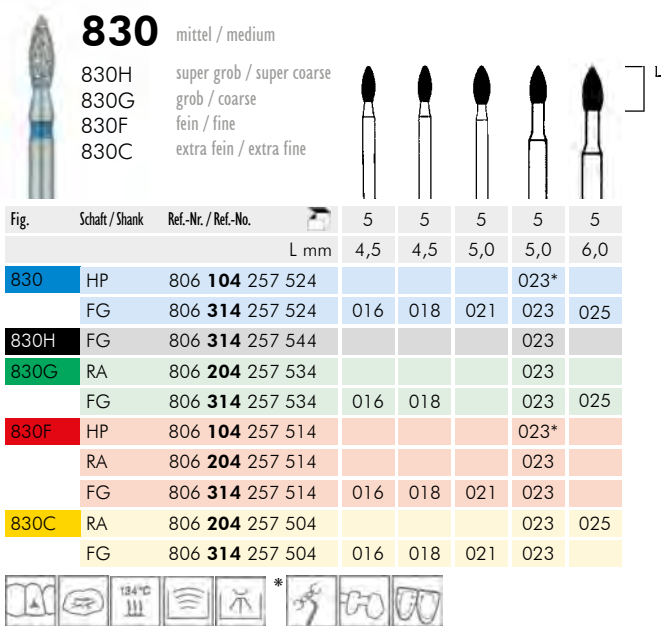

Palatinaler und okklusaler Abtrag | Palatal and occlusal reduction | Reducción palatinal y oclusal

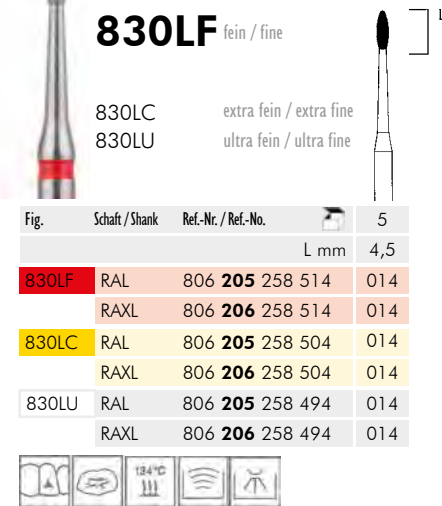

Palatinaler und okklusaler Abtrag | Palatal and occlusal reduction |
Reducción palatinal y oclusal

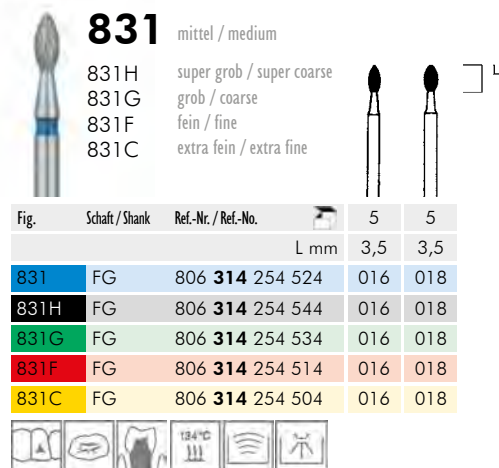

Palatinaler und okklusaler Abtrag | Palatal and occlusal reduction |
Reducción palatinal y oclusal

Knospe, rund | Bud, Round End | Pimpollo, redondeado



894 mittel / medium


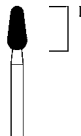


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	5,5
894	FG	806 314 263 524		025

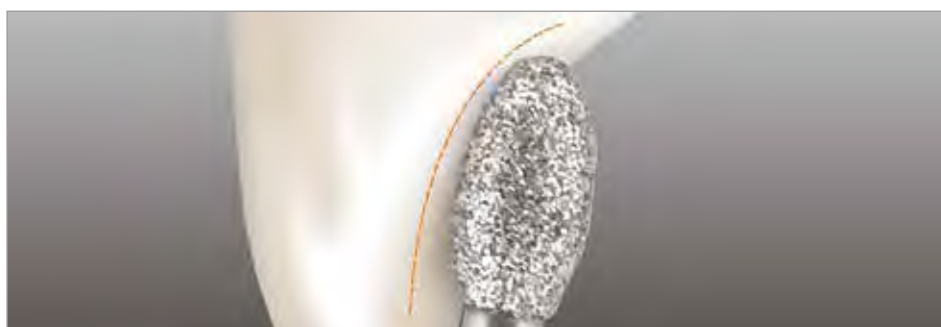

Okklusaler Abtrag | Occlusal Reduction | Reducción de la oclusión

Ei | Egg, Football | Huevo




833 mittel / medium

833H super grob / super coarse
833G grob / coarse
833F fein / fine
833C extra fein / extra fine
833U ultra fein / ultra fine

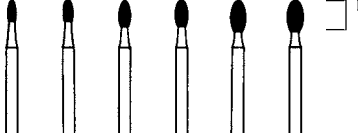


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	5
			L mm	2,8	2,8	3,4	3,4	4,2	4,2
833	FG	806 314 277 524			014	016	018		023
833H	FG	806 314 277 544					018		023
833G	FG	806 314 277 534			014	016	018		023
833F	RA	806 204 277 514							023
	FG	806 314 277 514		012	014	016	018	021	023
833C	FG	806 314 277 504			014	016	018		023
833U	FG	806 314 277 494							023



Palatinaler und okklusaler Abtrag | Palatal and occlusal reduction | Reducción palatinal y oclusal



833KH super grob / super coarse

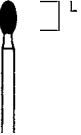


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	3,9
833KH	FG	806 314 272 544		024



Palatinaler und okklusaler Abtrag | Palatal and occlusal reduction | Reducción palatinal y oclusal



833L mittel / medium

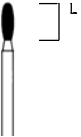


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	5,0
833L	FG	806 314 278 524		018
833L	FGXXL	806 317 278 524		018



Palatinaler und okklusaler Abtrag | Palatal and occlusal reduction | Reducción palatinal y oclusal

Tiefenmarkierer | Depth Cutter | Marcadores de profundidad



834 mittel / medium

Präparationstiefe
Preparation depth
Profundidad de preparación

0,3 mm 0,4 mm 0,5 mm

Fig. Schaft / Shank Ref.-Nr. / Ref.-No.

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	
			L mm	6,0	6,0	6,0
834	FG	806 314 552 524	016	018	021	

Labialer Abtrag | Labial reduction | Reducción labial

834W mittel / medium

Präparationstiefe
Preparation depth
Profundidad de preparación

0,15 mm 0,28 mm 0,7 mm 0,9 mm 1,2 mm

Fig. Schaft / Shank Ref.-Nr. / Ref.-No.

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5	5	
			L mm	7,5	7,5	5,9	7,5	7,5
834W	FG	806 314 560 524	018	021	025	031	035	

Labialer Abtrag | Labial reduction | Reducción labial

908 mittel / medium

Präparationstiefe
Preparation depth
Profundidad de preparación

0,6 mm 1,0 mm

Fig. Schaft / Shank Ref.-Nr. / Ref.-No.

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	
			L mm	1,5	1,5
908	FG XL	806 316 072 524	028	036	

Labialer Abtrag | Labial reduction | Reducción labial

510W mittel / medium

Fig. Schaft / Shank Ref.-Nr. / Ref.-No.

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5	
			L mm	8,0	8,0	8,0	8,0
510W	FG	806 314 510 524	025	030	035	045	

NEW

511W mittel / medium

Fig. Schaft / Shank Ref.-Nr. / Ref.-No.

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	
			L mm	6,0	6,0	6,0
511W	FG	806 314 511 524	035	040	045	

Zylinder | Cylinder | Cilíndrico



835

mittel / medium

835H super grob / super coarse
835G grob / coarse
835F fein / fine

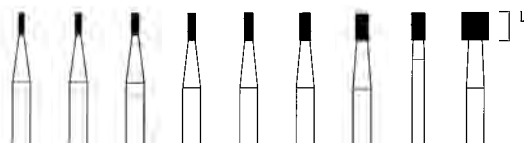


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	5	5	5	5
			L mm	3,0	3,0	3,0	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
835	HP	806 104	108 524									035*
	RA	806 204	108 524		008		010	012				
	FG s	806 313	108 524		008	009	010	012				
	FG	806 314	108 524	007	008	009	010	012	014	016	018	
835H	FG	806 314	108 544				010	012				
835G	FG	806 314	108 534			009	010	012	014			
835F	FG	806 314	108 514		008	009	010					



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, parallele Stufe, scharfe Kante | Crown preparation/Cavity preparation, Parallel shoulder, Flat end
Preparación de coronas/Preparación de cavidad, en paralelo, borde afilado



837

mittel / medium

837S ultra grob / ultra coarse
837H super grob / super coarse
837G grob / coarse
837F fein / fine

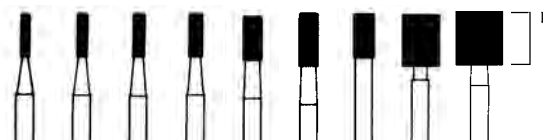


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	5	5	5	5
			L mm	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0	6,0	6,0	6,0
837	HP	806 104	110 524	012*	014*	016*	018*	023*		027*		060*
	FG	806 314	110 524	012	014	016	018		025			
837S	HP	806 104	110 554									060*
837H	HP	806 104	110 544								050*	060*
	FG	806 314	110 544	012	014	016						
837G	FG s	806 313	110 534		014							
	FG	806 314	110 534	012	014	016	018					
837F	HP	806 104	110 514									060*
	FG	806 314	110 514	012	014	016						



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, parallele Stufe, scharfe Kante | Crown preparation/Cavity preparation, Parallel shoulder, Flat end | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, en paralelo, borde afilado



837L

mittel / medium

837LH super grob / super coarse
837LG grob / coarse
837LF fein / fine

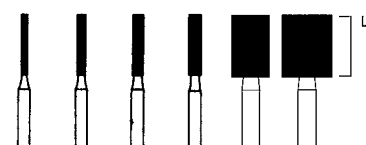


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	2	2
			L mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
837L	HP	806 104	111 524			014*	016*		
	FG	806 314	111 524	010	012	014	016		
837LH	FG	806 314	111 544		012	014	016		
837LG	HP	806 104	111 534					050*	065*
	FG	806 314	111 534		012	014	016		
837LF	FG	806 314	111 514		012	014	016		



Kronenpräparation, parallele Stufe, scharfe Kante | Crown preparation, Parallel shoulder, Flat end | Preparación de coronas, en paralelo, borde afilado



836

mittel / medium

836G grob / coarse

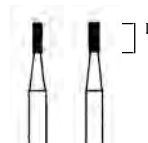


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	4,0	4,0
836	FG	806 314 109 524		012	014
836G	FG	806 314 109 534			014



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, parallele Stufe, scharfe Kante |
Crown preparation/Cavity preparation, Parallel shoulder, Flat end |
Preparación de coronas/Preparación de cavidad, en paralelo, borde afilado



837XL

mittel / medium

837XG grob / coarse

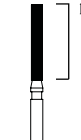


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	10,0
837XL	FG	806 314 112 524		014
837XG	FG	806 314 112 534		014



891

mittel / medium


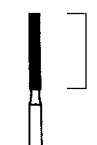
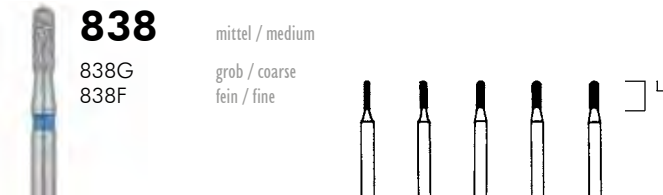


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	12,0
891	FG	806 314 113 524		014

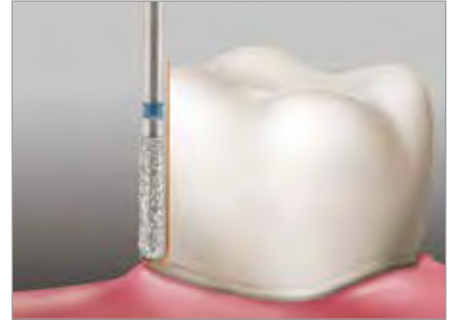

Kronenpräparation, parallele Stufe, scharfe Kante | Crown preparation, Parallel shoulder, Flat end | Preparación de coronas, en paralelo, borde afilado

Zylinder, rund | Cylinder, Round End | Cilíndrico con borde redondeado

**838**

mittel / medium

838G

grob / coarse

838F

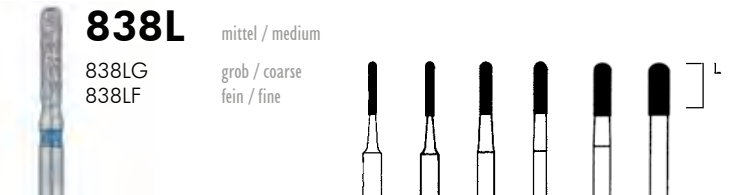
fein / fine



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5
			L mm	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
838	FG	806 314 138 524		008	009	010	012	014
838G	FG	806 314 138 534					012	014
838F	FG	806 314 138 514				010	012	



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, parallele Hohlkehle, rund | Crown preparation/Cavity preparation, Parallel chamfer, Round end | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, borde paralelo, redonda

**838L**

mittel / medium

838LG

grob / coarse

838LF

fein / fine

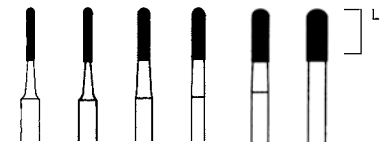


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	5
			L mm	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
838L	HP	806 104 140 524					016*	023*	027*
	FG	806 314 140 524		010	012	014	016		
838LG	FG	806 314 140 534			012	014			
838LF	FG	806 314 140 514			012				



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, parallele Hohlkehle, rund | Crown preparation/Cavity preparation, Parallel chamfer, Round end | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, borde paralelo, redonda

**880**

mittel / medium

880G

grob / coarse


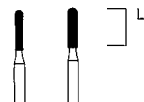


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	5,0	5,0
880	FG	806 314 139 524		012	014
880G	FG	806 314 139 534		012	014

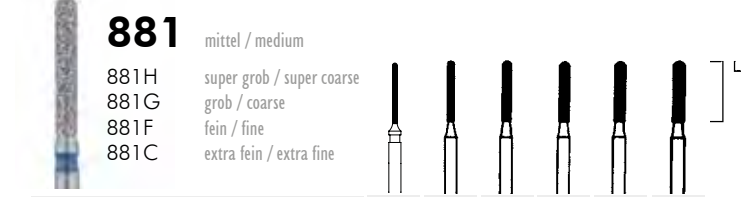

Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, parallele Hohlkehle, rund | Crown preparation/Cavity preparation, Parallel chamfer, Round end | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, borde paralelo, redonda

**881**

mittel / medium

881H

super grob / super coarse

881G

grob / coarse

881F

fein / fine

881C

extra fein / extra fine


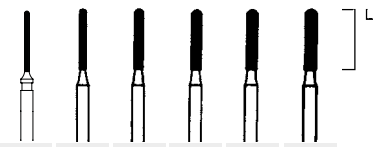


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	5
			L mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
881	FG	806 314 141 524		008	010	012	014	016	018
881H	FG	806 314 141 544				012	014		
881G	FG	806 314 141 534				012	014	016	018
881F	FG	806 314 141 514		008	010	012	014	016	018
881C	FG	806 314 141 504				012	014		

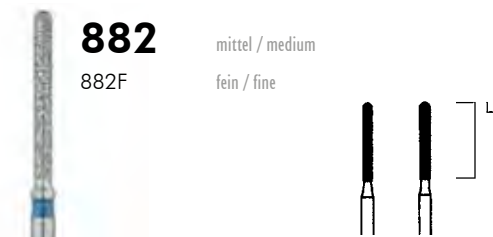

Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, parallele Hohlkehle, rund | Crown preparation/Cavity preparation, Parallel chamfer, Round end | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, borde paralelo, redonda

**882**

mittel / medium

882F

fein / fine

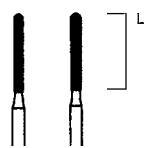


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	10,0	10,0
882	FG	806 314 142 524		012	014
882F	FG	806 314 142 514		012	014



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, parallele Hohlkehle, rund | Crown preparation/Cavity preparation, Parallel chamfer, Round end | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, borde paralelo, redonda

**882L**

mittel / medium

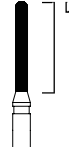
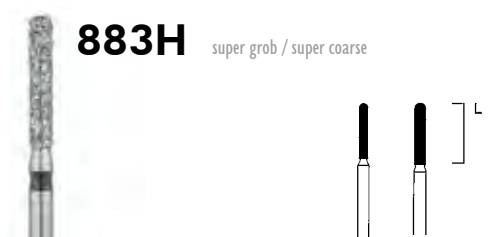


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	12,0
882L	HP	806 104 143 524		018

**883H**

super grob / super coarse


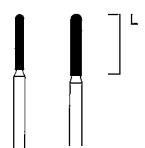


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	7,0	8,0
883H	FG	806 314 146 544		012	016

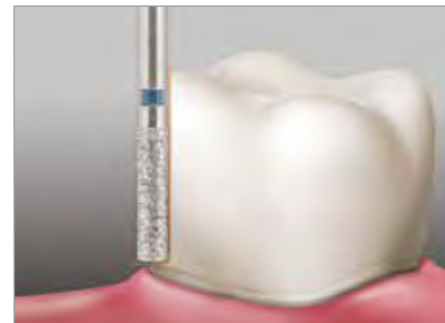

Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, parallele Hohlkehle, rund | Crown preparation/Cavity preparation, Parallel chamfer, Round end | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, borde paralelo, redonda

Zylinder mit abgerundeter Kante | Cylinder, Round Edge | Cilíndrico de punta plana



840 mittel / medium

840H super grob / super coarse
840G grob / coarse
840F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5
840	FG	806 314 156 524	008	010	012	014		
840H	FG	806 314 156 544		010	012	014		
840G	FG	806 314 156 534	008	010	012	014	016	
840F	FG	806 314 156 514	008	010	012	014		

Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, Inlay, parallele Stufe, runde Kante | Crown preparation/Cavity preparation, Inlay, Parallel shoulder, Round edge | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, inlays, borde paralelo, borde redondo

841 mittel / medium

841H super grob / super coarse
841G grob / coarse
841F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5
841	FG	806 314 157 524	008	010	012	014	016	
841H	FG	806 314 157 544			012	014		
841G	FG	806 314 157 534			012	014		
841F	FG	806 314 157 514	008	010	012	014		

Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, Inlay, parallele Stufe, runde Kante | Crown preparation/Cavity preparation, Inlay, Parallel shoulder, Round edge | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, inlays, borde paralelo, borde redondo

842 mittel / medium

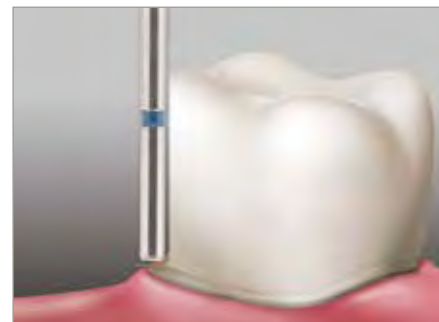
842H super grob / super coarse
842G grob / coarse
842F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5
842	FG	806 314 158 524	012	014	016	018		
842H	FG	806 314 158 544		012	014	016	018	
842G	FG	806 314 158 534	010	012	014	016	018	
842F	FG	806 314 158 514		012	014	016		

Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, Inlay, parallele Stufe, runde Kante | Crown preparation/Cavity preparation, Inlay, Parallel shoulder, Round edge | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, inlays, borde paralelo, borde redondo

837R mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5
837R	FG	806 314 135 524	012	

Zylinder, Stirn belegt | Cylinder, End Cutting Only | Cilíndrico con revestimiento en la punta redondeado

839 mittel / medium
839F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5
			L mm	0,2	0,2
839	FG	806 314 150 524	012	014	016
839F	FG	806 314 839 514		014	

Kronenrandpräparation | Crown preparation | Preparation de coronas
Stufenschleifer | End cutting only | Abrasivos de escalones

839R mittel / medium
839RF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm
839R	FG	806 314 179 524	012
839RF	FG	806 314 839 514	012

Kronenrandpräparation | Crown preparation | Preparation de coronas

Stufenschleifer, angeschrägte Kante | End cutting only, Beveled round edge | Abrasivos de escalones, cantos biselados

839KF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm
839KF	FG	806 314 839 514	006



Zylinder, Ende nicht belegt | Cylinder, End Non-Coated | Cilíndrico sin revestimiento en la punta

843 mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm
843	FG XL	806 316 152 524	016

Für definierten Materialabtrag bei der Kronenpräparation
Safe end for the defined removal in crown preparation
Para el tallado definido en la preparación de hombros

Zylinder spitz | Cylinder, Pointed | Cilíndrico con chaflán

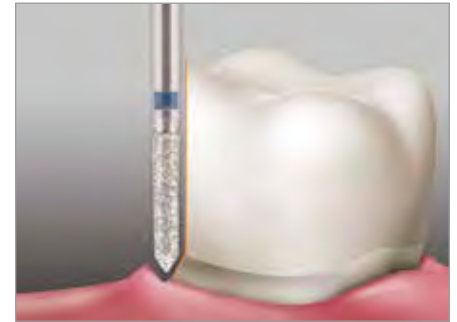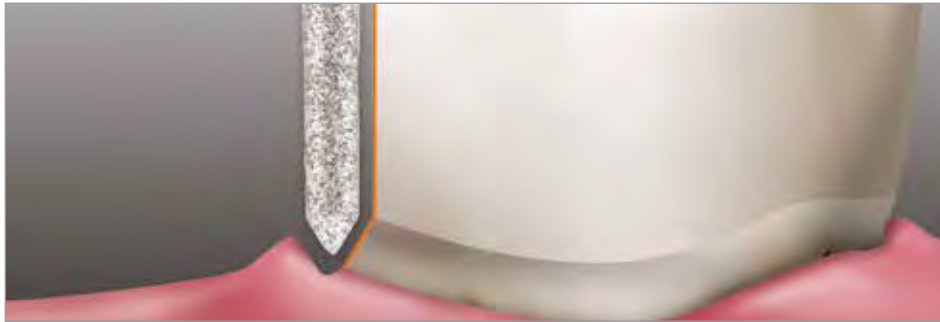

884 mittel / medium
884G grob / coarse
884F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm
884	FG	806 314 129 524	012
884G	FG	806 314 129 534	012
884F	FG	806 314 129 514	012

Kronenpräparation, Zylinder mit abgeschrägter Spitze | Crown preparation, Cylinder with beveled tip | Preparación de coronas con punta biselada

885 mittel / medium
885H super grob / super coarse
885G grob / coarse
885F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm
885	FG	806 314 130 524	012
885H	FG	806 314 130 544	012
885G	FG	806 314 130 534	012
885F	FG	806 314 130 514	012

Kronenpräparation, Zylinder mit abgeschrägter Spitze | Crown preparation, Cylinder with beveled tip | Preparación de coronas con punta biselada

886 mittel / medium
886H super grob / super coarse
886G grob / coarse
886F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm
886	FG	806 314 131 524	012
886H	FG	806 314 131 544	014
886G	FG	806 314 131 534	014
886F	FG	806 314 131 514	014

Kronenpräparation, Zylinder mit abgeschrägter Spitze | Crown preparation, Cylinder with beveled tip | Preparación de coronas con punta biselada

Konisch mit scharfer Kante | Tapered, Flat End | Cónica con borde afilado



845 mittel / medium
845G grob / coarse

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm
845	HP	806 104 168 524	010*
	FG	806 314 168 524	009
845G	FG	806 314 168 534	014

Kavitätenpräparation, konisch, Kante scharf | Cavity preparation, Tapered, Flat end | Preparación de coronas, cónica, borde a filado

846 mittel / medium
846H super grob / super coarse
846G grob / coarse
846F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm
846	FG	806 314 171 524	012
846H	FG	806 314 171 544	016
846G	FG	806 314 171 534	016
846F	FG	806 314 171 514	016

Kavitätenpräparation, konisch, Kante scharf | Cavity preparation, Tapered, Flat end | Preparación de coronas, cónica, borde afilado

**846W**


mittel / medium

846WH super grob / super coarse
846WF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
L mm				6,0	6,0
846W	FG	806 314 203 524		012	018
846WH	FG	806 314 203 544		012	018
846WF	FG	806 314 203 514		012	018



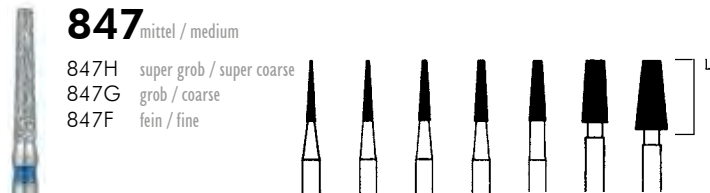
Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, modifizierte Stufe | Crown preparation/Cavity preparation, Modified shoulder round edge | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, borde modificado

**847**

mittel / medium

847H super grob / super coarse
847G grob / coarse
847F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	2	2
L mm				8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	9,0
847	HP	806 104 172 524		014*	016*		023*	033*	040*	
	FG	806 314 172 524		012	014	016	018			
847H	FG s	806 313 172 544				016				
	FG	806 314 172 544			014	016	018			
847G	FG	806 314 172 534		012	014	016	018			
847F	FG	806 314 172 514		012	014	016				

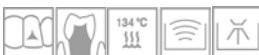

Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, konisch, Kante scharf | Crown preparation/Cavity preparation, Tapered, Flat end | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, cónica, borde afilado

Compatible with Prep & Match Arkansas Abrasives 617XF Page 122

**847W**


mittel / medium

847WH super grob / super coarse
847WF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
L mm				8,0
847W	FG	806 314 204 524		020
847WH	FG	806 314 204 544		020
847WF	FG	806 314 204 514		020



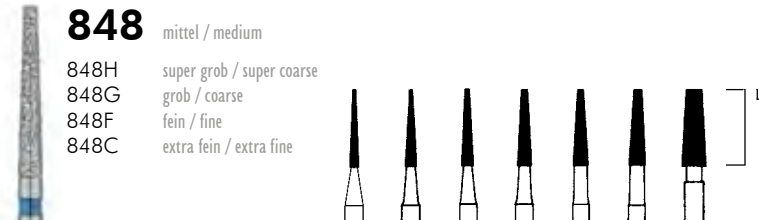Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, modifizierte Stufe | Crown preparation/Cavity preparation, Modified shoulder round edge | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, borde modificado

**848**

mittel / medium

848H super grob / super coarse
848G grob / coarse
848F fein / fine
848C extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	5	2
L mm				10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
848	HP	806 104 173 524		012*	014*	016*	018*	021*	023*	031*
	FG	806 314 173 524			014	016	018	021	023	
848H	FG	806 314 173 544			014	016	018			
848G	FG	806 314 173 534			014	016	018	021	023	
848F	FG	806 314 173 514				016	018			
848C	FG	806 314 173 504				016				



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, konisch, Kante scharf | Crown preparation/Cavity preparation, Tapered, Flat end | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, cónica, borde afilado

Compatible with Prep & Match Arkansas Abrasives 617XF Page 122

**897W**

mittel / medium


897WH super grob / super coarse
897WF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
L mm				6,0	6,0
897W	FG	806 314 203 524		016	020
897WH	FG	806 314 203 544		016	020
897WF	FG	806 314 203 514		016	020



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, modifizierte Stufe | Crown preparation/Cavity preparation, Modified shoulder round edge | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, borde modificado

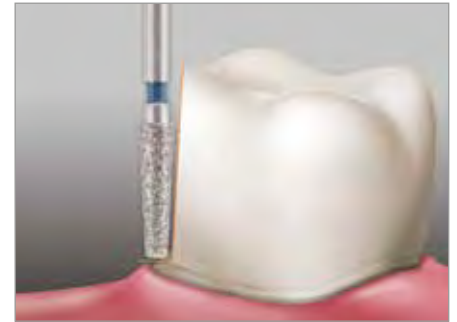Konisch mit abgerundeter Kante | Tapered, Round Edge | Cónico con borde redondeado



845R mittel / medium

845RH super grob / super coarse
845RF fein / fine

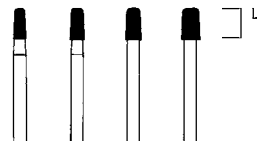


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5
L mm				4,0	4,0	4,0	4,0
845R	FG	806 314 544 524		016	018	021	025
845RH	FG	806 314 544 544			018		025
845RF	FG	806 314 544 514		016	018		025



Kavitätenpräparation, Inlays und Onlays, modifizierte Stufe | Cavity preparation, Inlay and Onlay, Modified shoulder | Preparación de cavidad, inlays y onlays, borde modificado

846R mittel / medium

846RH super grob / super coarse
846RG grob / coarse
846RF fein / fine

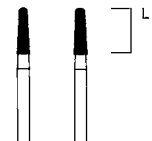


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
L mm				6,0	6,0
846R	FG	806 314 545 524		016	018
846RH	FG	806 314 545 544		016	
846RG	FG	806 314 545 534		016	018
846RF	FG	806 314 545 514		016	018



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, Inlays und Onlays, modifizierte Stufe | Crown preparation/Cavity preparation, Inlay and Onlay, Modified shoulder round edge | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, inlays y onlays, borde modificado

846KR mittel / medium


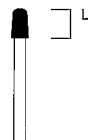


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
L mm				4,0
846KR	FG	806 314 584 524		023

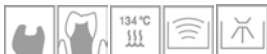

Kavitätenpräparation, Inlays und Onlays, modifizierte Stufe | Cavity preparation, Inlay and Onlay, Modified shoulder | Preparación de cavidad, inlays y onlays, borde modificado

No. 1
for CAD/CAM
preparation

847R mittel / medium

847RH super grob / super coarse
847RG grob / coarse
847RF fein / fine

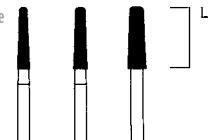


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
L mm				8,0	8,0	8,0
847R	FG	806 314 546 524		016	018	023
847RH	FG	806 314 546 544		016	018	023
847RG	FG	806 314 546 534		016	018	023
847RF	FG	806 314 546 514		016	018	023



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, Inlays und Onlays, modifizierte Stufe | Crown preparation/Cavity preparation, Inlay and Onlay, Modified shoulder round edge | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, inlays y onlays, borde modificado

847KR mittel / medium

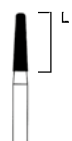


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
L mm				8,0
847KR	FG	806 314 585 524		016



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, modifizierte Stufe | Crown preparation/Cavity preparation, Modified shoulder round edge | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, borde modificado

848R mittel / medium

848RF fein / fine

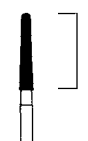


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
L mm				10,0
848R	FG	806 314 553 524		016
848RF	FG	806 314 553 514		016



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, modifizierte Stufe | Crown preparation/Cavity preparation, Modified shoulder round edge | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, borde modificado

848W mittel / medium

848WH super grob / super coarse
848WF fein / fine

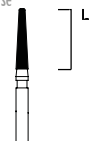


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
L mm				8,0
848W	FG	806 314 204 524		018
848WH	FG	806 314 204 544		018
848WF	FG	806 314 204 514		018



Kronenpräparation/Kavitätenpräparation, modifizierte Stufe | Crown preparation/Cavity preparation, Modified shoulder round edge | Preparación de coronas/Preparación de cavidad, borde modificado

Konisch, rund | Tapered, Round End | Cónico con borde redondeado


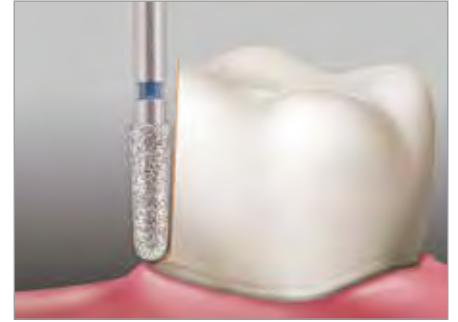
**802KG** grob / coarse

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	9,0
802KG	FG	806 314 551 534	014
	FG L	806 315 551 534	014

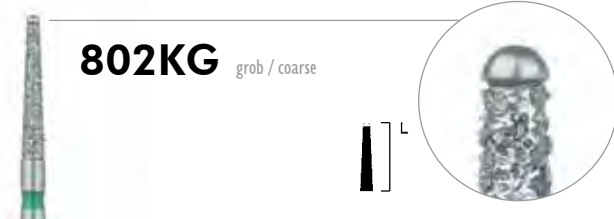

Stirn nicht diamantiert, zur Schonung des zervikalen Bereichs
Safe end, for gentle administration of the cervical area
Punta no diamantada, para la protección del área cervical

849 mittel / medium

849H super grob / super coarse
849G grob / coarse
849F fein / fine

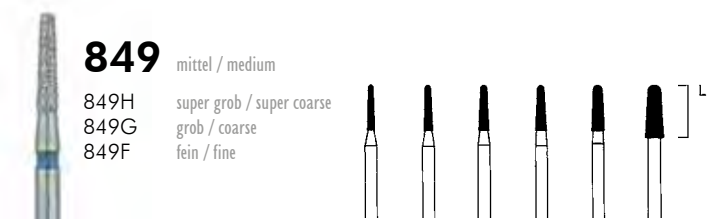


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5	5	5
		L mm	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	7,0
849	HP	806 104 197 524			014*			025*
	FG	806 314 197 524	010	012	014	016	018	025
849H	FG	806 314 197 544		012	014	016	018	025
849G	HP	806 104 197 534				016*		
	FG s	806 313 197 534						025
	FG	806 314 197 534	010	012	014	016	018	025
849F	FG	806 314 197 514		012	014	016	018	025



Kronenpräparation, konische Hohlkehle, rund | Crown preparation, Tapered chamfer, Round end | Preparación de coronas, borde cónico redondeado

Compatible with Prep & Match Arkansas Abrasives 619XF Page 122

849LF fein / fine

849LC extra fein / extra fine
849LU ultra fein / ultra fine



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	7,0
849LF	RA L	806 205 693 514	012
	RA XL	806 206 693 514	012
849LC	RA L	806 205 693 504	012
	RA XL	806 206 693 504	012
849LU	RA L	806 205 693 494	012
	RA XL	806 206 693 494	012



Für die optimale Entfernung von Restplaque im subgingivalen Bereich | For removing residual plaque from subgingival areas | Optimo para remover placa residual en el área subgingival

850 mittel / medium

850H super grob / super coarse
850G grob / coarse
850F fein / fine
850C extra fein / extra fine

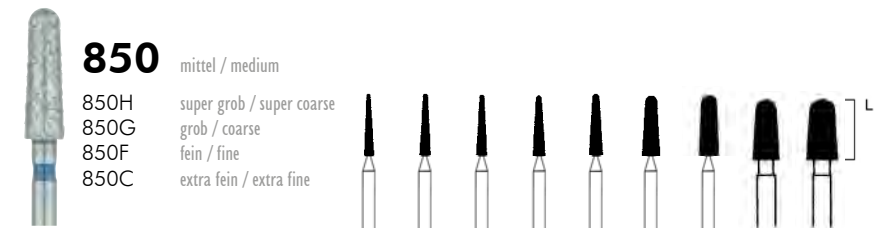


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2
		L mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
850	HP	806 104 198 524	012*		016*	018*		023*	025*	033*	040*	
	FG	806 314 198 524	012	014	016	018	021		025			
850H	FG s	806 313 198 544		014	016							
	FG	806 314 198 544	012	014	016	018	021		025			
850G	HP	806 104 198 534				018*		023*				
	FG s	806 313 198 534			016							
	FG	806 314 198 534	012	014	016	018	021	023	025			
850F	HP	806 104 198 514							025*			
	FG	806 314 198 514	012	014	016	018		023				
850C	FG	806 314 198 504	012		016							



Kronenpräparation, konische Hohlkehle, rund | Crown preparation, Tapered chamfer, Round end | Preparación de coronas, borde cónico redondeado

Compatible with Prep & Match Arkansas Abrasives 619XF Page 122



851 mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	6,0
851	FG	806 314 218 524		014




Stirn nicht diamantiert, zur Schonung des zervikalen Bereichs | Safe end, for gentle administration of the cervical area | Punta no diamantada, para la protección del area cervical




851L mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	8,0	8,0	8,0
851L	FG	806 314 219 524		012	016	018

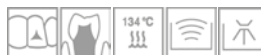

Stirn nicht diamantiert, zur Schonung des zervikalen Bereichs | Safe end, for gentle administration of the cervical area | Punta no diamantada, para la protección del area cervical

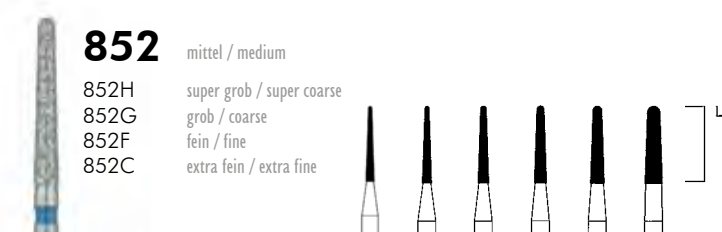

852 mittel / medium

852H super grob / super coarse
852G grob / coarse
852F fein / fine
852C extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	5
			L mm	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
852	HP	806 104 199 524		012*	014*	016*	018*	023*	
	FG	806 314 199 524		010	012	014	016	018	023
852H	FG s	806 313 199 544					016		
	FG	806 314 199 544			012	014	016	018	
852G	FG	806 314 199 534			012	014	016	018	023
852F	FG	806 314 199 514			012	014	016	018	
852C	FG	806 314 199 504					016	018	



Kronenpräparation, konische Hohlkehle, rund, insbesondere Frontzahnbereich | Crown preparation, tapered chamfer, Round end, in particular anterior region | Preparación de coronas, borde cónico redondeado sobre todo, piezas frontales

Compatible with Prep & Match Arkansas Abrasives 619XF Page 122



852GF

852GF grob-fein / coarse-fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	10,0	10,0
852GF	FG			014	016



CF Diamond, schnelle Präparation mit finierter Präparationsgrenze | CF Diamond, fast preparation with fined preparation margin | Diamante CF, preparación rápida con límite de preparación



855 mittel / medium

855G grob / coarse

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	4,0	4,0
855	HP	806 104 196 524		009*	
855G	FG	806 314 196 534			016



Kronenpräparation, konische Hohlkehle, rund | Crown preparation, Tapered chamfer, Round end | Preparación de coronas, borde cónico redondeado



855LF fein / fine

855LC extra fein / extra fine
855LU ultra fein / ultra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	3,0
855LF	FG	806 314 195 514		009
855LC	FG	806 314 195 504		009
855LU	FG	806 314 195 494		009



Konische Hohlkehle, rund | Tapered chamfer, Round end | Borde cónico redondeado

**856**

mittel / medium

856H super grob / super coarse
856G grob / coarse
856F fein / fine



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5
			L mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
856	FG	806 314 194 524		012	014	016	018	021
856H	FG	806 314 194 544				016	018	
856G	FG	806 314 194 534		012	014	016	018	021
856F	FG	806 314 194 514		012	014	016	018	021



Kronenpräparation, konische Hohlkehle, rund, insbesondere Prämolaren/Molaren | Crown preparation, Tapered chamfer, Round end, especially premolars/molars | Preparación de coronas, borde cónico redondeado, sobre todo premolares/molares


**857**

mittel / medium

857G grob / coarse
857F fein / fine



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	10,0
857	FG	806 314 220 524		014
857G	FG	806 314 220 534		014
857F	FG	806 314 220 514		014

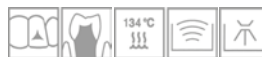

Stirn nicht diamantiert, zur Schonung des zervikalen Bereichs | Safe end, for gentle administration of the cervical area | Punta no diamantada, para la protección del area cervical

**875**

mittel / medium

875S ultra grob / ultra coarse
875H super grob / super coarse
875G grob / coarse

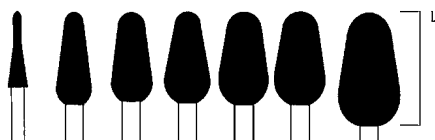


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	2	2	2	2	2	2
			L mm	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	15,0
875	HP	806 104 260 524			045*		060*			
875S	HP	806 104 263 554						065*		
875H	HP	806 104 260 544								080*
875G	HP	806 104 260 534				055*			070*	
	FG	806 314 588 534		025						

**897R**


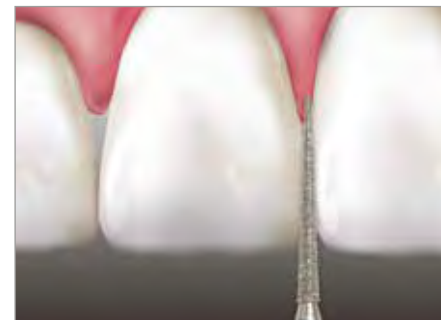
mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	6,0
897R	FG	806 314 584 524		018

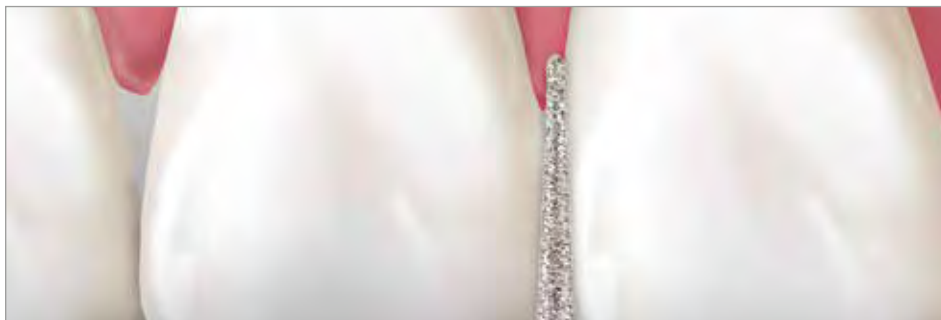

Konisch spitz, Nadel | Tapered Point, Needle | Cónica de punta, Aguja



858

mittel / medium

858H super grob / super coarse
858G grob / coarse
858F fein / fine
858C extra fein / extra fine

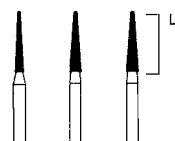


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5
				8,0	8,0	8,0
858	HP	806 104 165 524		014*		
	RA	806 204 165 524		014		
	FG s	806 313 165 524		014		
	FG	806 314 165 524	010	014	016	
858H	FG	806 314 165 544		014		
858G	FG	806 314 165 534		014	016	
858F	RA	806 204 165 514		014		
	FG	806 314 165 514	010	014	016	
858C	FG	806 314 165 504	010	014		



Separierer | Separators | Separador

859

mittel / medium

859H super grob / super coarse
859G grob / coarse
859F fein / fine
859C extra fein / extra fine
859U ultra fein / ultra fine

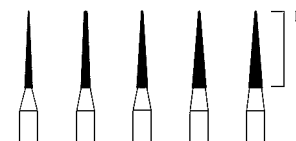


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5
				10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
859	HP	806 104 166 524	010*		014*			018*
	RA	806 204 166 524		012				018
	FG	806 314 166 524	010	012	014	016	018	
859H	FG	806 314 166 544						018
859G	FG	806 314 166 534			014	016	018	
859F	HP	806 104 166 514						018*
	RA	806 204 166 514			014			
	FG	806 314 166 514	010	012	014	016	018	
859C	FG	806 314 166 504		012	014	016	018	
859U	FG	806 314 166 494			014			



Separierer | Separators | Separador

859L

mittel / medium

859LF fein / fine
859LC extra fein / extra fine

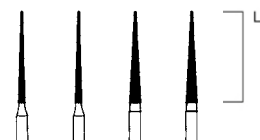


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5
				12,0	12,0	12,0	12,0
859L	RA	806 204 167 524	010				
	FG	806 314 167 524	010	012	014	016	
859LF	FG	806 314 167 514	010	012	014		
859LC	FG	806 314 167 504	010		014		



Separierer | Separators | Separador

859W

mittel / medium

859WH super grob / super coarse
859WF fein / fine



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5
				8,0
859W	FG	806 314 204 524	014	
859WH	FG	806 314 204 544	014	
859WF	FG	806 314 204 514	014	



Separierer | Separators | Separador

Einige der auf dieser Seite aufgeführten Artikel erhalten Sie zur Einmalverwendung gekennzeichnet. Diese Kennzeichnung gilt nur für die chirurgische Anwendung. Im Dentalbereich ist bei entsprechender Aufbereitung die Mehrfachverwendung möglich. Bitte beachten Sie hierfür die Hinweise zur Aufbereitung. Some of the items listed on this page are available marked for single use. This marking applies only to surgical use. In the dental sector, multiple use is possible with appropriate preparation. Please observe the instructions for preparation. Algunos de los artículos que se muestran en esta página son de uso único y están debidamente marcados. Este marcado se refiere únicamente a las aplicaciones quirúrgicas. En el ámbito de la odontología se pueden emplear varias veces con la preparación adecuada. Siga las instrucciones de preparación.

890F

fein / fine

890C
890U

extra fein / extra fine
ultra fein / ultra fine

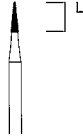


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
				L mm
				4,0
890F	FG	806 314 160 514		010
890C	FG	806 314 160 504		010
890U	FG	806 314 160 494		010



890LF

fein / fine

890LC

extra fein / extra fine

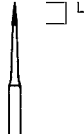


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
				L mm
				3,0
890LF	FG	806 314 699 514		008
890LC	FG	806 314 699 504		008



898

mittel / medium

898F
898C
898U

fein / fine
extra fein / extra fine
ultra fein / ultra fine

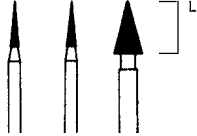




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	2	
				L mm	6,0	6,0	7,0
898	HP	806 104 161 524				037*	
	RA	806 204 161 524				037	
	FG	806 314 164 524		012			
898F	FG	806 314 164 514		012	014		
898C	FG	806 314 164 504			014		
898U	FG	806 314 164 494			014		



* 

Separierer | Separators | Separador

Flamme | Flame | Llama

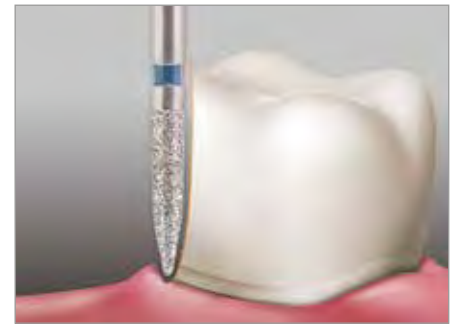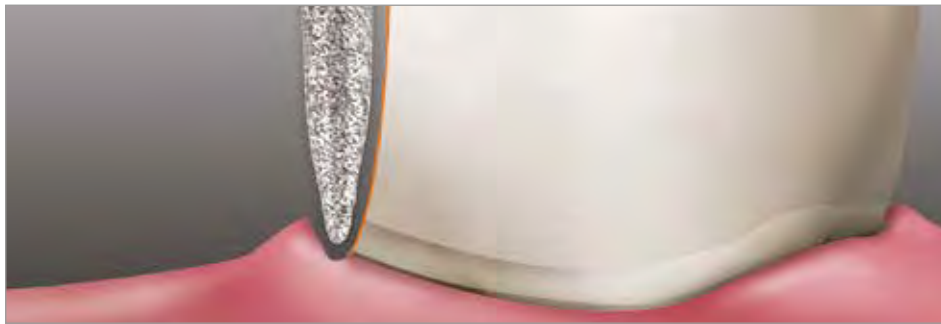

860 mittel / medium
860C extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5
860	HP	806 104 246 524	3,5	010*	
	RA	806 204 246 524		010	
	FG	806 314 246 524		010	
860C	FG	806 314 246 504		009	

*

861 mittel / medium
861G grob / coarse
861F fein / fine
861C extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5
861	HP	806 104 247 524	5,0	012*		016*	
	RA	806 204 247 524		012			
	FG	806 314 247 524		010	012	014	
861G	FG	806 314 247 534		010	012	014	
861F	RA	806 204 247 514			012		
	FG	806 314 247 514		010	012	014	
861C	FG	806 314 247 504			012		

*

862 mittel / medium
862H super grob / super coarse
862G grob / coarse
862F fein / fine
862C extra fein / extra fine
862U ultra fein / ultra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5	5
862	HP	806 104 249 524	8,0	010*	012*	014*	016*	018*	
	RA	806 204 249 524				014	016		
	FG	806 314 249 524		010	012	014	016		021
862H	FG	806 314 249 544			012	014	016		
862G	FG s	806 313 249 534			012				
	FG	806 314 249 534		010	012	014	016		021
862F	HP	806 104 249 514					016*		
	RA	806 204 249 514				012	016		
	FG	806 314 249 514		010	012	014	016		
862C	RA	806 204 249 504			012	014	016		
	FG	806 314 249 504		010	012	014	016		
862U	FG	806 314 249 494			012				

*

Tangentialpräparation | Feather preparation | Preparación tangencial

863 mittel / medium
863H super grob / super coarse
863G grob / coarse
863F fein / fine
863C extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	5	5	5	5	5
863	HP	806 104 250 524	10,0	012*		016*	018*	025*
	RA	806 204 250 524		012		016		
	FG	806 314 250 524		012	014	016	018	
863H	FG	806 314 250 544		012		016	018	
863G	FG	806 314 250 534		012	014	016	018	
863F	RA	806 204 250 514		012				
	FG	806 314 250 514		012	014	016	018	
863C	FG	806 314 250 504		012		016		

*

Tangentialpräparation | Tangential preparation | Preparación tangencial

**863L** mittel / medium

863LF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	12,0
863L	FG	806 314 251 524	014
863LF	FG	806 314 251 514	014



Tangentialpräparation | Tangential preparation | Preparación tangencial

**861KF** fein / fine


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	5,5
861KF	FG	806 314 255 514	012



Stirn nicht diamantiert, zur Schonung des zervikalen Bereichs |
 Safe end, for gentle administration of the cervical area | Punta
 no diamantada, para la protección del area cervical

**888** mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	8,0
888	FG	806 314 496 524	012

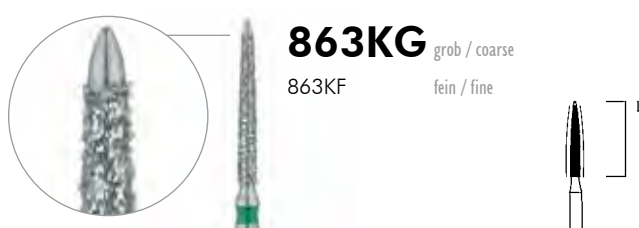**863KG** grob / coarse

863KF fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	10,0
863KG	FG	806 314 256 534	012
863KF	FG	806 314 256 514	012



Tangentialpräparation | Tangential preparation | Preparación tangencial

Stirn nicht diamantiert, zur Schonung des zervikalen Bereichs |
 Safe end, for gentle administration of the cervical area | Punta
 no diamantada, para la protección del area cervical

**889L** mittel / medium

889LG grob / coarse

889LF fein / fine

889LC extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
		L mm	3,5	4,0
889L	FG	806 314 540 524	009	010
889LG	FG	806 314 540 534	009	010
889LF	FG	806 314 540 514	009	010
889LC	FG	806 314 540 504	009	



Torpedo | Torpedo | Torpedo



866

mittel / medium





Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	5,0	5,0
866	FG	806 314 287 524		009	010






Kronenpräparation, parallele Hohlkehle, Torpedo | Crown preparation, Parallel chamfer, Torpedo | Preparación de coronas, borde paralelo, torpedo

867

mittel / medium
grob / coarse
fein / fine






Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	6,0	6,0	6,0
867	FG	806 314 288 524		009	010	012
867G	FG	806 314 288 534			010	012
867F	FG	806 314 288 514		009	010	012






Kronenpräparation, parallele Hohlkehle, Torpedo | Crown preparation, Parallel chamfer, Torpedo | Preparación de coronas, borde paralelo, torpedo

868

mittel / medium
868H super grob / super coarse
868G grob / coarse
868F fein / fine
868C extra fein / extra fine







Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5
			L mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
868	HP	806 104 289 524				012*	014*	
	FG	806 314 289 524			010	012	014	016
868H	FG	806 314 289 544				012	014	016
868G	FG	806 314 289 534			010	012	014	016
868F	FG	806 314 289 514		008	010	012	014	016
868C	FG	806 314 289 504				012	014	









Kronenpräparation, parallele Hohlkehle, Torpedo | Crown preparation, Parallel chamfer, Torpedo | Preparación de coronas, borde paralelo, torpedo

869

mittel / medium
869H super grob / super coarse
869G grob / coarse
869F fein / fine
869C extra fein / extra fine






Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5
			L mm	10,0	10,0	10,0	10,0
869	HP	806 104 290 524				014*	
	FG	806 314 290 524		010	012	014	
869H	FG	806 314 290 544				014	
869G	FG	806 314 290 534			012	014	016
869F	FG	806 314 290 514		010	012	014	016
869C	FG	806 314 290 504			012	014	









Kronenpräparation, parallele Hohlkehle, Torpedo | Crown preparation, Parallel chamfer, Torpedo | Preparación de coronas, borde paralelo, torpedo

869L

mittel / medium
869LF fein / fine



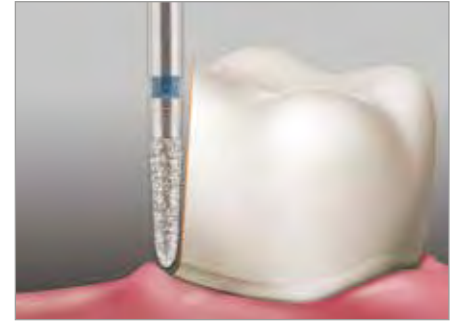
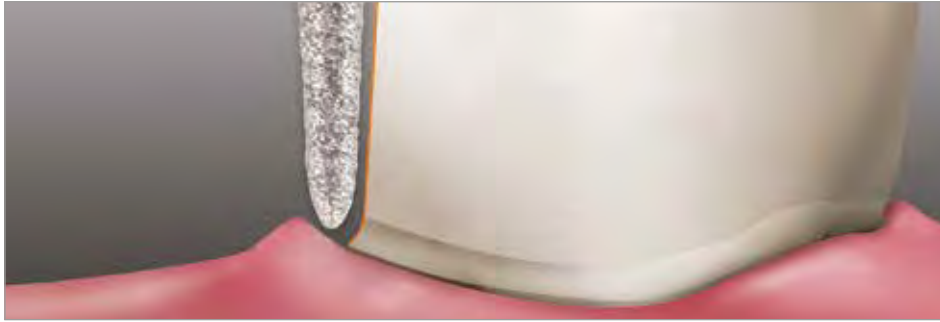

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	12,0
869L	FG	806 314 291 524		014
869LF	FG	806 314 291 514		014






Kronenpräparation, parallele Hohlkehle, Torpedo | Crown preparation, Parallel chamfer, Torpedo | Preparación de coronas, borde paralelo, torpedo

Torpedo, konisch | Torpedo, Tapered | Torpedo, cónico

**872**

mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	8,0
872	FG	806 314 223 524	012



Kronenpräparation, modifizierte Hohlkehle, Torpedo | Crown preparation, Modified chamfer, Torpedo | Preparación de coronas, borde modificado, torpedo

**873**

mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	10,5
873	FG	806 314 213 524	016



Kronenpräparation, modifizierte Hohlkehle, Torpedo | Crown preparation, Modified chamfer, Torpedo | Preparación de coronas, borde modificado, torpedo


**876F**

fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	5,0
876F	FG	806 314 296 514	012



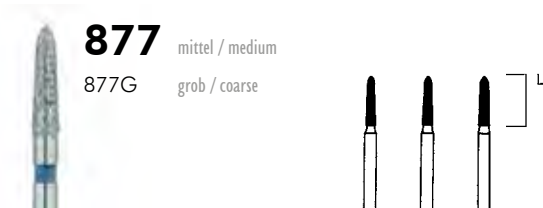Kronenpräparation, modifizierte Hohlkehle, Torpedo | Crown preparation, Modified chamfer, Torpedo | Preparación de coronas, borde modificado, torpedo

**877**

mittel / medium

877G grob / coarse

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5
		L mm	6,5	6,5	6,5
877	FG	806 314 297 524	012	014	016
877G	FG	806 314 297 534	012	014	016



Kronenpräparation, modifizierte Hohlkehle, Torpedo | Crown preparation, Modified chamfer, Torpedo | Preparación de coronas, borde modificado, torpedo

Compatible
with Prep & Match
Arkansas Abrasives
629XF
Page 122

**878**

mittel / medium

878H super grob / super coarse

878G grob / coarse

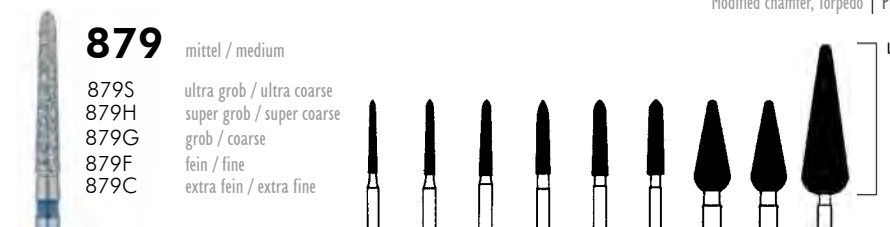
878F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5	5	5	5
		L mm	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
878	FG	806 314 298 524	012	014	016	018	021	023	023
878H	FG	806 314 298 544	012	014	016	018	021	023	023
878G	FG	806 314 298 534	010	012	014	016	018	021	023
878F	FG	806 314 298 514	012	014	016	018	021	023	023



Kronenpräparation, modifizierte Hohlkehle, Torpedo | Crown preparation, Modified chamfer, Torpedo | Preparación de coronas, borde modificado, torpedo

Compatible
with Prep & Match
Arkansas Abrasives
629XF
Page 122

**879**

mittel / medium

879S ultra grob / ultra coarse

879H super grob / super coarse

879G grob / coarse

879F fein / fine

879C extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5	5	5	2	2	1
		L mm	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	12,0	12,0	20,0
879	HP	806 104 266 524							047*		
	FG	806 314 299 524	012	014	016	018	021				
879S	HP	806 104 266 554							050*		
879H	HP	806 104 266 544							047*		060*
	FG	806 314 299 544			016	018	021				
879G	HP	806 104 266 534							047*		
	FG	806 314 299 534	012	014	016	018	021	023			
879F	FG	806 314 299 514	012	014	016						
879C	FG	806 314 299 504			016						



Kronenpräparation, modifizierte Hohlkehle, Torpedo | Crown preparation, Modified chamfer, Torpedo | Preparación de coronas, borde modificado, torpedo

Compatible
with Prep & Match
Arkansas Abrasives
629XF
Page 122

Spezialform | Special | Forma especial

893 mittel / medium
 893G grob / coarse
 893F fein / fine
 893C extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm 5,8
893	FG	806 314 507 524	023
893G	FG	806 314 507 534	023
893F	FG	806 314 507 514	023
893C	FG	806 314 507 504	023

Granate | Grenade | Granada

895 mittel / medium
 895F fein / fine
 895C extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm 3,5
895	FG	806 314 274 524	016
895F	FG	806 314 274 514	016
895C	FG	806 314 274 504	016

896F fein / fine
 896C extra fein / extra fine



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm 5,5
896F	FG	806 314 244 514	025
896C	FG	806 314 244 504	025

Okklusal-/Palatinalschleifer | Occlusal-/Palatal Grinder | Reducción de la oclusión

899 mittel / medium
 899G grob / coarse
 899F fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5
			L mm 6,5	7,0	7,0
899	FG	806 314 033 524	021	027	031
899G	FG	806 314 033 534		027	031
899F	FG	806 314 033 514		027	031

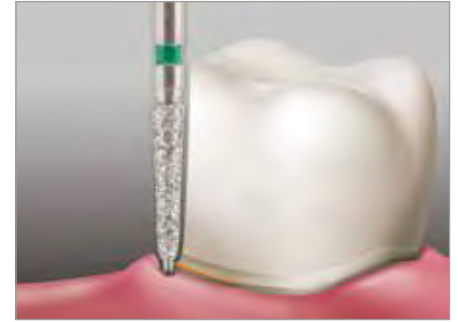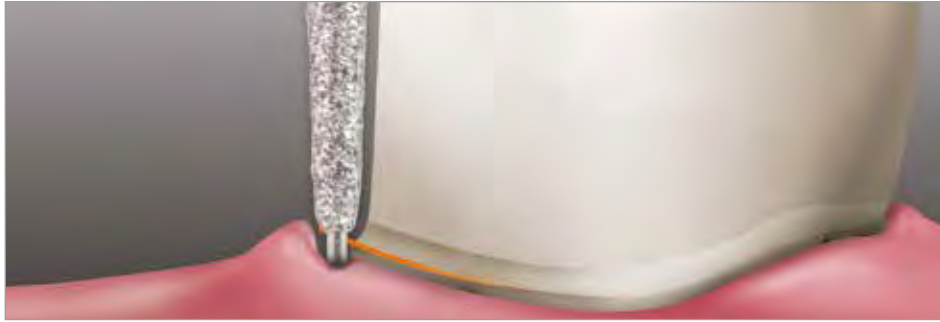PRÄPARATION MIT FÜHRUNGSSPITZE | PREPARATION WITH GUIDED TIP | PREPARACIÓN CON PUNTA DE GUÍA



- Definierte und kontrollierte zirkuläre Hohlkehlpriparation unter Führung des axialen Stiftes mit dem Instrument 508/509.

- Defined and controlled circular chamfer preparation under guidance of the axial pin with the instrument 508/509.

- Preparación definida y controlada del bisel circular guiada por medio de la punta axial del instrumento 508/509.



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	7,5	7,5
508G	FG	806 314 508 534		016	020
508F	FG	806 314 508 514		016	020



Konische Hohlkehle mit Führungsspitze | Tapered chamfer with guided tip |
Borde cónico con punta de guía



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	8,0	8,0
509G	FG	806 314 189 534		014	016
509F	FG	806 314 189 514		014	016



Parallele Hohlkehle mit Führungsspitze | Parallel chamfer with guided tip |
Borde paralelo con punta de guía

OKKLUSALE REDUKTION | OCCLUSAL REDUCTION | REDUCCIÓN DE OCLUSIÓN

Die „Occlusal Reduction Diamonds“ erlauben die Durchführung präziser okklusaler Reduktionen. Dank des einzigartigen, abgewinkelten Tiefenstopps wird ein genau definierter Abtrag ermöglicht. Damit sind die Instrumente besonders gut für die Präparation von Keramikronen geeignet. Die konischen Occlusal Reduction Diamonds verfügen über einen 8° Konus und eignen sich dadurch bestens für die Präparation von Veneers, Inlays und Olays. Die vertikale Orientierung sorgt für einen guten Zugang zu Fissuren und Grübchen. Zudem ist dank unterschiedlicher Tiefen der Arbeitsteile eine Anpassung an verschiedenste Restaurationsmaterialien möglich.

The “Occlusal Reduction Diamonds” allow precision occlusal reductions to be carried out. Thanks to the unique, angled depth stops, a precisely defined removal is made possible. Thereby, the instruments are especially suited for the preparation of ceramic crowns. The conical Occlusal Reduction Diamonds have an 8° cone and are therefore ideally suited for the preparation of veneers, inlays and overlays. The vertical orientation provides for good access to fissures and fine pits. In addition, thanks to the depth variations of the working parts, it is possible to make adjustments for various restoration materials.

El „Occlusal Reduction Diamonds“ permite la realización de reducciones oclusales precisas. Gracias al tope de profundidad acodado, único en su género, se hace posible un tallado definido con precisión. Los diamantes de reducción oclusal cónicos disponen de un cono de 8° y se adaptan a la perfección para la preparación de carillas, incrustaciones y aposiciones. Por este motivo, los instrumentos son idóneos particularmente para la preparación de coronas cerámicas. La orientación vertical garantiza un buen acceso a fisuras y fosetas. Además, los componentes de trabajo presentan profundidades diferentes lo que permite una adaptación a los materiales de restauración más diversos.

828

Top Seller!

Fig.	828W	828G	828O	828Y	828B	828R
Schaft / Shank	FG L/315	FG/314	FG/314	FG/314	FG/314	FG/314
Größe / Size	017	017	017	017	017	017
L mm	1,0	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4

Zylindrisch, Okklusale Reduktion im Molaren Bereich | Cylindrical, occlusal reduction in the molar region | Cilíndrico, reducción oclusal en la zona molar

828

New Size 009

Fig.	828W	828G	828O	828Y	828B	828R
Schaft / Shank	FG/315	FG/314	FG/314	FG/314	FG/314	FG/314
Größe / Size	009	009	009	009	009	009
L mm	1,0	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4

Zylindrisch, kleines Arbeitsteil, für schwer zugängliche Bereiche und kleinere Zähne | Cylindrical, micro working part for areas that are difficult to reach and small teeth | Cilíndrico, pequeña pieza de trabajo, para zonas de difícil acceso y dientes pequeños

828T

Fig.	828TW	828TG	828TO	828TY	828TB	828TR
Schaft / Shank	FG/314	FG/314	FG/314	FG/314	FG/314	FG/314
Größe / Size	017	017	017	017	017	017
L mm	1,0	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4

Konisch, 8° | Tapered 8° | Cónico 8°



2565M – Micro Occlusal Reduction Kit
auf Seite | on page | en la página 197




2565T – Tapered Occlusal Reduction Kit
auf Seite | on page | en la página 197




2565 – Occlusal Reduction Kit
auf Seite | on page | en la página 196

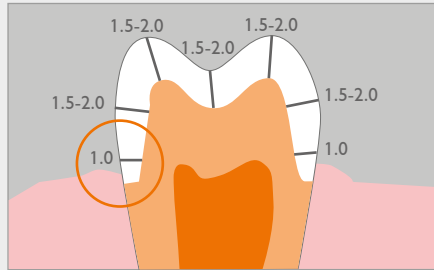Occlusal Reduction Diamonds



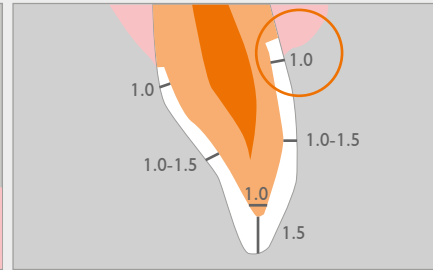Mindestpräparationstiefen für gerüstfreie Seitenzahnkronen
Minimum preparation depths for posterior crowns without frame
Profundidades mínimas de preparación para coronas posteriores sin estructura




Mindestpräparationstiefen für gerüstfreie Frontzahnkronen
Minimum preparation depths for anterior crowns without frame
Profundidades mínimas de preparación para coronas anteriores sin estructura

Die Anatomie der Occlusal Reduction Diamanten

The Anatomy of the Occlusal Reduction Bur

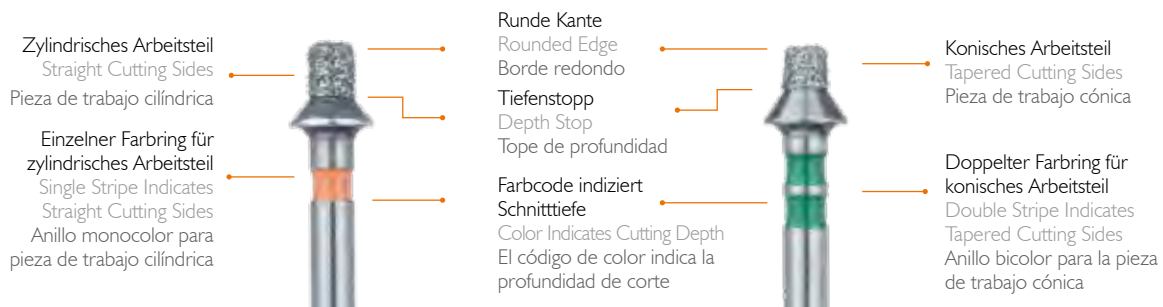La anatomía de los diamantes de reducción oclusal



OKKLUSALE REDUKTION

OCCLUSAL REDUCTION | REDUCCION OCLUSAL

Tiefe | Depth | Profundidad Anwendung | Indications | Indicación

- 1,0 mm **Oberkiefer Frontzahnbereich, lingual und axial, Monolithisches, opakes Zirkonoxid**
Maxillary anterior lingual and axial, Monolithic opaque Zirconia
Piezas frontales de la mandíbula superior, lingual y axial, circonio monolítico y opaco
- 1,5 mm **Monolithisches, opakes Zirkonoxid**
Monolithic opaque Zirconia
Circonio monolítico y opaco
- 1,8 mm **Monolithisches, transluzentes Zirkonoxid**
Monolithic translucent Zirconia
Circonio monolítico y translúcido
- 2,0 mm **e.max, Geschichtete Keramik, Monolithische Keramik, Inzisale Reduktion**
e.max, Layered porcelain, Monolithic porcelain, Incisal reduction
e.max, cerámica laminada, cerámica monolítica, reducción incisal
- 2,2 mm **Geschichtete Keramik, 0,7 mm Kern + 1,5 mm Veneer**
Layered Porcelain, 0,7 mm Core + 1,5 mm Veneer
Cerámica laminada, 0,7 mm núcleo + 1,5 mm carilla
- 2,4 mm **Geschichtete Keramik, Inzisale Reduktion**
Layered porcelain, Incisal reduction
Cerámica laminada, reducción incisal

DIAMANTEN FÜR ZIRKONOXID | DIAMONDS FOR ZIRCONIA | DIAMANTES PARA OXIDO DE CIRCONIO

- Bearbeiten von geHIPptem / gesinterterem Zirkonoxid
- Perfektes Verhältnis von natürlichen und synthetischen Diamanten für eine bessere Schneidleistung

- Processing of HIPped / sintered zirconia
- Perfekt balance of natural and synthetic diamonds for better cutting performance

- Procesamiento de óxido de circonio prensado isostáticamente / sinterizado
- Proporción perfecta de diamantes naturales y sintéticos para un mejor rendimiento de corte

852Z

852Z5
852Z4
852Z3
852Z2
852Z1

grob / coarse
mittel / medium
fein / fine
extra fein / extra fine
ultra fein / ultra fine

2°

L

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	10,0
852Z5	FG	806 314 199 532	024
852Z4	FG	806 314 199 522	024
852Z3	FG	806 314 199 512	024
852Z2	FG	806 314 199 502	024
852Z1	FG	806 314 199 492	024

881Z

881Z5
881Z4
881Z3
881Z2
881Z1

grob / coarse
mittel / medium
fein / fine
extra fein / extra fine
ultra fein / ultra fine

0°

L

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	9,5
881Z5	FG	806 314 141 532	017
881Z4	FG	806 314 141 522	017
881Z3	FG	806 314 141 512	017
881Z2	FG	806 314 141 502	017
881Z1	FG	806 314 141 492	017

Z0850

mittel / medium
Z850F
fein / fine

L

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	8,0
Z0850	FG	806 314 198 324	018
Z850F	FG	806 314 198 314	018

Z0863

mittel / medium
Z863F
fein / fine

L

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	10,0
Z0863	FG	806 314 250 324	012
Z863F	FG	806 314 250 314	012

Z0833

mittel / medium
Z833F
fein / fine

L

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	4,2
Z0833	FG	806 314 277 324	023
Z833F	FG	806 314 277 314	023

Z801L

mittel / medium

L

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
Z801L	FG	806 314 697 324	014

Z0801

mittel / medium

L

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
Z0801	FG	806 314 001 324	010	021

Z838L

mittel / medium

L

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	6,0
Z838L	FG	806 314 140 526	014

Kronentrenner | Crown cutter | Fresa para separar coronas

Z0818

mittel / medium
Z818G
grob / coarse

NEW

L

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	2	2	2	2	2	2
		L mm	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6
Z818G	FG	806 314 041 334	050		060		080	
Z0818	FG	806 314 041 324		050		060		080



5901 – Zirkon Diamond Kit
auf Seite | on page | en la página 216



ZCS24 – Zirconia Crown
Separators Kit
auf Seite | on page | en la página 213

Für das Auftrennen von Zirkonkronen und Keramikrestaurationen geeignet | For cutting zirconium crowns and ceramic restorations | Apto para el corte de coronas de circonio y restauraciones de cerámica

CE-DIAMANTEN | CE DIAMONDS | DIAMANTE CE

CE-Diamantinstrumente „COOL & EFFICIENT“ zeichnen sich vor allem durch eine optimierte Schleifkraft bei gleichzeitig kühlem Schleifen aus. Bewirkt werden diese positiven Eigenschaften durch eine exakt berechnete Linksdrallnut, die für den Transport des Abriebs sowie die optimale Zufuhr der Kühlflüssigkeit sorgt.

CE diamond instruments „COOL & EFFICIENT“ provide for optimum grinding performance yet remain cool during grinding. These positive properties are due to a precisely calculated, anti-clockwise groove which transports the debris away from the site and supplies coolant optimally.

Los instrumentos diamantados CE "COOL & EFFICIENT" se caracterizan por su óptima fuerza abrasiva, manteniendo al mismo tiempo una temperatura de fricción baja. Estas características positivas se deben a la ranura, exactamente calculada que corre en sentido espiral con giro izquierdo y que facilita la expulsión del polvo de abrasión y el acceso óptimo del líquido refrigerante.

808D mittel / medium

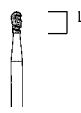



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	2,6
808D	FG	806 314 240 524		016



808LD mittel / medium

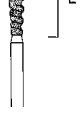



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	5,0
808LD	FG	806 314 241 524		021



837D mittel / medium

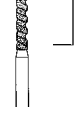



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	7,0
837D	FG	806 314 115 524		014



837LD mittel / medium

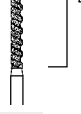



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	9,5
837LD	FG	806 314 115 524		016



847D mittel / medium




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	9,5
847D	FG	806 314 177 524		016



848D mittel / medium




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	10,0
848D	FG	806 314 178 524		016



MIKRO-DIAMANTEN | MICRO-DIAMONDS | MICRODIAMANTES

- Maximaler Erhalt der gesunden Zahnschubstanz
- Sehr gute Sicht auf das Arbeitsfeld
- Definierte Abtragsleistung
- Breites Einsatzfeld durch Formenvielfalt
- Besonders gut geeignet in Kombination mit der Verwendung von Kariesdetektor und Interdental-kamera

- Maximum preservation of sound tooth substance
- Perfect optical control of the working area
- Defined abrasive properties
- Vast spectrum of operational possibilities due to a variety of shapes
- Especially well suited in combination with the use of tooth decay detector and interdental camera

- Mxima conservacin de la sustancia dental sana
- Visibilidad excelente sobre el campo de trabajo
- Tallado definido
- Amplio campo de aplicacin por la diversidad de formas
- Se adaptan particularmente bien si se combinan con el uso del detector de caries y de la cmara interdental



M801 mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	1,1
M801	FG	806 314 697 524		007




M833 mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	2,1
M833	FG	806 314 277 524		009




M838 mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	2,1
M838	FG	806 314 137 524		007




M880 mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	3,6
M880	FG	806 314 138 524		007




M889 mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	2,1
M889	FG	806 314 194 524		007




M890 mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	3,6
M890	FG	806 314 540 524		008




M895 mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	2,1
M895	FG	806 314 271 524		007




M896 mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	3,6
M896	FG	806 314 295 524		007



SPEZIALINSTRUMENTE FÜR WEICHBLEIBENDE UNTERFÜTTERUNGSMATERIALIEN | SPECIAL INSTRUMENTS FOR SOFT RELINE MATERIALS | INSTRUMENTOS ESPECIALES PARA EL MATERIAL DE REBASE QUE QUEDA BLANDO

Spezialinstrumente für die wirkungsvolle Bearbeitung weichbleibender Unterfütterungsmaterialien. Reduzierte Wärmeentwicklung bei der Bearbeitung aufgrund der großen Oberfläche der Arbeitsteile und der hohlen Form.

Special instruments for the effective processing of soft relining materials. Reduced heat generation during machining due to the large surface area of the working parts and the hollow shape.

Instrumentos especiales para trabajar de forma eficiente el material de rebase que queda blando. Reducción del calor que se genera en el tratamiento debido a la gran superficie de las piezas de trabajo y su forma cóncava.

405S ultra grob / ultra coarse

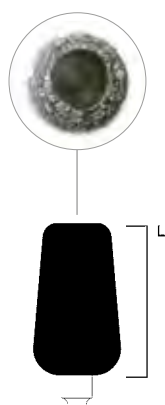



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1
			L mm	18,0	20,0
405S	HP	806 104 490 554		090	115



881PS ultra grob / ultra coarse

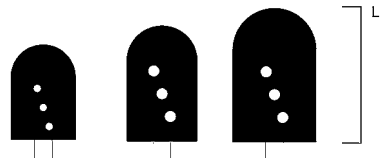



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1	1
			L mm	12,5	15,5	18,5
881PS	HP	806 104 524 554		085	095	115



Spiralbohrer, diamantiert | Twist drill, diamond coated | Broca espiral, diamantada

D203 mittel / medium

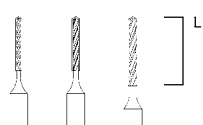



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2	2
			L mm	7,0	7,0	9,0
D203	HP	806 104 417 524		008	010	012



Spiralbohrer, diamantiert | Twist drill, diamond coated | Broca espiral, diamantada

Anwendungsempfehlung: Diamantscheiben

Application guide: Diamond discs | Recomendación para la aplicación: discos de diamante

Fig.-Nr. Fig.-No. Fig.-No.	L	Ø	Handling Handling Manejo	Kunststoff abtrennen Plastic cutting Retirar plástico	Kunststoff separieren Plastic separation Separar plástico	Keramik abtrennen Ceramic cutting Retirar cerámica	Keramik separieren Ceramic separation Separar cerámica	Zirkonoxid zirconium oxide óxido de circonio	Gips plaster yeso	Chirurgie Cirugía
910D	0,5	190 220	starr stiff rígido			✓		✓		
911D	0,5	220	starr stiff rígido	✓		✓		✓		
	0,45	220						✓		
915D	0,25	190 220	super flexibel super flexible super flexible		✓		✓			
	0,2	190 220								
	0,15	190 220								
915DM	0,25	220	super flexibel super flexible super flexible							✓
916D	0,5	190 220	starr stiff rígido			✓				
918D	0,5	220	starr stiff rígido	✓		✓				
921D	0,2	220	super flexibel super flexible super flexible		✓		✓			
	0,15	190 220								
930D	0,3	220	flexibel flexible flexible			✓		✓		
	0,25	190 220			✓		✓			
932D	0,3	220	flexibel flexible flexible	✓		✓	✓	✓		
	0,25	190 220			✓			✓		
935D	0,3	220	flexibel flexible flexible	✓	✓	✓	✓	✓		
	0,3	190 220								
940F	0,2	180 200 220	super flexibel super flexible super flexible		✓		✓		✓	
943DC	0,15	080 100	super flexibel super flexible super flexible		✓		✓			
947D	0,2	190 220	super flexibel super flexible super flexible		✓		✓			
	0,15	220								
401D	0,15	220	flexibel flexible flexible		✓		✓			
365D	0,3	300	flexibel flexible flexible						✓	
	0,35	450								
S941G	0,5	220	flexibel flexible flexible				✓			
S935C	0,2	220	super flexibel super flexible super flexible				✓			
S936C	0,2	200	super flexibel super flexible super flexible				✓			
S937C	0,2	200	super flexibel super flexible super flexible				✓			

DIAMANTSCHLEIBEN | DIAMOND DISCS | DISCOS DE DIAMANTE

Ob Kunststoff, Keramik, Zirkonoxid oder Gips – das umfassende Diamantscheibensortiment von MEISINGER hält für jedes Material die passenden Scheiben bereit. Gemeinsam haben sie alle ihren Hang zu Perfektion: Eine präzise Diamantbeschichtung, sehr hohe Standzeiten und vibrationsfreies Arbeiten zeichnen die Diamantscheiben aus. Aufgrund ihrer besonders dünnen Ausführung eignen sie sich zum präzisen Abtrennen und Separieren.

Whether plastic, ceramic, zirconium oxide or gypsum - MEISINGER's comprehensive range of diamond discs has the right discs for every material. They all have in common their penchant for perfection: Precise diamond coating, very long service life and vibration-free operation are the outstanding features of the diamond discs. Due to their particularly thin design, they are suitable for precise cutting and separation.

Ya sea de plástico, de cerámica, de circonio o de yeso, la amplia gama de discos de diamante de MEISINGER tiene los discos óptimos para cada material. Todos juntos resultan perfectos: Un revestimiento de diamante preciso, tiempos de duración altos y un trabajo sin vibración distinguen a estos discos de diamante. Gracias a su grosor particularmente fino, son ideales para una retirada y separación precisas.

943DC extra fein / extra fine

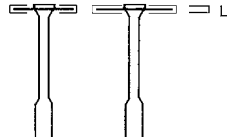


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1
			L mm	0,15	0,15
943DC	HP	806 104 361 504		080	100
943DC	RA	806 206 361 504		080	100



365D fein / fine



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1
			L mm	0,3	0,35
365D	HP	806 104 333 514		300	450



Die folgenden unmontierten Diamantscheiben mit Träger 305RF, Größe 50 verwenden. Weitere Informationen auf Seite 148

Use the following unmounted diamond discs with Mandrel 305RF, Size 50. Information on page 148

Utilizar los siguientes discos de diamante sin montar con soporte 305RF, tamaño 50. Más información en la página 148

916D mittel / medium

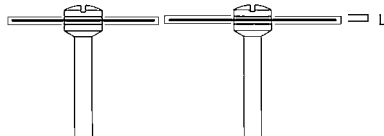


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1
			L mm	0,5	0,5
916D	HP	806 104 327 524		190	220
	unmounted	806 900 327 524		190	220



918D mittel / medium

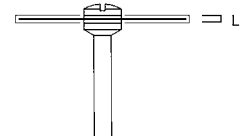


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1
			L mm	0,5
918D	HP	806 104 335 524		220
	unmounted	806 900 335 524		220



Die folgenden unmontierten Diamantscheiben mit Träger 303RF, Größe 50 verwenden.
Weitere Informationen auf Seite 148

Use the following unmounted diamond discs with Mandrel 303RF, Size 50
Information on page 148

Utilizar los siguientes discos de diamante sin montar con soporte 303RF, tamaño 50.
Más información en la página 148

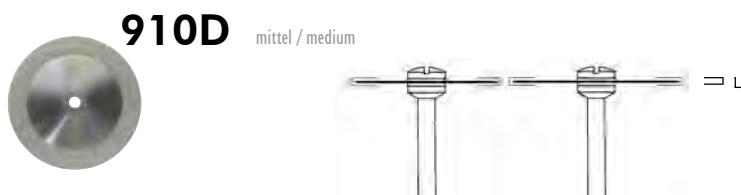


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1
			L mm	0,5	0,5
910D	HP	806 104 321 524		190	220
	unmounted	806 900 321 524		190	220

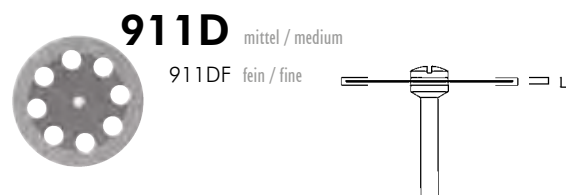


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1
			L mm	0,5
911D	HP	806 104 332 524		220
	unmounted	806 900 332 524		220
			L mm	0,45
911DF	HP	806 104 332 514		220
	unmounted	806 900 332 514		220

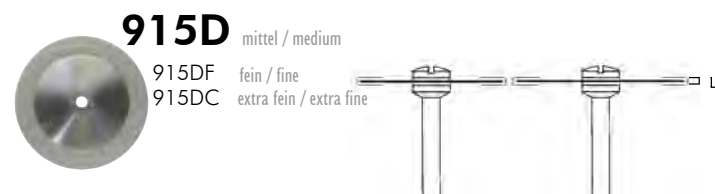


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1
			L mm	0,25	0,25
915D	HP	806 104 355 524		190	220
	unmounted	806 900 355 524		190	220
			L mm	0,2	0,2
915DF	HP	806 104 355 514		190	220
			L mm	0,15	0,15
915DC	HP	806 104 355 504		190	220



Super flexibel | Super flexible | Super flexible



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1
			L mm	0,25
915DM	HP	806 104 35M 524		220
	unmounted	806 900 35M 524		220



Super flexibel | Super flexible | Super flexible

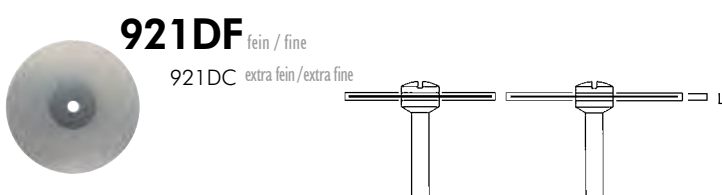


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1
			L mm		0,2
921DF	HP	806 104 358 514			220
	unmounted	806 900 358 514			220
			L mm	0,15	0,15
921DC	HP	806 104 358 504		190	220
	unmounted	806 900 358 504		190	220



Super flexibel | Super flexible | Super flexible

930D

mittel / medium

930DF

fein / fine

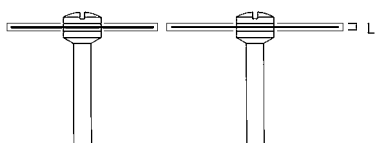


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1
			L mm	0,3	0,3
930D	HP	806 104 345 524			220
	unmounted	806 900 345 524			220
			L mm	0,25	0,25
930DF	HP	806 104 345 514		190	220
	unmounted	806 900 345 514		190	220



Flexibel | Flexible | Flexible

932D

mittel / medium

932DF

fein / fine

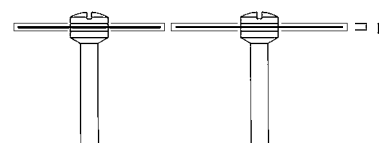


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1
			L mm	0,3	0,3
932D	HP	806 104 350 524			220
	unmounted	806 900 350 524			220
			L mm	0,25	0,25
932DF	HP	806 104 350 514		190	220
	unmounted	806 900 350 514		190	220



Flexibel | Flexible | Flexible

935D

mittel / medium

935DF

fein / fine

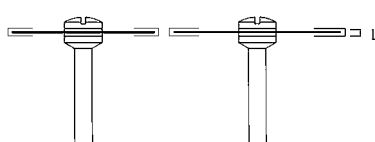


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1
			L mm	0,3	0,3
935D	HP	806 104 340 524			220
	unmounted	806 900 340 524			220
935DF	HP	806 104 340 514		190	220
	unmounted	806 900 340 514		190	220



Flexibel | Flexible | Flexible

947DF

fein / fine

947DC

extra fein / extra fine

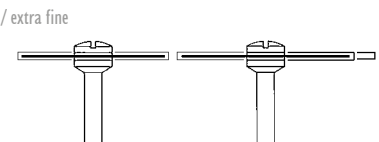


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1
			L mm	0,2	0,2
947DF	HP	806 104 389 514		190	220
	unmounted	806 900 389 514		190	220
			L mm		0,15
947DC	HP	806 104 389 504			220
	unmounted	806 900 389 504			220



Super flexibel | Super flexible | Super flexible

940F

fein / fine

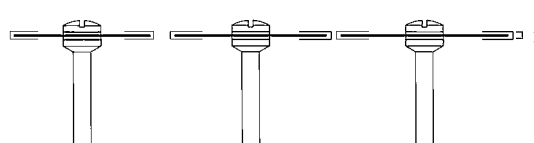


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1	1
			L mm	0,2	0,2	0,2
940F	HP	806 104 377 514		180	200	220
	unmounted	806 900 377 514		180	200	



Super flexibel | Super flexible | Super flexible

401DF

fein / fine

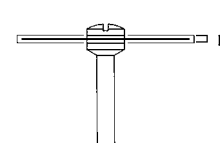


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1
			L mm	0,15
401DF	HP	806 104 400 514		220
	unmounted	806 900 400 514		220



Super flexibel | Super flexible | Super flexible

SINTERDIAMANTEN | SINTERED DIAMONDS | ABRASIVOS MACIZOS DE DIAMANTE

MEISINGER Sinterdiamanten zeichnen sich durch ihre extrem hohe Lebensdauer und Formbeständigkeit sowie hervorragende Schleifeigenschaften aus. Ihre Arbeitsteile aus Bronze enthalten in konzentrierter und homogener Verteilung ausgewählte und hochwertige Diamantkörner.

MEISINGER sintered diamonds are characterized by their extremely long endurance and dimensional stability as well as excellent abrasive qualities. The working part consists of a concentrated and homogeneous combination of exclusively selected, top quality diamond grains sintered and bound in bronze.

Los diamantes macizos de MEISINGER se distinguen por su alta duración de vida, poco desgaste en sus superficies y su excelente rendimiento de trabajo. Sus partes activas están compuestas de granos de diamante seleccionados de alta calidad en una masa concentrada y homogénea sinterizada con una ligazón de bronce.

S801 mittel / medium




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	2
S801	HP	807 104 001 524	021



S805 mittel / medium




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	2
S805	HP	807 104 010 524	018



S807 mittel / medium




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	2
S807	HP	807 104 225 524	029



S818 mittel / medium




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	2
S818	HP	807 104 040 524	080



S837 mittel / medium
S837G grob / coarse

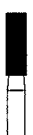



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	2	2
S837	HP	807 104 113 524	027	050
S837G	HP	807 104 113 534	050	



S838 mittel / medium




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	2	2
S838	HP	807 104 155 524	021	031



S847 mittel / medium




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	2
S847	HP	807 104 172 524	027



S850 mittel / medium





Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	2
S850	HP	807 104 194 524	031



S852 mittel / medium




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	2	2
S852	HP	807 104 159 524	031	050

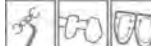

S861 mittel / medium




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	2
S861	HP	807 104 245 524	016



S862 mittel / medium

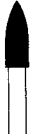



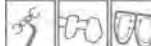
Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	2
S862	HP	807 104 284 524	031



S879 mittel / medium
S879G grob / coarse




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	2
S879	HP	807 104 266 524	050
S879G	HP	807 104 266 534	050



SINTERDIAMANTSCHLEIBEN | SINTERED DIAMOND DISCS | DISCOS MACIZOS DE DIAMANTE

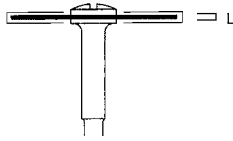
S941G grob / coarse

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	1
	L mm		0,5
S941G	HP	807 104 345 534	220

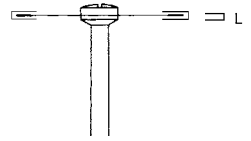
**S935C** extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	1
	L mm		0,2
S935C	HP	807 104 395 504	220



Duroflex, speziell zum Separieren von Keramik geeignet, ohne Verfärbungen zu verursachen | Duroflex, specifically for the separation of ceramics, without causing discoloration | Duroflex, especialmente para separar cerámica sin peligro de descoloramiento

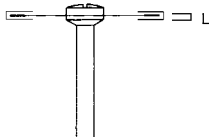
S936C extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	1
	L mm		0,2
S936C	HP	807 104 394 504	200



Duroflex - geschlitzt, speziell zum Separieren von Keramik geeignet, ohne Verfärbungen zu verursachen | Duroflex - split, specifically for the separation of ceramics, without causing discoloration | Duroflex - rajado, especialmente para separar porcelana sin peligro de descoloramiento

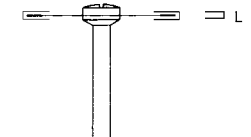
S937C extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	1
	L mm		0,2
S937C	HP	807 104 396 504	200



Duroflex - geschlitzt, speziell zum Separieren von Keramik geeignet, ohne Verfärbungen zu verursachen | Duroflex - split, specifically for the separation of ceramics, without causing discoloration | Duroflex - rajado, especialmente para separar cerámica sin peligro de descoloramiento

ZURICHTSTEINE | DRESSING STONES | PIEDRAS PARA AFILAR

529S

100 x 25 x 15 mm

Ref.-Nr. / Ref.-No. 635 000 600 523 000



1

529D

75 x 25 x 8 mm

Ref.-Nr. / Ref.-No. 635 000 600 524 000



1

Für das problemlose und rasche Reinigen verschmierter Diamantinstrumenten und Sinterdiamanten, dadurch bessere Schleifleistung (Reinigungsstein vor der Anwendung gut anfeuchten)

Designed for fast and easy cleaning of diamond instruments and Sintered diamonds for improved performance (cleaning stone to be moistened thoroughly before use)

Para la limpieza rápida y segura de las puntas diamantadas y diamantes sinterizados embotadas, por lo tanto más eficaz en el tallado (piedra de limpieza debe ser bien mojada antes de usarla)

Hartmetallinstrumente

Tungsten Carbide Instruments | Instrumentos de Carburo Tungsteno

MEISINGER Hartmetallinstrumente überzeugen durch ihre besonders stabile und funktionsgerechte Konstruktion, ihre präzise, schnittfreundige Verzahnung für optimiertes Arbeiten, herausragende Leistungen bei langer Lebensdauer und die optimale Rundlaufgenauigkeit. Die Instrumente werden aus hochverdichtetem Feinkorn-Hartmetall gefertigt.

MEISINGER tungsten carbide instruments impress with their particularly stable and functional design, their precise, fast cutting toothing for optimized work, outstanding performance with a long service life and optimal concentricity. The instruments are made of high-density fine-grain carbide.

Los instrumentos de carburo tungsteno MEISINGER se destacan por su construcción sólida y su funcionalidad además por sus filos cortantes de precisión y su rendimiento sobresaliente junto con una larga vida así como su óptima concentricidad. La parte activa es de carburo tungsteno de granulado fino, de alta condensidad y de dimensiones prácticas.



Standardverzahnung
Medium toothing
mediano Dentado



Querhiebverzahnung, Standard
Cross Cut, Medium
Dentado Transversal, Medio



Kreuzverzahnung
Cross cut
Dentado cruzado



Diamantverzahnung
Diamond Cut
Dentado de diamante



Finierer Verzahnung
Finisher toothing
Dentado de acabado



Finierer mit Drall Verzahnung
Finisher with twist toothing
Dentado de acabado con torsión

**SPEZIALINSTRUMENTE ZUM TRENNEN VON
KRONEN UND BRÜCKEN**

SPECIAL INSTRUMENTS FOR METAL CUTTING AND
CROWN REMOVAL
INSTRUMENTOS ESPECIALES PARA
SEPARACIÓN DE CORONAS Y PUENTES

54-56

**ZIRCON CUT DIAMONDS
ZIRCON CUT DIAMONDS
ZIRCON CUT DIAMONDS**

57

**SPEZIALINSTRUMENTE ZUM ENTFERNEN
VON AMALGAMFÜLLUNGEN**
SPECIAL INSTRUMENTS FOR REMOVING AMALGAM
FILLINGS
INSTRUMENTOS ESPECIALES PARA
REMOCIÓN DE OBTURACIONES VIEJAS

58

**HARTMETALLBOHRER
TUNGSTEN CARBIDE BURS
FRESAS DE CARBURO**

58-65



Rund
Round
Redonda

58-59



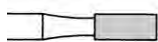
Umgekehrter Kegel
Inverted Cone
Cono invertido

60



Birne
Pear
Pera

60




Zylinder
Cylinder
Cilíndrico

61



Zylinder, rund
Cylinder, Round End
Cilíndrico con borde redondeado

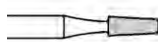62



Konisch, flach
Tapered, Flat End
Cónica

63



Konisch, rund
Tapered, Round End
Cónico con borde redondeado

64



Konisch, spitz
Tapered, Pointed
Cónica con punto

65

**TWIST FINIERER
TWIST FINISHER
TWIST FINISHER**

66-67

**HARTMETALLFINIERER
TUNGSTEN CARBIDE FINISHING BURS
FRESAS PARA ACABAR DE CARBURO**

68-71



Rund
Round
Redonda

68



Birne
Pear
Pera

68



Knospe
Bud
Capullo

68



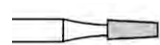
Ei
Egg
Huevo

69




Zylinder mit abgerundeter Kante
Cylinder, Round Edge
Cilíndrico de punta plana

69



Konisch, flach
Tapered, Flat End
Cónica

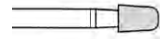69



Konisch mit abgerundeter Kante
Tapered, Round Edge
Cónico con borde redondeado

69



Konisch, rund
Tapered, Round End
Cónico con borde redondeado

70



Konisch, spitz
Tapered, Pointed "ET Series"
Cónica de punta

70



Flamme
Flame
Llama

71



Torpedo
Torpedo
Torpedo

71



Torpedo, konisch
Torpedo, Tapered
Torpedo, cónico

71

ANWENDUNGS EMPFEHLUNGEN

APPLICATION-GUIDELINES

RECOMENDACIÓN PARA LA APLICACIÓN

72-73

HARTMETALLFRÄSER

TUNGSTEN CARBIDE CUTTERS

FRESAS DE CARBURO PARA LABORATORIO

74-81

BLACK COBRA HARTMETALLFRÄSER

BLACK COBRA TUNGSTEN CARBIDE CUTTERS

BLACK COBRA FRESAS DE CARBURO PARA LABORATORIO

82

SPEZIALINSTRUMENTE ZUM TRENNEN VON KRONEN UND BRÜCKEN | SPECIAL INSTRUMENTS FOR METAL CUTTING AND CROWN REMOVAL | INSTRUMENTOS ESPECIALES PARA SEPARACIÓN DE CORONAS Y PUENTES



Kronentrenner sind heute eines der wichtigsten Instrumente in der Zahnarztpraxis. Dabei stellt die Vielzahl unterschiedlicher Restaurationen eine ebenso große Vielzahl unterschiedlicher Anforderungen an die Kronentrennung. Ein schnelles, problemloses und nicht zuletzt auch wirtschaftliches Auftrennen von Kronen und Brücken erfordert hochqualitative Instrumente, die speziell an die Eigenschaften der Restaurationen angepasst sind, um die Entfernung besonders effizient zu gestalten. Daher bietet MEISINGER für jedes Material den optimalen Kronentrenner. Alle Instrumente sind Spezialisten auf ihrem jeweiligen Anwendungsgebiet und überzeugen mit hoher Stabilität, bester Schneidleistung und Langlebigkeit.

Crown cutters are one of the most important instruments in the dental practice today. The variety of different restorative materials offers an equally wide variety of different requirements for the crown cutting. A quick, easy and, not least, economic separation of crowns and bridges requires high-quality instruments that are specially adapted to the properties of the restorative materials in order to make removal particularly efficient. Therefore, MEISINGER offers the optimum crown cutter for every material. All instruments are specialists in their respective field of application and convince with high stability, best cutting performance and longevity.

Hoy en día, los extractores de corona son uno de los instrumentos más importantes en odontología. La gran variedad de materiales de restauración supone también una gran variedad de requisitos a la hora de extraer coronas. Una separación de puente y corona rápida y sin dificultades, al tiempo que rentable, requiere instrumentos de alta calidad, que se hayan adaptado especialmente a las propiedades de los materiales de restauración, para que la retirada sea lo más eficiente posible. Por eso, MEISINGER ofrece un extractor óptimo para cada material. Todos los instrumentos son específicos para su ámbito de aplicación correspondiente y convencer gracias a su alta estabilidad, magnífica capacidad de corte y larga vida útil.

Anwendungshinweise:

- Bearbeitungswinkel von etwa 45°
- Optimale Drehzahl von etwa 160.000 U/min.
- Einsatz im roten Winkelstück mit geringem Anpressdruck

Instructions for use:

- Cutting angle of about 45°
- Optimum speed of about 160.000 rpm
- Use with the red contra-angle with low contact pressure

Instrucciones de uso:

- Ángulo de trabajo de unos 45°
- Revoluciones óptimas de 160 000 U/min.
- Uso en el contraángulo rojo con poca presión de aplicación

Kronentrenner mit Kreuzverzahnung

MATERIALIEN:

- Weiche Edelmetalllegierungen

Crown Cutters with X-Cut

MATERIALS:

- Soft precious metal alloys

Separador de coronas con dentado cruzado

MATERIALES:

- Aleaciones de materiales nobles blandas

HM 21RX




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	4,1	4,1
HM 21RX	FG	500 314 137 019		010	012



HM 21CX




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	4,1	4,1
HM 21CX	FG	500 314 107 019		010	012



HM 23RX




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	4,1
HM 23RX	FG	500 314 194 019		012



HM 23CX




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	4,1	4,1
HM 23CX	FG	500 314 168 019		010	012



HM G21RX




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	4,1
			US-No.	1558MX
HM G21RX	FG	504 314 137 019		012



HM G23RX




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	4,1
			US-No.	1701MX
HM G23RX	FG	504 314 194 019		012



Kronentrenner mit Querhiebverzahnung**MATERIALIEN:**

- Harte Edelmetall- und NEM-Legierungen

Crown Cutters with Cross Cut**MATERIALS:**

- Hard precious metal and non-precious metal alloys

Separador de coronas con dentado en corte transversal**MATERIALES:**

- Aleaciones de materiales nobles y no nobles más duras

HM 17




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
		L mm	1,7	1,7
		US-No.	1931	1932
HM 17	FG	504 314 237 008	010	012



HM 18CR

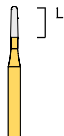



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
		L mm	4,1	
HM 18CR	FG	500 314 196 008	010	



HM 36R

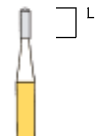



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
		L mm	4,0	
		US-No.	1958	
HM 36R	FG	504 314 139 008	012	
	FG XL	504 316 139 008	012	



HM 31C




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
		L mm	4,1	
HM 31C	FG	500 314 139 015	012	



HM 31CL

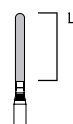



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
		L mm	9,0	
HM 31CL	FG	500 314 141 015	012	



HM 33C




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
		L mm	4,1	
HM 33C	FG	500 314 194 015	012	



HM G34RS




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
		L mm	2,0	
HM G34RS	FG	504 314 138 008	012	



HM G35RS

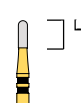



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
		L mm	3,6	
HM G35RS	FG	500 314 139 006	012	



HM G37RS

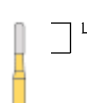



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
		L mm	4,1	
HM G37RS	FG	504 314 137 008	012	



Kronentrenner mit Diamantverzahnung

MATERIALIEN:

- Besonders harte Metalle, NEM-Legierungen und Verblendkeramik

Crown Cutters with Diamond Cut

MATERIALS:

- Especially hard metals, non-precious metal alloys and veneering ceramic

Separador de coronas con dentado diamantado

MATERIALES:

- Materiales particularmente duros, aleaciones de materiales no nobles y recubrimiento cerámico



HM 4C

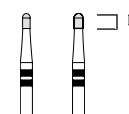


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
			L mm	2
HM 4C	FG	500 314 138 019	010	012




HM 4CL

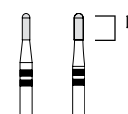


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
			L mm	3,5
HM 4CL	FG	500 314 139 019	010	012




HM 4CXL

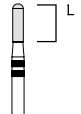


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
			L mm	5
HM 4CXL	FG	500 314 140 019	014	




HM 4CXXL

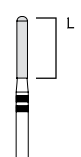


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
			L mm	8,1
HM 4CXXL	FG	500 314 141 019	014	




HM 7RX

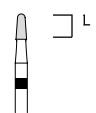


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
			L mm	3,4
HM 7RX	FG	500 314 194 019	014	



Kein
Instrumentenwechsel
beim Auftrennen von
Verblendkeramik
/ No change of instruments
while cutting the veneering
ceramic /
No hace falta cambiar de
instrumento al separar el
recubrimiento
cerámico



B21R



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
			L mm	4,1
				US-No. 1158
B21R	FG	507 314 137 006	012	



Diamant Kronentrenner

MATERIALIEN:

- Extrem harte Vollkeramiken, Zirkon

Diamond Crown Cutters

MATERIALS:

- Extreme hard monolithic ceramic, zirconia

Separador de coronas de diamante

MATERIALES:

- Cerámica sin metal muy dura, circonio



Z838L mittel / medium

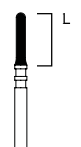


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
			L mm	6,0
Z838L	FG	806 314 140 526	014	




B850

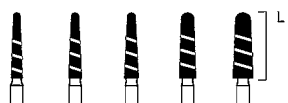


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5	5
			L mm	8,5	8,5	8,5	8,5
B850	FG	809 314 198 544	014	016	018	021	025




B852

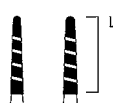


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
			L mm	10,0
B852	FG	809 314 199 544	016	018




BC04 – Black Cobra Complete
Crown Removal Kit

auf Seite | on page | en la página 236

Zircon Cut Diamonds



Die neuen Hochleistungs-Diamantscheiben von MEISINGER sind speziell für das Auftrennen von Zirkonkronen und Keramikrestaurationen geeignet. Je nach Indikation steht sowohl eine mittlere Körnung als auch eine grobe Körnung zur Auswahl. Aufgrund der unterschiedlichen Größen kann die Tiefe des Schnittes im Vorfeld bestimmt werden und ermöglicht ein kontrolliertes Arbeiten.

The new diamond discs from MEISINGER are specially designed for cutting zirconium crowns and ceramic restorations. Depending on the indication, both a medium grain and a coarse grain are available. Due to the different sizes, the depth of the cut can be determined in advance and enables controlled work.

Los nuevos discos de diamante de alto rendimiento de MEISINGER están diseñados especialmente para cortar coronas de circonio y restauraciones de cerámica. En función de la indicación, hay disponible tanto un grano medio como un grano grueso. Gracias a los diferentes tamaños, la profundidad del corte se puede determinar de antemano y permite un trabajo controlado.

MATERIALIEN:

- Zirkonkronen und Keramikrestaurationen

Empfohlene Drehzahl: 80.000 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 150.000 min⁻¹

Beim Einsatz des Instruments auf ausreichend Wasserkühlung achten und mit geringem Anpressdruck arbeiten

MATERIALS:

- Zirconium crowns and ceramic restorations

Recommended Speed: 80.000 rpm
Maximum Speed: 150.000 rpm

When using the instrument, ensure sufficient water cooling and work with low contact pressure

MATERIALES:

- Coronas de circonio y restauraciones de cerámica

Revoluciones recomendadas: 80.000 min⁻¹
Revoluciones máximas: 150.000 min⁻¹

Al utilizar el instrumento, asegúrese de que haya suficiente refrigeración por agua y trabaje con baja presión de contacto



Z0818

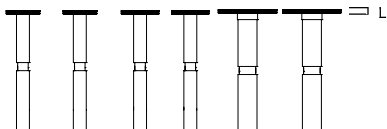


Fig.	Shaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2	2	2	2	2
			L mm	0,7	0,6	0,7	0,6	0,7	0,6
Z818G	FG	806 314 041 334		050		060		080	
Z0818	FG	806 314 041 324		050		060		080	



**ZCS24 – Zirconia Crown
Seperators Kit**

auf Seite | on page | en la página 213

SPEZIALINSTRUMENTE ZUM ENTFERNEN VON AMALGAMFÜLLUNGEN | SPECIAL INSTRUMENTS FOR REMOVING AMALGAM FILLINGS | INSTRUMENTOS ESPECIALES PARA REMOCIÓN DE OBTURACIONES VIEJAS

HM 31A




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	5,3
HM 31A	FG	500 314 139 008		012



HM 31C




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	4,1
HM 31C	RA	500 204 139 015		012
HM 31C	FG	500 314 139 015		012



HARTMETALLBOHRER | TUNGSTEN CARBIDE BURS | FRESAS DE CARBURO

Rund | Round | Redonda



HM 1

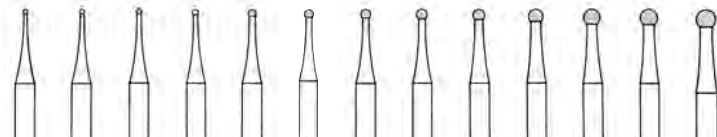



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
US-No.				1/4	1/2		1		2	3	4	5	6	7	8	10
HM 1	HP	500 104 001 001		005*	006*	007*	008*	009*	010*	012*	014*	016*	018*	021*	023*	027*
	RA	500 204 001 001		005	006		008	009	010	012	014	016	018	021	023	027
	FG s	500 313 001 001									014					
	FG	500 314 001 001		005	006	007	008		010	012	014	016	018	021	023	
	FG XL	500 316 001 001			006		008		010		014		018		023	



HM 1S


Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
US-No.				1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S	10S	
HM 1S	RA	500 204 001 003		008	010	012	014	016	018	021	023	027	
	RA L	500 205 001 003			010	012	014	016	018	021	023		
	FG	500 314 001 003			010	012	014	016	018	021	023		



Zum Exkavieren, schnittfreundige Verzahnung | For excavating, high cutting efficiency | Para excavar, alta efectividad de corte

HM 1SQ

Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.		5	5	5	5	5	5
HM 1SQ	RA	500 204 001 002		010	012	014	016	018	021
	RA L	500 205 001 002		010	012	014	016	018	021
	FG	500 314 001 002		010	012	014	016	018	021

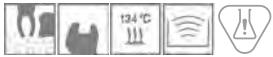

Schnittfreundige Ausführung mit Querhieb – zum Exkavieren | Fast cutting x-cut for excavating | Diseño muy cortante con corte transversal para excavar

HM 1SQL

Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.		5	5	5	5	5	5
HM 1SQL	RA	500 204 697 002		012	014	016	018	021	023



Schnittfreundige Ausführung mit Querhieb zum Exkavieren, mit extra schlanker Halskonstruktion für optimale Sicht auf das Arbeitsgebiet | Fast cutting x-cut for excavation, long thin neck for better visibility | Dentado SQ cortante para excavar dentina, con cuello delgado para optimizar la vista.

- Äußerst vibrationsarmer Lauf
- Optimale Rundlaufgenauigkeit
- Schnelles Exkavieren durch effiziente Schneidengeometrie
- Minimaler Anpressdruck
- Leicht erkennbar durch blaue Farbmarkierung

- Greatly reduces cut vibration
- Optimal revolving properties
- Fast excavation as a result of efficient cutting geometry
- Minimal feeding pressure
- Easy recognition due to blue color ring


- Funcionamiento extremadamente bajo en vibraciones
- Óptima concentricidad
- Excavación rápida debido a una geometría de filos de desarrollo
- Fuerza de compresión mínima
- Se distingue fácilmente por el anillo azul

HM 71

Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	2	2	2	2	2
USA				5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1
HM 71	HP	500 104 001 175		004	005	006	008	010	012	014	016	018	021	023	025	027	031	040	050	



Umgekehrter Kegel | Inverted Cone | Cono invertido

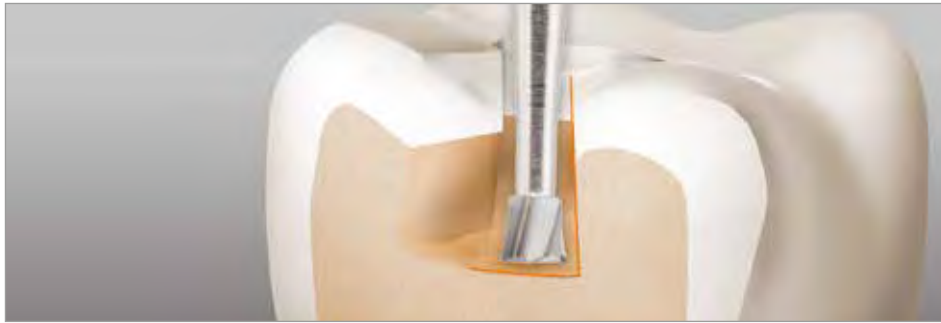

HM 2													
Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
			L mm	0,6	0,8	1,0	1,2	1,4	1,5	1,8	2,0		
			US-No.	33 1/2	34	35	36	37	38	39	41		
HM 2	HP	500 104 010 001			008*	010*	012*	014*	016*	018*	023*		
	RA	500 204 010 001			008	010	012	014	016				
	FG	500 314 010 001		006	008	010	012	014	016				



Kavitätenpräparation, Kante scharf | Cavity preparation, Sharp edge | Preparación de cavidades, borde afilado

! Scharfkantige Unterschnitte können eine schädigende Kerbwirkung verursachen!
Sharp edged undercut can produce a damaging notch effect!
Socavaduras con cantos afilados pueden producir efectos dañinos de incisión!

HM 25					
Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	
			L mm	4,5	
			US-No.	37L	
HM 25	FG L	500 315 225 006		014	



Kavitätenpräparation, Kante scharf | Cavity preparation, Sharp edge | Preparación de cavidades, borde afilado

Birne | Pear | Pera



HM 7

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5
			L mm	1,7	1,8	2,0	2,2
			US-No.	329	330	331	332
HM 7	RA	500 204 237 001			008		
	FG s	500 313 237 001			008	010	012
	FG	500 314 237 001		006	008	010	012



Kavitätenpräparation, runde Kante | Cavity preparation, Round end | Preparación de cavidades, borde redondeado

HM 7L

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	3,6	4,1	4,1
			US-No.	330L	331L	332L
HM 7L	FG	500 314 238 006		008	010	
	FG L	500 315 238 006			010	012



Kavitätenpräparation, runde Kante | Cavity preparation, Round end | Preparación de cavidades, borde redondeado

Zylinder | Cylinder | Cilíndrico

HM 21

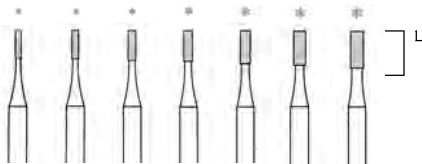



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	5	5
			L mm	3,6	3,8	4,1	4,1	4,5	4,5	4,9
			US-No.		56	57	58	59	60	61
HM 21	HP	500 104 107 006		008*		010*	012*	014*	016*	018*
	RA	500 204 107 006		008		010	012			
	FG	500 314 107 006		008	009	010	012	014		



Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Preparación de cavidades

HM 21L

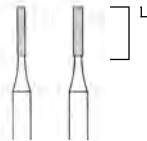



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	6,3	6,3
			US-No.	57L	58L
HM 21L	FG L	500 315 110 006		010	012
	FG XL	500 316 110 006		010	012



Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Preparación de cavidades

HM 31

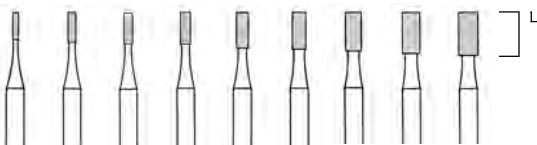



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	5	5	5	5
			L mm	3,6	3,8	4,1	4,1	4,5	4,5	4,9	5,1	5,4
			US-No.	555	556	557	558	559	560	561	562	563
HM 31	HP	500 104 107 007		008*		010*	012*	014*	016*	018*	021*	023*
	RA	500 204 107 007					012					
	FG s	500 313 107 007				010						
	FG	500 314 107 007			009	010	012					
	FG XL	500 316 107 007			009	010	012					



Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Preparación de cavidades

HM 31L

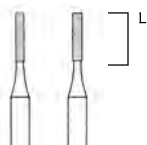



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	6,3	6,3
			US-No.	557L	558L
HM 31L	FG L	500 315 110 007		010	012
	FG XL	500 316 110 007		010	012



Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Preparación de cavidades

Zylinder, rund | Cylinder, Round End | Cilíndrico con borde redondeado

HM 21R

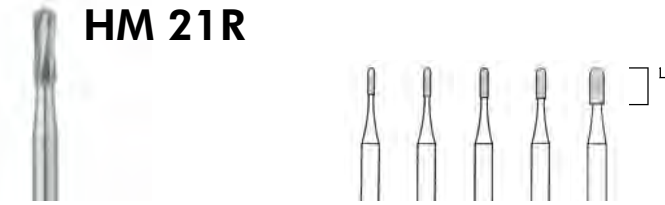


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5
			L mm	3,6	3,8	4,1	4,1	4,9
			US-No.	1155	1156	1157	1158	
HM 21R	RA	500 204 137 006					012	018
	FG	500 314 137 006		008		010	012	



Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Preparación de cavidades

HM UN245

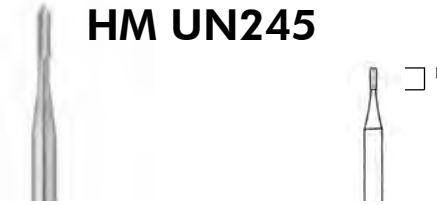


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	2,9
			US-No.	245
HM UN245	FG s	500 313 233 006		009
	FG	500 314 233 006		009



Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Preparación de cavidades

B21R



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	4,1
			US-No.	1158
B21R	FG	507 314 137 006		012



HM 31RS



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	4,1
HM 31RS	FG	500 314 137 008		012



Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Preparación de cavidades

HM 31R

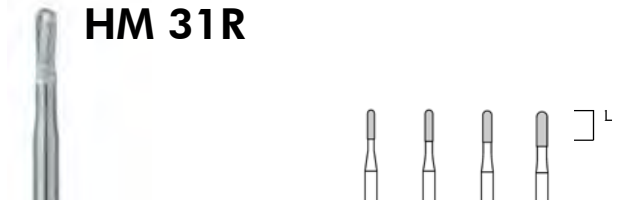


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5
			L mm	4,1	4,1	4,1	4,5
			US-No.	1556	1557	1558	1559
HM 31R	FG	500 314 137 007		009	010	012	014
	FG XL	500 316 137 007				012	



Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Preparación de cavidades

HM31LR

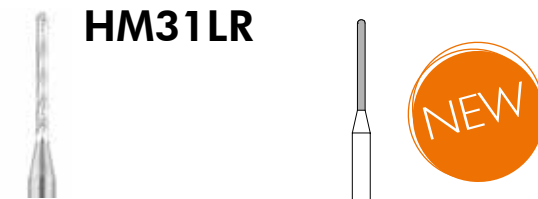


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1
			L mm	12,0
HM31LR	HPL	500 105 143 007		010



Zum Trennen von Konnektoren-Verbindern geeignet, speziell für das gezielte Heraustrennen aus Zirkon-Ronde | Suitable for separating connectors, especially for cutting out zirconium discs | Apto para separar conectores, especialmente para el recorte selectivo de discos de circonio.

HM 207



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	5,1
			US-No.	957L
HM 207	FGL	500 316 150 001		012



Stufenbohrer zum Tieferlegen der Präparationsstufe, wenn mit Diamant 837/837L präpariert wurde oder zur Schaffung eines flachen Präparationsbodens in der Kavität. | Step drill for lowering the preparation step when using diamond 837/837L or for creating a flat preparation base within the cavity. | Fresa escalonada para bajar el escalón de preparación cuando se utiliza el diamante 837/837L o para crear una base de preparación plana dentro de la caries.

Konisch, flach | Tapered, Flat End | Cónica



HM 23

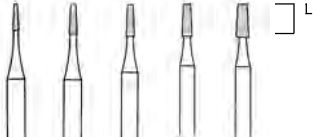


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5
		L mm		3,6	3,8	4,1	4,1	4,5
		US-No.		168	169	170	171	172
HM 23	FG	500 314 168 006		008	009	010	012	016



Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Preparación de cavidades



HM 23L

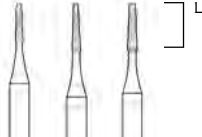


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
		L mm		5,3	6,3	6,3
		US-No.		169L	170L	171L
HM 23L	FG L	500 315 171 006		009	010	012
	FG XL	500 316 171 006			010	012





HM 33

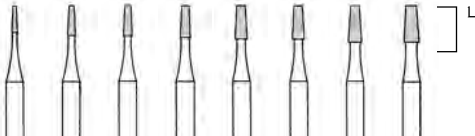


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	5	5	5
		L mm		3,6	3,8	4,1	4,1	4,5	4,5	4,9	4,9
		US-No.		698	699	700	701		702		703
HM 33	HP	500 104 168 007		008*	009*	010*	012*	014*	016*	018*	021*
	RA	500 204 168 007					012				
	FG	500 314 168 007			009	010	012		016		
	FG XL	500 316 168 007					012		016		021



Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Preparación de cavidades



HM 33L

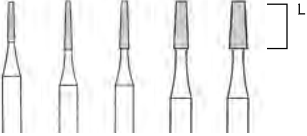


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5
		L mm		5,3	6,3	6,3	6,3	6,3
		US-No.		699L	700L	701L	702L	703L
HM 33L	HP	500 104 171 007			010*	012*	016*	021*
	FG L	500 315 171 007		009	010	012		
	FG XL	500 316 171 007			010	012	016	



Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Preparación de cavidades

Konisch, rund | Tapered, Round End | Cónico con borde redondeado

HM 23R








Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5
			L mm	4,1	4,1	4,5	4,5
			US-No.	1170	1171		1172
HM 23R	HP	500 104 194 006		010*			
	RA	500 204 194 006			012	014	016
	FG	500 314 194 006		010	012		016













Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Preparación de cavidades

HM 33R






Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	4,5	4,9
			US-No.	1702	
HM 33R	HP XL	500 106 194 007			021
HM 33R	FG XL	500 316 194 007		016	021
HM 33R	FG XXL	500 317 194 007			021











Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Preparación de cavidades

Konisch, spitz | Tapered, Pointed | Cónica con punto

**HM 23SR**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	3,6	4,2	4,2
HM 23SR	HP	500 104 196 006		007	009	010



Fissurenbohrer | Fissure bur | Fresa para fisuras

**HM 23SRX**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	4,2
HM 23SRX	HP	500 104 196 019		010



Fissurenbohrer, Kreuzverzahnt | Fissure bur, Cross cut | Fresa para fisuras, Dentado cruzado

**HM 280**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	4,2
HM 280	HP	500 104 170 377		012



Labor-Stichfräser, Spezialinstrument zum Entfernen von Unreinheiten in Innenteleskopen und Innenkronen; zum Nachziehen von Fissuren | Laboratory cutting bur, Special instrument for removing impurities in inner telescopes and inner crowns; for creating fissures | Fresa de punta para tallar, Instrumentos especiales para eliminar defectuosidades en los interiores de coronas y coronas telescópicas; para repasar las fisuras

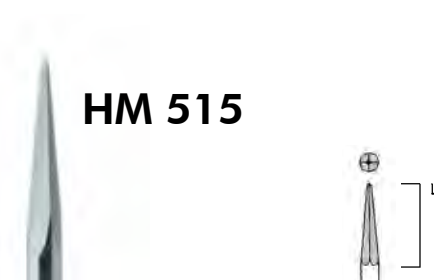
**HM 515**


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	11,0
HM 515	HP	500 104 467 211		023



Labor-Stichfräser für Tiefziehfolien | Vacuum form acrylic cutter | Fresa acrílica moldeada al vacío

Twist Finierer

Twist Finishing Burs | Fresas para acabar de carburo con vuelta

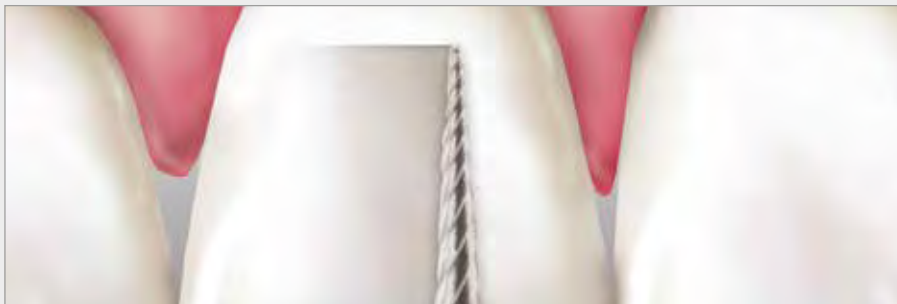

- **Bestens geeignet für Komposite, Füllungsmaterialien und zur Entfernung von Kleberesten im Bracketbereich**
Highly suited for composites, filling materials and for removing adhesive residues in the bracket zone
Ideal para composites, materiales de relleno y para eliminar residuos de adhesivo en la zona del bracket
- **Finieren von Kavitätenwänden bzw. -rändern und Füllungsflächen**
Finishing of cavity walls and edges and filling surfaces
Acabado de paredes o bordes de cavidades y superficies de relleno
- **Perfektes Arbeitsergebnis durch eine extrem glatte Oberfläche und effiziente Arbeitsweise**
Perfect outcome through extremely smooth surface and efficient workflow
Resultado perfecto gracias a una superficie extremadamente lisa y a un método de trabajo eficaz
- **Unterschiedliche Arbeitsteilformen ermöglichen ein großes Anwendungsspektrum (approximal, labial, palatinal)**
Different working part shapes allow a wide range of applications (approximal, labial, palatal)
Las diferentes formas de las piezas de trabajo ofrecen una amplia gama de aplicaciones (aproximal, labial, palatal)

Die MEISINGER Twist Finierer sind aufgrund ihrer Konstruktion mit präzisiertem Drallwinkel besonders gut für das Bearbeiten von Kompositen geeignet. Durch die einzigartige Schneidengeometrie haben die Instrumente eine äußerst hohe Laufruhe und schneiden deutlich feiner als Standard Hartmetallfinierer. Sie hinterlassen keine Riefen auf der Oberfläche und erzielen perfekte, glatte Arbeitsergebnisse. Die schneidende und nicht schleifende Bearbeitung des Materials erzielt ein makelloses Oberflächenfinish.

MEISINGER Twist Finishing Burs are highly suitable for processing of composite materials due to their precise twist angle design. Due to the unique cutting geometry, the instruments have an extremely smooth running and cut significantly finer than standard carbide finishers. They leave no grooves on the surface and achieve perfect, smooth working results. The cutting and non-grinding material processing also achieves a flawless surface finish.

El análisis muestra que las fresas de acabado MEISINGER Twist están especialmente indicadas para el mecanizado de los composites debido a su diseño con un preciso ángulo de la hélice. Gracias a su exclusiva geometría de corte, los instrumentos poseen una alta estabilidad de giro y su corte es claramente más fino que el de las fresas de acabado de carburo de tungsteno habituales. No dejan marcas sobre la superficie y obtienen unos resultados perfectos y extremadamente lisos. El mecanizado cortante y no abrasivo del material consigue además una superficie aún más lisa que los instrumentos de diamante ultrafinos.

TWIST FINIERER | TWIST FINISHING BURS | FRESAS PARA ACABAR DE CARBURO CON VUELTA



Orangener Ring (fein)
Orange ring (fine)
Anillo naranja (fino)

8-12 Schneiden
8-12 Blades
8-12 Láminas



Gelber/orangener Ring (F=extra fein)
Yellow/orange ring (F=extra fine)
Anillo amarillo/naranja (F=extra fino)

16-20 Schneiden
16-20 Blades
16-20 Láminas



Weißer/orangener Ring (U=ultra fein)
White/orange ring (U=ultra fine)
Anillo blanco/naranja (U=ultra fino)

30 Schneiden
30 Blades
30 Láminas

Hinweis:
Besonders gut geeignet zum Entfernen von Kleberesten im Bracketbereich!

Note:
Particularly well suited for removing adhesive residues in the bracket zone!

Nota:
¡Indicados especialmente para eliminar los restos de adhesivo en la zona del bracket!



HM D0132

HM D132F
HM D132U

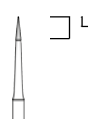


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	3,1
		US-No.		ET3
HM D0132	FG	500 314 699 072		008
HM D132F	FG	500 314 699 042		008
HM D132U	FG	500 314 699 032		008



Konisch, spitz | Tapered, Pointed "ET Series" | Cónica con punta



HM D0133

HM D133F
HM D133U

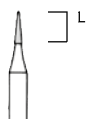


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	4,2
		US-No.		ET4
HM D0133	FG	500 314 159 072		010
HM D133F	FG	500 314 159 042		010
HM D133U	FG	500 314 159 032		010



Konisch, spitz | Tapered, Pointed "ET Series" | Cónica con punta



HM D0134

HM D134F
HM D134U

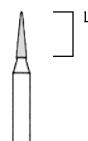


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	6,0
		US-No.		ET6
HM D0134	FG	500 314 164 072		014
HM D134F	FG	500 314 164 042		014
HM D134U	FG	500 314 164 032		014



Konisch, spitz | Tapered, Pointed "ET Series" | Cónica con punta



HM D0135

HM D135F
HM D135U

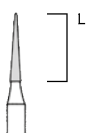


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	9,0
		US-No.		ET9
HM D0135	FG	500 314 166 072		014
HM D135F	FG	500 314 166 042		014
HM D135U	FG	500 314 166 032		014



Konisch, spitz | Tapered, Pointed "ET Series" | Cónica con punta



HM D0379

HM D379F
HM D379U

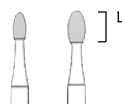


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	3,5	4,2
		US-No.		7406	7408
HM D0379	FG	500 314 277 972		018	023
HM D379F	FG	500 314 277 942		018	023
HM D379U	FG	500 314 277 932		018	023



Ei | Egg | Huevo



2571 – Twist Finishing Kit

auf Seite | on page | en la página

223

TF02 - Verkaufsversion - US
TF02 - Selling-version - US
TF02 - Versión la venta - US



HARTMETALLFINIERER | TUNGSTEN CARBIDE FINISHING BURS | FRESAS PARA ACABAR DE CARBURO



Ohne Ring (fein)
Without ring (fine)
Sin anillo (fino)

8-12 Schneiden
8-12 Blades
8-12 Laminas



Gelber Ring (F=extra fein)
Yellow ring (F=extra fine)
Anillo amarillo (F=extra fino)

16-20 Schneiden
16-20 Blades
16-20 Laminas



Weißer Ring (U=ultra fein)
White Ring (U=ultra fine)
Anillo blanco (U=ultra fino)

30 Schneiden
30 Blades
30 Laminas

Rund | Round | Redonda

HM 41

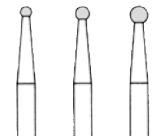



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			US-No.	7004	7006	7008
HM 41	RA	500 204 001 071				023
	FG	500 314 001 071		014	018	023



Birne | Pear | Pera

HM 47L

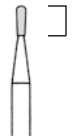



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	4,0
			US-No.	7303
HM 47L	FG	500 314 238 072		012



Kavitätenpräparation | Cavity preparation | Preparación de cavidades

Knospe | Bud | Capullo

HM 46C

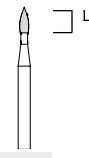



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	3,4
HM 46C	FG	500 314 254 075		012



HM 274

HM 274U

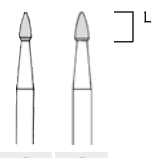



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	3,7	3,7
			US-No.	274	
HM 274	RA	500 204 274 072		016	
	FG	500 314 274 072		016	018
HM 274U	FG	500 314 274 032		016	



Ei | Egg | Huevo



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	3,3	3,5	3,8
HM 44E	RA	500 204 499 072				023
	FG	500 314 499 072		014	018	023



Ausarbeiten | Finishing | Ajustes



Fig.	Shank	Ref.-No.		5	5	5
			L mm	3,1	3,5	4,2
			US-No.	7404	7406	7408
HM 379	RA	500 204 277 072			018	023
	FG	500 314 277 072		014	018	023
	FGXXL	500 317 277 072		014		023
HM 379F	FG	500 314 277 042		014	018	023
HM 379U	FG	500 314 277 032		014	018	023
	FGXXL	500 317 277 032		014		023



Ausarbeiten | Finishing | Ajustes

Zylinder mit abgerundeter Kante | Cylinder, Round Edge | Cilíndrico de punta plana



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	8,0
HM 49LKR	FG L	500 315 158 072		012
	FG XXL	500 317 158 072		012



Konisch, flach | Tapered, Flat End | Cónica



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	9,0
			US-No.	7205
HM 212L	FG	500 314 184 072		016



Kronenpräparation, konische Stufe | Crown preparation, Tapered shoulder | Preparación de coronas, borde cónico

Konisch mit abgerundeter Kante | Tapered, Round Edge | Cónico con borde redondeado

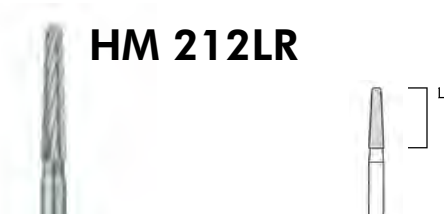


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	8,0
HM 212LR	FG	500 314 585 072		016



Konisch, rund | Tapered, Round End | Cónico con borde redondeado



HM 247

HM 247F
HM 247U

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
	L mm		3,1
	US-No.		7801
HM 247	FG	500 314 195 071	009
HM 247F	FG	500 314 195 041	009
HM 247U	FG	500 314 195 031	009


Kronenpräparation/Kavitätenpräparation | Crown preparation/Cavity preparation
Preparación de coronas/Preparación de cavidades


HM 375R

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5	5
	L mm		8,0	8,0	8,0	8,0
	US-No.		7653	7664	7675	7686
HM 375R	FG	500 314 198 072	012	014	016	018


Kronenpräparation/Kavitätenpräparation | Crown preparation/Cavity preparation
Preparación de coronas/Preparación de cavidades

Konisch, spitz | Tapered, Pointed "ET Series" | Cónica con punta



HM 132

HM 132F
HM 132U

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
	L mm		3,1
	US-No.		ET3
HM 132	FG	500 314 699 071	008
HM 132F	FG	500 314 699 041	008
HM 132U	FG	500 314 699 031	008


Komposit Bearbeitung, Konturieren und Finieren | Composite processing,
Contouring and finishing | Modelado y acabado de composites


HM 133

HM 133F
HM 133U

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
	L mm		4,2
	US-No.		ET4
HM 133	FG	500 314 159 071	010
HM 133F	FG	500 314 159 041	010
HM 133U	FG	500 314 159 031	010


Komposit Bearbeitung, Konturieren und Finieren | Composite processing,
Contouring and finishing | Modelado y acabado de composites


HM 134

HM 134F
HM 134U

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
	L mm		6,0
	US-No.		ET6
HM 134	FG	500 314 164 071	014
HM 134F	FG	500 314 164 041	014
HM 134U	FG	500 314 164 031	014


Komposit Bearbeitung, Konturieren und Finieren | Composite processing,
Contouring and finishing | Modelado y acabado de composites


HM 135

HM 135F
HM 135U

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
	L mm		9,0
	US-No.		ET9
HM 135	FG	500 314 166 071	014
HM 135F	FG	500 314 166 041	014
HM 135U	FG	500 314 166 031	014


Komposit Bearbeitung, Konturieren und Finieren | Composite processing,
Contouring and finishing | Modelado y acabado de composites

Flamme | Flame | Llama

HM 48L

HM 48LF
HM 48LU

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5
			L mm	8,0	8,0	8,0	8,0
HM 48L	RA	500 204 249 072			012		
	FG	500 314 249 072	010	012			
	FGXXL	500 317 249 072				014	023
HM 48LF	FG	500 314 249 042			012		
HM 48LU	FG	500 314 249 032			012		
	FGXXL	500 317 249 032				014	023



Finieren von labialen Flächen | Finishing of labial surfaces | Acabado de superficies inestables

HM 246

HM 246U

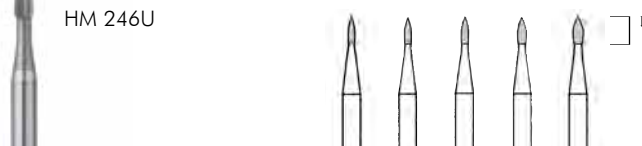


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5
			L mm	3,6	3,6	3,6	3,6	3,6
			US-No.		7901	7902	7903	7904
HM 246	HP	500 104 496 071	008*					
	FG	500 314 496 071	008	009	010	012	014	
HM 246U	FG	500 314 296 031		009				



Okklusales Ausarbeiten | Occlusal Finishing | Ajustes occlusales

Torpedo | Torpedo | Torpedo

HM 243



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	6,0
HM 243	FG	500 314 288 072		012



Parallele Hohlkehle | Parallel chamfer | Bordes paralelos

HM 244



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	8,0	8,0
HM 244	RA	500 204 289 072		012	
	FG	500 314 289 072		012	014



Parallele Hohlkehle | Parallel chamfer | Bordes paralelos

HM 245



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	10,0
HM 245	FG	500 314 290 072		014



Parallele Hohlkehle | Parallel chamfer | Bordes paralelos

Torpedo, konisch | Torpedo, Tapered | Torpedo, cónico

HM 243K



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	6,0	6,0
HM 243K	RA	500 204 297 072			016
	FG	500 314 297 072		014	



Konische Hohlkehle | Tapered chamfer | Bordes cónico

HM 244K



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	8,0	8,0
HM 244K	RA	500 204 298 072			021
	FG	500 314 298 072		016	



Konische Hohlkehle | Tapered chamfer | Bordes cónico

HM 245K



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	10,0
HM 245K	FG	500 314 299 072		018



Konische Hohlkehle | Tapered chamfer | Bordes cónico

HARTMETALLFRÄSER | TUNGSTEN CARBIDE CUTTERS | FRESAS DE CARBURO PARA LABORATORIO



S	G	EX	FX	MF	GX	MG	HX	SX	MX	PX	QX
Standardverzahnung Plain cut, medium Dentado simple, medio	Standardverzahnung, grob Plain cut, coarse Dentado simple, grueso	Kreuzverzahnung, extra fein X-cut, extra fine Dentado cruzado, extra fino	Kreuzverzahnung, fein X-cut, fine Dentado cruzado, fino	"MINIS" wie FX, Kreuzverzahnung, fein "MINIS" like FX, x-cut, fine "MINIS" como FX, dentado cruzado, fino	Kreuzverzahnung, standard X-cut, medium Dentado cruzado, medio	Wie GX, Kreuzver- zahnung, standard like GX, x-cut, medium como GX, dentado cruzado, medio	Kreuzverzahnung, grob X-cut, coarse Dentado cruzado, grueso	Kreuzverzahnung, super grob X-cut, super coarse Dentado cruzado, super grueso	Spezialverzahnung, grob Special toothing, coarse Dentado especial, grueso	Spezialverzahnung, fein Special toothing, fine Dentado especial, fino	Spezialverzahnung, standard Special toothing, medium Dentado especial, medio

GIPS PLASTER YESO	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓			
EDELMETALL-LEGIERUNGEN PRECIOUS ALLOY ALEACIONES PRECIOSAS	✓		✓	✓	✓	✓				✓		
NEM-LEGIERUNGEN NON PRECIOUS ALLOY ALEACIONES NO PRECIOSAS	✓			✓	✓	✓	✓			✓		
MODELGUSSLEGIERUNGEN MODEL CASTING ALLOYS DESABASTE DE ESQUELÉTICOS	✓		✓	✓	✓	✓				✓		
TITAN/TITANLEGIERUNGEN TITANIUM / TITANIUM ALLOYS TITANIO/ALEACIONES DE TITANIO					✓							
KUNSTSTOFF ACRYLICS ACRÍLICO	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓
NYLON NYLON NYLON												
LÖFFELMATERIALIEN TRAY MATERIAL MATERIALES DE CUBETA					✓		✓					
WEICHBLEIBENDE UNTERFÜTTERUNGSMATERIALIEN SOFT RELINING MATT REBASE PERMANENTEMENTE												✓
KERAMIK CERAMICS CERÁMICA			✓		✓							
SEITE PAGE PÁGINA	74	74	75	75	76	76	77	77	77	78	78	78


SX
SX
SX

schwarzer Ring
black ring
anillo negro

super grobe Verzahnung
super coarse toothing
super grueso Dentado

HX
HX
HX

grüner Ring
green ring
anillo verde

grobe Verzahnung
coarse toothing
grueso Dentado

GX
GX
GX

blauer Ring
blue ring
anillo azul

Standardverzahnung
medium toothing
mediano Dentado



FQ	Q	GM	FF	GF	FS	DF	DG	ST	HT	GT	FT	ET	BC
Querhiebverzahnung, fein Cross cut, fine Dentado transversal, fino	Querhiebverzahnung, standard Cross cut, medium Dentado transversal, medio	Sonderkreuzverzahnung, standard X-cut, medium Dentado cruzado, medio	Facettenverzahnung mit Querhieb, fein Faceted toothing with cross cut, fine Filos bicelados con cortes transversales, fino	Facettenverzahnung mit Querhieb, grob Faceted toothing with cross cut, coarse Filos bicelados con cortes transversales grueso	Feilenschliff, fein File cut, fine Amolado de lima, fino	Doppel-Rechts Verzahnung, fein Double-right gearing, fine Dentado doble hacia la derecha, fino	Doppelverzahnung Double-gearing Dentado doble	Spezialverzahnung, super grob Special toothing, extra coarse Dentado especial, super grueso	Spezialverzahnung, grob Special toothing, coarse Dentado especial, grueso	Spezialverzahnung, standard Special toothing, medium Dentado especial, medio	Spezialverzahnung, fein Special toothing, fine Dentado especial, fino	Spezialverzahnung, extra fein Special toothing, extra fine Dentado especial, extra fino	Kreuzverzahnung X-cut Dentado cruzado

	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓
✓													
✓													
✓	✓	✓											✓
								✓	✓	✓	✓	✓	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓						✓
									✓		✓		
			✓	✓	✓	✓	✓						
			✓	✓	✓	✓	✓						
✓													
79	79	79	80	80	80	80	81	81	81	81	81	81	82



FX
FX
FX

roter Ring
red ring
anillo rojo

feine Verzahnung
fine toothing
fino Dentado



EX
EX
EX

gelber Ring
yellow ring
anillo amarillo

extra feine Verzahnung
extra fine toothing
extra fino Dentado


HARTMETALLFRÄSER | TUNGSTEN CARBIDE CUTTERS | FRESAS DE CARBURO PARA LABORATORIO

S


Standardverzahnt (Ref.-Nr. 175), blauer Ring, für wirkungsvolles Ausarbeiten aller harten Werkstoffe mit besonders glatten Oberflächen

Plain cut, medium (Ref.-No. 175), blue ring, for effective trimming of hard materials and for obtaining especially smooth surfaces

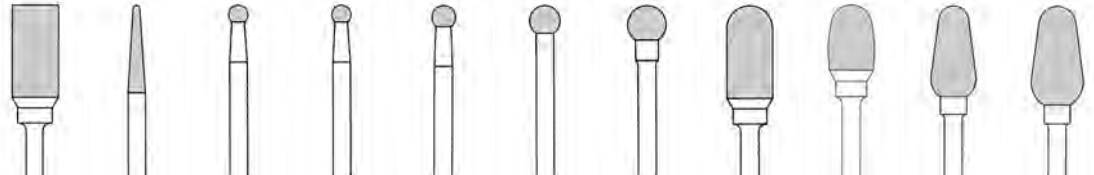Dentado simple, medio (Ref.-No. 175), anillo azul, para desbaste eficaz sobre todos los materiales duros con superficies especialmente lisas



Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 21	HM 23LR	HM 71	HM 71	HM 71	HM 71	HM 71	HM 72	HM 73	HM 75	HM 75
		060	023	025	027	031	040	050	060	060	060	070
	L mm	13,7	11,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	13,7	10,0	12,0	13,2
HP	500 104 ...	... 107 175	... 199 175	... 001 175	... 001 175	... 001 175	... 001 175	... 001 175	... 137 175	... 277 175	... 260 175	... 260 175
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
RA	500 204 ...										... 260 175	
											2	

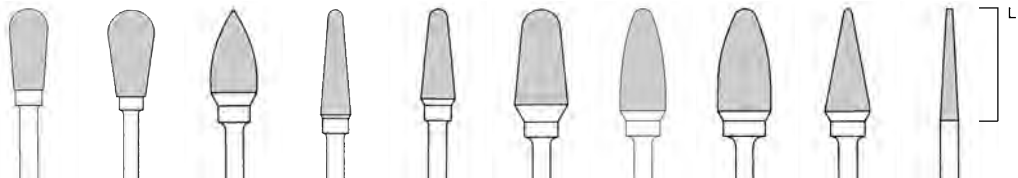

Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 77	HM 77	HM 78	HM 79	HM 79	HM 79	HM 251	HM 251	HM 416	HM 489
		050	060	060	040	045	070	060	070	060	023
	L mm	10,7	11,5	12,7	14,2	12,7	14,7	14,5	14,7	14,7	15,0
HP	500 104 ...	... 237 175	... 237 175	... 257 175	... 194 175	... 194 175	... 194 175	... 274 175	... 274 175	... 201 175	... 187 175
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
RA	500 204 ...					... 194 175					
						2					

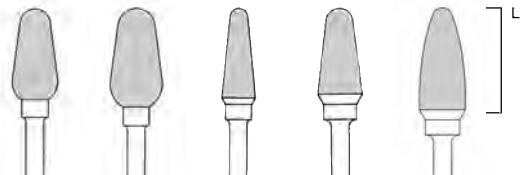


G

Grobverzahnt (Ref.-Nr. 215), grüner Ring, für schnelles, effektives Arbeiten auf Kunststoff und Gips

Plain cut, coarse (Ref.-No. 215), green ring, for rapid and effective trimming of acrylics and plaster

Dentado simple, grueso (Ref.-No. 215), anillo verde, para desbaste rápido y eficaz sobre acrílico y yeso



Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 75G	HM 75G	HM 79G	HM 79G	HM 251G
		060	070*	045	060	060
	L mm	12,0	13,2	12,7	12,7	14,7
HP	500 104 ...	... 260 215	... 260 215	... 194 215	... 194 215	... 274 215
		2	2	2	2	2



EX

Kreuzverzahnt, extra fein (Ref.-Nr. 141), gelber Ring, für feinste, diffizile Arbeiten auf Keramik, Edelmetall- und Modellgusslegierungen

X-cut, extra fine (Ref.-No. 141), yellow ring, for fine, precise trimming of ceramics, precious metals and all non-precious alloys

Dentado cruzado, extra fino (Ref.-No. 141), anillo amarillo, para el desbaste más preciso y delicado sobre cerámica, metales preciosos y todas las aleaciones no preciosas



Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 77EX	HM 79EX
		023	040
	L mm	5,5	14,2
HP	500 104 ...	... 237 141	... 194 141
		2	2

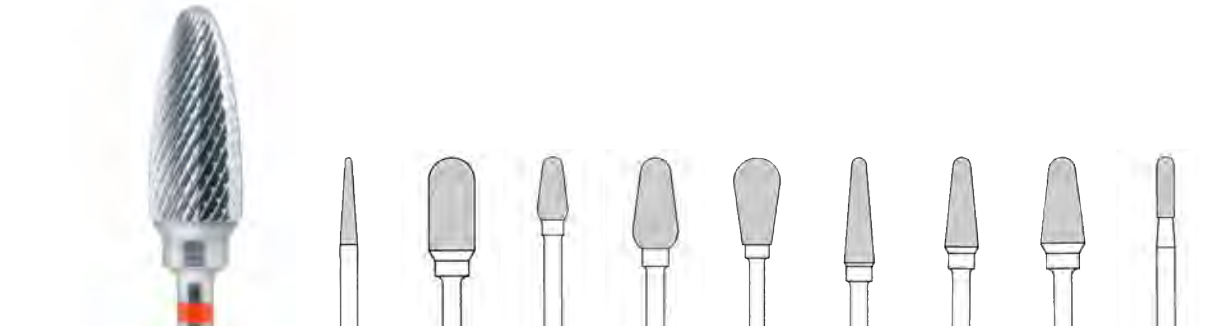


FX


Kreuzverzahnt, fein (Ref.-Nr. 140), roter Ring, für feines, diffiziles Ausarbeiten von harten Legierungen und Kunststoffen

X-cut, fine (Ref.-No. 140), red ring, for delicate and difficult trimming of hard alloys and acrylics

Dentado cruzado, fino (Ref.-No. 140), anillo rojo, para el desbaste fino y difícil sobre aleaciones duras y resinas



Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 23FX	HM 72FX	HM 75FX	HM 75FX	HM 77FX	HM 79FX	HM 79FX	HM 79FX	HM 129FX
		023	060	040	060	060	040	045	060	023
	L mm	11,0	13,7	8,3	12,0	11,5	14,2	12,7	12,7	8,0
HP	500 104 ...	... 199 140	... 137 140	... 260 140	... 260 140	... 237 140	... 194 140	... 194 140	... 194 140	... 140 140
		2	2	2	2	2	2	2	2	2

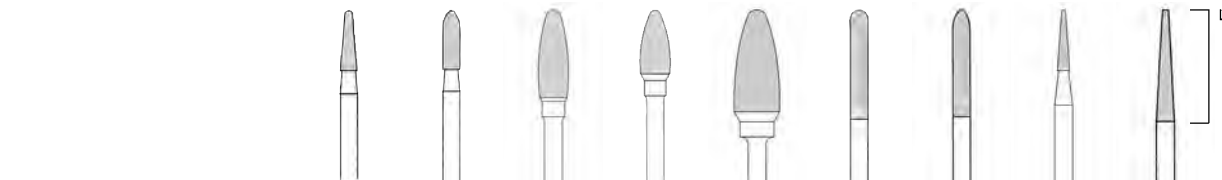

Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 138FX	HM 139FX	HM 250FX	HM 251FX	HM 251FX	HM 486FX	HM 487FX	HM 488FX	HM 489FX
		023	023	040	040	060	023	023	016	023
	L mm	8,0	8,0	12,0	9,3	14,5	14,0	14,0	8,0	15,0
HP	500 104 ...	... 198 140	... 289 140	... 275 140	... 274 140	... 274 140	... 137 140	... 292 140	... 184 140	... 187 140
		2	2	2	2	2	2	2	2	2

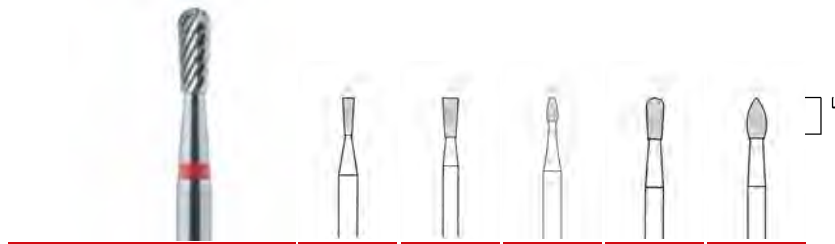


MF

“MINIS” wie FX, kreuzverzahnt, fein (Ref.-Nr. 140), roter Ring, für feines, diffiziles Ausarbeiten von harten Legierungen and Kunststoffen

“MINIS” like FX, x-cut, fine (Ref.-No. 140), red ring, for fine and accurate trimming of hard alloys and acrylics

“MINIS” como FX, dentado cruzado, fino (Ref.-No. 140), anillo rojo, para el desbaste fino y difícil sobre aleaciones duras y resinas



Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 30MF	HM 30MF	HM 73MF	HM 77MF	HM 78MF
		014	023	014	023	023
	L mm	4,8	5,5	3,1	5,5	5,5
HP	500 104 ...	... 225 140	... 225 140	... 277 140	... 237 140	... 257 140
		2	2	2	2	2

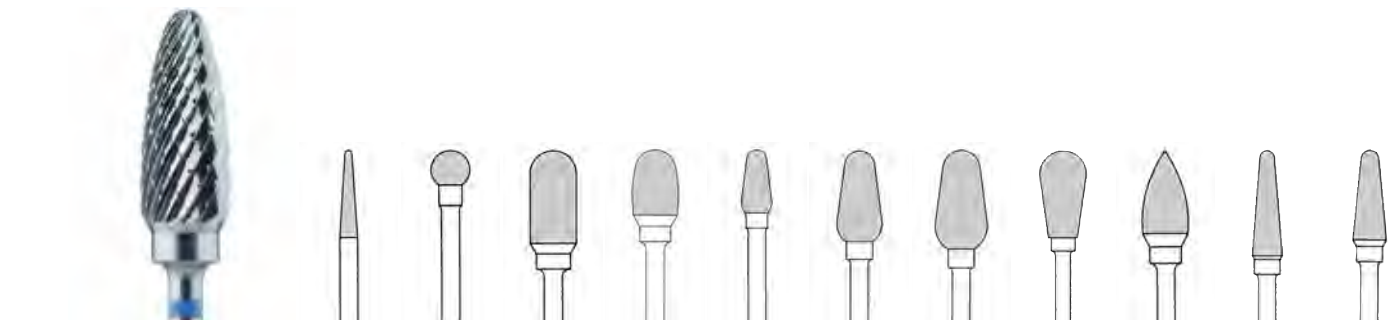


GX


Kreuzverzahnt, standard (Ref.-Nr. 190), blauer Ring, für großflächiges Ausarbeiten von NEM-Legierungen und Kunststoffen

X-cut, medium (Ref.-No. 190), blue ring, for trimming large surfaces of non-precious alloys and acrylics

Dentado cruzado, medio (Ref.-No. 190), anillo azul, para el desbaste sobre superficies grandes de aleaciones no preciosas y acrílico



Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 23GX	HM 71GX	HM 72GX	HM 73GX	HM 75GX	HM 75GX	HM 75GX	HM 77GX	HM 78GX	HM 79GX	HM 79GX
		023	050	060	060	040	060	070	060	060	040	045
	L mm	11,0	0,0	13,7	10,0	8,3	12,0	13,2	11,5	12,7	14,2	12,7
HP	500 104 ...	... 199 190	... 001 190	... 137 190	... 277 190	... 260 190	... 260 190	... 260 190	... 237 190	... 257 190	... 194 190	... 194 190
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
RA	500 204 ...						... 260 190				... 194 190	
							2				2	

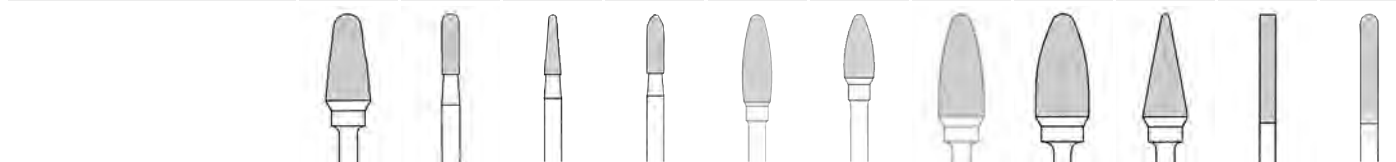

Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 79GX	HM 129GX	HM 138GX	HM 139GX	HM 250GX	HM 251GX	HM 251GX	HM 251GX	HM 416GX	HM 460GX	HM 486GX
		060	023	023	023	040	040	060	070	060	023	023
	L mm	12,7	8,0	8,0	8,0	12,0	9,3	14,5	14,7	14,7	14,0	14,0
HP	500 104 ...	... 194 190	... 140 190	... 198 190	... 289 190	... 275 190	... 274 190	... 274 190	... 274 190	... 201 190	... 116 190	... 137 190
		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 487GX
		023
	L mm	14,0
HP	500 104 ...	... 292 190
		2



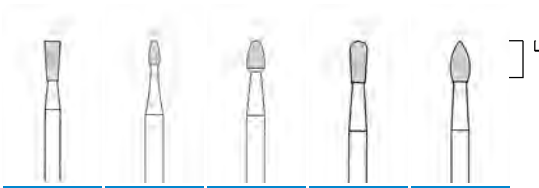
Alle Instrumente auf dieser Seite werden in den USA á 1 verpackt. All instruments on this page are packed in the USA á 1. Todos los instrumentos de esta página se embalan en EE. UU. de uno en uno.

MG

"MINIS" wie GX, kreuzverzahnt, standard (Ref.-Nr. 220), blauer Ring, für diffiziles Ausarbeiten von NEM-Legierungen und Kunststoffen

"MINIS" like GX, x-cut, medium (Ref.-No. 220), blue ring, for trimming non-precious alloys and acrylics

"MINIS" como GX, dentado cruzado, medio (Ref.-No. 220), anillo azul, para el desbaste sobre superficies grandes de aleaciones no preciosas y acrílico



Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 30MG	HM 73MG	HM 73MG	HM 77MG	HM 78MG
		023	014	023	023	023
	L mm	5,5	3,1	4,1	5,5	5,5
HP	500 104 ...	... 225 220	... 277 220	... 277 220	... 237 220	... 257 220
		2	2	2	2	2

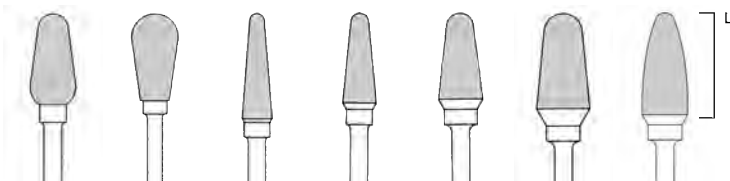


HX

Kreuzverzahnt, grob (Ref.-Nr. 220), grüner Ring, für großflächiges Ausarbeiten von Kunststoffen, Löffelmaterialien und Gips

X-cut, coarse (Ref.-No. 220), green ring, for trimming large surfaces of acrylics, tray materials, and plaster

Dentado cruzado, grueso (Ref.-No. 220), anillo verde, para el desbaste sobre superficies grandes de acrílico, materiales de cubeta y yeso



Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 75HX	HM 77HX	HM 79HX	HM 79HX	HM 79HX	HM 79HX	HM 251HX
		060	060	040	045	060	070	060
	L mm	12,0	11,5	14,2	12,7	12,7	14,7	14,5
HP	500 104 ...	... 260 220	... 237 220	... 194 220	... 194 220	... 194 220	... 194 220	... 274 220
		2	2	2	2	2	2	2

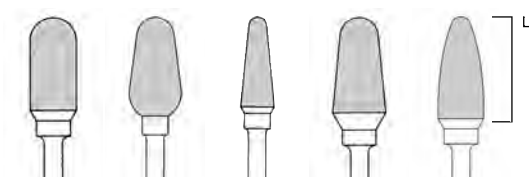


SX

Kreuzverzahnt, super grob (Ref.-Nr. 224), schwarzer Ring, für optimales Bearbeiten von – auch nassen – Gipsen

X-cut, super coarse (Ref.-No. 224), black ring, the optimum for acrylic, plaster, and wet plaster

Dentado cruzado, super grueso (Ref.-No. 224), anillo negro, óptimo para trabajos en yeso – también yeso húmedo



Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 72SX	HM 75SX	HM 79SX	HM 79SX	HM 251SX
		060	070	045	070	060
	L mm	13,7	13,2	12,7	14,7	14,5
HP	500 104 ...	... 137 224	... 260 224	... 194 224	... 194 224	... 274 224
		2	2	2	2	2

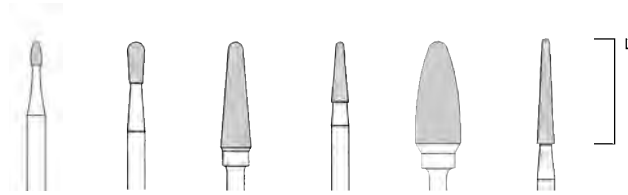


MX

Spezialverzahnung für NEM-Legierungen, grob (Ref.-Nr. 137), grüner Ring

Special toothing for non-precious metal alloys, coarse (Ref.-No. 137), green ring

Dentado especial para aleaciones de metales no preciosos, (Ref.-Nr. 137), anillo verde



Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 73MX	HM 77MX	HM 79MX	HM 138MX	HM 251MX	HM 261MX
		014	023	040	023	060	023
	L mm	3,1	5,5	14,2	8,0	14,5	13,5
HP	500 104 ...	... 277 137	... 237 137	... 194 137	... 198 137	... 274 137	... 200 137
		2	2	2	2	2	2

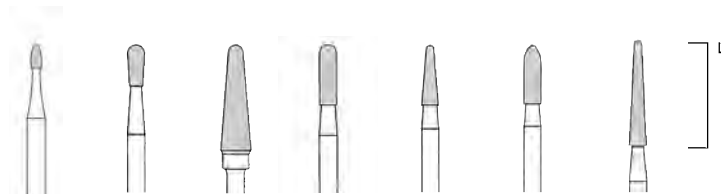


PX

Spezialverzahnung für PEEK, fein (Ref.-Nr.146), rot/grauer Ring

Special toothing for PEEK, fine (Ref.-No.146), red/grey Ring

Dentado especial para PEEK, fino (Ref.-Nr.146), anillo rojo y gris



Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 73PX	HM 77PX	HM 79PX	HM 129PX	HM 138PX	HM 139PX	HM 261PX
		014	023	040	023	023	023	023
	L mm	3,1	5,5	14,2	8,0	8,0	8,0	13,5
HP	500 104 ...	... 277 146	... 237 146	... 194 146	... 140 146	... 198 146	... 289 146	... 200 146
		2	2	2	2	2	2	2

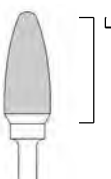


QX

Spezialverzahnung für die Bearbeitung von thermoplastischem Kunststoff, blauer Ring, für die Ausarbeitung von Schienen

Special toothing for the processing of thermoplastic materials, blue Ring, for the finishing of rails

Engranaje especial para colocar termoplásticos, anillo azul para ferulización



Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 251QX
		060
	L mm	14,5
HP	500 104 ...	... 274 160
		2



Alle Instrumente auf dieser Seite werden in den USA á 1 verpackt. All instruments on this page are packed in the USA á 1. Todos los instrumentos de esta página se embalan en EE. UU. de uno en uno.

FQ

Querhiebverzahnt, fein (Ref.-Nr. 134), roter Ring, für feines Ausarbeiten aller Legierungen und harter Kunststoffe

Cross cut, fine (Ref.-No. 134), red ring, for fine trimming on all alloys and hard acrylics

Dentado transversal, fino (Ref.-No. 134), anillo rojo, para desbaste fino sobre todas las aleaciones y acrílico duro



Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 23FQ	HM 79FQ	HM 138FQ	HM 251FQ
		023	040	023	060
	L mm	11,0	14,2	8,0	14,5
HP	500 104 ...	... 199 134	... 194 134	... 198 134	... 274 134
		2	2	2	2



Q

Querhiebverzahnt, standard (Ref.-Nr. 176), blauer Ring, für wirkungsvolles glattes Ausarbeiten aller Prothesen- und KFO-Kunststoffe

Cross cut, medium (Ref.-No. 176), blue ring, for effective and smooth trimming on all prosthesis and surgical acrylics

Dentado transversal, medio (Ref.-No. 176), anillo azul, para desbaste efectivo y suave en todos los acrílicos de prótesis y ortopedia



Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 75Q	HM 251Q
		060	060
	L mm	12,0	14,7
HP	500 104 ...	... 260 176	... 274 176
		2	2



GM

Sonderkreuzverzahnt (Ref.-Nr. 191), blauer Ring, für das Bearbeiten von Modellgusslegierungen, Kunststoffen und Gips

Special X-cut (Ref.-No. 191), blue ring, for use on model casting alloys, acrylics, and plaster

Dentado cruzado especial (Ref.-No. 191), anillo azul, para el desbaste de esqueléticos, acrílico y yeso




Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 79GM	HM 251GM
		040	060
	L mm	14,2	14,7
HP	500 104 ...	... 194 191	... 274 191
		2	2



FF

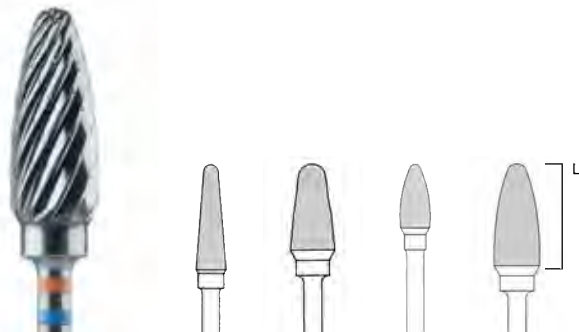Facettenverzahnung mit Querhieb, fein (Ref.-Nr. 181), orange/blauer Ring, für Feinarbeiten auf Kunststoffen, weichbleibenden Kunststoffen und Gips
Faceted toothing with cross cut, fine (Ref.-No. 181), orange/blue ring, for fine work on acrylics, permanent soft acrylics, and hard plaster
Filos bicelados con cortes transversales, fino (Ref.-No. 181) anillo naranja/azul, para retocar acrílicos, acrílico permanentemente blando y yeso



Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 79FF	HM 79FF	HM 251FF	HM 251FF
		040	060	040	060
	L mm	14,2	11,4	9,3	14,5
HP	500 104 ...	... 194 181	... 194 181	... 274 181	... 274 181
		2	2	2	2



- Verstärkte, widerstandsfähige und verbreiterte Schneiden durch die Facetten
- Voluminöse Spanräume, um mehr Material aufzunehmen
- Besonders geeignet für alle weichbleibenden und sonstigen Kunststoffe sowie für Gipse
- Trotz des hohen Abtrags wird eine gute Oberflächenqualität erreicht
- Auch bei hohen Drehzahlen sehr leistungsstark (bis 30.000 min⁻¹)

- Reinforced, resistant, and widened beveled cutters
- Ample chip spaces for the expulsion of material
- Specially suited for all permanent acrylics, acrylic resins, and gypsum material
- In spite of high material removal, a good surface quality is reached
- High rotation speeds, very high output (up to 30,000 min⁻¹)

- Dentado reforzado, resistente y más separado gracias a los filos biselados
- Espacios más voluminosos entre los filos para admitir más material
- Se presta especialmente para resinas acrílicas permanentemente blandas y otras así como yesos
- A pesar del alto desbaste se consigue una buena calidad de superficie del material
- Muy eficaz también con alta velocidad (hasta 30.000 min⁻¹)

FS

Feilenschliff, fein (Ref.-Nr. 231), roter Ring, sehr effektive Verzahnung für schnelles Abtragen von harten Kunststoffen und Gips
File cut, fine (Ref.-No. 231), red ring, highly effective gearing for fast abrasion of hard resins and gypsum
Amolado de lima, fino (Ref.-No. 231), anillo rojo, dentado muy eficaz para la remoción rápida de resinas duras y yeso.



Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 72FS	HM 251FS
		060	060
	L mm	13,7	14,5
HP	500 104 ...	... 137 231	... 274 231
		2	2



GF

Facettenverzahnung mit Querhieb, grob (Ref.-Nr. 182), orange/grüner Ring, für Arbeiten auf Kunststoffen, weichbleibenden Kunststoffen und Gips
Faceted toothing with cross cut, coarse (Ref.-No. 182), orange/green ring, for work on acrylic, permanent soft acrylics, and hard plaster
Filos bicelados con cortes transversales, grueso (Ref.-No. 182), anillo naranja/verde, para trabajos en acrílicos, acrílico permanentemente blando y yeso



Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 79GF	HM 251GF
		060	060
	L mm	11,4	14,5
HP	500 104 ...	... 194 182	... 274 182
		2	2



DF

Doppel-Rechts Verzahnung, fein (Ref.-Nr. 232), roter Ring, für effektives ausarbeiten von Kunststoffen und Gips bei gleichzeitig sehr glattem Schliffbild
Double-right gearing, fine (Ref.-No. 232), red ring, for effective working of resins and gypsum with very smooth microsections
Dentado doble hacia la derecha, fino (Ref.-No. 232), anillo rojo, para el repasado eficaz de resinas y yeso con un acabado muy liso



Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 251DF
		060
	L mm	14,5
HP	500 104 ...	... 274 232
		2



DG

Doppelverzahnung, (Ref.-Nr. 233), blauer Ring, für schnelles Abtragen von Kunst-stoff und Gips bei gleichzeitig glattem Schliffbild
Double-gearing (Ref.-No. 233), blue ring, for fast abrasion of resins and gypsum with very smooth microsections
Dentado doble (Ref.-No. 233), anillo azul, para la remoción rápida de resinas y yeso con un acabado muy liso



Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 251DG
		060
	L mm	14,5
HP	500 104 ...	... 274 233
		2



HT

Spezialverzahnung für Titan, grob (Ref.-Nr. 221), grüner Ring, für großflächiges Ausarbeiten von Titan, Titanlegierungen und Nylon
Special toothing for titanium, coarse (Ref.-No. 221), green ring, for extensive trimming on titanium and titanium alloys
Dentado especial para titanio, grueso (Ref.-No. 221), anillo verde, para desbastar superficies grandes de titanio y aleaciones de titanio



Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 79HT	HM 486HT
		040	023
	L mm	14,2	14,0
HP	500 104 ...	... 194 221	... 137 221
		2	2



FT

Spezialverzahnung für Titan, fein (Ref.-Nr. 142), roter Ring, für feines, diffiziles Bearbeiten von Titan, Titanlegierungen und Nylon
Special toothing for titanium, fine (Ref.-No. 142), red ring, for fine, difficult work on titanium and titanium alloys
Dentado especial para titanio, fino (Ref.-No. 142), anillo rojo, para el tallado fino y delicado de titanio y aleaciones de titanio



Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 79FT	HM 486FT
		040	023
	L mm	14,2	14,0
HP	500 104 ...	... 194 142	... 137 142
		2	2



ST

Spezialverzahnung für Titan, super grob (Ref.-Nr. 226), schwarzer Ring, für schnelles, effektives Bearbeiten von Titan und Titanlegierungen
Special toothing for titanium, super coarse (Ref.-No. 226) black ring, for fast effective work on titanium and titanium alloys
Dentado especial para Titanio, super grueso (Ref.-No. 226), anillo negro, para el desbaste rápido y eficaz de titanio y aleaciones de titanio



Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 79ST	HM 79ST	HM 251ST
		040	060	060
	L mm	14,2	12,7	14,5
HP	500 104 ...	... 194 226	... 194 227	... 274 227
		2	2	2




GT

Spezialverzahnung für Titan, standard (Ref.-Nr. 194), blauer Ring, für zügiges Bearbeiten von Titan und Titanlegierungen
Special toothing for titanium, medium (Ref.-No. 194), blue ring, for speedy work on titanium and titanium alloys
Dentado especial para titanio, medio (Ref.-No. 194), anillo azul, para el tallado rápido de titanio y aleaciones de titanio



Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 79GT	HM 486GT
		040	023
	L mm	14,2	14,0
HP	500 104 ...	... 194 194	... 137 194
		2	2

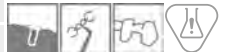

ET

Spezialverzahnung für Titan, extra fein (Ref.-Nr. 111), gelber Ring, für feine, diffizile Arbeiten an Titan und Titanlegierungen
Special toothing for titanium, extra fine (Ref.-No. 111), yellow ring, for extra fine, difficult work on titanium and titanium alloys
Dentado especial para titanio, extra fino (Ref.-No. 111), anillo amarillo, para retocar titanio y aleaciones de titanio



Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 486ET
		023
	L mm	14,0
HP	500 104 ...	... 137 111
		2



BLACK COBRA HARTMETALLFRÄSER | BLACK COBRA TUNGSTEN CARBIDE CUTTERS |

BLACK COBRA FRESAS DE CARBURO PARA LABORATORIO

Black Cobra Line



Die hervorragenden Leistungseigenschaften der Black Cobra Hartmetallfräser wird durch die besondere CARBOCER® (diamond-like carbon) Beschichtung noch optimiert. Durch ein spezielles Verfahren wird auf den Hartmetallfräsern eine diamantähnliche Kohlenstoffschicht appliziert. Diese sorgt für extreme Härte, geringen Verschleiß, niedrigste Reibwerte sowie hohe Korrosionsfestigkeit bei gleichbleibenden Oberflächeneigenschaften. Diese Oberflächenveredelung führt außerdem zu einem Schutz gegenüber aggressiven Reinigungsmitteln. Verschmutzungen lassen sich zudem besser erkennen und leichter entfernen.

The excellent features of the Black Cobra carbide cutters are enhanced by the special CARBOCER® (diamond-like carbon) coating. A specially developed process applies a diamond-like carbon coating to the Cobra carbide cutters with extremely hard, wear-resistant, low-friction, corrosion-resistant surfaces while retaining the original surface properties. This surface refinement leads to protection against aggressive cleaning agents. Contamination is also easier to detect and remove.

Las excelentes características de desempeño de las fresas de carburo tungsteno Black Cobra se optimizan mediante el recubrimiento especial CARBOCER® (carbono como diamante) todavía más. Mediante un procedimiento especial de carbono tungsteno se aplica un revestimiento similar al diamante a las fibras de metal duro. Así se consigue una dureza extrema, un desgaste bajo, coeficientes de reducción muy bajos y resistencia a la corrosión siempre que se mantengan las propiedades de la superficie. Este acabado de superficies también aumenta la protección contra productos de limpieza agresivos. Así, las impurezas son más fáciles de detectar y de limpiar.



S

Kreuzverzahnt, super grob, schwarzer Ring
X-cut, super coarse, black ring
Dentado cruzado, super grueso, anillo negro



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
		L mm		14,7
B251S	HP	507 104 274 224		060



H

Kreuzverzahnt, grob, grüner Ring
X-cut, coarse, green ring
Dentado cruzado, grueso, anillo verde

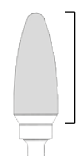


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
		L mm		14,7
B251H	HP	507 104 274 220		060



G

Kreuzverzahnt, standard, blauer Ring
X-cut, medium, blue ring
Dentado cruzado, medio, anillo azul

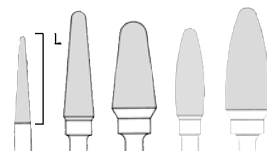


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2	2	2	2
		L mm		11,5	14,2	12,7	12,0	14,7
B23G	HP	507 104 199 190	023					
B79G	HP	507 104 194 190			040	060		
B250G	HP	507 104 275 190					040	
B251G	HP	507 104 274 190						060



F

Kreuzverzahnt, fein, roter Ring
X-cut, fine, red ring
Dentado cruzado, fino, anillo rojo

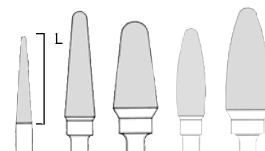


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2	2	2	2
		L mm		11,5	14,2	12,7	12,0	14,7
B23F	HP	507 104 199 140	023					
B79F	HP	507 104 194 140			040	060		
B250F	HP	507 104 275 140					040	
B251F	HP	507 104 274 140						060



mej Aligner

Meisinger

THE ALIGNER SYSTEM

MADE FOR DENTISTS



CLASSIC

Biomechanically
optimized thermo-
formed aligners

3D

Direct printed
shape memory
aligners



MEISINGERDIGITAL.

www.meialigner.com

♥ Made for you!

Elastische Polierer

Flexible Polishers | Pulidores Elásticos

MEISINGER Elastische Polierer garantieren ein geruchloses, makelloses und erschütterungsfreies Arbeiten – vom anspruchsvollen Feinstschliff bis zur Hochglanzpolitur. Ihr Einsatz garantiert das Erzielen optimaler Oberflächengüten auf allen zu bearbeitenden Materialien. Die optimale Abstimmung auf die unterschiedlichen Materialgruppen sorgt für geringste Wärmeentwicklung während der Bearbeitung. Die Instrumente bestehen aus hochwertigen Feinstschleif- und Poliermitteln in einer widerstandsfähigen, elastischen und latexfreien Bindung aus Polysiloxan und synthetischem Kautschuk, die auf einem rostfreien Schaft montiert sind.

MEISINGER Flexible Polishers guarantee odorless, precise, vibration-free performance in any case, from challenging ultra-fine grinding to high gloss polishing. Their use guarantees optimal surface quality on all materials. The optimal adjustment to the different material groups ensures the lowest heat development during processing. The instruments consist of high-quality fine abrasives and polishing agents in a resilient, flexible and latex-free compound of polysiloxane and synthetic rubber mounted on stainless steel shaft.

Los pulidores elásticos de MEISINGER garantizan un procesamiento perfecto, sin olor y sin vibraciones (desde el exigente pulido de precisión hasta el pulido de alto brillo), con una generación mínima de calor en todos los tipos de materiales a procesar. Su uso asegura una calidad perfecta de las superficies, tanto en los dientes naturales como artificiales, en los materiales de obturación, en la resina, la cerámica, los metales preciosos, los esqueléticos, Lithium Silicate, el titanio, los composites, etc. Los instrumentos están fabricados con agentes abrasivos y pulidores muy finos y de máxima calidad en una unión resistente, elástica y sin látex de polisiloxano y caucho sintético, y están montados en un mango inoxidable.



ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN

APPLICATION-GUIDELINES

RECOMENDACIÓN PARA LA APLICACIÓN 86-89

INFOS MEISINGER TWIST POLISHERS

MEISINGER TWIST POLISHERS INFO

INFORMACIÓN MEISINGER TWIST POLISHERS 90-91

UNIVERSALPOLIERER

UNIVERSAL POLISHERS

PULIDORES UNIVERSALES 92-98



3-Stufen System
3-Step Systems
Sistema de 3 niveles

92-93



1-Stufen System
1-Step Systems
Sistema de 1 nivel

94



1-Stufen System
1-Step Systems
Sistema de 1 nivel

95



3-Stufen System
3-Step Systems
Sistema de 3 nivel

96

PROPHYLAXEPOLIERER

POLISHERS FOR PROPHYLAXIS

PULIDORES PROFILÁCTICOS 97



Prophy-Clean

97



Prophys

97

POLIERBÜRSTEN

POLISHING BRUSHES

CEPILLOS PULIDORES 98



SUPER FLEXIBLE DISCS

98



POLIERER FÜR PLASTISCHE FÜLLUNGSMATERIALIEN

POLISHERS FOR COMPOSITES

PULIDOR PARA MATERIALES DE OBTURACIÓN 98



Polierbürsten
Polishing brushes
Cepillos pulidores

99



3-Stufen System
3-Step Systems
Sistema de 3 niveles

99



2-Stufen System
2-Step Systems
Sistema de 2 niveles

100



2-Stufen System
2-Step Systems
Sistema de 2 niveles

100



2-Stufen System
2-Step Systems
Sistema de 2 niveles

101



Occlu Twist Polierer
Occlu Twist Polishers
Pulidores Occlu Twist

101



Hybridpolierer
Hybrid Polishers
Pulidor híbrido

101

POLIERER FÜR KERAMIKEN

POLISHERS FOR CERAMICS

PULIDORES PARA CERÁMICAS 102-109



Mehrstuflensysteme
Multi-Step Systems
Sistemas de varios niveles

102-103



1-Stufen System
1-Step Systems
Sistema de 1 nivele

104



4-Stufen System
4-Step Systems
Sistema de 4 niveles

105



2-Stufen System
2-Step Systems
Sistema de 2 niveles

106



2-Stufen System
2-Step Systems
Sistema de 2 niveles

107



3-Stufen System
3-Step Systems
Sistema de 3 niveles

108

MODELLGUSSPOLIERER

POLISHERS FOR MODEL CASTING

PULIDORES PARA METALES NO PRECIOSOS 109



braun / grün
brown / green
marrón / verde

109

KUNSTSTOFFPOLIERER

POLISHERS FOR ACRYLICS

PULIDORES PARA ACRÍLICO DE PRÓTESIS 110-113



1-Stufen System
1-Step Systems
Sistema de 1 niveles

110



2-Stufen System
2-Step Systems
Sistema de 2 niveles

111



3-Stufen System
3-Step Systems
Sistema de 3 niveles

112-113

UNIVERSALPOLIERER
UNIVERSAL POLISHERS
PULIDORES UNIVERSALES

PROPHYLAXEPOLIERER
POLISHERS FOR PROPHYLAXIS
PULIDORES PROFILÁCTICOS




	1-Stufen System 1-Step Systems Sistema de 1 niveles	3-Stufen Systeme 3-Step Systems Sistema de 3 niveles	1-Stufen Systeme 1-Step Systems Sistema de 1 niveles	1-Stufen Systeme 1-Step Systems Sistema de 1 niveles	3-Stufen Systeme 3-Step Systems Sistema de 3 niveles	Prophy Twist polishers Prophy Twist polishers Prophy Twist polishers	Prophylaxe-Propyl-Cups Prophylaxe-Propyl-Cups Prophylaxe-Propyl-Cups	Prophy-Strips Prophy-Strips Prophy-Strips
ZAHNSCHMELZ ENAMEL ESMALTE DENTAL				✓		✓	✓	✓
ZEMENT CEMENT CEMENTO				✓				
EDELMETALL-LEGIERUNGEN PRECIOUS ALLOY ALEACIONES PRECIOSAS		✓	✓	✓	✓			
NEM-LEGIERUNGEN NON PRECIOUS ALLOY ALEACIONES NO PRECIOSAS	✓	✓						
AMALGAM AMALGAM AMALGAMA		✓		✓				
MODELGUSSLEGIERUNGEN MODEL CASTING ALLOYS DESBASTE DE ESQUELÉTICOS		✓						
KOMPOSIT COMPOSITE COMPOSITE								
HYBRIDKOMPOSIT HYBRIDCOMPOSITE COMPOSITE HÍBRIDO								
KUNSTSTOFF ACRYLICS ACRÍLICO			✓	✓	✓			
FELDSPATKERAMIK FELDSPAR CERAMICS CERÁMICA DE FELDESPATO	✓							
LEUCITVERSTÄRKT KERAMIK LEUCIT-REINFORCED CERAMICS CERÁMICA REFORZADA CON LEUCITA								
LITHIUM DISILIKAT LITHIUM SILICATE SILICATO DE LITIO	✓							
OXID-KERAMIK OXIDE CERAMICS CERÁMICA DE ÓXIDO								
SILIKATKERAMIK SILICATE CERAMICS CERÁMICA DE SILICATO								
ZIRKONOXID ZIRCONIUM OXIDE ÓXIDO DE ZIRCONIO	✓							
SEITE PAGE PÁGINA	92-93	94-95	96	97	98	176	176	176

PROPHYLAXEPOLIERER
POLISHERS FOR PROPHYLAXIS
PULIDORES PROFILÁCTICOS

SUPER FLEXIBLE DISCS
SUPER FLEXIBLE DISCS
SUPER FLEXIBLE DISCS

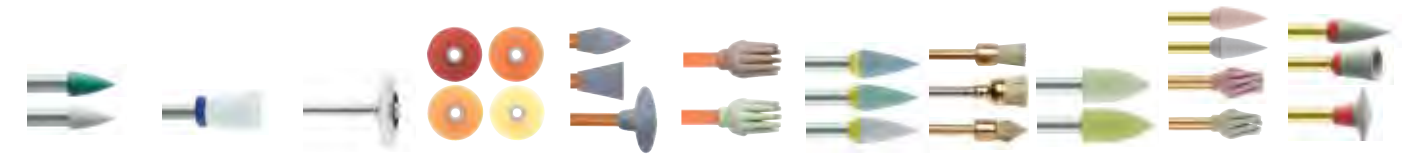POLIERER FÜR PLASTISCHE FÜLLUNGSMATERIALIEN
POLISHERS FOR PLASTIC FILLING MATERIALS
PULIDOR PARA MATERIALES DE OBTURACIÓN



Prophy-Clean Prophy-Clean Prophy-Clean	Prophylax Prophylax Prophylax	Polierbürsten Polishing Brushes Cepillos Pulidores	Super flexible DISCS Super flexible DISCS Super flexible DISCS	Einweg Diamant Komposit Polierer Single-Use Diamond Composite Polishers Pulidores de diamante composite de uso único	2-Stufen System Einweg Diamant Komposit Polierer 2-Step System Disposable Diamond Composite Polisher Sistema de 2 niveles Poli- dora de compuesto de diamante	3-Stufen System 3-Step Systems Sistema de 3 niveles	Polierbürsten Polishing Brushes Cepillos pulidores	2-Stufen System 2-Step Systems Sistema de 2 niveles	2-Stufen System 2-Step Systems Sistema de 2 niveles	Hybridpolierer Hybrid Polishers Pulidor híbrido
✓	✓	✓								
							✓			
			✓							
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
				✓	✓		✓		✓	✓
							✓			
			✓							
99	99	116	100	177	177	101	99	101	102	103



Ausführliche Informationen finden Sie in unserer Broschüre „Präparations- und Politurkompass“ | For further information, take a look at our „MEISINGER Prep and Polish Guide“ brochure | Encontrará más información en nuestro folleto „MEISINGER Prep and Polish Guide“

POLIERER FÜR KERAMIKEN, CAD/CAM*
POLISHERS FOR CERAMICS, CAD/CAM*
PULIDORES PARA CERÁMICAS, CAD/CAM*

MODELLGUSSPOLIERER
POLISHERS FOR MODEL CASTING
PULIDORES PARA METALES NO PRECIOSOS



Mehrstufige Systeme
Multi-Step Systems
Sistemas de varios niveles

4-Stufen Systeme
4-Step Systems
Sistema de 4 niveles

2-Stufen Systeme
2-Step Systems
Sistema de 2 niveles

2-Stufen Systeme
2-Step Systems
Sistema de 2 niveles

3-Stufen Systeme
3-Step Systems
Sistema de 3 niveles

Braun, sehr hart,
verschleißfest
Brown, very hard, abrasion
resistant
Marrón, muy duro,
resistente al desgaste

Grün, grob
Green, coarse
Verde, grueso

ZAHNSCHMELZ ENAMEL ESMALTE DENTAL							
ZEMENT CEMENT CEMENTO							
EDELMETALL-LEGIERUNGEN PRECIOUS ALLOY ALEACIONES PRECIOSAS							
NEM-LEGIERUNGEN NON PRECIOUS ALLOY ALEACIONES NO PRECIOSAS						✓	✓
AMALGAM AMALGAM AMALGAMA							
MODELGUSSLEGIERUNGEN MODEL CASTING ALLOYS DESBASTE DE ESQUELÉTICOS						✓	✓
KOMPOSIT COMPOSITE COMPOSITE							
HYBRIDKOMPOSIT HYBRIDCOMPOSITE COMPOSITE HÍBRIDO							
KUNSTSTOFF ACRYLICS ACRÍLICO							
FELDSPATKERAMIK FELDSPAR CERAMICS CERÁMICA DE FELDESPATO	✓	✓			✓		
LEUCITVERSTÄRKTE KERAMIK LEUCIT-REINFORCED CERAMICS CERÁMICA REFORZADA CON LEUCITA	✓	✓	✓				
LITHIUM DISILIKAT LITHIUM SILICATE SILICATO DE LITIO	✓	✓	✓				
OXID-KERAMIK OXIDE CERAMICS CERÁMICA DE ÓXIDO	✓	✓		✓			
SILIKATKERAMIK SILICATE CERAMICS CERÁMICA DE SILICATO	✓	✓	✓				
ZIRKONOXID ZIRCONIUM OXIDE ÓXIDO DE ZIRCONIO	✓	✓		✓			
SEITE PAGE PÁGINA	104-105	106	107	108	109	110	110

DIAMANTPOLIERER
DIAMOND POLISHER
PULIDORA DE DIAMANTES

[illegible]

89

MEISINGER TWIST POLISHERS

- Flexible Polierlamellen ermöglichen eine optimale Anpassung an jede Oberflächenstruktur
Flexible polishing lamellae allow for an optimal adaption to every surface structure
Las láminas de pulido flexibles permiten una adaptación óptima a cualquier estructura de superficie
- Speziell für schwer zugängliche Bereiche
Especially for areas that are difficult to access
Especial para las superficies de oclusión
- Geringe Hitzeentwicklung dank ständiger Luftkühlung des Materials
Low heat development due to permanent air cooling of the material
Se genera un calor limitado debido a la ventilación constante del material
- Materialschonendes Design erhält die ursprüngliche Oberflächenstruktur
A design conceived for gentle action preserves the original surface structure
El diseño, respetuoso con los materiales, se hace conforme a la estructura de la superficie original
- Abgestufte Diamantkörnung sorgt für kurze Bearbeitungszeiten und hohe Standzeiten
Graduated diamond grit provides for short processing times and a long service life
El grado de grano del diamante tiene distintos niveles, lo que permite reducir el tiempo de trabajo y aumenta la durabilidad.



Anwendung:

- Die Anwendung der Twist Polishers sollte stets ohne Druck erfolgen.
- Zum Schutz der Polierlamellen sollte eine Nutzung über scharfe Kanten stets vermieden werden.
- Bitte beachten Sie die jeweils empfohlenen Drehzahlen.

Application:

- The Twist Polishers should always be used with very light pressure.
- To protect the polishing lamellae, use over sharp margins should always be avoided.
- Please note the recommended speeds.

Aplicación:

- La aplicación de las pulidoras Twist debe ser siempre sin presión.
- A fin de proteger las láminas de pulido, debe evitarse el uso en bordes afilados en todo momento.
- Tenga en cuenta las revoluciones recomendadas.

Hier gehts zu den Anwendungsvideos:

Here are the application videos:

Aquí están los vídeos de aplicación:



Twist Polisher für Metall

Twist Polisher for Metal / Pulidor en espiral para metal

Empfohlene Drehzahl in min ⁻¹ :	Maximale Drehzahl in min ⁻¹ :
Recommended Speed in rpm:	Maximum Speed in rpm:
Revoluciones recomendadas en min ⁻¹ :	Revoluciones máximas en min ⁻¹ :
7.000 - 12.000	20.000

→ Weitere Details zu den Artikeln auf Seite
More details on the articles on page
Más detalles sobre los artículos de la página

93



9517H



9517P



9517V

Prophy Twist Polishers

Prophy Twist Polishers / Prophy Twist Polishers


Empfohlene Drehzahl in min ⁻¹ : Recommended Speed in rpm: Revoluciones recomendadas en min ⁻¹ :	Maximale Drehzahl in min ⁻¹ : Maximum Speed in rpm: Revoluciones máximas en min ⁻¹ :
7.000 - 12.000	20.000

HINWEIS NOTE / NOTA

- Einmalinstrument mit Kunststoffschaft
- Disposable instruments with plastic shank
- Instrumentos de un solo uso con mango

→ Weitere Details zu den Artikeln auf Seite
More details on the articles on page
Más detalles sobre los artículos de la página

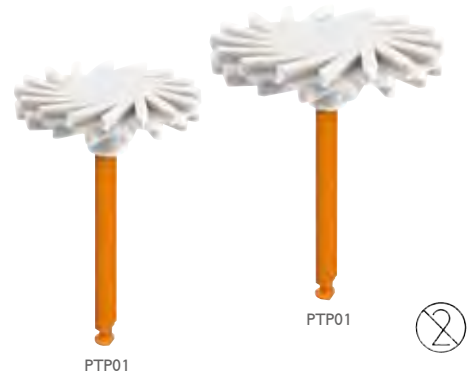175



Twist Polishers für Keramiken

Twist Polishers for ceramics / Twist Polishers para cerámica

Empfohlene Drehzahl in min ⁻¹ : Recommended Speed in rpm: Revoluciones recomendadas en min ⁻¹ :	Maximale Drehzahl in min ⁻¹ : Maximum Speed in rpm: Revoluciones máximas en min ⁻¹ :
7.000 - 12.000	20.000

→ Weitere Details zu den Artikeln auf Seite
More details on the articles on page
Más detalles sobre los artículos de la página

105



Twist Polishers für Komposite und Hybridkeramik

Twist Polishers for composites and Hybrid ceramics / Twist Polishers para composites y composite híbrido

Empfohlene Drehzahl in min ⁻¹ : Recommended Speed in rpm: Revoluciones recomendadas en min ⁻¹ :	Maximale Drehzahl in min ⁻¹ : Maximum Speed in rpm: Revoluciones máximas en min ⁻¹ :
3.000 - 8.000	20.000

→ Weitere Details zu den Artikeln auf Seite
More details on the articles on page
Más detalles sobre los artículos de la página

101



Twist Polishers für PMMA / PEEK

Twist Polishers for PMMA / PEEK / Pulidoras Twist para PMMA / PEEK

Empfohlene Drehzahl in min ⁻¹ : Recommended Speed in rpm: Revoluciones recomendadas en min ⁻¹ :	Maximale Drehzahl in min ⁻¹ : Maximum Speed in rpm: Revoluciones máximas en min ⁻¹ :
3.000 - 10.000	20.000

→ Weitere Details zu den Artikeln auf Seite
More details on the articles on page
Más detalles sobre los artículos de la página

110



3-Stufen Systeme | 3-Step Systems | Sistema de 3 niveles

Universalpoliersystem für:

Edelmetalle
Nicht-Edelmetalle (NEM)
Modellguss
Amalgam

1. Stufe
Vorpulitur (grob)

2. Stufe
Politur (mittel)

3. Stufe
Hochglanzpolitur (fein)

Empfohlene Drehzahl: 7.000 - 12.000 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 20.000 min⁻¹

Universal Polishing system for:

Precious metals
Non-precious metals
Model casting
Amalgam

1. Step
Pre-polishing (coarse)

2. Step
Polishing (medium)

3. Step
High shine polishing (fine)

Recommended Speed: 7.000 - 12.000 rpm
Maximum Speed: 20.000 rpm

Sistema universal de pulido para:

Metales preciosos
Metales no preciosos
Esqueléticos
Amalgama

1ª escala
Prepulido (grueso)

2ª escala
Pulido (mediano)

3ª escala
Pulido de brillo intenso (fino)

Revoluciones recomendadas: 7.000 - 12.000 min⁻¹
Revoluciones máximas: 20.000 min⁻¹

9501V
9501P
9501H


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	18,0	18,0	18,0
9501V	HP	652 104 257 533		055		
9501P	HP	652 104 257 513			055	
9501H	HP	652 104 257 503				055


9502V
9502P
9502H


Fig.	Shank	Ref.-No.		5	5	5
			L mm	12,0	12,0	12,0
9502V	HP	652 104 300 533		043*		
	RA	652 204 300 533		043		
9502P	HP	652 104 300 513			043*	
	RA	652 204 300 513			043	
9502H	HP	652 104 300 503				043*
	RA	652 204 300 503				043


9503V
9503P
9503H


Fig.	Shank	Ref.-No.		5	5	5
			L mm	7,5	7,5	7,5
9503V	RA	652 204 297 533		033		
	FG	652 314 297 533		033		
9503P	HP	652 104 297 513			033*	
	RA	652 204 297 513			033	
	FG	652 314 297 513			033	
9503H	HP	652 104 297 503				033*
	RA	652 204 297 503				033
	FG	652 314 297 503				033


9504V
9504P
9504H


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	9,5	9,5	9,5
9504V	RA	652 204 030 533		065		
9504P	RA	652 204 030 513			065	
9504H	RA	652 204 030 503				065



9506V



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	10,0
9506V	RA	652 204 292 533		050


9507V
9507P
9507H


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	16,0	16,0	16,0
9507V	HP	652 104 292 533		050		
9507P	HP	652 104 292 513			050	
9507H	HP	652 104 292 503				050



9508V

9508P

9508H



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	2,5	2,5	2,5
9508V	HP	652 104 303 533		145		
9508P	HP	652 104 303 513			145	
9508H	HP	652 104 303 503				145



9509P

9509H



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	2,0	2,0
9509P	HP	652 104 042 513		145	
9509H	HP	652 104 042 503			145



9511V

9511P

9511H



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10	10	10
			L mm	3,0	3,0	3,0
9511V	unmounted	652 900 372 533		220		
9511P	unmounted	652 900 372 513			220	
9511H	unmounted	652 900 372 503				220



Träger: 305RF, Größe 50, Informationen auf S.146 | Mandrel: 305RF, Size 50, Information on p.146 |
Mandril: 305RF, Tamaño 50, información en la pág. 146

9513V

9513P

9513H



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10	10	10
			L mm	4,0	2,5	2,5
9513V	unmounted	652 900 303 533		220		
9513P	unmounted	652 900 303 513			220	
9513H	unmounted	652 900 303 503				220



Träger: 305RF, Größe 50, Informationen auf S.146 | Mandrel: 305RF, Size 50, Information on p.146 |
Mandril: 305RF, Tamaño 50, información en la pág. 146

9514V

9514P

9514H



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10	10	10
			L mm	20,0	20,0	20,0
9514V	unmounted	652 900 114 533		070		
9514P	unmounted	652 900 114 513			070	
9514H	unmounted	652 900 114 503				070



Träger: 301LR, Größe 50, Informationen auf S.146 | Mandrel: 301LR, Size 50, Information on p.146 |
Mandril: 301LR, Tamaño 50, información en la pág. 146

9517V

9517P

9517H

New



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2	2
9517V	RA	652 204 543 533		140		
9517P	RA	652 204 543 513			140	
9517H	RA	652 204 543 503				140



9518P

9518H



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		3	3	3	3
			L mm	12,0	12,0	12,0	12,0
9518P	HP	652 104 113 513		100	140		
9518H	HP	652 104 113 503				100	140



1-Stufen Systeme | 1-Step Systems | Sistema de 1 nivel

Universalpoliersystem (unmontiert) für:
Edelmetalle
Kunststoff

Empfohlene Drehzahl: 7.000 - 10.000 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 20.000 min⁻¹

Universal Polishing system (unmounted) for:
Precious metals
Acrylics

Recommended Speed: 7.000 - 10.000 rpm
Maximum Speed: 20.000 rpm

Sistema universal de pulido (sin montar) para:
Metales preciosos
Acrílico

Revoluciones recomendadas: 7.000 - 10.000 min⁻¹
Revoluciones máximas: 20.000 min⁻¹

9961



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	10
		L mm	9,0
9961	unmounted	658 900 030 522	110



Träger: 303S, Größe 50, Informationen auf S.146 |
Mandrel: 303S, Size 50, Information on p.146 |
Mandril: 303S, Tamaño 50, información en la pág. 146

9962



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	10
		L mm	7,0
9962	unmounted	658 900 030 522	120



Träger: 303S, Größe 50, Informationen auf S.146 |
Mandrel: 303S, Size 50, Information on p.146 |
Mandril: 303S, Tamaño 50, información en la pág. 146

9963

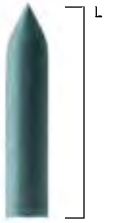


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	10
		L mm	28,0
9963	unmounted	658 900 292 522	060



Träger: 301LR, Größe 50, Informationen auf S.146 |
Mandrel: 301LR, Size 50, Information on p.146 |
Mandril: 301LR, Tamaño 50, información en la pág. 146

9964



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	10
		L mm	2,0
9964	unmounted	658 900 303 522	120



Träger: 303RF, Größe 35, Informationen auf S.146 |
Mandrel: 303RF, Size 35, Information on p.146 |
Mandril: 303RF, Tamaño 35, información en la pág. 146

9965



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	10
		L mm	2,5
9965	unmounted	658 900 303 522	150



Träger: 303RF, Größe 35, Informationen auf S.146 |
Mandrel: 303RF, Size 35, Information on p.146 |
Mandril: 303RF, Tamaño 35, información en la pág. 146

9966



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	10
		L mm	3,0
9966	unmounted	658 900 303 522	220



Träger: 303RF, Größe 50, Informationen auf S.146 |
Mandrel: 303RF, Size 50, Information on p.146 |
Mandril: 303RF, Tamaño 50, información en la pág. 146

9967



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	10
		L mm	2,0
9967	unmounted	658 900 372 522	120



Träger: 303RF, Größe 35, Informationen auf S.146 |
Mandrel: 303RF, Size 35, Information on p.146 |
Mandril: 303RF, Tamaño 35, información en la pág. 146

9968



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	10
		L mm	2,0
9968	unmounted	658 900 372 522	170



Träger: 303RF, Größe 35, Informationen auf S.146 |
Mandrel: 303RF, Size 35, Information on p.146 |
Mandril: 303RF, Tamaño 35, información en la pág. 146

9969



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	10
		L mm	3,0
9969	unmounted	658 900 373 522	170



Träger: 303RF, Größe 35, Informationen auf S.146 |
Mandrel: 303RF, Size 35, Information on p.146 |
Mandril: 303RF, Tamaño 35, información en la pág. 146

9970



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	10
		L mm	3,0
9970	unmounted	658 900 373 522	220



Träger: 303RF, Größe 50, Informationen auf S.146 |
Mandrel: 303RF, Size 50, Information on p.146 |
Mandril: 303RF, Tamaño 50, información en la pág. 146

1-Stufen Systeme | 1-Step Systems | Sistema de 1 nivel

Universalpoliersystem für:

Edelmetalle
Kunststoff
Zement
Amalgam
Zahnschmelz

Empfohlene Drehzahl: 7.000 - 10.000 min⁻¹Maximale Drehzahl: 20.000 min⁻¹

Universal Polishing system for:

Precious metals
Acrylics
Cement
Amalgam
Enamel

Recommended Speed: 7.000 - 10.000 rpm

Maximum Speed: 20.000 rpm

Sistema universal de pulido para:

Metales preciosos
Acrílico
Cemento
Amalgama
Esmalte dental

Revoluciones recomendadas: 7.000 - 10.000 min⁻¹Revoluciones máximas: 20.000 min⁻¹

9501U



Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.	5
		L mm	15,0
9501U	HP	658 104 257 523	055*
	RA	658 204 257 523	055



9502U



Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.	5
		L mm	12,0
9502U	HP	658 104 300 523	045*
	RA	658 204 300 523	045



9504U



Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.	5	5
		L mm	10,0	8,5
9504U	RA	658 204 030 523	070	090



9507U



Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.	5
		L mm	16,0
9507U	HP	658 104 292 523	050



9508U



Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.	5
		L mm	2,5
9508U	HP	658 104 310 523	110*
	RA	658 204 310 523	110



9509U



Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.	5
		L mm	2,0
9509U	HP	658 104 044 523	110



9511U



Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.	10
		L mm	3,0
9511U	unmounted	658 900 372 523	220



Träger: 303RE, Größe 35, Informationen auf S.146 | Mandrel: 303RE, Size 35, Information on p.146 | Mandril: 303RE, Tamaño 35, información en la pág. 146

9513U



Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.	10	10	10
		L mm	2,5	3,5	4,0
9513U	unmounted	658 900 303 523	130	180	220



Träger: 303RE, Größe 35, Informationen auf S.146 | Mandrel: 303RE, Size 35, Information on p.146 | Mandril: 303RE, Tamaño 35, información en la pág. 146

9515U



Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.	10
		L mm	24,0
9515U	unmounted	658 900 133 523	060



Träger: 301LR, Größe 50, Informationen auf S.146 | Mandrel: 301LR, Size 50, Information on p.146 | Mandril: 301LR, Tamaño 50, información en la pág. 146

9516U



Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.	10
		L mm	6,5
9516U	unmounted	658 900 030 523	110



Träger: 303S, Größe 50, Informationen auf S.146 | Mandrel: 303S, Size 50, Information on p.146 | Mandril: 303S, Tamaño 50, información en la pág. 146

3-Stufen Systeme | 3-Step Systems | Sistema de 3 niveles

Universalpoliersystem:

Schwarz: Edelmetall, Kunststoff

Hellblau: Edelmetall, Kunststoff

Rosa: Edelmetall

1. Stufe
Politur

2. Stufe
Hochglanzpolitur

3. Stufe
Spiegelglanzpolitur

Empfohlene Drehzahl: 7.000 - 10.000 min⁻¹

Maximale Drehzahl: 20.000 min⁻¹

Universal Polishing system:

Black: Precious metals, Acrylics

Light-blue: Precious metals, Acrylics

Pink: Precious metals

1. Step
Polishing

2. Step
High shine polishing

3. Step
Mirror finish polishing

Recommended Speed: 7.000 - 10.000 rpm

Maximum Speed: 20.000 rpm

Sistema universal de pulido:

Negro: Metales preciosos, Acrílico

Azul claro: Metales preciosos, Acrílico

Rosa: Metales preciosos

1ª escala
Pulido

2ª escala
Pulido de brillo intenso

3ª escala
Pulido de alto brillo

Revoluciones recomendadas: 7.000 - 10.000 min⁻¹

Revoluciones máximas: 20.000 min⁻¹

9681V

9681P

9681H



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	10	10	10
	L mm		3,0	3,0	3,0
9681V	unmounted	658 900 371 521	220		
9681P	unmounted	658 900 372 511		220	
9681H	unmounted	658 900 372 501			220



Träger: 303RF, Größe 50, Informationen auf S.146 | Mandrel: 303RF, Size 50, Information on p.146 | Mandril: 303RF, Tamaño 50, información en la pág. 146

9683V

9683P

9683H



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	10	10	10	10	10
	L mm		3,5	4,0	3,5	4,0	4,0
9683V	unmounted	658 900 303 521	180	220			
9683P	unmounted	658 900 303 511			180	220	
9683H	unmounted	658 900 303 501					220



Träger: 303RF, Größe 50, Informationen auf S.146 | Mandrel: 303RF, Size 50, Information on p.146 | Mandril: 303RF, Tamaño 50, información en la pág. 146

9687V

9687P



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	10	10
	L mm		24,0	24,0
9687V	unmounted	658 900 133 521	060	
9687P	unmounted	658 900 133 511		060



Träger: 301LR, Informationen auf S.146 |

Mandrel: 301LR, Information on p.146 |

Mandril: 301LR, información en la pág. 146

PROPHYLAXEPOLIERER | POLISHERS FOR PROPHYLAXIS | PULIDORES PROFILÁCTICOS

Prophy-Clean | Prophy-Clean | Prophy-Clean

Besonders feste Polierer aus Edelmetall in einer Kunststoffbindung. **Entfernt Zahnstein, präzise Entfernung von Zahnverfärbungen, Reinigung schwer zugänglicher Stellen, Verletzungen am Zahnschmelz sind ausgeschlossen**

- grobe Körnung
- mittlere Körnung

- Entfernung von Zahnstein, Belägen und Verfärbungen
- Entfernung von Bracketkleberresten
- Entfernung von Zementüberschüssen
- Subgingivale Wurzelglättung

Empfohlene Drehzahl: 5.000 - 10.000 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 20.000 min⁻¹

Particularly robust polishers made of white corundum in a plastic bond. **Scale Removal, precise removal of tooth discolorations, easy cleaning of areas difficult to reach, no damages to enamel**

- coarse grain
- medium grain

- Removal of tartar, plaque, and discolorations
- Removal of residues of bracket bonding
- Removal of excess cement
- Subgingival root smoothing

Recommended Speed: 5.000 - 10.000 rpm
Maximum Speed: 20.000 rpm

Pulidores especialmente firmes de corindón en aglomerante de plástico. **Remoción de sarro, remueve de manera exacta las discoloraciones del diente, limpieza en regiones de difícil acceso, descartada la posibilidad de lesiones en el esmalte dental**

- graneado grueso
- graneado mediano

- Remoción del sarro, de placas y discoloraciones
- Remoción de residuos de pegamento para abrazaderas
- Remoción de los excesos de cemento
- Suavizamiento subgingival de la raíz

Revoluciones recomendadas: 5.000 - 10.000 min⁻¹
Revoluciones máximas: 20.000 min⁻¹

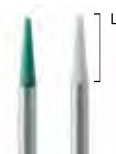
PCL06
PCL01

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
			L mm	9,0
PCL06	RA	633 204 172 537	023	
PCL01	RA	633 204 172 536		023



PCL07



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
			L mm	5,0
PCL07	RA	633 204 030 537	033	

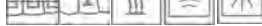
PCL08
PCL03

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
			L mm	7,5
PCL08	RA	633 204 249 537	023	
PCL03	RA	633 204 249 536		023

PCL09
PCL04

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
			L mm	8,5
PCL09	RA	633 204 141 537	030	
PCL04	RA	633 204 141 536		030

PCL10
PCL05

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
			L mm	6,5
PCL10	RA	633 204 243 537	030	
PCL05	RA	633 204 243 536		030



Prophys | Prophys | Prophys

Prophylaxepolierer, Kelch
(Anwendung mit Polierpaste)

■ Weiß
 Extra fein

Empfohlene Drehzahl: 5.000 - 10.000 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 10.000 min⁻¹

Polishers for prophylaxis, Cup
(With polishing paste)

■ White
 Extra fine

Recommended Speed: 5.000 - 10.000 rpm
Maximum Speed: 10.000 rpm

Pulidores profilácticos, Copa
(Con pasta para pulir)

■ Blanco
 Extra fino

Revoluciones recomendadas: 5.000 - 10.000 min⁻¹
Revoluciones máximas: 10.000 min⁻¹

9995*



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
			L mm	9,0
9995	RA	022 204 034 491	060	



9996*



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
			L mm	9,0
9996	RA	022 204 036 491	060	



Der breite Kragen des Polierers schützt das Winkelstück optimal vor dem Eindringen der Polierpaste.

The wide collar of the polisher protects the contra-angle handpiece optimally against the penetration of the polishing paste.

El amplio cuello de la pulidora protege el contraángulo de forma óptima contra la infiltración de la pasta de diamante.

9995C*

extra fein / extra fine



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
			L mm	8,0
9995C	RA	022 204 034 501	065	



9995M*

mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
			L mm	9,5
9995M	RA	022 204 034 524	070	



9991C*

extra fein / extra fine



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
			L mm	7,5
9991C	RA	022 204 243 501	030	



POLIERBÜRSTEN | POLISHING BRUSHES | CEPILLOS PULIDORES

115*



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	6,0
115	RA	100 204 292 000		040



Prophylaxe-Bürste, mit harten Nylon-Borsten, weiß | Prophylaxis brush with hard nylon bristles, white | Cepillo profiláctico con cerdas duras de nylon, blanco

Empfohlene Drehzahl: 1.500 min⁻¹
Recommended Speed: 1.500 rpm
Revoluciones recomendadas: 1.500 min⁻¹

116*



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	5,0
116	RA	100 204 030 000		060



Prophylaxe-Bürste, mit harten Nylon-Borsten, weiß | Prophylaxis brush with hard nylon bristles, white | Cepillo profiláctico con cerdas duras de nylon, blanco

Empfohlene Drehzahl: 1.500 min⁻¹
Recommended Speed: 1.500 rpm
Revoluciones recomendadas: 1.500 min⁻¹

*
 Zu verwenden
 mit Polierpaste /
 To use
 with polishing paste /
 Uso con pasta
 de diamante

SUPER FLEXIBLE DISCS | SUPER FLEXIBLE DISCS | SUPER FLEXIBLE DISCS

Flexible Polierscheibchen für die Bearbeitung von Kompositen, Keramiken und Metallen.

Empfohlene Drehzahl: 7.000 - 10.000 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 20.000 min⁻¹

Flexible polishing discs were designed for working with composites, ceramics and metals.

Recommended Speed: 7.000 - 10.000 rpm
Maximum Speed: 20.000 rpm

Discos pulidores flexibles para trabajar composite, cerámica y metal.

Revoluciones recomendadas: 7.000 - 10.000 min⁻¹
Revoluciones máximas: 20.000 min⁻¹

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		SF1010	SF1020	SF1030	SF1040
			Größe / Size Ø	100	100	100	100
			Körnung / Grain	grob / coarse	mittel / medium	fein / fine	super fein / super-fine
unmounted	620 900 371 531			100			
unmounted	620 900 371 521				100		
unmounted	620 900 371 511					100	
unmounted	620 900 371 501						100



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		SF1410	SF1420	SF1430	SF1440
			Größe / Size Ø	140	140	140	140
			Körnung / Grain	grob / coarse	mittel / medium	fein / fine	super fein / super-fine
unmounted	620 900 371 531			140			
unmounted	620 900 371 521				140		
unmounted	620 900 371 511					140	
unmounted	620 900 371 501						140



SF10 / SF14 - Sets
 auf Seite | on page | en la página 224

SF1RF stainless steel



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
SF1RF	RA	330 204 608 000		000



Träger für Super Flexible Discs | Mandrel for Super Flexible Discs | Mandril para Super Flexible Discs

POLIERER FÜR PLASTISCHE FÜLLUNGSMATERIALIEN | POLISHERS FOR COMPOSITES | PULIDOR PARA MATERIALES DE OBTURACIÓN

Für eine effiziente intraorale Vor- und Hochglanzpolitur von Komposit-, Kompomer- und Glas-Ionomer-Zementen bieten die Bürsten 117/118/119 das ideale Instrumentarium. Die in drei Größen erhältlichen Bürsten verfügen über spezielle Borsten, die mit feinen Siliziumkarbid-Partikeln funktionalisiert sind und diese während des Poliervorgangs abgeben. Der zusätzliche Einsatz einer Polierpaste ist daher nicht notwendig, um einen perfekten Hochglanzeffekt zu erzielen. Kompositfüllungen im Okklusal- und Approximalbereich können zudem in nur einem Arbeitsschritt fertiggestellt und poliert werden.

The brushes 117/118/119 are the ideal instruments for the efficient pre-polishing and high gloss polishing of composite, compomer, and glass ionomer cement surfaces. Available in three sizes, the brushes have special fibers that are covered with fine silicon carbide particles, which are released during the polishing process. Therefore, the additional use of polishing paste is not necessary to achieve perfect high gloss results. Furthermore, composite restorations in the occlusal and proximal area can be finished and polished in just one step.

Los cepillos 117/118/119 son los instrumentos ideales para el prepulido eficaz y el pulido de alto brillo de superficies de composite, compómero y cemento de ionómero de vidrio. Disponibles en tres tamaños, los cepillos tienen fibras especiales recubiertas de finas partículas de carburo de silicio, que se liberan durante el proceso de pulido. Por lo tanto, no es necesario el uso adicional de pasta de pulido para conseguir unos resultados perfectos de alto brillo. Además, las restauraciones de composite en la zona oclusal y proximal pueden acabarse y pulirse en un solo paso.

117

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10
			L mm	6,5
117	RA	655 204 131 504		040

**118**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10
			L mm	5,5
118	RA	655 204 010 504		060

**119**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10
			L mm	6,5
119	RA	655 204 010 504		040



Polierbürste, mit Siliziumkarbid-Partikeln
Vor- und Hochglanzpolitur von **Komposit-, Kompomer- und Glas-Ionomer-Zement**

Empfohlene Drehzahl: 7.000 - 10.000 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 10.000 min⁻¹

Brushes with silicon carbide functionalization for pre- and high gloss polishing of **composite, compomer, and glass ionomer cement**

Recommended Speed: 7.000 - 10.000 min⁻¹
Maximum Speed: 10.000 rpm

Cepillos con funcionalización de carburo de silicio para el pulido previo y de alto brillo de **composite, compómero y cemento de ionómero de vidrio**

Revoluciones recomendadas: 7.000 - 10.000 min⁻¹
Revoluciones máximas: 10.000 min⁻¹

3-Stufen Systeme | 3-Step Systems | Sistema de 3 niveles

Diamantpolierer für:
weiche Komposite

- 1. Stufe
Vorpolitur
- 2. Stufe
Politur
- 3. Stufe
Hochglanzpolitur

Empfohlene Drehzahl: 5.000 - 8.000 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 20.000 min⁻¹

Diamond-polisher for:
soft composites

- 1. Step
Pre-polishing
- 2. Step
Polishing
- 3. Step
High shine polishing

Recommended Speed: 5.000 - 8.000 rpm
Maximum Speed: 20.000 rpm

Pulidores de diamante para:
compositos blandos

- 1ª escala
Prepulido
- 2ª escala
Pulido
- 3ª escala
Pulido de brillo intenso

Revoluciones recomendadas: 5.000 - 8.000 min⁻¹
Revoluciones máximas: 20.000 min⁻¹

9712G
9712M
9712F



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2	2
			L mm	10,5	10,5	10,5
9712G	RA	803 204 243 532		040		
9712M	RA	803 204 243 523			040	
9712F	RA	803 204 243 513				040



9713M
9713F



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
			L mm	7,5	7,5
9713M	FG	803 314 243 523		033	
9713F	FG	803 314 243 513			033



9714G
9714M
9714F



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2	2
			L mm	7,5	7,5	7,5
9714G	RA	803 204 030 532		060		
9714M	RA	803 204 030 523			060	
9714F	RA	803 204 030 513				060



9718G
9718M
9718F



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2	2
			L mm	3,0	3,0	3,0
9718G	RA	803 204 303 532		100		
9718M	RA	803 204 303 523			100	
9718F	RA	803 204 303 513				100



2-Stufen Systeme | 2-Step Systems | Sistema de 2 niveles

Poliersystem: Zum Polieren von Kompositen			Polishing system: For polishing of composites			Sistema de pulido para: Para pulir composite		
1. Stufe Vorpulitur			1. Step Pre-polishing			1ª escala Prepulido		
2. Stufe Politur			2. Step Polishing			2ª escala Pulido		
Empfohlene Drehzahl: 7.000 - 10.000 min ⁻¹ Maximale Drehzahl: 20.000 min ⁻¹			Recommended Speed: 7.000 - 10.000 rpm Maximum Speed: 20.000 rpm			Revoluciones recomendadas: 7.000 - 10.000 min ⁻¹ Revoluciones máximas: 20.000 min ⁻¹		

9526V 9526P



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	10,5	10,5
9526V	RA	658 204 300 522		047	
9526P	RA	658 204 300 512			047



9527V 9527P



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	6,0	6,0
9527V	RA	658 204 297 522		033	
9527P	RA	658 204 297 512			033



9528V 9528P



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	9,0	9,0
9528V	RA	658 204 030 522		065	
9528P	RA	658 204 030 512			065



2-Stufen Systeme | 2-Step Systems | Sistema de 2 niveles

Diamantpolierer: Speziell für harte, hochgefüllte Komposite der neuesten Generation und Hybridkomposite.			Diamond polishing system: Especially for hard, highly-filled composites of the latest generation and nano composites.			Sistema de pulido de diamante: Especial para composites duros y alta carga de relleno de la última generación y composite híbrido.		
1. Stufe Glätten			1. Step Smoothing			1ª escala Alisar		
2. Stufe Hochglanzpolitur			2. Step High shine polishing			2ª escala Pulido de brillo intenso		
Empfohlene Drehzahl: 3.000 - 8.000 min ⁻¹ Maximale Drehzahl: 20.000 min ⁻¹			Recommended Speed: 3.000 - 8.000 rpm Maximum Speed: 20.000 rpm			Revoluciones recomendadas: 3.000 - 8.000 min ⁻¹ Revoluciones máximas: 20.000 min ⁻¹		

9760M 9760F



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
			L mm	2,5	2,5
9760M	RA	803 204 303 526		100	
9760F	RA	803 204 303 506			100



9762M 9762F



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
			L mm	10,0	10,0
9762M	RA	803 204 243 526		040	
9762F	RA	803 204 243 506			040



9766M 9766F




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
			L mm	10,0	10,0
9766M	RA	803 204 300 526		050	
9766F	RA	803 204 300 506			050



9767M 9767F



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
			L mm	6,5	6,5
9767M	RA	803 204 243 526		030	
9767M	FG	803 314 243 526		030	
9767F	RA	803 204 243 506			030*
9767F	FG	803 314 243 506			030

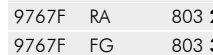

9768M 9768F



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
			L mm	7,5	7,5
9768M	RA	803 204 030 526		060	
9768F	RA	803 204 030 506			060



Twist Polisher:

Speziell für die einfache Politur aller Kompositrestaurationen auch in schwer zugänglichen Bereichen.

- Flexible Polierlamellen
- Speziell für Okklusionsflächen
- Materialschonend
- Kurze Bearbeitungszeiten
- Äußerst hohe Standzeiten

Twist Polisher:

Especially for simple polishing of all composite restorations, also in difficult to access regions.

- Flexible polishing lamellae
- Specifically for occlusal surfaces
- Material-saving
- Short processing times
- Extremely high service life

Twist Polisher:

Especial para el pulido sencillo de todas las restauraciones de composite, también en las zonas de difícil acceso.

- Láminas pulidoras flexibles
- Especial para las superficies de oclusión
- Respetuosos con el material
- Tiempos de pulido cortos
- Durabilidad extremadamente alta

9769M**9769F**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
			L mm	1,6	1,6
9769M	RA	803 204 000 523		100	
9769M	RA	803 204 000 523		140	
9769M	HP	803 104 000 523		140*	
9769M	HP	803 104 000 523		170*	
9769F	RA	803 204 000 503			100
9769F	RA	803 204 000 503			140
9769F	HP	803 104 000 503			140*
9769F	HP	803 104 000 503			170*



Hinweis: Mit geringem Anpressdruck zu verwenden! |

Note: To be used with little contact pressure! |

Nota: Usar aplicando poca presión!

**2663 - Twist Polishing Kit**

auf Seite | on page | en la página 222

Occlu Twist Polisher:

- Speziell für die okklusale Politur von Kompositrestaurationen
- Erreicht auch tiefste Fissuren
- Materialschonend
- Hochglänzende Ergebnisse

Occlu Twist Polisher:

- Especially for occlusal polishing of composite restorations
- Reaches even the deepest fissures
- Gentle on material
- High-gloss results

Pulidores Occlu Twist:

- Especial para el pulido oclusal de restauraciones por composite
- Alcanza las fisuras más profundas
- Respeto los materiales
- Resultado de alto brillo

9765M**9765F**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
			L mm	5,5	5,5
9765M	RA	803 204 000 523		055	
9765F	RA	803 204 000 503			055

**Hybridpolierer | Hybrid Polishers | Pulidor híbrido****Diamantpolierer für:
Hybridkomposite**

Empfohlene Drehzahl: 3.000 - 10.000 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 20.000 min⁻¹

**Diamond polishers for:
hybrid composites**

Recommended Speed: 3.000 - 10.000 rpm
Maximum Speed: 20.000 rpm

**Pulidores de diamante para:
composite híbrido**

Revoluciones recomendadas: 3.000 - 10.000 min⁻¹
Revoluciones máximas: 20.000 min⁻¹

9780**9781****9782**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5
			L mm	10,0	13,0	7,5	2,5	2,5
9780	RA	803 204 243 522		040				
9780	HP	803 104 243 523			055*			
9781	RA	803 204 030 522				060		
9782	RA	803 204 304 522					100	
9782	HP	803 104 304 523						145*



POLIERER FÜR KERAMIKEN | POLISHERS FOR CERAMICS | PULIDORES PARA CERÁMICAS

Mehrstufen Systeme | Multi-Step Systems | Sistemas de varios niveles

Diamantpoliersystem für:
Keramik

- 1. Stufe**
Vorpolitur (super grob)
- 2. Stufe**
Vorpolitur (grob)
- 3. Stufe**
Politur (mittel)
- 4. Stufe**
Hochglanzpolitur (fein)
- 5. Stufe**
Spiegelglanzpolitur (extra fein)

Empfohlene Drehzahl: 7.000 - 12.000 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 20.000 min⁻¹

**Diamond impregnated porcelain
polishing system:**
Ceramics

- 1. Step**
Pre-polishing (super coarse)
- 2. Step**
Pre-polishing (coarse)
- 3. Step**
Polishing (medium)
- 4. Step**
High shine polishing (fine)
- 5. Step**
Mirror finish polishing (extra fine)

Recommended Speed: 7.000 - 12.000 rpm
Maximum Speed: 20.000 rpm

Sistema de pulido de diamante:
Cerámica

- 1ª escala**
Prepulido (super grueso)
- 2ª escala**
Prepulido (grueso)
- 3ª escala**
Pulido (mediano)
- 4ª escala**
Pulido de brillo intenso (fino)
- 5ª escala**
Pulido de alto brillo (extra fino)

Revoluciones recomendadas: 7.000 - 12.000 min⁻¹
Revoluciones máximas: 20.000 min⁻¹

9741G
9741M
9741F

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2	2
			L mm	7,5	7,5	7,5
9741G	RA	803 204 243 533	030			
9741M	RA	803 204 243 524		030		
	FG	803 314 243 524		030		
9741F	RA	803 204 243 503			030	
	FG	803 314 243 503			030	

**9742H**
9742G
9742M
9742F
9742C

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2	2	2	2
			L mm	13,0	13,0	13,0	13,0	13,0
9742H	HP	803 104 300 544	040*					
9742G	HP	803 104 300 533		040*				
9742M	HP	803 104 300 524			040*			
9742F	RA	803 204 300 503				040		
9742F	HP	803 104 300 503				040*		
9742C	HP	803 104 300 493					040*	

**9743G**
9743M
9743F
9743C

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2	2	2
			L mm	10,0	10,0	10,0	10,0
9743G	RA	803 204 243 533	040				
9743M	RA	803 204 243 524		040			
9743F	RA	803 204 243 503			040		
9743C	RA	803 204 243 930				040	

**9744G**
9744M
9744F
9744C

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2	2	2
			L mm	7,5	7,5	7,5	7,5
9744G	RA	803 204 030 533	060				
9744M	RA	803 204 030 524		060			
9744F	RA	803 204 030 503			060		
9744C	RA	803 204 030 493				060	

**9745G**
9745M
9745F

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2	2
			L mm	5,5	5,5	5,5
9745G	RA	803 204 000 534	055			
9745M	RA	803 204 000 524		055		
9745F	RA	803 204 000 514			055	



9746G**9746M****9746F****9746C**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2	2	2
			L mm	2,5	2,5	2,5	2,5
9746G	RA	803 204 303 533		100			
9746M	RA	803 204 303 524			100		
9746F	RA	803 204 303 503				100	
9746C	RA	803 204 304 514					100

**9749G****9749M****9749F**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2	2
			L mm	2,0	2,0	2,0
9749G	HP	803 104 044 533		110*		
9749G	RA	803 204 044 533		110		
9749M	HP	803 104 044 524			110*	
9749M	RA	803 204 044 524			110	
9749F	HP	803 104 044 503				110*
9749F	RA	803 204 044 503				110

**9752H****9752G****9752M****9752F****9752C**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1	1	1	1
			L mm	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
9752H	HP	803 104 372 544		170				
	unmounted	803 900 372 544		170				
9752G	HP	803 104 372 533			170			
	unmounted	803 900 372 533			170			
9752M	HP	803 104 372 524				170		
	unmounted	803 900 372 524				170		
9752F	HP	803 104 372 503					170	
	unmounted	803 900 372 503					170	
9752C	HP	803 104 372 493						170
	unmounted	803 900 372 493						170



Träger: 307RF, Informationen auf S.146 | Mandrel: 307RT, Information on p.146 | Mandril: 307RT, información en la pág. 146

9753G**9753M****9753F**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1	1
			L mm	2,5	2,5	2,5
9753G	HP	803 104 303 533		150		
	unmounted	803 900 303 533		150		
9753M	HP	803 104 303 524			150	
	unmounted	803 900 303 524			150	
9753F	HP	803 104 303 503				150
	unmounted	803 900 303 503				150



Träger: 303RF, Größe 35, Informationen auf S.146 | Mandrel: 303RF, Size 35, Information on p.146 | Mandril: 303RF, Tamaño 35, información en la pág. 146

9770H**9770G****9770M****9770F****9770C**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1	1	1	1
			L mm	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
9770H	HP	803 104 303 544		260				
9770G	HP	803 104 303 533			260			
9770M	HP	803 104 303 524				260		
9770F	HP	803 104 303 503					260	
9770C	HP	803 104 303 493						260



UNIVERSALPOLIERER FÜR KERAMIK, NEM, ZIRKON | UNIVERSAL POLISHERS FOR CERAMICS, NON-PRECIOUS METAL ALLOYS, ZIRCONIUM OXIDE | PULIDORAS UNIVERSALES PARA CERÁMICA, ALEACIONES DE METALES NO PRECIOSOS, ÓXIDO DE CIRCONIO

Die neuen Polierer wurden für Zahnärzte und Zahntechniker konzipiert, um eine präzise Arbeitsweise beim Ausdünnen von Veneer- und Kronenrändern zu ermöglichen, ohne die Gefahr von Abplatzungen. Die Polierer zeichnen sich durch einen effizienten Materialabtrag bei gleichzeitiger Vorpolitur der Oberfläche sowie einen geringen Verschleiß durch eine harte Bindung und eine geringe Hitzeentwicklung aus

- Ermöglicht das präzise Ausdünnen von Veneer- und Kronenrändern ohne die Gefahr von Abplatzungen
- Effizienter Materialabtrag bei gleichzeitiger Vorpolitur der Oberfläche
- Geringer Verschleiß durch harte Bindung
- Geringe Hitzeentwicklung
- Geeignet für Feldspatkeramik, Lithium-Disilikat, NEM-Legierungen, Zirkonoxid

Empfohlene Drehzahl: 10.000 – 15.000 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 20.000 min⁻¹

Diacon polisher have been designed for dentists and dental technicians to enable the precise thinning of veneer and crown margins while substantially reducing the risk of chipping. The use of the Diacon polisher is characterized by efficient material removal and pre-polishing of the surface as well as low wear due to a hard bond.

- Enables precise thinning of veneer and crown margins without the risk of chipping
- Efficient material removal with simultaneous pre-polishing of the surface
- Low wear due to hard bond
- Low heat development
- Suitable for feldspar ceramics, lithium disilicate, non-precious metal alloys, zirconium oxide

Recommended Speed: 10.000 – 15.000 min⁻¹
Maximum Speed: 20.000 rpm

Las pulidoras Diacon han sido diseñadas para odontólogos y protésicos dentales para permitir el esculpido preciso de los márgenes de carillas y coronas, reduciendo sustancialmente el riesgo de astillamiento. El uso de las pulidoras Diacon se caracteriza por una eliminación eficaz del material y un pulido previo de la superficie, así como por un bajo desgaste debido a una unión dura.

- Permite un esculpido preciso de los márgenes de carillas y coronas sin riesgo de astillamiento
- Eliminación eficaz del material con prepulido simultáneo de la superficie
- Bajo desgaste gracias a la dureza de la unión
- Baja acumulación de calor
- Adecuado para cerámica de feldespato, disilicato de litio, aleaciones de metales no preciosos, óxido de circonio

Revoluciones recomendadas: 10.000 – 15.000 min⁻¹
Revoluciones máximas: 20.000 min⁻¹

9810



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10
			L mm	2,5
9810	HP	803 104 303 536		260



9812



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10
			L mm	1,0
9812	HP	803 104 303 536		040



9811

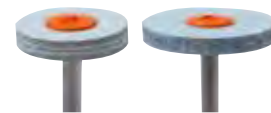


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10	10
			L mm	3,0	3,0
9811	HP	803 104 372 536		170	
	HP	803 104 372 536			220



4-Stufen Systeme | 4-Step Systems | Sistema de 4 niveles

Diamantpoliersystem:

Speziell für die einfache Politur aller Keramikrestaurationen (ausgenommen Hybridkeramiken) auch in schwer zugänglichen Bereichen.

- Flexible Polierlamellen
- Speziell für Okklusionsflächen
- Materialschonend
- Kurze Bearbeitungszeiten
- Äußerst hohe Standzeiten

1. Stufe
Vorpulitur (grob)

2. Stufe
Politur (mittel)

3. Stufe
Hochglanzpolitur (fein)

4. Stufe
Spiegelglanzpolitur (extra fein)

Empfohlene Drehzahl: 7.000 - 12.000 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 20.000 min⁻¹

Diamond impregnated porcelain polishing system:

Especialmente para simple polishing of all ceramic restorations (except hybrid ceramics), also in regions difficult to access.

- Flexible polishing lamellae
- Specifically for occlusal surfaces
- Material-saving
- Short processing times
- Extremely high service life

1. Step
Pre-polishing (coarse)

2. Step
Polishing (medium)

3. Step
High shine polishing (fine)

4. Step
Mirror finish polishing (extra fine)

Recommended Speed: 7.000 - 12.000 rpm
Maximum Speed: 20.000 rpm

Sistema de pulido de diamante:

Especial para el pulido sencillo de todas las restauraciones cerámicas, también en las zonas de difícil acceso.

- Láminas pulidoras flexibles
- Especial para las superficies de oclusión
- Respetuosos con el material
- Tiempos de pulido cortos
- Durabilidad extremadamente alta

1ª escala
Prepulido (grueso)

2ª escala
Pulido (mediano)

3ª escala
Pulido de brillo intenso (fino)

4ª escala
Pulido de alto brillo (extra fino)

Revoluciones recomendadas: 7.000 - 12.000 min⁻¹
Revoluciones máximas: 20.000 min⁻¹

IN 4 GRÖSSEN ERHÄLTICH: | AVAILABLE IN 4 SIZES: | DISPONIBLE EN 4 TAMAÑOS:

9771G

9771M

9771F


9771C

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	L mm	2	2	2	2
				1,6	1,6	1,6	1,6
9771G RA	803	204 000 534		100			
9771G RA	803	204 000 534		140			
9771G HP	803	104 000 534		170*			
9771G HP	803	104 000 534		260*			
9771M RA	803	204 000 524			100		
9771M RA	803	204 000 524			140		
9771M HP	803	104 000 524			170*		
9771M HP	803	104 000 524			260*		
9771F RA	803	204 000 514				100	
9771F RA	803	204 000 514				140	
9771F HP	803	104 000 514				170*	
9771F HP	803	104 000 514				260*	
9771C RA	803	204 000 504					100
9771C RA	803	204 000 504					140
9771C HP	803	104 000 504					170*
9771C HP	803	104 000 504					260*



Hinweis: Mit geringem Anpressdruck zu verwenden! | **Note:** To be used with little contact pressure! | **Nota:** Usar aplicando poca presión!

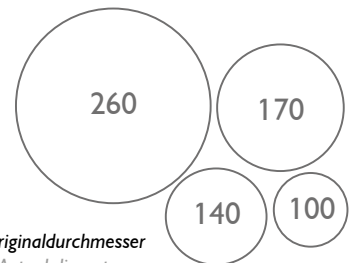Originaldurchmesser
Actual diameters
Diámetro original



Weitere Infos
auf Seite 91/
More info on
page 91 /
Más información en
la página 91



LUS05 – LUSTER® Extraoral Twist Kit
auf Seite | on page | en la página **207**



LUS06 – LUSTER® Intraoral Twist Kit
auf Seite | on page | en la página **206**



LUS07 – LUSTER® Extraoral Twist Kit Large
auf Seite | on page | en la página **207**

2-Stufen Systeme | 2-Step Systems | Sistema de 2 niveles

Diamantpoliersystem für:
Silikat Keramik
Leucitverstärkte Keramik
Lithium Disilikat (e.max®)

1. Stufe
Glätten / Vorpolitur

2. Stufe
Hochglanzpolitur

Empfohlene Drehzahl: 7.000 - 12.000 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 20.000 min⁻¹

Diamond impregnated polishing system for:
Silicate ceramics
Leucit-reinforced ceramics
Lithium Silicate (e.max®)

1. Step
Smoothing / Pre-polishing

2. Step
High shine polishing

Recommended Speed: 7.000 - 12.000 rpm
Maximum Speed: 20.000 rpm

Sistema de pulido de diamante para:
Cerámica de silicato
Cerámica reforzada con leucita
Silicato de litio (e.max®)

1ª escala
Alisar / Prepulido

2ª escala
Pulido de brillo intenso

Revoluciones recomendadas: 7.000 - 12.000 min⁻¹
Revoluciones máximas: 20.000 min⁻¹

DPO01 DPO04



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1
			L mm	2,0	2,0
DPO01	HP	803 104 303 522		200	
DPO04	HP	803 104 303 512			200



DPO02 DPO05



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2	2	2
			L mm	10,2	10,2	13,0	13,0
DPO02	RA	803 204 244 522		040			
DPO02	HP	803 104 243 522				040*	
DPO05	RA	803 204 244 512			040		
DPO05	HP	803 104 243 512					040*



DPO03 DPO06



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
			L mm	2,5	2,5
DPO03	HP	803 104 372 522		110	
DPO06	HP	803 104 372 512			110



DPO07 DPO08



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
			L mm	7,5	7,5
DPO07	RA	803 204 030 592		060	
DPO08	RA	803 204 030 512			060



DPO09 DPO10




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1
			L mm	2,5	2,5
DPO09	HP	803 104 372 522		170	
DPO09	unmounted	803 900 372 522		170	
DPO10	HP	803 104 372 512			170
DPO10	unmounted	803 900 372 512			170



Träger: 303RF, Größe 35, Informationen auf S.146 | Mandrel: 303RF, Size 35, Information on p.146 |
Mandril: 303RF, Tamaño 35, información en la pág. 146



LUS100 - LUSTER® for Lithium Silicate
auf Seite | on page | en la página 210

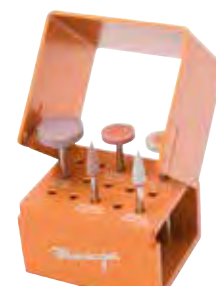

LUS80 - LUSTER® for Lithium Silicate
auf Seite | on page | en la página 210

2-Stufen Systeme | 2-Step Systems | Sistema de 2 niveles

Diamantpoliersystem für:
CAD/CAM Restaurationen
 Oxidkeramiken
 Zirkoniumoxid

1. Stufe
 Glätten / Vorpulitur

2. Stufe
 Hochglanzpolitur

Empfohlene Drehzahl: 7.000 - 12.000 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 20.000 min⁻¹

Diamond impregnated polishing system for:
CAD/CAM restorations
 Oxide ceramics
 Zirconium oxide

1. Step
 Smoothing / Pre-polishing

2. Step
 High shine polishing

Recommended Speed: 7.000 - 12.000 rpm
Maximum Speed: 20.000 rpm

Sistema de pulido de diamante para:
Restauraciones CAD/CAM
 Cerámicas de óxido
 Óxido de zirconio

1ª escala
 Alisar / Prepulido

2ª escala
 Pulido de brillo intenso

Revoluciones recomendadas: 7.000 - 12.000 min⁻¹
Revoluciones máximas: 20.000 min⁻¹

DCA01 DCA07

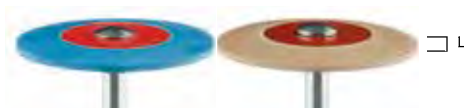


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1
			L mm	2,0	2,0
DCA01	HP	803 104 304 524		260	
DCA07	HP	803 104 304 514			260



DCA02 DCA08



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1
			L mm	14,0	14,0
DCA02	HP	803 104 292 524		073	
DCA08	HP	803 104 292 514			073



DCA03 DCA09



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1
			L mm	2,0	2,0
DCA03	HP	803 104 303 524		200	
DCA09	HP	803 104 303 514			200



DCA04 DCA10



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2	2	2
			L mm	10,2	10,2	13,0	13,0
DCA04	RA	803 204 244 524		040			
DCA04	HP	803 104 243 524				040*	
DCA10	RA	803 204 244 514			040		
DCA10	HP	803 104 243 514					040*



DCA05 DCA11



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
			L mm	2,5	2,5
DCA05	HP	803 104 372 524		110	
DCA11	HP	803 104 372 514			110



DCA06 DCA12



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1
			L mm	2,5	2,5
DCA06	HP	803 104 373 524		170	
	unmounted	803 900 373 524		170	
DCA12	HP	803 104 373 514			170
	unmounted	803 900 373 514			170



Träger: 303RF, Größe 35, Informationen auf S.146 | Mandrel: 303RF, Size 35, Information on p.146 |
 Mandril: 303RF, Tamaño 35, información en la pág. 146

DCA15 DCA16



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
			L mm	2,5	2,5
DCA15	RA	803 204 303 525		100	
DCA16	RA	803 204 303 514			100



DCA13 DCA14



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
			L mm	7,5	7,5
DCA13	RA	803 204 030 525		060	
DCA14	RA	803 204 030 514			060



LUS91 - LUSTER® for Zirconia
 auf Seite | on page | en la página 214

3-Stufen Systeme | 3-Step Systems | Sistema de 3 niveles

**Porzellanpolierer zum
Abtragen, Glätten und Polieren von:
Keramik**
1. Stufe
Abtragen

2. Stufe
Glätten

3. Stufe
Politur

Empfohlene Drehzahl: 7.000 - 15.000 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 25.000 min⁻¹
**Porcelain polishers for
adjusting, smoothing, and polishing of:
Ceramics**
1. Step
Adjusting

2. Step
Smoothing

3. Step
Polishing

Recommended Speed: 7.000 - 15.000 rpm
Maximum Speed: 25.000 rpm

**Pulidor de porcelana para
reducir, alisar y pulir:
Cerámica**
1ª escala
Reducir

2ª escala
Alisar

3ª escala
Pulido

Revoluciones recomendadas: 7.000 - 15.000 min⁻¹
Revoluciones máximas: 25.000 min⁻¹
9652V
9652P
9652H


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	12,0	12,0	12,0
9652V	RA	658 204 300 525		045		
9652P	RA	658 204 300 515			045	
9652H	RA	658 204 300 505				045


9653V
9653P
9653H


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	10,0	10,0	10,0
9653V	RA	658 204 030 525		070		
9653P	RA	658 204 030 515			070	
9653H	RA	658 204 030 505				070


9613V
9613P
9613H


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10	10	10
			L mm	4,0	4,0	3,0
9613V	unmounted	658 900 303 525		220		
9613P	unmounted	658 900 303 515			220	
9613H	unmounted	658 900 303 505				220



Träger: 303RF, Größe 50, Informationen auf S.146 | Mandrel: 303RF, Size 50, Information on p.146 | Mandril: 303RF, Tamaño 50, información en la pág. 146

9617V
9617P
9617H


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10	10	10
			L mm	3,0	3,0	3,5
9617V	unmounted	658 900 372 525		220		
9617P	unmounted	658 900 372 515			220	
9617H	unmounted	658 900 372 505				220



Träger: 303RF, Größe 50, Informationen auf S.146 | Mandrel: 303RF, Size 50, Information on p.146 | Mandril: 303RF, Tamaño 50, información en la pág. 146

9619V
9619P
9619H


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10	10	10
			L mm	24,0	24,0	24,0
9619V	unmounted	658 900 133 525		060		
9619P	unmounted	658 900 133 515			060	
9619H	unmounted	658 900 113 505				060



Träger: 301LR, Informationen auf S.146 | Mandrel: 301LR, Information on p.146 | Mandril: 301LR, información en la pág. 146

MODELLGUSSPOLIERER | POLISHERS FOR MODEL CASTING | PULIDORES PARA METALES NO PRECIOSOS

Modellgusspolierer für:
Nicht-Edelmetalle (NEM)
Modellguss**Braun**
Sehr hart und verschleißfest**Empfohlene Drehzahl:** 7.000 - 12.000 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 20.000 min⁻¹**Model casting polishers for:**
Non precious metals
Model casting**Brown**
Very hard and abrasion resistant**Recommended Speed:** 7.000 - 12.000 rpm
Maximum Speed: 20.000 rpm**Pulidores para esqueléticos para:**
Metales no preciosos
Esqueléticos**Marrón**
Muy duro y resistente al desgaste**Revoluciones recomendadas:** 7.000 - 12.000 min⁻¹
Revoluciones máximas: 20.000 min⁻¹**9561P**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10
		L mm		3,0
9561P	unmounted	612 900 372 534		220

Träger: 303RF, Größe 50, Informationen auf S.146 |
Mandrel: 303RF, Size 50, Information on p.146 |
Mandril: 303RF, Tamaño 50, información en la pág. 146

9562P

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10
		L mm		1,2
9562P	unmounted	612 900 371 534		260

Träger: 303RF, Größe 50, Informationen auf S.146 |
Mandrel: 303RF, Size 50, Information on p.146 |
Mandril: 303RF, Tamaño 50, información en la pág. 146

9564P

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10
		L mm		20,0
9564P	unmounted	612 900 114 534		070

Träger: 301LR, Informationen auf S.146 |
Mandrel: 301LR, Information on p.146 |
Mandril: 301LR, información en la pág. 146

9568P

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
		L mm		18,0
9568P	HP	612 104 257 534		055

**Modellgusspolierer für:**
Nicht-Edel-Metalle (NEM)
Modellguss**Grün**
Grob, unmontiert**Empfohlene Drehzahl:** 7.000 - 12.000 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 20.000 min⁻¹**Model casting polishers for:**
Non precious metals
Model casting**Green**
Coarse, unmounted**Recommended Speed:** 7.000 - 12.000 rpm
Maximum Speed: 20.000 rpm**Pulidores para esqueléticos para:**
Metales no preciosos
Esqueléticos**Verde**
Gruoso, no montado**Revoluciones recomendadas:** 7.000 - 12.000 min⁻¹
Revoluciones máximas: 20.000 min⁻¹**9561U**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10
		L mm		3,0
9561U	unmounted	618 900 372 533		220

Träger: 303RF, Größe 50, Informationen auf S.146 |
Mandrel: 303RF, Size 50, Information on p.146 |
Mandril: 303RF, Tamaño 50, información en la pág. 146

9564U

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10
		L mm		20,0
9564U	unmounted	618 900 114 533		060

Träger: 301LR, Informationen auf S.146 |
Mandrel: 301LR, Information on p.146 |
Mandril: 301LR, información en la pág. 146

KUNSTSTOFFPOLIERER | POLISHERS FOR ACRYLICS | POLISHERS FOR ACRYLICS

1-Stufen Systeme | 1-Step Systems | Sistema de 1 nivele

Kunststoffpolierer für:
Kunststoffzähne, PMMA, Hybridkeramik, PEEK

- Besonders geeignet für die Politur von provisorischen Versorgung
- Gesamter Polierprozess in nur einem Schritt
- Erhöhter Druck für die Oberflächenvorbereitung
- Reduzierter Druck für die Hochglanzpolitur

Empfohlene Drehzahl: 3.000 - 10.000 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 20.000 min⁻¹
Polishers for acrylics for:
Acrylic Teeth, PMMA, Hybrid Ceramic, PEEK

- Particularly suitable for the polishing of provisional supplies
- Complete polishing process in just one step
- Elevated pressure for surface preparation
- Reduced pressure for high shine polishing

Recommended Speed: 3.000 - 10.000 rpm

Maximum Speed: 20.000 rpm

Pulidores para acrílico para:
Acrílico, PMMA, Cerámica híbrido, PEEK

- Se adaptan especialmente bien al pulido de tratamientos provisionales
- Proceso de pulido completo en tan solo un paso
- Presión elevada para la preparación de la superficie
- Presión reducida para el pulido de alto brillo

Revoluciones recomendadas: 3.000 - 10.000 min⁻¹
Revoluciones máximas: 20.000 min⁻¹
9790


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
			L mm	1,6	1,6
9790	HP	803 104 543 523		140	170

Weitere Infos
auf Seite 91 /
More info on
page 91 /
Más información en
la página 91

9791


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	16,0
9791	HP	803 104 284 523		050


**PMMA1 - PMMA/PEEK Adjusting
and Polishing Kit**

auf Seite | on page | en la página 228

2-Stufen Systeme | 2-Step Systems | Sistema de 2 niveles

Silikonpolierer mit Aluminiumoxid für:**Prothesen-Kunststoffe**

Polierer zeichnen sich durch hohe Standzeiten aus

1. Stufe
Vorpulitur (grob)**2. Stufe**
Politur (fein)**Empfohlene Drehzahl:** 5.000 - 7.000 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 15.000 min⁻¹**Silicone polishers with aluminum oxide for:****Synthetic materials for prosthetics**

Polishers are distinguished by a long service life

1. Step
Pre-polishing (coarse)**2. Step**
Polishing (fine)**Recommended Speed:** 5.000 - 7.000 rpm
Maximum Speed: 15.000 rpm**Pulidor de silicona con óxido de aluminio para:****Resinas de prótesis**

Pulidores destacan por su elevada durabilidad

1ª escala
Prepulido (grosso)**2ª escala**
Pulido (fino)**Revoluciones recomendadas:** 5.000 - 7.000 min⁻¹
Revoluciones máximas: 15.000 min⁻¹**9572S**
9572U

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	17,0	17,0
9572S	HP	658 104 201 533		150	
9572U	HP	658 104 201 523			150

9573S
9573U

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	24,0	24,0
9573S	HP	658 104 273 533		100	
9573U	HP	658 104 273 523			100

9579S
9579U

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	20,0	20,0
9579S	HP	658 104 300 533		100	
9579U	HP	658 104 300 523			100

3-Stufen Systeme | 3-Step Systems | Sistema de 3 niveles

Poliersystem für:
Prothesen-Kunststoffe

- 1. Stufe
Vorpulitur
- 2. Stufe
Politur
- 3. Stufe
Hochglanzpulitur

Empfohlene Drehzahl: 5.000 - 7.000 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 15.000 min⁻¹

Polishing system for:
Synthetic materials for prosthetics

- 1. Step
Pre-polishing
- 2. Step
Polishing
- 3. Step
High shine polishing

Recommended Speed: 5.000 - 7.000 rpm
Maximum Speed: 15.000 rpm

Sistema de pulido para:
Resinas de prótesis

- 1ª escala
Prepulido
- 2ª escala
Pulido
- 3ª escala
Pulido de brillo intenso

Revoluciones recomendadas: 5.000 - 7.000 min⁻¹
Revoluciones máximas: 15.000 min⁻¹

9569V
9569P
9569H


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	17,0	17,0	17,0
9569V	HP	658 104 273 536		055		
9569P	HP	658 104 273 534			055	
9569H	HP	658 104 273 524				055


9571V
9571P
9571H


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	17,0	17,0	17,0
9571V	HP	658 104 114 536		065		
9571P	HP	658 104 114 534			065	
9571H	HP	658 104 114 524				065


9572V
9572P
9572H


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	17,0	17,0	17,0
9572V	HP	658 104 201 536		150		
9572P	HP	658 104 201 534			150	
9572H	HP	658 104 201 524				150


9573V
9573P
9573H


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	24,0	24,0	24,0
9573V	HP	658 104 273 536		100		
9573P	HP	658 104 273 534			100	
9573H	HP	658 104 273 524				100


9577V
9577P
9577H


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	18,8	18,8	18,8
9577V	HP	658 104 187 536		080		
9577P	HP	658 104 187 534			080	
9577H	HP	658 104 187 524				080


9578V
9578P
9578H


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	17,0	17,0	17,0
9578V	HP	658 104 275 536		060		
9578P	HP	658 104 275 534			060	
9578H	HP	658 104 275 524				060



9579V 9579P 9579H



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	20,0	20,0	20,0
9579V	HP	658 104 300 536		100		
9579P	HP	658 104 300 534			100	
9579H	HP	658 104 300 524				100



9580V 9580P 9580H



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	16,0	16,0	16,0
9580V	HP	658 104 300 536		056		
9580P	HP	658 104 300 534			056	
9580H	HP	658 104 300 524				056



9581P



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10
			L mm	3,0
9581P	unmounted	658 900 372 534		220



Träger: 303RE, Größe 50, Informationen auf S.146 | Mandrel: 303RE, Size 50, Information on p.146 | Mandril: 303RE, Tamaño 50, información en la pág. 146



2638 - Acrylic Adjustment Kit

auf Seite | on page | en la página 232

ANWENDUNGSEMPFEHLUNGEN | APPLICATION-GUIDELINES | RECOMENDACIÓN PARA LA APLICACIÓN

VORPOLITUR
PRE-POLISHING
PREPULIDO

100 104 220



110 104 190



105 104 190



402 104 220



130 104 220



401 104 220



140 104 220

	NATURBÜRSTEN NATURAL BRISTLES CEPILLOS NATURALES			SIC BÜRSTEN SIC BRUSHES SIC PULIDORES
	Ziegenhaarbürsten (weich) Goat Hair Brushes (soft) Pulidores Pelo de cabra (blando)	Pferdehaarbürste (medium) Horse Hair Brush (medium) Pulidores Cerdá de caballo (medio)	Chungking Borsten Bürste (hart) Chungking Bristles Brush (hard) Pulidores Cerdas Chungking (duro)	
EDELMETALLE PRECIOUS METALS METALES PRECIOSOS	✓	✓	✓	
NICHTEDELMETALLE NON PRECIOUS METALS NO METALES PRECIOSOS	✓	✓	✓	✓
MODELGUSSLEGIERUNGEN MODEL CASTING ALLOYS DESBASTE DE ESQUELÉTICOS			✓	✓
KOMPOSITE COMPOSITE COMPOSITE	✓	✓	✓	✓
KUNSTSTOFFE ACRYLICS ACRÍLICO	✓	✓	✓	✓
KERAMIKEN CERAMICS CERÁMICA	✓	✓	✓	✓
TITAN TITANIUM TITANIO	✓	✓	✓	
ANWENDUNG VON POLIERPASTE EMPFOHLEN APPLICATION OF POLISHING PASTE RECOMMENDED SE RECOMIENDA USAR PASTAS PARA PULIR	✓	✓	✓	
EMPFOHLENE DREHZAHL (MIN ⁻¹) RECOMMENDED SPEED (RPM) VELOCIDAD DE GIRO RECOMENDADA (MIN ⁻¹)	10.000			10.000
MAXIMALE DREHZAHL (MIN ⁻¹) MAXIMUM SPEED (RPM) VELOCIDAD MÁXIMA DE GIRO (MIN ⁻¹)	15.000			15.000
SEITE PAGE PÁGINA	116	116	116	116

POLITUR
POLISHING
PULIDO

HOCHGLANZPOLITUR
HIGH SHINE POLISHING
PULIDO DE ALTO BRILLO



253MF 104 250



253 104 250



253G 104 250



253M 104 250



253F 104 250



160 104 220



155 104 220



150 104 220

FASERVlies BÜRSTEN
FIBER FLEECE BRUSHES
CEPILLOS DE TEJIDO DE FIBRA

FILZPOLIERBÜRSTEN
FELT POLISHING BRUSHES
CEPILLOS DE PULIDO EIELTRO

LEDERPOLIERBÜRSTE
LEATHER POLISHING BRUSH
CEPILLO DE PULIDO DE CUERO

BAUMWOLLPOLIERBÜRSTE
COTTON POLISHING BRUSH
CEPILLO DE PULIDO DE ALGODÓN

✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
10.000	10.000	10.000	10.000
15.000	15.000	15.000	15.000
117	116	116	116

POLIERBÜRSTEN | POLISHING BRUSHES | CEPILLOS PULIDORES

Reinigungshinweise:

- Seifenlaugen, keine aggressiven Desinfektionsmittel
- Ultraschalleinsatz möglich
- Keine Beständigkeit für Thermodesinfektion bzw. Sterilisation

Empfohlene Drehzahl: 10.000 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 15.000 min⁻¹

Cleaning instructions:

- Soap suds, no aggressive disinfectants
- Ultrasonic application possible
- No resistance to thermal disinfection or sterilisation

Recommended Speed: 10.000 rpm
Maximum Speed: 15.000 rpm

Consejos de limpieza:

- Lejía jabonosa, no emplear medios de desinfección agresivos
- Pueden emplearse ultrasonidos
- No es resistente a la termodesinfección ni a la esterilización

Revoluciones recomendadas: 10.000 min⁻¹
Revoluciones máximas: 15.000 min⁻¹

100*



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	2,0
100	HP	090 104 543 000	220



Ziegenhaar, weiß | Goat hair, white | Pelo de cabra, blanco

130*



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	2,0
130	HP	090 104 543 002	220



Ziegenhaar, weiß mit Leder, 3-lagig | Goat hair, white with leather, 3-ply | Pelo de cabra, blanco con cuero, 3 capas

140*



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	2,0
140	HP	090 104 910 000	220



Ziegenhaar, grau mit Leder, 3-lagig | Goat hair, grey with leather, 3-ply | Pelo de cabra, gris con cuero, 3 capas

110*



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	1,5
110	HP	100 104 543 000	190



Pferdehaar, weiß | Horse hair, white | Cerda de caballo, blanca

105*



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	1,5
105	HP	100 104 543 005	190



Chungking Borsten, schwarz | Chungking bristles, black | Cerdas Chungking, negras

150*



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	2,0
150	HP	080 104 045 000	220



Baumwolle | Cotton | Algodón

155*



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	2,0
155	HP	040 104 045 003	220



Leder, 5-lagig | Leather, 5-ply | Cuero, 5 capas

160*



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	2,0
160	HP	010 104 045 003	220



Filz, 3-lagig | Felt, 3-ply | Fieltro, 3 capas

402



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	3
		L mm	2,3
402	HP	030 104 543 514	220



401



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	3
		L mm	2,1
401	HP	030 104 543 504	220



Polyamidfaser mit SiC, zur Vorpolitur von Metallen und Kunststoff. | Polyamide fiber with SiC, for pre-polishing metal and acrylic. | Fibra de Poliamid con SiC, para el prepolido sobre metales y acrílico.

*
Zu verwenden
mit Polierpaste /
To use
with polishing paste /
Para usar
con pasta de pulir

FASERVLIES BÜRSTEN | FIBER FLEECE BRUSHES | CEPILLOS DE TEJIDO DE FRIBRA

Faservlies Bürsten sind ohne Polierpaste anzuwenden und eignen sich für die Politur von:

- Edelmetallen
- Kompositen
- Kunststoffen
- 3D gedruckte Materialien inklusive PMMA
- Thermoplastischen Kunststoffen (Tiefziehschienen)



Empfohlene Drehzahl: 10.000 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 15.000 min⁻¹

Fiber fleece brushes are to be used without polishing paste and are suitable for polishing of:

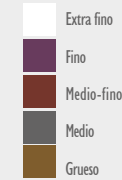
- Precious metals
- Composite
- Acrylics
- 3D printed materials including PMMA
- Vacuum form acrylic (Aligners)



Recommended Speed: 10.000 rpm
Maximum Speed: 15.000 rpm

Los cepillos de vellón de fibra pueden utilizarse sin pasta de pulir y son aptos para el pulido de:

- metales preciosos
- composites
- plásticos
- materiales impresos en 3D, incluido el PMMA
- Termoplásticos (férulas termoformadas)



Revoluciones recomendadas: 10.000 min⁻¹
Revoluciones máximas: 15.000 min⁻¹

253



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
253	HP	030 104 045 000		250



Weiß, Extrafein | White, Extra-Fine | Blanco, extra fino

253G



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
253G	HP	030 104 045 005		250



Braun, grob | Brown, coarse | Marrón, grueso

253M



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
253M	HP	030 104 045 003		250



Grau, mittel | Grey, medium | Gris, medio

253MF

New



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
253MF	HP	030 104 045 002		250



Rot-Braun, mittel-fein | Red-Brown, medium-fine | marrón rojizo, medio-fino

253F



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
253F	HP	030 104 045 001		250



Lila, fein | Lilac, fine | Lila, fino



2530 Fuzzies® Assortment Kit

auf Seite | on page | en la página 238

POLIERPASTEN | POLISHING PASTE | PASTAS DE DIAMANTE

DP4

mittel / medium

DP2

fein / fine



Fig.		1
DP4	Füllmenge / Filling Amount	3 g
DP2	Füllmenge / Filling Amount	3 g



DP2Z

fein / fine



Fig.		1
DP2Z	Füllmenge / Filling Amount	15 g



Die MEISINGER LUSTER® Paste ist eine 1-Stufen-Diamantpolierpaste und wird für die Hochglanz-Politur von dentalen Keramikmaterialien eingesetzt. Dabei vereinfacht die hochwertige Polierpaste die Politur okklusaler Flächen sowie die Instandhaltung bestehender Restaurationen deutlich. Die MEISINGER LUSTER® Paste enthält Diamantpartikel und ist mit zwei verschiedenen Körnung erhältlich: 8-12 µm (fein) und 16-18 µm (medium).

Für die Anwendung auf allen Keramiken

The MEISINGER LUSTER® Paste is a 1-step diamond polishing paste used for high-shine polishing of all dental ceramic materials. The high-quality polishing paste significantly simplifies the polishing of occlusal surfaces and the maintenance of existing restorations. The MEISINGER LUSTER® Paste contains diamond particles and is available with two different grain sizes: 8-12 µm (fine) and 16-18 µm (medium).

Intended for use on all ceramic materials

Pasta MEISINGER LUSTER® es una pasta de pulido de diamante de un escalón que se usa para lograr un pulido de alto brillo en los materiales de cerámica dentales. Esta pasta de pulido de alta calidad facilita el pulido de superficies oclusales, así como el mantenimiento de las restauraciones preexistentes en gran medida. La pasta MEISINGER LUSTER® contiene partículas de diamante y está disponible en dos grados de grano distintos: 8-12 µm (fino) y 16-18 µm (medio).

Para usar en todas las cerámicas

Die MEISINGER LUSTER® Zirconia Paste ist eine 1-Stufen-Diamantpolierpaste und wird für die extraorale Hochglanz-Politur aller Zirkon-Restaurationen eingesetzt. Dabei vereinfacht die hochwertige Polierpaste deutlich die Politur okklusaler Flächen. Die MEISINGER LUSTER® Zirconia Paste enthält Diamantpartikel mit einer Körnungen von 4-8 µm.

Für die extraorale Anwendung auf Zirkon

The MEISINGER LUSTER® Zirconia Paste is a 1-step diamond polishing paste used for extraoral high-shine polishing of zirconia restorations. The high-quality polishing paste significantly simplifies the polishing of occlusal surfaces. The MEISINGER LUSTER® Zirconia Paste contains diamond particles with a grain size of 4-8 µm.

Intended for extraoral use on zirconia

La MEISINGER LUSTER® Zirconia Paste es una pasta de pulido de diamante de un escalón y se utiliza para obtener un brillo intenso en pulidos extraorales de todas las restauraciones de circonio. Esta pasta de alta calidad facilita el pulido de las superficies oclusales en gran medida. La MEISINGER LUSTER® Zirconia Paste contiene partículas de diamantes con un grado de grano de 4-8 µm.

Destinado a uso extraoral en circonia

Keramische Schleifer

Ceramic Abrasives | Abrasivos Cerámicos

MEISINGER Keramische Schleifer für Praxis und Labor werden aus hochwertigem Edelmetall und Siliciumcarbid hergestellt. Sie überzeugen durch ihre gleichmäßige Körnung und optimale Bindungshärte und zeichnen sich durch einen hochfesten, rostfreien Schaft aus. Gleichzeitig sind sie in Form und Größe für hochpräzisen, intraoralen Materialabtrag optimiert. Die hohe Fertigungsqualität garantiert einen genauen und zentrischen Rundlauf.

MEISINGER ceramic abrasives for practice and laboratory are made of high-quality corundum and silicon carbide. They impress with their uniform grain size and optimal bonding hardness and are characterized by a high-strength, stainless steel shank. At the same time, they are optimized in shape and size for high-precision, intraoral material abrasion. The high production quality guarantees a precise and central concentricity.

Los abrasivos cerámicos de MEISINGER se fabrican de corindón y carburo de silicio de alta calidad. Se distinguen por su granulado uniforme y su óptima dureza de la ligazón cerámica. El mandril es de acero sólido e inoxidable. La alta calidad de fabricación garantiza una concentricidad más precisa.

Hinweis:
Bitte beachten Sie, dass bei einer Bestellung unserer Schleifer die Angabe der Farbe zwingend notwendig ist.
Note:
Please note that it is absolutely necessary to specify the colour when ordering our grinders.
Nota:
Tenga en cuenta que es obligatorio indicar el color en los pedidos de estas fresas.



ANWENDUNGS EMPFEHLUNGEN

APPLICATION-GUIDELINES

RECOMENDACIÓN PARA LA APLICACIÓN 120-121



Grün, mittel
Green, medium
Verde, mediano

127-128

AUSARBEITUNGSSTEIN FÜR KUNSTSTOFF
LABORATORY TRIMMER FOR PLASTIC
ABRASIVO PARA ACRÍLICO

134

PREP & MATCH ARKANSAS-SCHLEIFER

PREP & MATCH ARKANSAS ABRASIVES

PREP & MATCH ABRASIVOS ARKANSAS 122



EDELKORUND-SCHLEIFER
CORUNDUM ABRASIVE
ABRASIVO DE CORINDÓN

129-130



Grün, grob/medium
Green, coarse/medium
Verde, grueso/mediano

134



122



Rosa
Pink
Rosa

129-130

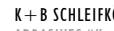
AUSARBEITUNGSSTEIN FÜR KUNSTSTOFF UND GIPS
LABORATORY TRIMMER FOR PLASTIC AND PLASTER
ABRASIVOS PARA ACRÍLICO Y YESO

134

ARKANSAS-SCHLEIFER

ABRASIVES ARKANSAS

ABRASIVOS ARKANSAS 123



K + B SCHLEIFKÖRPER
ABRASIVES "K + B"
ABRASIVOS PARA CORONAS Y
PUENTES K + B

131-132



Blau, medium
Blue, medium
Azul, mediano

134



123



Grün, fein
Green, fine
Verde, fino

131

AUSARBEITUNGSSTEINE FÜR
CHROM-KOBALTLEGIERUNGEN
LABORATORY TRIMMERS FOR CHROME COBALT ALLOYS
ABRASIVOS PARA ALEACIONES
DE CROMO-COBALTO

134

SCHLEIFKÖRPER FÜR KERAMIKEN

ABRASIVES FOR CERAMICS

ABRASIVOS PARA CERÁMICAS 124



Braun, fein
Brown, fine
Marrón, fino

131



Rosa, medium
Pink, medium
Rosa, mediano

134

Speziell für | Especially for | Especial para
CAD/CAM



124



Blau, medium
Blue, medium
Azul, mediano

132



Braun, medium
Brown, medium
Marrón, mediano

134

SCHLEIFKÖRPER FÜR ZIRKONOXID

ABRASIVES FOR ZIRCONIUM OXIDE

ABRASIVOS PARA ÓXIDO DE CIRCONIO 125



Orange, medium
Orange, medium
Naranja, mediano

132

ZURICHTSTEINE

DRESSING STONES

PIEDRAS PARA AFILAR 135

Speziell für | Especially for | Especial para
CAD/CAM



125



SPEZIALSCHLEIFKÖRPER FÜR CHROM-
KOBALTLEGIERUNGEN
MOUNTED POINTS FOR CHROME COBALT ALLOYS
PUNTAS ESPECIALES PARA ALEACIONES
DE CROMO-COBALTO

132-133



135

KERAMISCHE DIAMANTSCHLEIFKÖRPER

CERAMIC DIAMOND ABRASIVES

ABRASIVOS CERÁMICOS DE DIAMANTE 126



Weiß, harte Bindung
White, hard bonding
Blanco, ligazón dura

132

Speziell für | Especially for | Especial para
CAD/CAM



126



Rosa, mittlere Bindung
Pink, medium bonding
Rosa, ligazón mediana

133

SILICIUMCARBID-SCHLEIFER

SILICONE CARBIDE-ABRASIVES

ABRASIVOS DE CARBURO DE SILICIO 126-128



Braun, weiche Bindung
Brown, soft bonding
Marrón, ligazón blanda

133



Grün, fein
Green, fine
Verde, fino

126



Hellbraun, sehr weiche Bindung
Light brown, very soft bonding
Marrón claro, ligazón muy blanda

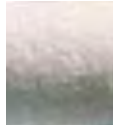
133



Schleifkörper für
Zirkonoxid
Abrasives for
zirconium oxide
Abrasivos para
óxido de circonio



Keramische
Diamant-
schleifkörper
Ceramic diamond
abrasives
Abrasivos cerámicos
de diamante



Arkansas-
Schleifer
Abrasives
"Arkansas"
Abrasivos
„Arkansas“



Siliciumcarbide-
Schleifer, fein
Silicone carbide-
abrasives, fine
Abrasivos de
carburo de
silicio, fino



Siliciumcarbide-
Schleifer, mittel
Silicone carbide-
abrasives, medium
Abrasivos de
carburo de
silicio, mediano




Edelkorund-
Schleifer, rosa
Corundum
abrasives, pink
Abrasivos de
corindón, rosa



K + B Schleifkörper,
grün
Abrasives "K+B",
green
Abrasivos para
coronas y puentes
K + B, verde

ZAHNSCHMELZ ENAMEL ESMALTE DENTAL			✓	✓			
GIPS PLASTER YESO							
EDELMETALL-LEGIERUNGEN (Z.B.: GOLD) PRECIOUS ALLOY (E.G. OR) ALEACIONES PRECIOSAS (POR EJEMPLO ORO)							
NEM-LEGIERUNGEN NON PRECIOUS ALLOY ALEACIONES NO PRECIOSAS						✓	
AMALGAM AMALGAM AMALGAMA						✓	
MODELGUSSLEGIERUNGEN MODEL CASTING ALLOYS DESBASTE DE ESQUELÉTICOS						✓	
KOMPOSIT COMPOSITE COMPOSITE			✓				
KUNSTSTOFF ACRYLICS ACRÍLICO							
WEICHBLEIBENDE UNTERFÜTTERUNGSMATERIALEN SOFT RELINE REVESTIMIENTOS BLADOS							
KERAMIK CERAMICS CERÁMICA		✓		✓	✓		✓
ZIRKONOXID ZIRCONIUM OXIDE ÓXIDO DE CIRCONIO	✓						
SEITE PAGE PÁGINA	125	126	122-123	126	126-128	129-130	131

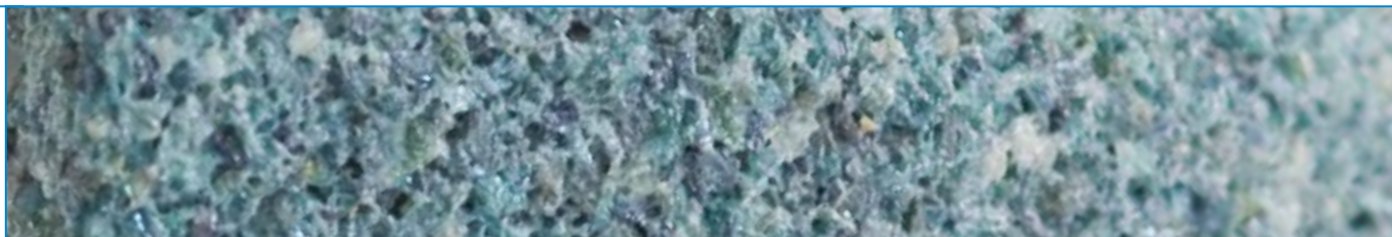

K + B Schleifkörper, braun
Abrasives "K+B", brown
Abrasivos para coronas y puentes K+B, marrón

K + B Schleifkörper, blau
Abrasives "K+B", blue
Abrasivos para coronas y puentes K+B, azul

K + B Schleifkörper, orange
Abrasives "K+B", orange
Abrasivos para coronas y puentes K+B, naranja

Spezialschleifkörper, weiß
Mounted points, white
Puntas especiales, blanco

Spezialschleifkörper, rosa
Mounted points, pink
Puntas especiales, rosa

Spezialschleifkörper, braun
Mounted points, brown
Puntas especiales, marrón

Spezialschleifkörper, hellbraun
Mounted points, light brown
Puntas especiales, marrón claro

Ausarbeitungssteine, rosa
Laboratory trimmers, pink
Abrasivos para acrílico, rosa

Ausarbeitungssteine, braun
Laboratory trimmers, brown
Abrasivos para acrílico, marrón

Ausarbeitungssteine, blau
Laboratory trimmers, blue
Abrasivos para acrílico, azul

									✓
✓									
	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
									✓
									✓
131	132	132	132	133	133	133	134	134	134

Prep & Match Arkansas-Schleifer



Prep & Match Arkansas Abrasives | Prep & Match Abrasivos Arkansas

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für eine langlebige Kronen- oder Brückenversorgung ist die Präparation. Eine glatte Oberfläche und ein präziser Präparationsrand sind die perfekte Ausgangslage für eine dauerhaft gut sitzende Restauration. Die MEISINGER Prep & Match Arkansas-Schleifer sind mit unseren bewährten Präparationsdiamanten kombinierbar und diesen in Form und Winkeln identisch. So können die präparierten Stümpfe mit dem passenden Prep & Match Arkansas-Schleifer optimal nachbearbeitet werden. Unregelmäßige Oberflächen und gelöste Zahnschmelzprismen lassen sich mühelos nach der Präparation mit den Prep & Match Arkansas-Schleifern glätten, was die Qualität der Oberfläche und des Präparationsrandes um ein Vielfaches verbessert. Mit einem präzise gestalteten Präparationsrand wird das Risiko von Sekundärkaries deutlich minimiert. Diese perfekte **Kombination aus Präparationsinstrument und Arkansas-Schleifer** bietet sich bestens für die bewährte Hohlkehlpräparation und Stufenpräparation an.

Empfohlene Drehzahl: 80.000-100.000 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 120.000min⁻¹

One of the most important prerequisites for a long-lasting crown or bridge restoration is the preparation. A smooth surface and a precise preparation margin are the perfect starting point for a permanently well-fitting restoration. The MEISINGER Prep & Match Arkansas abrasives can be paired with our proven preparation diamonds and are identical to them in shape and angles. This means that the prepared tooth can be optimally reworked with the matching Prep & Match Arkansas abrasives. Irregular surfaces and loosened enamel prisms can be smoothed effortlessly after preparation with the Prep & Match Arkansas abrasives, which improves the quality of the surface and the preparation margin many times over. With a precisely designed preparation margin, the risk of secondary caries is significantly minimised. This perfect combination of preparation instrument and Arkansas abrasives is ideally suited for the proven chamfer preparation and step preparation.

Recommended Speed: 80.000-100.000 rpm
Maximum Speed: 120.000rpm

Uno de los requisitos más importantes para una restauración duradera de una corona o un puente es la preparación. Una superficie lisa y un margen de preparación preciso son el punto de partida perfecto para que la restauración esté permanentemente bien ajustada. Los abrasivos «Arkansas» Prep & Match MEISINGER pueden combinarse con nuestros acreditados diamantes de preparación y son idénticos a ellos en forma y ángulos. De este modo, los dientes preparados pueden ser reparados de forma óptima con los abrasivos Arkansas Prep & Match. Las superficies irregulares y los prismas de esmalte sueltos pueden alisarse sin esfuerzo después de la preparación con los abrasivos Arkansas Prep & Match, lo que mejora la calidad de la superficie y el margen de preparación en muchos casos. Con un margen de preparación diseñado con precisión, el riesgo de caries secundaria se reduce considerablemente. Esta perfecta combinación de instrumento de preparación y abrasivo Arkansas es ideal para la preparación de bordes y la preparación de escalones, de eficacia probada.

Velocidad recomendada: 80.000-100.000 min⁻¹
Velocidad máxima: 120.000min⁻¹

617XF extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	8,0
617XF	RA	635 204 172 505		023
	FG	635 314 172 505		023



617XF
ist kombinierbar mit
846, 847, 848 |
can be combined with
846, 847, 848 |
se puede combinar con
846, 847, 848
Seite | page | pagina
26 + 27



619XF extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	8,0
619XF	RA	635 204 198 505		023
	FG	635 314 198 505		023



619XF
ist kombinierbar mit
849, 850, 852 |
can be combined with
849, 850, 852 |
se puede combinar con
849, 850, 852
Seite | page | pagina
29 + 30



629XF extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	8,0
629XF	RA	635 204 298 505		023
	FG	635 314 298 505		023



629XF
ist kombinierbar mit
877, 878, 879 |
can be combined with
877, 878, 879 |
se puede combinar con
877, 878, 879
Seite | page | pagina
37



ARKANSAS-SCHLEIFER | ARKANSAS ABRASIVES | ABRASIVOS ARKANSAS

“Arkansas”-Schleifkörper, weiß, extrafein, für das Feinstschleifen/Polieren von Füllungsmaterialien, insbesondere auch aller Komposite.
Signifikante Reduzierung des Randspalts.

White “Arkansas” abrasives, extra fine, for smooth grinding and polishing of filling materials and composites.
Significant reduction of the edge gap.

Abrasivos blancos “Arkansas”, extra finos, para terminar y pulir obturaciones en especial resinas (composites).
Reducción considerable del margen derecho.

601XF extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm
601XF	HP	635 104 001 505	030*
	RA	635 204 001 505	030
	FG	635 314 001 505	030

**638XF** extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm
638XF	HP	635 104 110 505	025*
	FG	635 314 110 505	025

**645XF** extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm
645XF	HP	635 104 161 505	028*
	RA	635 204 161 505	028
	FG	635 314 161 505	028

**649XF** extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm
649XF	HP	635 104 171 505	025*
	RA	635 204 171 505	025
	FG	635 314 171 505	025

**660XF** extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm
660XF	RA	635 204 297 505	025
	FG	635 314 297 505	025

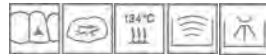
**661XF** extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm
661XF	HP	635 104 288 505	025*
	RA	635 204 288 505	025
	FG	635 314 288 505	025

**662XF** extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm
662XF	RA	635 204 297 505	030
	RA _s	635 203 297 505	030

**666XF** extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm
666XF	FG	635 314 257 505	025



SCHLEIFKÖRPER FÜR KERAMIKEN | ABRASIVES FOR CERAMICS | ABRASIVOS PARA CERÁMICAS

Speziell für | Especialmente para | Especial para
CAD/CAM

Einfache Bearbeitung mit geringer Hitzeentwicklung

Die MEISINGER Diamant-Keramik-Schleifer sind zur einfachen Bearbeitung von Zirkonoxid, Silithium-Disilikat, Feldspatkeramik und Verblendkeramiken geeignet. Die zwei unterschiedlichen Körnungen, grob und mittel, ermöglichen einen guten Abtrag bei sehr geringer Hitzeentwicklung und eignen sich optimal zum Ausdünnen der Kronenränder. Zudem sind die Diamant-Keramik-Schleifer ohne Wasserkühlung einsetzbar.

Speziell für die Bearbeitung von Zirkonoxidrestaurationen.

- Synthetische, diamantierte Bindung
- Guter Abtrag
- Geringe Hitzeentwicklung
- Keine Wasserkühlung notwendig
- Gute Reduzierung der Kronenränder

1. Stufe
Grob

2. Stufe
Mittel

Empfohlene Drehzahl: 8.000 - 12.000 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 25.000 min⁻¹

Easy processing with low heat development

The MEISINGER diamond porcelain grinders are suitable for easy processing of zirconium oxide, Lithium disilicate, feldspathic ceramics and veneering ceramics. The two different grains, coarse and medium, allow good removal with very little heat development. They are very well suited for thinning the crown margins. Additionally, the diamond porcelain grinders can be used without water cooling.

Especially for the treatment of zirconium oxide restorations.

- synthetic, diamond-coated binding
- good removal
- low heat development
- no water cooling necessary
- good reduction of crown margins

1. Step
Coarse

2. Step
Medium

Recommended Speed: 8.000 - 12.000 rpm
Maximum Speed: 25.000 rpm

Trabajo sencillo con poca generación de calor

Las fresas de cerámica diamantada MEISINGER están indicadas para trabajar de forma sencilla con óxido de circonio, disilicato de silicio, cerámica de feldespato y sistemas cerámicos. Dos grados de grano distintos, grueso y mediano, facilitan un buen desbaste con una generación de calor muy pequeña y se adaptan a la perfección para rebajar los bordes de los granos. Además, se pueden emplear fresas de porcelana diamantada sin refrigeración.

Especiales para el tratamiento de restauraciones de circonio de óxido.

- Fijación sintética, diamantada
- Buen desbaste
- Baja generación de calor
- No se necesita refrigeración por agua
- Buena reducción de los bordes de los granos.

1ª escala
Grueso

2ª escala
Mediano

Revoluciones recomendadas: 8.000 - 12.000 min⁻¹
Revoluciones máximas: 25.000 min⁻¹

9734H
9734G

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
			L mm	10,0	10,0
9734H	HP	805 104 173 535		040*	
9734H	RA	805 204 173 535		040	
9734G	HP	805 104 173 525			040*
9734G	RA	805 204 173 525			040


9735H
9735G

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
			L mm	13,0	13,0
9735H	HP	805 104 107 535		050	
9735G	HP	805 104 107 525			050


9736H
9736G

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
			L mm	3,0	3,0
9736H	HP	805 104 042 535		150	
9736G	HP	805 104 042 525			150


9738H
9738G

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
			L mm	13,0	13,0
9738H	HP	805 104 156 535		050	
9738G	HP	805 104 156 525			050



SCHLEIFKÖRPER FÜR ZIRKONOXID | ABRASIVES FOR ZIRCONIUM OXIDE | ABRASIVOS PARA ÓXIDO DE CIRCONIO

Speziell für | Especially for | Especial para
CAD/CAM

Diamantschleifkörper aus Siliciumcarbid zum sicheren Bearbeiten von empfindlichen Zirkonoxidoberflächen.

- Trockenbearbeitung
- keine Mikrorisse
- Anwendung ohne Druck

Diamond grinding tools made of silicon carbide for the safe machining of sensitive zirconium oxide surfaces.

- dry machining
- no microfissures
- Application without pressure

Abrasivos de diamante de carburo de silicio para el mecanizado seguro de las superficies sensibles de óxido de circonio.

- mecanizado en seco
- sin microfisuras
- Aplicación sin presión

Z602 mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	
Z602	HP	655 104 001 526		040

**Z623** mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	3,0
Z623	HP	655 104 043 526		060

**Z638** mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	6,5
Z638	HP	655 104 110 526		025

**Z652R** mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	10,5
Z652R	HP	655 104 199 526		035

**Z660** mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	12,0
Z660	HP	655 104 257 526		045

**Z667** mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	7,5
Z667	HP	655 104 257 526		035

**Z722** mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	2,5
Z722	HP	655 104 304 526		180

**Z732** mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	12,5
Z732	HP	655 104 107 526		050

**Z736** mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	7,0
Z736	HP	655 104 012 526		065



2670 – Zirkon Master Kit
auf Seite | on page | en la página

216

KERAMISCHE DIAMANTSCHLEIFKÖRPER | CERAMIC DIAMOND ABRASIVES | ABRASIVOS CERÁMICOS DE DIAMANTE

Speziell für | Especialmente para | Especial para
CAD/CAM

Diamantschleifkörper zum präzisen und sicheren Bearbeiten von Keramik.

Diamond abrasives for precise and safe processing of ceramics.

Abrasivos de diamante para el tallado de precisión en cerámica.

D732F extra fein / extra fine



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	12,0
D732F	HP	805 104 107 504		050



SILICIUMCARBID-SCHLEIFER | SILICONE CARBIDE-ABRASIVES | ABRASIVOS DE CARBURO DE SILICIO

Grün, fein | Green, fine | Verde, fino

Siliciumcarbid Schleifkörper, grün, fein, für das Beschleifen von Zahnschmelz und Keramik.

The green fine abrasives are designed for smooth grinding of enamel and ceramics.

Abrasivos verdes, finos para suavizar esmalte dental y cerámica.

601F fein / fine



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	
601F	RA	655 204 001 513		030
	FG	655 314 001 513		030



638F fein / fine



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	6,0
638F	FG	655 314 110 513		025



645F fein / fine



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	7,0
645F	HP	655 104 161 513		028*
	RA	655 204 161 513		028
	FG	655 314 161 513		028



649F fein / fine



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	6,0
649F	RA	655 204 171 513		025
	FG	655 314 171 513		025



661F fein / fine



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	7,0
661F	HP	655 104 288 513		025*
	RA	655 204 288 513		025
	FG	655 314 288 513		025



Grün, mittel | Green, medium | Verde, mediano

Siliciumcarbid-Schleifkörper, grün, medium, für das Beschleifen von Keramik.

The green medium abrasives are designed for smooth grinding of ceramics.

Abrasivos verdes, medianos para suavizar cerámica.

601 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
601	HP	655 104 001 523	030*
	RA	655 204 001 523	030



602 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
602	HP	655 104 001 523	040*
	RA	655 204 001 523	040



603 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
603	HP	655 104 001 523	050*
	RA	655 204 001 523	050



613 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm 3,0
613	HP	655 104 014 523	070



622 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm 2,0
622	RA	655 204 042 523	065



624 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm 5,0
624	HP	655 104 109 523	060



633 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm 4,0
633	HP	655 104 316 523	090



638 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm 6,0
638	HP	655 104 110 523	025



639 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm 6,0
639	HP	655 104 110 523	035



640 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm 6,0
640	HP	655 104 110 523	050



649 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm 6,0
649	HP	655 104 171 523	025*
	RA	655 204 171 523	025



650 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
			L mm 6,0
650	HP	655 104 171 523	028*
	RA	655 204 171 523	028



651

mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	6,0
651	RA	655 204 171 523	032



652

mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	10,5
652	HP	655 104 173 523	035



652R

mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	10,5
652R	HP	655 104 199 523	035



653

mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	12,0
653	HP	655 104 174 523	040



661

mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	7,0
661	HP	655 104 288 523	025*
	RA	655 204 288 523	025



662

mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	7,5
662	HP	655 104 288 523	035*
	RA	655 204 288 523	035



663

mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	10,5
663	HP	655 104 243 523	060



665

mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	12,0
665	HP	655 104 273 523	060



666

mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	6,5
666	HP	655 104 257 523	025*
	RA	655 204 257 523	025



667

mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	7,0
667	RA	655 204 257 523	035



671

mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	10,0
671	HP	655 104 266 523	060*
	RA	655 204 266 523	060



712

mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	3,0
712	HP	655 104 042 523	095



717

mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	3,0
717	HP	655 104 372 523	190



EDELKORUND-SCHLEIFER | CORUNDUM ABRASIVE | ABRASIVO DE CORINDÓN

Rosa | Pink | Rosa

Edelkorund Schleifer (Al_2O_3), rosa, für die Bearbeitung von Metallen aller Art.

Corundum abrasives (Al_2O_3), pink, for use on all types of metals.

Abrasivos de corindón (Al_2O_3), rosa, para trabajar con toda clase de metales.

601 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
601	HP	625 104 001 523	030	



602 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
602	HP	625 104 001 523	040	



603 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
603	HP	625 104 001 523	050	



613 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	3,0
613	HP	625 104 014 523	070	



624 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	5,0
624	HP	625 104 109 523	060	



637 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	6,0
637	HP	625 104 110 523	020	



638 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	6,0
638	HP	625 104 110 523	025	



639 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	6,0
639	HP	625 104 110 523	035	



640 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	6,0
640	HP	625 104 110 523	050	



648 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	6,0
648	HP	625 104 171 523	020	



649 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	6,0
649	HP	625 104 171 523	025	



650 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	6,0
650	HP	625 104 171 523	028	



652R mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	10,5
652R	HP	625 104 199 523	035	



661 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	7,0
661	HP	625 104 288 523	025	



662 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	7,5
662	HP	625 104 288 523	035	



663

mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	10,5
663	HP	625 104 243 523		060



665

mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	12,0
665	HP	625 104 273 523		060



666

mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	6,5
666	HP	625 104 257 523		025



667

mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	7,0
667	HP	625 104 257 523		035



671

mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	10,0
671	HP	625 104 266 523		060



K+B SCHLEIFKÖRPER | ABRASIVES "K+B" | ABRASIVOS PARA CORONAS Y PUENTES K+B**Grün, fein** | Green, fine | Verde, fino**K+B Schleifkörper, grün (weiche Bindung), für
Aufbrennkeramik Verblendungen.****Abrasives "K+B", green (soft bonding), for ceramic
facings.****Abrasivos para coronas y puentes K+B, verde (ligazón
blanda), para los revestimientos de metalcerámica.****KB652R** rund, fein / round, fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	10,5
KB652R	HP	655 104 199 512	035

**KB671** fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	10,0
KB671	HP	655 104 266 512	060

**KB716** fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	3,0
KB716	HP	655 104 372 512	160

**KB722** fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	2,5
KB722	HP	655 104 304 512	160

**KB727** fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	6,0
KB727	HP	655 104 024 512	125

**KB728** fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	6,5
KB728	HP	655 104 023 512	165

**KB731** fein / fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	13,0
KB731	HP	655 104 107 512	065

**Braun, fein** | Brown, fine | Marrón, fino**KB652** mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	10,5
KB652	HP	635 104 199 512	035

**KB671** mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	10,0
KB671	HP	635 104 266 512	060

**KB731** mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	13,0
KB731	HP	635 104 107 512	065

**KB733** mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	10,5
KB733	HP	635 104 173 512	035



Blau, medium | Blue, medium | Azul, mediano

K+B Schleifer, blau – aus reinem Aluminiumoxid für NEM-Legierungen.

Abrasives “K+B”, blue – aluminium oxide for NON Precious Alloy.

Abrasivos para coronas y puentes K+B, azul – de óxido de aluminio para las aleaciones no preciosas.

B649R mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	6,0
B649R	HP	635 104 197 523		025



B652R mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	10,5
B652R	HP	635 104 199 523		035



Orange, medium | Orange, medium | Naranja, mediano

K+B Schleifkörper, orange, für NEM-Legierungen.

Abrasives “K+B”, orange, for NON Precious Alloy.

Abrasivos para coronas y puentes K+B, naranja, para las aleaciones no preciosas.

S652R mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	10,5
S652R	HP	635 104 199 520		035



S653 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	12,0
S653	HP	635 104 174 520		040



S671 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	10,0
S671	HP	635 104 266 520		060



SPEZIALSCHLEIFKÖRPER FÜR CHROM-KOBALT-LEGIERUNGEN | MOUNTED POINTS FOR CHROME COBALT ALLOYS | PUNTAS ESPECIALES PARA ALEACIONES DE CROMO-COBALTO

Weiß, harte Bindung | White, Hard Bonding | Blanco, ligazón dura

Spezialschleifkörper für Chrom-Kobalt-Legierungen, weiß, Bindung hart.

Mounted abrasives for chrome cobalt alloys, white, hard bonding.

Puntas especiales para aleaciones de cromocobalto, blanco, ligazón dura.

731 grob / coarse



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	13,0
731	HP	635 104 107 524		065



732 grob / coarse



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	12,5
732	HP	635 104 107 524		050



733 grob / coarse



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	10,5
733	HP	635 104 173 524		035



453 mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	10,0
453	HP	635 104 043 524		100



Rosa, mittlere Bindung | Pink, Medium Bonding | Rosa, ligazón mediana

Spezialschleifkörper für Chrom-Kobalt-Legierungen, rosa, Bindung mittel.

Mounted abrasives for chrome cobalt alloys, pink, medium bonding.

Puntas especiales para aleaciones de cromocobalto, rosa, ligazón mediana.

731

grob / coarse



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
		L mm		13,0
731	HP	625 104 107 523		065



732

grob / coarse



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
		L mm		12,5
732	HP	625 104 107 523		050



733

grob / coarse



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
		L mm		10,5
733	HP	625 104 173 523		035



734

grob / coarse



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
		L mm		4,0
734	HP	625 104 316 523		085



736

grob / coarse



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
		L mm		6,5
736	HP	625 104 012 523		065



Braun, weiche Bindung | Brown, Soft Bonding | Marrón, ligazón blanda

Spezialschleifkörper für Chrom-Kobalt-Legierungen, braun, Bindung weich.

Mounted abrasives for chrome cobalt alloys, brown, soft bonding.

Puntas especiales para aleaciones de cromocobalto, marrón, ligazón blanda.

731

mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
		L mm		13,0
731	HP	635 104 107 522		065



732

mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
		L mm		12,5
732	HP	635 104 107 522		050



733

mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
		L mm		10,5
733	HP	635 104 173 522		035



Hellbraun, sehr weiche Bindung | Light Brown, Very Soft Bonding | Marrón claro, ligazón muy blanda

Spezialschleifkörper für Chrom-Kobalt-Legierungen, hellbraun, Bindung sehr weich.

Mounted abrasives for chrome cobalt alloys, light brown, very soft bonding.

Puntas especiales para aleaciones de cromocobalto, marrón claro, ligazón muy blanda.

731

fein / fine



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
		L mm		13,0
731	HP	635 104 107 521		065



732

fein / fine



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
		L mm		12,5
732	HP	635 104 107 521		050



733

fein / fine



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
		L mm		10,5
733	HP	635 104 173 521		035



AUSARBEITUNGSSTEIN FÜR KUNSTSTOFF | LABORATORY TRIMMER FOR PLASTIC | ABRASIVOS PARA ACRÍLICO

Grün, medium | Green, medium | Verde, mediano

744

mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	17,0
744	HP	655 104 273 523	110



AUSARBEITUNGSSTEIN FÜR KUNSTSTOFF UND GIPS | LABORATORY TRIMMER FOR PLASTIC AND PLASTER | ABRASIVOS PARA ACRÍLICO Y YESO

Blau, medium | Blue, medium | Azul, mediano

Innovatives und kunstharzgebundenes Instrument zum groben Abtragen von Kunststoffen und zum Beschleifen von Gips. Speziell Thermoplaste und Silikone sowie glänzende Acrylate lassen sich effizient und ohne Schmelzeffekte bearbeiten. Innovative synthetic resin bonded instrument for the rapid removal of plastics and for grinding plaster. Thermoplastics silicone, and glossy acrylics can be efficiently worked on without causing the effect of melting. Nuevo instrumento hecho de un ligamiento de resina sintética para desbastar resinas de acrílico y yeso. Gracias al termoplástico y siliconas especiales se puede eficazmente trabajar sobre el material sin efecto de fundición.

9573X

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	24,0
9573X	HP	653 104 275 546	100



- Niedriger Drehzahlbereich (empfohlen: 5.000-7.000 min⁻¹)
- Minimierte Wärmeentwicklung durch offene poröse Struktur
- Schnell und effizient
- Multifunktionale Anwendungen
- Sehr beständig
- Kein Verschmelzen

- Low speed range (recommended: 5.000-7.000 rpm)
- Minimized heat development due to opened-pored structure
- Quick and efficient
- Multifunctional applications
- Very long-lasting
- No melting

- Baja velocidad de rotación (velocidad de giro recomendada 5.000-7.000 min⁻¹)
- Recalentamiento reducido gracias a su estructura porosa
- Rápido y eficaz
- Aplicaciones multifuncionales
- Vida larga
- No se funde

AUSARBEITUNGSSTEINE FÜR CHROM-KOBALT-LEGIERUNGEN | LABORATORY TRIMMERS FOR CHROME COBALT ALLOY | ABRASIVOS PARA ALEACIONES DE CROMOCOBALTO

Rosa, medium | Pink, medium | Rosa, mediano

743S

mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	22,0
743S	HP	625 104 274 523	130

**744**

mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	17,0
744	HP	625 104 273 523	110

**751**

mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	20,0
751	HP	625 104 273 523	100



Braun, medium | Brown, medium | Marrón, mediano

743S

mittel / medium



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	22,0
743S	HP	635 104 274 522	130



ZURICHTSTEINE | DRESSING STONES | PIEDRAS PARA AFILAR

Zurichtstein aus Siliciumcarbid (grün) in mittlerer und grober Körnung zum Zurichten und Reinigen von Schleifkörpern | Silicone Carbide (green) Dressing Stones in coarse and medium grain sizes for dressing and cleaning abrasives | Piedra para afilar de carburo de silicio (verde), grano mediano y grueso, para la rectificación y limpieza de abrasivos

529

mittel / medium



Fig.	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1
529	655 000 600 523		000
Size	75 x 25 x 8 mm		

529MG

mittel, grob / medium, coarse



Fig.	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1
529MG	655 000 600 000		000
Size	75 x 25 x 15 mm		

529S

Fig.	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1
529S	635 000 600 523		000
Size	100 x 25 x 15 mm		

529D

Fig.	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1
529D	635 000 600 024		000
Size	75 x 25 x 15 mm		

Für das problemlose und rasche Reinigen verschmierter Diamantinstrumente und Sinterdiamanten, dadurch bessere Schleifleistung (Reinigungsstein vor der Anwendung gut anfeuchten)

Designed for fast and easy cleaning of diamond instruments and Sintered diamonds for improved performance (cleaning stone to be moistened thoroughly before use)

Para la limpieza rápida y segura de las puntas diamantadas y diamantes sinterizados embotadas, por lo tanto más eficaz en el tallado (piedra de limpieza debe ser bien mojada antes de usarla)

Stahlinstrumente

Steel Instruments | Instrumentos de acero

MEISINGER Stahlinstrumente werden in einem Stück aus ausgewähltem Wolfram-Vanadium- oder rostfreiem Stahl gefertigt. Sie überzeugen vor allem durch ihre stabile Konstruktion, die präzise, schnittfreundige Verzahnung und ihre optimale Rundlaufgenauigkeit. Die Instrumente bieten hohe Elastizität bei gleichzeitig optimaler Materialhärte. HSS-Stahlinstrumente werden aus Hochleistungsschnellstahl hergestellt und bieten daher zusätzlich optimale Wärmefestigkeit sowie eine deutlich erhöhte Lebensdauer.

MEISINGER steel instruments are manufactured from one piece tungsten-vanadium steel or stainless steel. They demonstrate quality through their functional design, precision toothing, and above average concentricity. The instruments offer high elasticity and optimal material hardness. HSS-Steel instruments are produced from high-strength steel, and therefore, offer an additional heat strength as well as high endurance.

Los instrumentos de acero de MEISINGER son de acero seleccionado de „Wolframio-Vanadio“, ó de acero inoxidable y se fabrican de una sola pieza. Se distinguen sobre todo por su estabilidad, sus filos de precisión cortantes y su óptima concentricidad. Alta flexibilidad junto con una óptima dureza son las características de estos instrumentos.

Las fresas de acero „HSS“ son de acero rápido y ofrecen además una óptima resistencia al calor y una vida bastante más larga.

STAHLINSTRUMENTE, ROSTFREI (RF) | STEEL INSTRUMENTS, STAINLESS (RF) | INSTRUMENTOS DE ACERO, INOXIDABLES (RF)

Martensitische, nichtrostende Stähle, die für die chirurgische Anwendung genormt sind
⇒ Hohe Rostbeständigkeit wird durch einen deutlich höheren Chrom-Anteil als bei Wolfram-Vanadium (WVS) erzielt
⇒ Hohe Standzeiten bei chirurgischen oder ähnlichen Anwendungen

Martensitic, stainless steel, shaped for surgical applications
⇒ High corrosion resistance is achieved with a higher amount of chromium than with tungsten vanadium steel
⇒ Long service life for surgical or similar applications

Aceros inoxidables martensíticos normalizados para la aplicación quirúrgica
⇒ Alta resistencia a la corrosión gracias a un porcentaje de cromo notablemente superior al utilizado en el acero de wolframio-vanadio
⇒ Larga durabilidad en usos quirúrgicos o similares

STAHLINSTRUMENTE, WOLFRAM-VANADIUM (WVS) | STEEL INSTRUMENTS, WOLFRAM-VANADIUM (WVS) | INSTRUMENTOS DE ACERO, VOLFRAMIO-VANADIO (WVS)

Ausgewählte Wolfram-Vanadium-Stahlqualität
⇒ geringe Korrosionsbeständigkeit
⇒ hohe Standzeiten auf harten Materialien
• Sterilisation nur mit geeigneter Vorbehandlung möglich, RDG-Tauglichkeit prüfen
• ca. 15 % mehr Härte als Instrumente aus rostfreiem Stahl

Selected tungsten-vanadium steel quality
⇒ Low corrosion resistance
⇒ Long service life with regard to hard materials
• Sterilization just possible with suitable pretreatment as well as testing for cleaning and disinfection unit suitability.
• Approx. 15 % greater hardness than stainless steel instruments

Acero al tungsteno-vanadio de calidad seleccionada
⇒ Menor resistencia a la corrosión
⇒ Alta durabilidad en materiales duros
• Esterilización solo con tratamiento previ apto, comprobar idoneidad para productos de limpieza
• Dureza aprox. 15 % superior de los instrumentos de acero inoxidable

HOCHLEISTUNGS-SCHNELLSTAHL (HSS) | HIGH SPEED STEEL (HSS) | DISPONIBLE EN ACERO (HSS)

Ausgewählte Hochleistungs-Schnellstähle (High Speed Steel)
⇒ Nicht rostfrei, aber höherer Chrom-Anteil als bei Wolfram-Vanadium-Instrumenten
⇒ hohe Standzeiten auch auf sehr harten Materialien

Selected high performance steels (High Speed Steel)
⇒ Not corrosion resistant, but higher share of chromium than with tungsten vanadium instruments
⇒ Long service life also with regard to very hard-materials

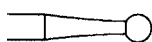
Aceros de alta velocidad seleccionados (High Speed Steel)
⇒ No es inoxidable pero su contenido en cromo es superior al de los instrumentos de wolframio-vanadio
⇒ Alta durabilidad en materiales muy duros

STAHLBOHRER

STEEL BURS

FRESAS DE ACERO

138-140




Rund

Round

Redonda

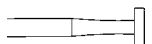138




Rad

Wheel

Rueda

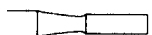138



Zylinder

Cylinder

Cilíndrico

139



Konisch

Tapered, Flat End

Cónica

139



Spiralbohrer

Twist Drill

Taladro espirales

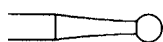
140

STAHLFINIERER

STEEL FINISHING BURS

FRESAS PARA ACABAR

141



Rund

Round

Redonda

141



Birne

Pear

Pera

141

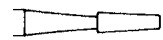


Knospe

Bud

Capullo

141



Konisch, flach

Tapered, Flat End

Cónica

141

STAHLFÄSER

STEEL CUTTERS

FRESONES DE ACERO

142-144

NIETRAD

RIVETER

RUEDAS PARA REMACHER

144

LABOR-STICHFRÄSER

LABORATORY CUTTING BUR

FRESAS DE PUNTA PARA RECORTAR

145

ZAHNSTEINENTFERNER

TARTAR REMOVAL

FRESA PARA PROFILAXIS

145

TRÄGER

MANDRELS

MANDRILES

145-147

ROSTSCHUTZSPRAY

RUST PREVENTING SPRAY

SPRAY ANTICORROSIVO

147

STAHLBOHRER | STEEL BURS | FRESAS DE ACERO

Rund | Round | Redonda



	1	Stahl / steel																				
	1RF	Edelstahl / stainless steel																				
																						
Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5	
1	HP	310 104 001 001		004*	005*	006*	007*	008*	009*	010*	012*	014*	016*	018*	021*	023*	025*	027*	029*	031*	033*	
	RA	310 204 001 001			005	006	007	008	009	010	012	014	016	018	021	023	025	027	029	031		
	RA L	310 205 001 001							009	010	012	014	016	018	021	023						
	RA XL	310 206 001 001								010	012	014	016	018		023						
1RF*	HP	330 104 001 001			005*		007*		009*	010*		014*	016*			023*						
												</										



11

Stahl / steel

11RF

Edelstahl / stainless steel







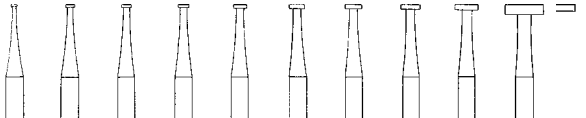



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	HP	310 104 001 002		009		014					023	031
11RF	HP	330 104 001 002		009	010	014	016	018	021	023	031	





Rad | Wheel | Rueda

	3	Stahl / steel												
Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	5
			L mm	0,3	0,3	0,4	0,4	0,5	0,5	0,6	0,7	0,8	1,3	
3	HP	310 104 040 001		008	012	014	016	018	021	023	027	031	050	
														

Zylinder | Cylinder | Cilíndrico

21 Stahl / steel

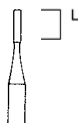


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10
			L mm	4,2
21	HP	310 104 107 006		010



36 Stahl / steel

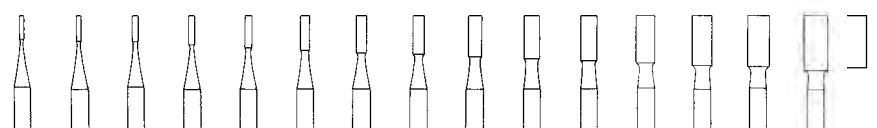


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			L mm	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	6,3	6,6	6,9
36	HP	310 104 107 002		006*	007*	008*	009*	010*	012*	014*	016*	018*	021*	023*	025*	027*	029*
	RA	310 204 107 002				008		010	012	014							031*



Konisch | Tapered, Flat End | Cónica

38 Stahl / steel

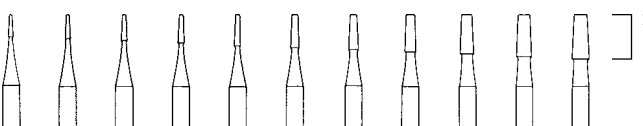


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
			L mm	3,0	3,3	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	5,7	6,0	
38	HP	310 104 168 002		006*	007*	008*	009*	010*	012*	014*	016*	018*	021*	023*	
	RA	310 204 168 002				008		010	012		016		021		



38R Stahl / steel

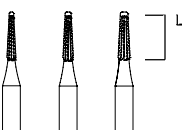


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10	10	10
			L mm	6,0	6,0	6,0
38R	RAL	310 205 196 002		012	014	016

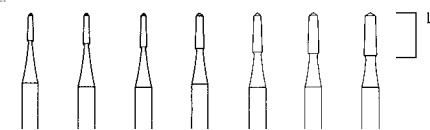
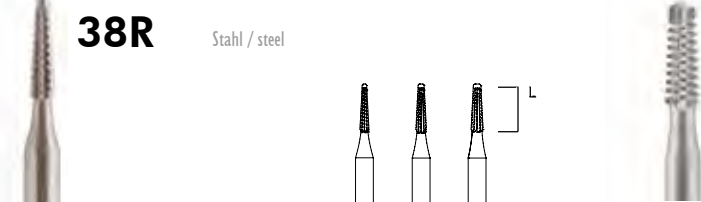

39 Stahl / steel
39RF Edelstahl / stainless steel


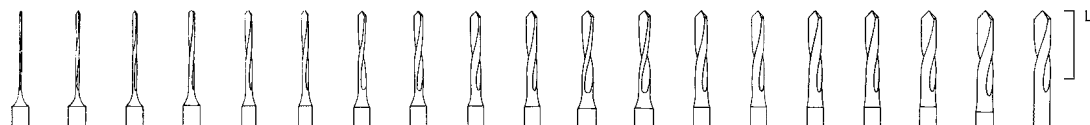
Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10	10	10	10	10	10	10	10
			L mm	3,6	3,9	4,2	4,5	4,8	5,1	5,4	
39	HP	310 104 206 002				010					018
39RF	HP	330 104 206 002		008	009	010	012	014	016	018	



Spiralbohrer | Twist Drill | Taladro espirales



203 Stahl / steel
203RF Edelstahl / stainless steel

[illegible]

$\star \text{cube} = 2$



HSS203 Stahl / steel

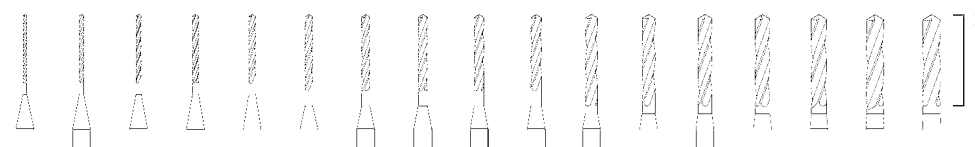


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			L mm	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	10,0	10,0	10,0	10,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0	12,0
HSS203	HP	350 104	417 364	005	006	007	008	009	010	011	012	013	014	016	017	018	019	020	022



Spiralbohrer, Hochleistungs-Schnellstahl (HSS) - etwa 10-fach höhere Standzeit | Twist drills, high speed steel (HSS) - approx. 10-fold longer endurance | Taladro espirales, disponible en acero (HSS) - aprox. 10 veces más durabilidad

STAHLFINIERER | STEEL FINISHING BURS | FRESAS PARA ACABAR

Rund | Round | Redonda

41 Stahl / steel

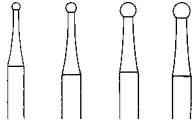



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10	10	10	10
41	RA	310 204 001 071		010	014	021	023



Birne | Pear | Pera



47 Stahl / steel

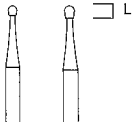



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10	10
			L mm	1,5	1,7
47	RA	310 204 237 071		012	014



Knospe | Bud | Capullo

48 Stahl / steel

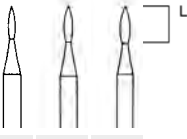



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10	10	10
			L mm	4,5	4,8	5,1
48	HP	310 104 243 071		010*		
	RA	310 204 243 071		010	012	014



Konisch, flach | Tapered, Flat End | Cónica

212 Stahl / steel

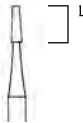



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10
			L mm	4,8
212	RA	310 204 168 071		014



STAHLFRÄSER | STEEL CUTTERS | FRESONES DE ACERO

71 Stahl / steel

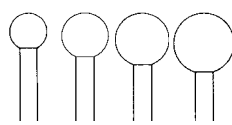



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5
71	HP	310 104 001 171		050	060	070	080



72 Stahl / steel

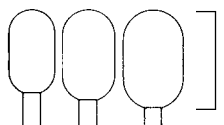



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
72	HP	310 104 155 171	L mm	11,0	12,0	13,0
				060	070	080



75 Stahl / steel

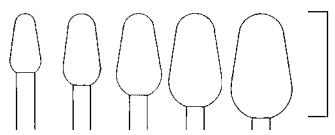



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5
75	HP	310 104 260 171	L mm	8,0	9,5	11,0	12,5	14,0
				040	050	060	070	080



77 Stahl / steel

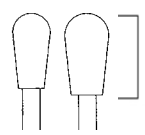



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
77	HP	310 104 237 171	L mm	10,0	11,0
				050	060



78 Stahl / steel

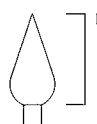



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
78	HP	310 104 257 171	L mm	12,0
				060



79 Stahl / steel

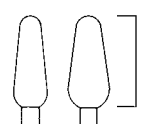



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
79	HP	310 104 266 171	L mm	12,0	12,0
	RA	310 204 266 171		045*	055*
				045	



81RF Edelstahl / stainless steel

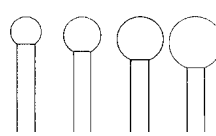



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5
81RF	HP	330 104 001 172		040	050	060	070



Zum Ausarbeiten weichbleibender Unterfütterungsmaterialien | For the reduction of permanent soft reline material | Para modelar materiales de rebase permanentemente blandos

82RF Edelstahl / stainless steel

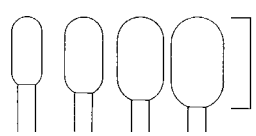



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5
82RF	HP	330 104 155 172	L mm	9,0	10,0	11,0	12,0
				040	050	060	070



Zum Ausarbeiten weichbleibender Unterfütterungsmaterialien | For the reduction of permanent soft reline material | Para modelar materiales de rebase permanentemente blandos

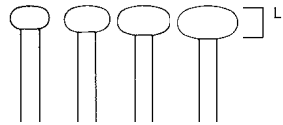
84RF Edelstahl / stainless steel

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5
			L mm	3,0	3,5	4,0	4,5
84RF	HP	330 104 103 172		050	060	070	080



Zum Ausarbeiten weichbleibender Unterfütterungsmaterialien | For the reduction of permanent soft relining material | Para modelar materiales de rebase permanentemente blandos

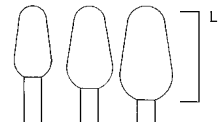
85RF Edelstahl / stainless steel

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	9,5	11,0	12,5
85RF	HP	330 104 260 172		050	060	070



Zum Ausarbeiten weichbleibender Unterfütterungsmaterialien | For the reduction of permanent soft relining material | Para modelar materiales de rebase permanentemente blandos

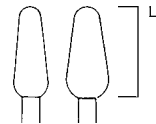
89 Stahl / steel

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	12,0	12,0
89	HP	310 104 266 172		045	055



Zum Ausarbeiten weichbleibender Unterfütterungsmaterialien | For the reduction of permanent soft relining material | Para modelar materiales de rebase permanentemente blandos

91RF Edelstahl / stainless steel

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
91RF	HP	330 104 001 132		050



Für Feinarbeiten an weichbleibenden Unterfütterungsmaterialien | For finishing permanent soft relining material | Para alisar materiales de rebase permanentemente blandos

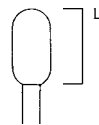
92RF Edelstahl / stainless steel

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	10,0
92RF	HP	330 104 155 132		050



Für Feinarbeiten an weichbleibenden Unterfütterungsmaterialien | For finishing permanent soft relining material | Para alisar materiales de rebase permanentemente blandos

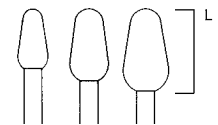
95RF Edelstahl / stainless steel

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	8,0	9,5	11
95RF	HP	330 104 260 132		040	050	060



Für Feinarbeiten an weichbleibenden Unterfütterungsmaterialien | For finishing permanent soft relining material | Para alisar materiales de rebase permanentemente blandos

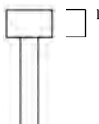
108 Stahl / steel

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	3,7
108	HP	310 104 118 174		060



Zum Aufrauen von Kunststoffoberflächen, Rillenfräser für Reparatur | Roughening of plastic surfaces, Groove cutter for repairs | Para lijar superficies de plástico, fresa para ranuras para reparaciones


194 Stahl / steel

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10	10
			L mm	7,5	7,5
194	HP	310 104 690 002		010	012





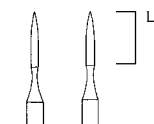231 Stahl / steel

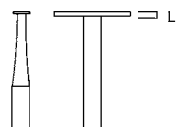


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10	5
			L mm	0,2	0,5
231	HP	310 104 045 171		023	100



Kreissäge, Zur Entfernung der Acryl-Gussform | Circular saw, for removal of acrylic form molds | Sierra circular, Para desprender moldes acrílicos



232RF Edelstahl / stainless steel

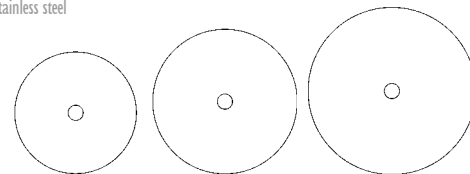


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10	10	10
			L mm	0,1	0,1	0,1
232RF	unmounted	330 900 320 101		160	190	220



Träger: 305RF, Größe 50, Informationen auf S.148 | Mandrel: 305RF, Size 50, Informations on p.148 | Mandril: 305RF, tamaño 50, información en la pág. 148
Kreissäge, rostfrei | Circular saw, stainless | Sierra circular, inoxidable



234 Stahl / steel

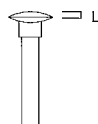


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	1,5
234	HP	310 104 304 171		060



450 Stahl / steel

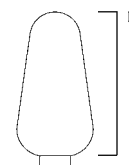


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1
			L mm	19,0
450	HP	310 104 260 131		100



Gipsfräser | Cutter for plaster | Fresa para yeso

NIETRAD | RIVETER | RUEDAS PARA REMACHER



452RF Edelstahl / stainless steel

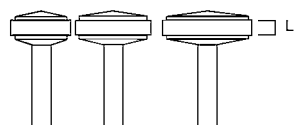


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1	1
			L mm	2,0	2,0	2,0
452RF	HP	330 104 100 381		080	100	120



Nietrad | Riveter | Ruedas para remachar



452S Stahl / steel



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1
			L mm	2,0
452S	HP	310 104 100 383		100



Stauchrad | Ram wheel | Rueda para remachar

LABOR-STICHFRÄSER | LABORATORY CUTTING BUR | FRESAS DE PUNTA PARA RECORTAR

**514**

Stahl / steel

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	2
		L mm	10,5

514	HP	310 104 211 215	021
-----	----	------------------------	-----

Labor-Stichfräser | Laboratory cutting bur | Fresa de punta para recortar

**515**

Stahl / steel

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	2
		L mm	11,0

515	HP	310 104 467 211	023
-----	----	------------------------	-----

Labor-Stichfräser für Tiefziehfolien | Vacuum form acrylic cutter | Fresa acrílica moldeada al vacío

**516**

New

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	2
		L mm	12,0

516	HP	310 104 467 211	012
-----	----	------------------------	-----

Zum Nachziehen von Fissuren | For fissures retightening | Para apretar fisuras

ZAHNSTEINENTFERNER | TARTAR REMOVAL | FRESA PARA PROFILAXIS

**9119**

Stahl / steel

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	7,5

9119	FG	310 314 470 381	016
------	----	------------------------	-----

Zahnsteinentferner | Tartar removal | Fresa para profilaxis

**9120**

Stahl / steel

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	2,5

9120	FG	310 314 469 381	009
------	----	------------------------	-----

Zahnsteinentferner | Tartar removal | Fresa para profilaxis

TRÄGER | MANDRELS | MANDRILES

**SF1RF**

Edelstahl / stainless steel

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	2
SF1RF	RA	330 204 608 000	000

--	--	--	--

Träger für Super Flexible Discs | Mandrel for Super Flexible Discs | Mandril para Super Flexible Discs

**313SR**

Edelstahl / stainless steel

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
313SR	RA	330 204 615 421	055

	HP	330 104 615 421	055
--	----	------------------------	-----

Träger für "Moore"-discs | Mandrel for "Moore" discs | Mandril para discos "Moore"

329

Stahl / steel

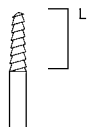


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	8,0
329	HP	312 104 610 417	023

Träger für elastische Polierer und Filzkegel | Mandrel for flexible polishers and felt-cones | Mandril para pulidores elasticos y conos de fieltro

301LR

Edelstahl / stainless steel

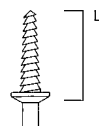


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
		L mm	12,0
301LR	HP	330 104 610 415	050

Träger für elastische Polierer und Filzkegel | Mandrel for flexible polishers and felt-cones | Mandril para pulidores flexibles y conos de fieltro

303S

Stahl / steel



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
303S	HP	310 104 603 391	050

Träger für Scheiben aller Art und Kreissägen | Mandrel for all types of discs and circular saws | Mandril para todos los tipos de discos y sierras circulares

303RF

Edelstahl / stainless steel

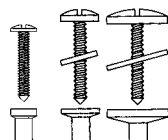


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5	5
303RF	HP	330 104 603 391	035	050	080
	HP 3	330 124 603 391		050	
	RA	330 204 603 391	035	050	



Träger für Scheiben aller Art und Kreissägen | Mandrels for all types of discs and circular saws | Mandriles para todos los tipos de discos y sierras circulares

305RF

Edelstahl / stainless steel

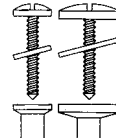


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
305RF	HP	330 104 604 391	050	080

Träger für Scheiben aller Art und Kreissägen | Mandrels for all types of discs and circular saws | Mandriles para todos los tipos de discos y sierras circulares

306RF

Edelstahl / stainless steel



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
306RF	HP	330 104 614 391	050

Träger für Scheiben aller Art und Kreissägen, flacher Trägerkopf ohne Unterlegscheibe, profilierte Spannfläche | Mandrel for all types of discs and circular saws, flat-headed mandrel without washer, profile clamping plate | Mandril para todos los tipos de discos y sierras circulares, cabeza portadora plana sin arandela, superficie de sujeción perfilada

307RF

Edelstahl / stainless steel



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
307RF	HP	330 104 604 391	050

Träger für unmontierte Polierer, flacher Trägerkopf ohne Unterlegscheibe, profilierte Spannfläche | Mandrel for unmounted polishers, flat-headed mandrel without washer, profile clamping plate | Mandril para pulidores, cabeza portadora plana sin arandela, superficie de sujeción perfilada

309RF

Edelstahl / stainless steel

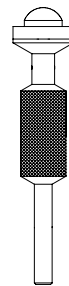


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5
309RF	HP L	330 105 625 396	080

Träger mit Schnellspannung für Scheiben aller Art | Mandrel with manual fixture of all types of discs | Toda clase de portadiscos para montaje rápido

314RF Edelstahl / stainless steel

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
314RF	HP L	330 105 622 444		042

Träger für Sandpapierstreifen | Mandrel for sand-paper strips | Mandril para tiras de papel de lija

315 Stahl / steel

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
315	HP L	312 105 623 444		031

Träger für Sandpapierstreifen | Mandrel for sand-paper strips | Mandril para tiras de papel de lija

318RF Edelstahl / stainless steel

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
318RF	HP	330 104 623 443		023

Träger für Sandpapierstreifen | Mandrel for sand-paper strips | Mandril para tiras de papel de lija

320A Edelstahl / stainless steel

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
				1,6
320A	HP	330 104 612 434		016

Mit den FG-Adaptern kann jedes FG-Instrument auch im Handstück (ø 2,35 mm) eingesetzt werden - beste Voraussetzung für die sachgerechte und uneingeschränkte Instrumentenauswahl | Any FG-instrument can be fixed to a handpiece (ø 2.35 mm) by means of this FG-adapter - best solution for successfully using an unlimited selection of instruments | Con el mandril adaptador se puede emplear cualquier instrumento FG en una pieza de mano recta (ø 2,35 mm) - un requisito para el surtido perfecto e ilimitado de instrumentos

327RF Edelstahl / stainless steel

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1
				2,0	3,0
327RF	HP	330 104 612 432		020	030

Träger für Kauflächenpolierer | Mandrels for occlusal surface polishers | Mandriles para pulidores de superficies oclusales

ROSTSCHUTZSPRAY | RUST PREVENTING SPRAY | SPRAY ANTICORROSIVO**2820**

Sterilisierbares Rostschutzspray für Stahlinstrumente.

Anwendungszweck: Verhindert zuverlässig die Bildung von Rost während und nach der Sterilisation.

Für alle Sterilisationsverfahren geeignet: Autoklaven: max. 134 °C / 273,2 °F.

Rust preventing spray, sterilizable, for steel instruments

Purpose of application: The rust preventing spray prevents rusting during and after sterilization.

Applicable for all methods of sterilization. Autoclave max. 134 °C / 273.2 °F.

Spray anticorrosivo esterilizable para los instrumentos de acero

Aplicación: El Spray Anticorrosivo esterilizable evita de un modo eficaz la oxidación durante y después de la esterilización.

Indicado para todo tipo de esterilización. Autoclave - max. 134 °C / 273,2 °F.

Chirurgie

Surgery | Cirugía



Prof. Dr. Fouad Khoury



Prof. Dr. Istvan Urban

MEISINGER bietet für die Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie eines der umfangreichsten Programme im Bereich der Chirurgiebohrer, Chirurgiefräser und Trepans an. Die optimierten Spezialkonstruktionen der Instrumente garantieren einen sicheren Einsatz und die schnelle Erreichung der gewünschten Arbeitsergebnisse.

For oral and maxilla-facial surgery MEISINGER offers one of the most extensive lines of allport burs, surgical cutters and trephines. The optimized construction of the instruments guarantees safe and fast achievement of desired results.

Para la cirugía maxilo-facial-bucal MEISINGER ofrece uno de los surtidos más amplios con fresas quirúrgicas, fresas quirúrgicas y con los trépanos. Los excelentes diseños especiales de los instrumentos garantizan una aplicación segura y rápida para alcanzar los resultados deseados.

In Zusammenarbeit mit führenden Wissenschaftlern und Praktikern hat MEISINGER die Produktlinie Bone Management® entwickelt. Perfekt aufeinander abgestimmte Systemlösungen bieten einer deutlich größeren Anwendergruppe als bisher die Möglichkeit zu einer sicheren Implantatversorgung. Detaillierte Informationen zu unserem umfassenden Chirurgie Portfolio finden Sie in der separat erhältlichen MEISINGER Bone Management® Broschüre.

In cooperation with leading scientists and practitioners, MEISINGER has developed the Bone Management® product line. Perfectly coordinated system solutions offer a significantly larger user group than before the possibility of a secure implant treatment. Detailed information on our comprehensive surgery portfolio can be found in the separately available MEISINGER Bone Management® brochure.

MEISINGER ha desarrollado la línea de productos Bone Management® en colaboración con destacados científicos y profesionales. Las soluciones de sistema están perfectamente coordinadas y ofrecen la posibilidad de una restauración implantológica segura a un grupo de usuarios mucho más amplio que antes. En el folleto MEISINGER Bone Management®, disponible por separado, encontrará información detallada sobre nuestra amplia gama de productos quirúrgicos.



CHIRURGIEFRÄSER AUS HARTMETALL
TUNGSTEN CARBIDE SURGICAL CUTTERS
FRESAS QUIRÚRGICAS DE
CARBURO TUNGSTENO 150-152

CHIRURGIE-KUGELFRÄSER AUS HARTMETALL
TUNGSTEN CARBIDE SURGICAL ROUND DRILLS
FRESA QUIRÚRGICASFÉRICA, CARBURO TUNGSTENO 153

CHIRURGIEFRÄSER AUS STAHL
STEEL SURGICAL CUTTERS
FRESAS QUIRÚRGICAS DE ACERO 154

CHIRURGIE-KUGELFRÄSER AUS ROSTFREIEM STAHL
STAINLESS STEEL SURGICAL ROUND DRILL
FRESA QUIRÚRGICASFÉRICA, ACERO INOXIDABLE 155

KIEFERKAMMKONTURIERER AUS ROSTFREIEM STAHL
RIDGE CONTOURING BUR OF STAINLESS STEEL
FORMADOR DE CRESTA 155

HARTMETALLFINIERER
TUNGSTEN CARBIDE FINISHING BURS
FRESA DE ACABADO DE CARBURO DE TUNGSTENO 155

DIAMANTIERTE CHIRURGIEINSTRUMENTE
DIAMOND COATED SURGICAL INSTRUMENTS
INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DIAMANTADO 156-157

ROSTFREIE STAHLBOHRER
STAINLESS STEEL BURS
FRESAS DE ACERO INOXIDABLE 158-159

Vorkörner
Initial burs
Fresas iniciales 158

Spiralbohrer, rostfrei
Stainless Steel Twist Drills
Taladros espirales, inoxidable 158

Pilotbohrer
Pilot Burs
Fresas piloto 159

TREPANE
TREPHINES
TRÉPANOS 159-161

SCHLEIMHAUTSTANZEN
TISSUE PUNCHES
PUNZONES DE MUCOSA 161

BENEX®-CONTROL
BENEX®-CONTROL
BENEX®-CONTROL 162

SAMARANI KIT
SAMARANI KIT
SAMARANI KIT 163

HALS-, NASEN-, OHREN-CHIRURGIE
EAR, NOSE, THROAT SURGERY
OTORRINOLARINGOLOGÍA 164

Diamantinstrumente
Diamond Instruments
Instrumentos de diamante 164

Stahlinstrumente, rostfrei
Stainless Steel Instruments
Instrumentos de acero inox. RF 164

Hartmetallinstrumente
Tungsten Carbide Instruments
Instrumentos de carburo tungsteno 164

INNENGEKÜHLTES INSTRUMENT
INTERNALLY COOLED INSTRUMENT
INSTRUMENTOS DE IRRIGACIÓN INTERNA 165

SONSTIGES
MISCELLANEOUS
OTROS 165

CHIRURGIEFRÄSER AUS HARTMETALL | SURGICAL CUTTERS OF TUNGSTEN CARBIDE

FRESAS QUIRÚRGICAS DE CARBURO TUNGSTENO

Die besonders schnittfreundige und effiziente Verzahnung dieser Instrumente sowie die gezielt ausgerichteten Drallwinkel ermöglichen ein breites Einsatzgebiet der Instrumente im Rahmen der oralen Kieferchirurgie.

The special easy-cutting and efficient toothing of these instruments, as well as the particular twist angles, allows for a wide range of application of the instruments within the field of oral surgery.

El dentado de este instrumento, que facilita un corte eficiente, así como la orientación del ángulo de torsión, permiten una amplia variedad de uso de los instrumentos en el marco de la cirugía de mandíbula oral.

- Schonende chirurgische Knochenbearbeitung (z.B. Wurzelspitzenresektionen, Freilegen und Zertrennen retinierter Zähne, Präparieren eines Knochendeckels sowie zur generellen Osteotomie in Knochensubstanz)
- Zertrennung von Zahnhartsubstanz, insbesondere Zahnwurzeln
- Axiales Eindringen in den Knochen möglich (z.B. bei Wurzelspitzenresektion)
- Schnittfreudige Verzahnungen
- Bessere Sicht auf das Arbeitsfeld durch schlanken Hals
- Arbeitsteile mit reduziertem Durchmesser für schmale Osteotomien
- Sehr vibrationsarm aufgrund optimierter Rundlaufeigenschaften

- Conservative surgical bone treatment (i.e. apicoectomies, exposure and cutting of impacted teeth, preparation of a bone flap as well as general osteotomy in bone substance)
- Cutting of hard tooth substance, in particular tooth roots
- Axial penetration of bone is possible (z.B. in apicoectomies)
- Easy-cutting toothing
- Narrow neck offers better view of the field of work
- Working parts with reduced diameter for narrow osteotomies
- Extremely low vibration due to optimized smooth running properties

- Cuidadoso tratamiento quirúrgico del hueso (p. ej. apicectomías, exposición y separación de dientes impactados, preparación de un colgajo óseo y osteotomía general en el hueso)
- Seccionamiento de la sustancia dura del diente, especialmente las raíces
- Posibilidad de penetración axial en el hueso (p. ej. en la apicectomía)
- Dentado tipo sierra con alta eficacia de corte
- Mejor visibilidad del campo de trabajo gracias a su cuello estrecho
- Partes activas con diámetro reducido para osteotomías finas
- Nivel muy bajo de vibración gracias a una concentricidad optimizada

HM 33IL



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
	L mm			5,5
		US-No.		700XXL
HM 33IL	RA L	500 205 415 007		010
	FG XL	500 316 415 007		010



Implantationsbohrer | Implant bur | Fresa para implante

HM 33T



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
	L mm			5,2
HM 33T	HP	500 104 415 296		016
	RA L	500 205 415 296		016



HM 34IL

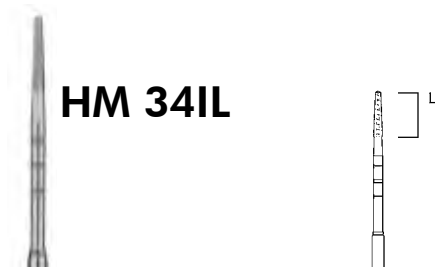


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
	L mm			6,0
HM 34IL	FG XXL	500 317 415 007		012



Implantationsbohrer | Implant bur | Fresa para implante

HM 151



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
	L mm			10,8
HM 151	FG XL	500 316 199 295		016
	FG XXL	500 317 199 295		016



HM 152

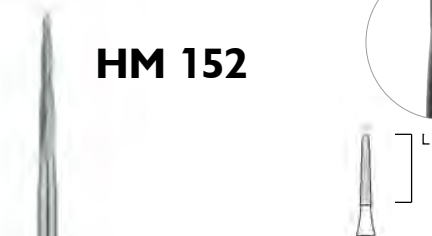


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
	L mm			9,0
HM 152	FG L	500 315 210 295		014



HM G152



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
	L mm			9,1
HM G152	FG L	504 315 210 295		016



HM 161



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
	L mm			11,0
HM 161	HP	500 104 408 295		018
	RA L	500 205 408 295		018
	FG XL	500 316 408 295		018



HM 161RX



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
	L mm			11,0
HM 161RX	HP	500 104 408 296		018
	RA L	500 205 408 296		018
	RA XL	500 206 408 296		018
	FG XL	500 316 408 296		018





Chirurgische Fräser, kreuzverzahnt | Surgical cutters, x-cut | Fresas quirúrgicas, dentado cruzado

HM 162



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
	L mm			11,0
HM 162	HP	500 104 408 297		016
	RA L	500 205 408 297		016
	RA XL	500 206 408 297		016
	FG XL	500 316 408 297		016

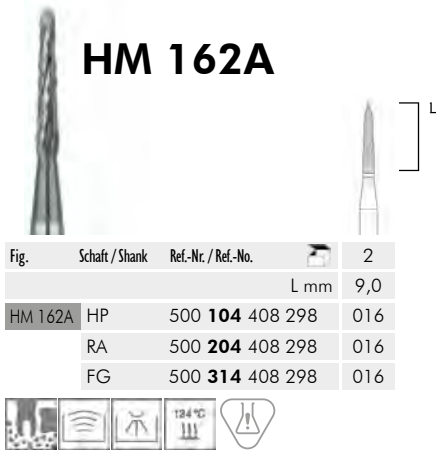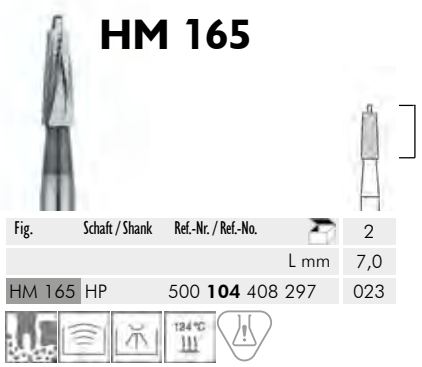

HM 162A**HM 162SL****HM 162ST****HM 162SX****HM 163****HM 163A****HM 164****HM 165****HM 166****HM 166A****HM 166ST****HM 166RX**

Chirurgische Fräser, kreuzverzahnt | Surgical cutters, x-cut
Fresas quirúrgicas, dentado cruzado

HM 167



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	2
		L mm	11,0
HM 167	HP	500 104 410 297	023
	RA L	500 205 410 297	023



HM 254

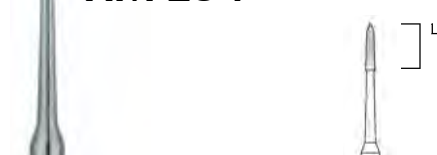


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	2
		L mm	6,0
HM 254	HP	500 104 415 296	012
	FG XXL	500 317 415 296	012



HM 254E

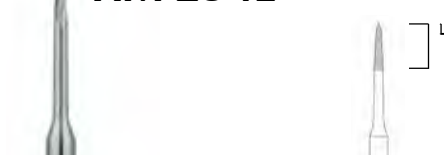


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	2
		L mm	6,0
HM 254E	RA L	500 205 415 298	012



HM 254LE



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	2
		L mm	6,0
HM 254LE	FG	500 314 415 299	012



HM 408M



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	2
		L mm	10,0
HM 408M	HP	500 104 409 338	016
	FG XL	500 316 409 338	016



HM 73B

New



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	2
HM 73B	HP	500 104 277 196	055



HM 73GQ


New



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	2
HM 73GQ	HP	500 104 277 195	048



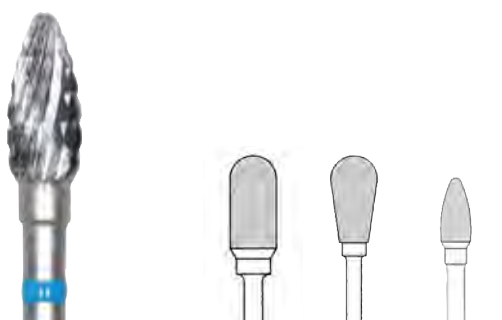GX



Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	HM 72GX	HM 77GX	HM 251GX
		060	060	040
	L mm	13,7	11,5	9,3
HP	500 104 ...	... 137 190	... 237 190	... 274 190
		2	2	2



HM 71



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	2	2
HM 71	HP	500 104 001 175	040	050



CHIRURGIE-KUGELFRÄSER AUS HARTMETALL | SURGICAL ROUND DRILL OF TUNGSTEN CARBIDE |

FRESA QUIRÚRGICASESFÉRICA, CARBURO TUNGSTENO

HM 1S

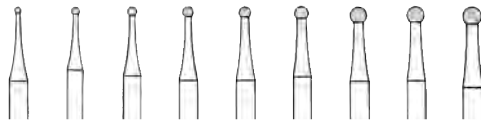


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
US-No.				1S	2S	3S	4S	5S	6S	7S	8S	10S	
HM 1S	RA	500 204 001 003		008	010	012	014	016	018	021	023	027	
	RA L	500 205 001 003			010	012	014	016	018	021	023		
	FG	500 314 001 003		008	010	012	014	016	018	021	023		



HM 1T



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
HM 1T	HP	500 104 697 291		023
	RA L	500 205 697 291		023



HM 141

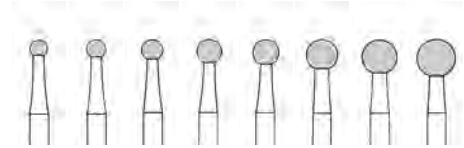


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2	2	2	2	2	2	2	2
HM 141	HP	500 104 001 291		023	025	027	031	035	040	045	050	
	RA L	500 205 001 291		023								



Hartmetall, 6 Schneiden | Tungsten carbide, 6 blades | Carburo, 6 laminas

HM 141A

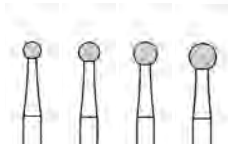


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2	2	2
HM 141A	HP	500 104 001 298		023	027	031	035
	RA L	500 205 001 298					035
	RA XL	500 206 001 298		023	027	031	035



Hartmetall, querhiebverzahnt, 8-10 Schneiden | Tungsten carbide, cross cut, 8-10 blades | Carburo, dentado transversal, 8-10 laminas

HM 141F

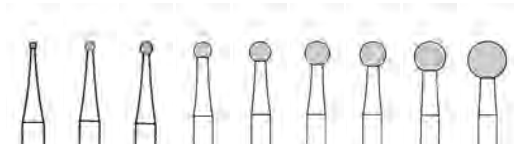


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2	2	2	2	2	2	2	2
HM 141F	HP	500 104 001 251		010	014	018	023	027	031	035	040	050
	RA L	500 205 001 251		010	014	018	023	027	031	035	040	050
	RA XL	500 206 001 251		010	014	018	023	027	031	035	040	050



Hartmetall fein, 8-10 Schneiden | Tungsten carbide fine, 8-10 blades | Carburo fino, 8-10 laminas

HM 141AS

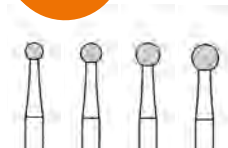


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2	2	2
HM 141AS	HP	500 104 001 300		023	027	031	035



New

Kugelförmiger Hartmetallfräser mit Querhiebverzahnung. Optimierte Verzahnung für besondere Schnittfreudigkeit.
 Round tungsten carbide cutter with cross cut. Optimized toothing for great cutting performance.
 Fresa esférica de carburo de tungsteno con dentado de corte transversal. Dentado optimizado para cortes especialmente afilados.

CHIRURGIEFRÄSER AUS STAHL | STEEL SURGICAL CUTTERS | FRESAS QUIRÚRGICAS DE ACERO

161

Stahl / steel



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	9,0
161	FG XL	310 316 408 295		016



162
162RF

Stahl / steel

Edelstahl / stainless steel



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	9,0
162	RA L	310 205 408 297		016
	FG XL	310 316 408 297		016
162RF	HP	330 104 408 297		016
	RA L	330 205 408 297		016
	FG XL	330 316 408 297		016



163RF

Edelstahl / stainless steel



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	5,0
163RF	HP	330 104 406 297		014



164RF

Edelstahl / stainless steel



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	6,0
164RF	HP	330 104 407 297		018



165RF

Edelstahl / stainless steel



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	7,0
165RF	HP	330 104 408 297		023
	RA L	330 205 408 297		023



166

Stahl / steel

166RF

Edelstahl / stainless steel



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	10,0
166	RA L	310 205 409 297		021
166RF	HP	330 104 409 297		021



167RF

Edelstahl / stainless steel



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	10,0
167RF	HP	330 104 410 297		023



168
168RF

Stahl / steel

Edelstahl / stainless steel



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1
			L mm	22,0
168	HP L	310 105 411 297		023
168RF	HP L	330 105 411 297		023



169RF

Edelstahl / stainless steel



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1
			L mm	35,0
169RF	HP XL	330 106 412 297		023



¹ Nur für RF. Für Instrumente aus Werkzeugstahl ist Vorbehandlung notwendig. Siehe hierzu Hinweise zur Aufbereitung.

¹ Only for RF. Pre-treatment is necessary for instruments made of tool steel. See the notes on preparation.

¹ Solo para RF. Para los instrumentos de acero para herramientas, se precisa un tratamiento previo. Véanse las instrucciones de preparación.

CHIRURGIE-KUGELFRÄSER AUS ROSTFREIEM STAHL | SURGICAL ROUND DRILL OF STAINLESS STEEL | FRESA QUIRÚRGICASFÉRICA, ACERO INOXIDABLE

Grober Allport Fräser für weiche Strukturen | Coarse Allport bur for soft structures | Fresas Allport gruesas para estructuras blandas

141RF Edelstahl / stainless steel

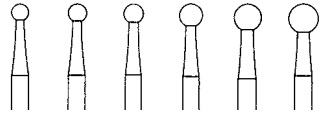



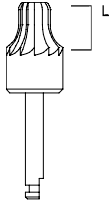
Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2	2	2	2	2
141RF	HP	330 104 001 291		023	025	027	031	035	040
	RA XL	330 206 001 291		023					

6 Schneiden | 6 cutting edges | 6 filos



KIEFERKAMMKONTURIERER AUS ROSTFREIEM STAHL | RIDGE CONTOURING BUR OF STAINLESS STEEL | FORMADOR DE CRESTA

RCB00

Schaft / Shank	Fig.	RCB00	
RA L		075	Minimaldurchmesser Minimal diameter Diámetro mínimo
	L mm	6.0	Außendurchmesser External diameter Diámetro externo
		4.2	
		7.5	
		2	



HARTMETALLFINIERER | TUNGSTEN CARBIDE FINISHING BURS | FRESA DE ACABADO DE CARBURO DE TUNGSTENO

HM 379
HM 379U

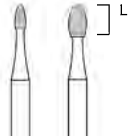



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	3,1	4,2
			US-No.	7404	7408
HM 379	FGXXL	500 317 277 072		014	023
HM 379U	FGXXL	500 317 277 032		014	023



HM 48L
HM 48LU

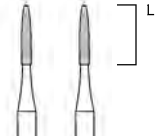



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	8,0	8,0
HM 48L	FGXXL	500 317 249 072		014	023
HM 48LU	FGXXL	500 317 249 032		014	023




2575 - Periimplantitis Kit
auf Seite | on page | en la página 235

DIAMANTIERTA CHIRURGIEINSTRUMENTE | SURGICAL DIAMOND INSTRUMENTS |
INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO DIAMANTADO

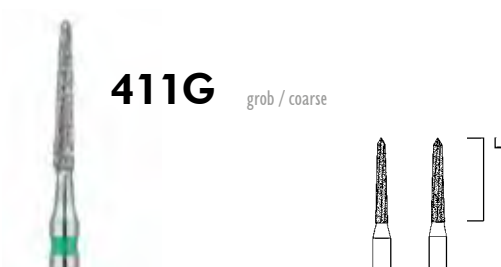


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
		L mm		11,0	11,0
411 G	FG L	806 315 411 534		016	018



Chirurgische Fräser, diamantiert | Diamond surgical cutters |
Fresas quirúrgicas de diamante

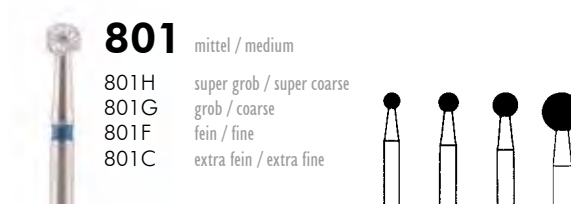


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	2
801	HP	806 104 001 524		023	027	033	050
	RA	806 204 001 524		023	027	033	050
801H	HP	806 104 001 544					050
	RA	806 204 001 544					050
801G	HP	806 104 001 534		023		033	050
	RA	806 204 001 534					050
801F	RA	806 204 001 514		023		033	
801C	HP	806 104 001 504		023			
	RA	806 204 001 504		023			



Sinus Präparation | Sinus preparation | Preparacion del seno



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2	2	2
801LD	RAXL	806 206 697 534		010			
801LD	RAXL	806 206 697 594			025	030	035



Für die schnelle und einfache Entfernung von Degranulationsgewebe | For the quick and easy removal of degranulation tissue | Para eliminar fácil y rápidamente el tejido de degranulación



DEG00 - Degranulation Kit

auf Seite | on page | en la página 235



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		
			L mm	10,0
859	RA	806 204 166 524		018



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	12,0
859L	RA	806 204 167 524		010



231DC extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	1	1	1
			L mm	0,3	0,3
231DC	HP	806 104 064 504	070	100	
	RA	806 204 064 504	070*	100*	130*



Osteotomie-Säge für Chirurgie | Osteotomy saw for surgery | Sierra de osteotomía para cirugía

* im Saw Basic Kit 7150 enthalten * contained in the Saw Basic Kit 7150 * figuran en el Saw Basic Kit 7150

New

915DM mittel / medium

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	1
			L mm
915DM	HP	806 104 35M 524	220
	unmounted	806 900 35M 524	220



Super flexibel | Super flexible | Super flexible

New

KD01G grob / coarse
KD02G

Fig.	Schaft / Shank	1	1
		L mm	18,83
KD01G	HP	050	
KD02G	HP		080



Diamantinstrumente zur Modifizierung des Kieferkammes | Diamond Instruments for modification of the alveolar ridge | Instrumentos de diamante para la modificación de la cresta alveolar

943DC extra fein / extra fine

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	1	1
			L mm	0,15
943DC	HP	806 104 361 504	080	100
	RA	806 206 361 504	080	100



ROSTFREIE STAHLBOHRER | STAINLESS STEEL BURS | FRESAS DE ACERO INOXIDABLE

Vorkörner | Initial Burs | Fresas iniciales



186RF Edelstahl / stainless steel

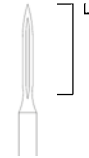


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	12,0
186RF	HP	330 104 684 377		018
	RA	330 204 684 377		018



Vorkörner, Stahl rostfrei | Initial bur, stainless steel | Fresa inicial, acero inoxidable



187RF Edelstahl / stainless steel

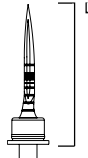


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	19,0
187RF	RA	330 204 685 377		018



Vorkörner mit Stop, Stahl rostfrei | Initial bur with Stop, stainless steel | fresa inicial con tope, acero inoxidable



188RF Edelstahl / stainless steel

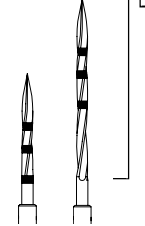


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
			L mm	17,3	27,3
188RF	RAXL	330 206 686 378		014	
	RAXXL	330 207 686 378			014



Vorkörner, Stahl rostfrei | Initial bur, stainless steel | Fresa inicial, acero inoxidable

! According to Prof. Dr. Fouad Khoury




202RF Edelstahl / stainless steel

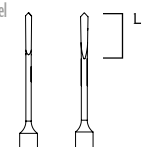


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5
			L mm	5,6	6,2
202RF	RA XL	330 206 455 361		008	010



Vorkörner und Pilotbohrer, Stahl rostfrei, aus der MEISINGER Khoury-Line | Initial bur and Pilot bur, stainless steel, the MEISINGER Khoury-Line | Fresas iniciales y fresas piloto, de acero inoxidable, de la línea Meisinger Khoury

Spiralbohrer, rostfrei | Stainless Steel Twist Drills | Taladros espirales, inoxidables



203RF Edelstahl / stainless steel

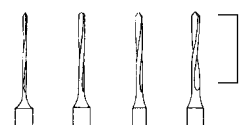


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2	2	2
			L mm	7,0	7,0	9,0	9,0
203RF	RA L	330 205 417 364		006	008	009	011



Spiralbohrer zur Pilotbohrung oder Dekortikalisierung | Twist drill for pilot bore or decortication | Fresa espiral para fresado piloto o decorticación

! According to Dr. Istvan Urban



203S Edelstahl / stainless steel

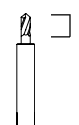


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	3,0
203S	RA	330 204 449 336		012




Spiralbohrer mit Stop zum Dekortikalisieren aus der MEISINGER Master-Line | Twist Drill with Stop for decorticating, the MEISINGER Master-Line | Taladros espirales con tope para corticotomía, de la línea Master MEISINGER




Included in the Master-Pin-Control Plus Kit BMPPL


Pilotbohrer | Pilot Burs | Fresas piloto

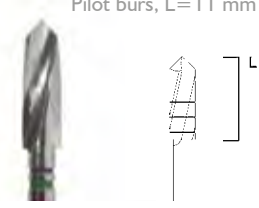Pilotbohrer, L= 11 mm
Pilot burs, L= 11 mm

Schaft / Shank	Fig.	G2001
RA L		3,40
		1

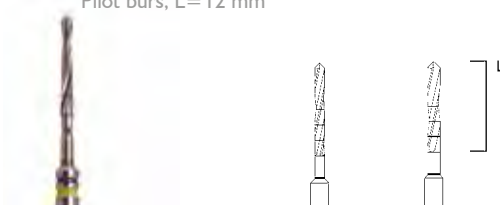Pilotbohrer, L= 12 mm
Pilot burs, L= 12 mm

Schaft / Shank	Fig.	A2001	B2001
RA L		1,30	1,60
		1	1

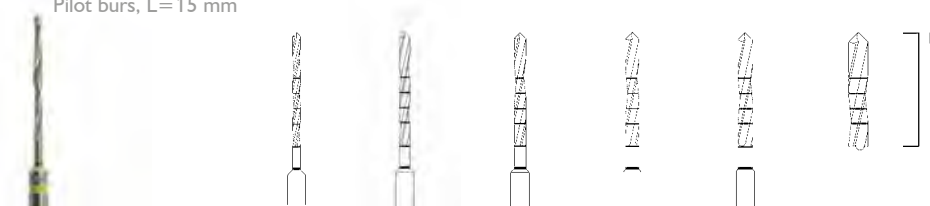Pilotbohrer, L= 15 mm
Pilot burs, L= 15 mm

Schaft / Shank	Fig.	A1001	B1001	C1001	D1001	E1001	F1001
RA XL		1,00	1,30	1,50	1,80	2,00	2,50
		1	1	1	1	1	1



TREPANE | TREPHINES | TREPANOS

Beim Einsatz von Trepanen ist mit besonderer Sorgfalt vorzugehen. Insbesondere sollten die empfohlenen Drehzahlen nicht überschritten werden.
Empfohlene Drehzahlen: 300 - 500 min⁻¹

Special care should be exercised when using trephines. Specifically, the recommended speeds are not to be exceeded.
Recommended speeds: 300 - 500 rpm

Si se usan trépanos es preciso tener especial cuidado. En ningún caso deberán superarse las velocidades de giro recomendadas.
Velocidades de giro recomendadas: 300 - 500 min⁻¹

! According to Prof. Dr. Fouad Khoury



230KH

Schaft / Shank	Fig.	230KH	230KH	230KH	230KH
RA		021	025	029	033
L mm		2,0	2,0	2,0	2,0
		3,1	3,5	3,9	4,3
		2,1	2,5	2,9	3,3
		1	1	1	1



Vorkörner Trepane | Initial bur trephines | Initial bur trephines

Included in the
Trephine Ejection Kit BTE00

229KH*




Schaft / Shank	Fig.	229KH
RA		000
L mm		20.5
		-
		-
		1



Innengekühlter Trepan-Schaft | Internally cooled trepan shank
Mango de trépano con refrigeración interna



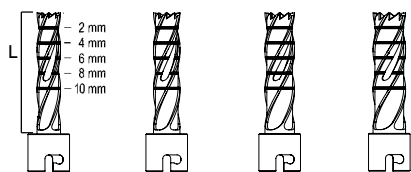229KH



Schaft / Shank	Fig.	229KH	229KH	229KH	229KH
unmontiert / unmounted		021	025	029	033
L mm		15,5	15,5	15,5	15,5
- -		3,1	3,5	3,9	4,3
		2,1	2,5	2,9	3,3
		1	1	1	1




Innengekühlte Trepan-Arbeitssteile | Internally cooled trepan work parts | Piezas de trabajo de trépano con refrigeración interna

! Technology by Dr. Bernd Giesenhagen



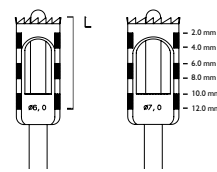229FS



Schaft / Shank	Fig.	229FS	229FS
RA L		060	070
L mm		12,0	12,0
- -		6,0	7,0
		5,0	6,0
		1	1



Trepane mit Führungsstift | Trephine with guiding pin | Trépano con espiga-guía



229 Edelstahl / stainless steel

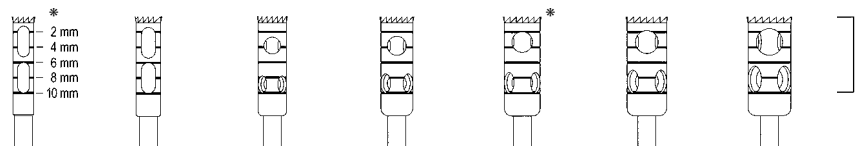


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1	1	1	1	1	1
	L mm			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	- -			3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00
				2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
229	RA L	330 205 486 001		020	025	030	035	040	045	050

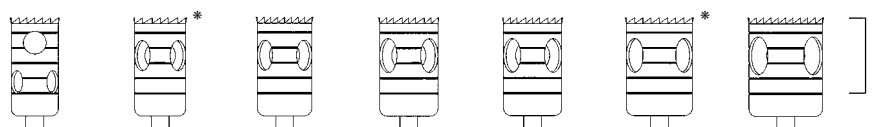


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1	1	1	1	1	1
	L mm			10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
	- -			6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	10,00
				5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	9,00
229	RA L	330 205 486 001		055	060	065	070	075	080	090

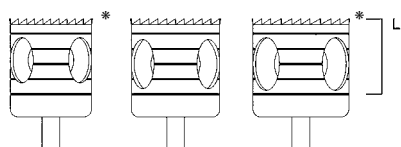


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1	1
	L mm			10,0	10,0	10,0
	- -			11,00	12,00	13,00
				10,00	11,00	12,00
229	RA L	330 205 486 001		100	110	120



* im Trephine Basic Kit 7120 enthalten
* contained in the Trephine Basic Kit 7120
* figuran en el Trephine Basic Kit 7120

Nenngröße = Innendurchmesser | nominal size = internal diameter | tamaño nominal = diámetro interno



224RF Edelstahl / stainless steel

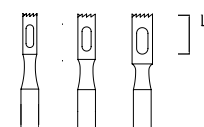


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2	2
	L mm			4,5	4,9	5,3
	- -			1,85	2,3	2,7
				1,4	1,8	2,1
224RF	HP	330 104 485 001		018	023	027





229L

Edelstahl / stainless steel

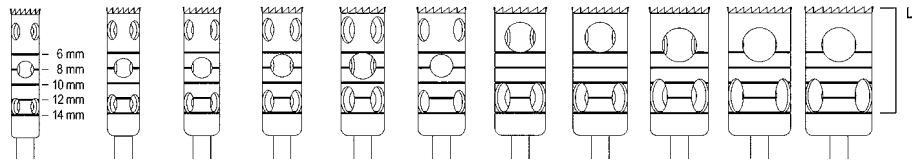


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	L mm			14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0	14,0
	-			4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	8,50	9,00	
				3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50	8,00	
229L	RA L	330 205 555 001		030	035	040	045	050	055	060	065	070	075	080	



229XL

Edelstahl / stainless steel

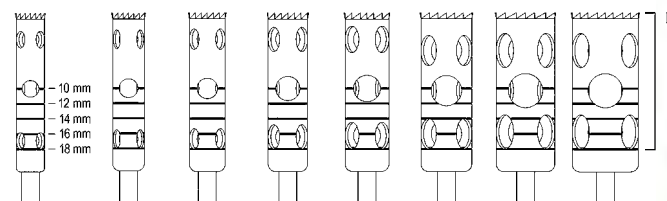


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	L mm			18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
	-			4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	7,00	8,00	9,00				
				3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	6,00	7,00	8,00				
229XL	RA L	330 205 556 001		030	035	040	045	050	060	070	080				



227RF

Edelstahl / stainless steel

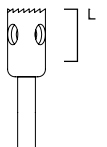


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
	L mm			6,9
	-			5,0
				4,0
227RF	HP	330 104 485 001		050



SCHLEIMHAUTSTANZEN | TISSUE PUNCHES | PUNZONES DE MUCOSA



225

Edelstahl / stainless steel

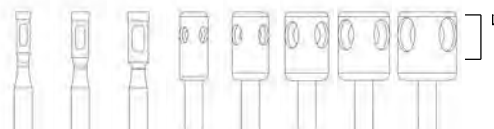


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	L mm			5,3	4,5	4,9	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
	-			1,85	2,3	2,7	3,7	4,7	5,7	6,7	7,7				
				1,4	1,8	2,1	3,0	4,0	5,0	6,0	7,0				
225	HP	330 104 485 373		014	018	021									
	RA	330 204 485 373					030*	040*	050*	060*	070*				



* im Punch Basic Kit 7140 enthalten
 * contained in the Punch Basic Kit 7140
 * figuran en el Punch Basic Kit 7140

BENEX®-CONTROL | BENEX®-CONTROL | BENEX®-CONTROL

Benex®-Control eignet sich hervorragend zum kontrollierten und sicheren Extrahieren von Zahnwurzeln und Zahnwurzelfragmenten, sodass die herkömmliche Methode der Extraktion mit Zange und Hebel vermieden werden kann. Dank der innovativen Konstruktion des Extraktors lässt sich die Wurzel ohne Verletzung von Knochen und Weichgewebe sehr leicht und besonders kontrolliert entfernen. Um eine optimale, vertikale Kraftübertragung zu garantieren, muss eine plane Ebene zur Auflage des Extraktors vorliegen. Die speziell für diesen Zweck entwickelte Quadrantenstütze bietet eben diese optimale Auflagefläche. Dabei schützt sie vorhandene Restbezaahnung und bietet insbesondere bei zahnlosen Verhältnissen eine stabile Auflage für den Extraktor.

Benex®-Control is outstandingly suitable for the controlled and safe extraction of dental roots and dental root fragments, so the conventional extraction method using forceps and leverage can be avoided. Thanks to the innovative construction of the extractor, the root can be easily removed in a particularly controlled manner without damaging bone or soft tissue. To guarantee an optimal vertical transmission of force, there must be a flat area providing a supporting surface to the extractor. The quadrant support was developed specifically to provide this optimal support while also protecting existing dentition and providing support for the extractor in case of edentulous circumstances.

Benex®-Control es extraordinariamente adecuado para la extracción controlada y segura de raíces dentales y fragmentos de raíces dentales, por lo que puede evitarse el método de extracción convencional con fórceps y palanca. Gracias a la innovadora construcción del extractor, es fácil extraer la raíz forma muy controlada sin dañar el hueso ni los tejidos blandos. Para garantizar una transmisión vertical óptima de la fuerza, debe existir una zona plana que proporcione una superficie de apoyo al extractor. El soporte de cuadrante se desarrolló específicamente para proporcionar este soporte óptimo y, al mismo tiempo, proteger la dentición existente y proporcionar soporte para el extractor en caso de circunstancias edéntulas.



Art.-No. CBE00




Anwendungsvideo
Application Video

	Diamantinstrument Diamond instrument	Pilotbohrer Pilot burs		Extraktionsschrauben Extraction screws			
Fig.	859L ¹	A2001	B2001	BE001 060	BE001 070	BE001 080	BE001 085
Shank ¹	204	205	205	-	-	-	-
Size ²	010	013	016	-	-	-	-
Length mm	12.0	15.0	15.0	10.0	16.0	10.0	16.0
	-	-	-	1.3	1.3	1.8	1.8
	1.0	1.3	1.6	1.6	1.6	2.1	2.1

¹ 204=RA, 205=RA L ² Größter Arbeitsteildurchmesser in 1/10 mm ³ Largest working part diameter in 1/10 mm

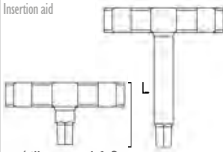Minimaldurchmesser Minimal diameter Außendurchmesser External diameter



	Eindrehhilfe Insertion aid  ³ illustrated 1:2	Zugseile³ Traction strings³  ⁴ illustrated 1:3	Schutzkappe Protecting cap 	Extraktor⁴ Extractor⁴  L	Quadrantenstütze³ Quadrant support³ 		
Fig.	BE001 045	BE001 055	BE001 020	BE001 021	BE001 SK60	BE001 010*	BE001 090
Length mm	8.2	18.2	48.0	39.0	8.0	129.0	-

³ illustrated 1:2

⁴ illustrated 1:3

Minimaldurchmesser Minimal diameter Außendurchmesser External diameter

* inkl. gerade Teflon® Auflagerungsplatte incl. straight Teflon® bite plate

SAMARANI KIT | SAMARANI KIT | SAMARANI KIT

Das Root Sectioning Kit Samarani 1 (BRSS1) besteht aus 6 Elevatoren und einem kleinen Hammer. Es wurde von Dr. Rawad Samarani speziell für die gewebeschonende Wurzelextraktion entwickelt und ist in Kombination mit dem BRSS2-Kit, welches aus 6 Hartmetallinstrumenten für die Wurzeltrennung besteht, zu verwenden. Mittels der neuartig gestalteten Elevatoren werden die Wurzelfragmente durch leichtes, horizontales Hämmern gewebeschonend aus der Alveole befördert.

The Root Sectioning Kit Samarani 1 (BRSS1) consists of 6 elevators and a small hammer. It was specially developed by Dr. Rawad Samarani for safe root extraction and is used in combination with the kit BRSS2 which consists of 6 tungsten carbide instruments for root sectioning. The root fragments are removed from the socket in a tissue-protective manner by means of light, horizontal hammering on the newly designed elevators.

El Root Sectioning Kit Samarani 1 (BRSS1) consta de 6 elevadores y un pequeño martillo. Fue desarrollado especialmente por el Dr. Rawad Samarani para la extracción segura de raíces y se utiliza en combinación con el kit BRSS2, que consta de 6 instrumentos de carburo de tungsteno para el seccionamiento radicular. Los fragmentos radiculares se extraen del alveolo sin dañar los tejidos mediante un ligero martilleo horizontal en los elevadores de nuevo diseño.



Art.-No. BRSS1

Siehe auch weitere Infos in unserem aktuellen Bone Management Katalog.
See also further information in our current Bone Management catalogue.
Consulte también más información en nuestro último catálogo de gestión ósea.

Anwendungsvideo
Application Video

Art.-No. BRSS2

Hartmetallinstrumente
Tungsten carbide burs

Fig.	HM166RX*	HM166RX*	HM141F*	HM151*	HM151*	HM1*
Shank ¹	205	206	206	316	317	316
Size ²	021	021	010	016	016	008
Length mm	11.0	11.0	0.88	10.8	10.8	0.71
mm	-	-	-	-	-	-
mm	2.1	2.1	1.0	1.6	1.6	0.8

¹ 205=RA L, 206=RA XL, 316=FG XL, 317=FG XXL

² Größter Arbeitsteildurchmesser in 1/10 mm ³ Largest working part diameter in 1/10 mm

mm Innendurchmesser Internal diameter mm Außendurchmesser External diameter

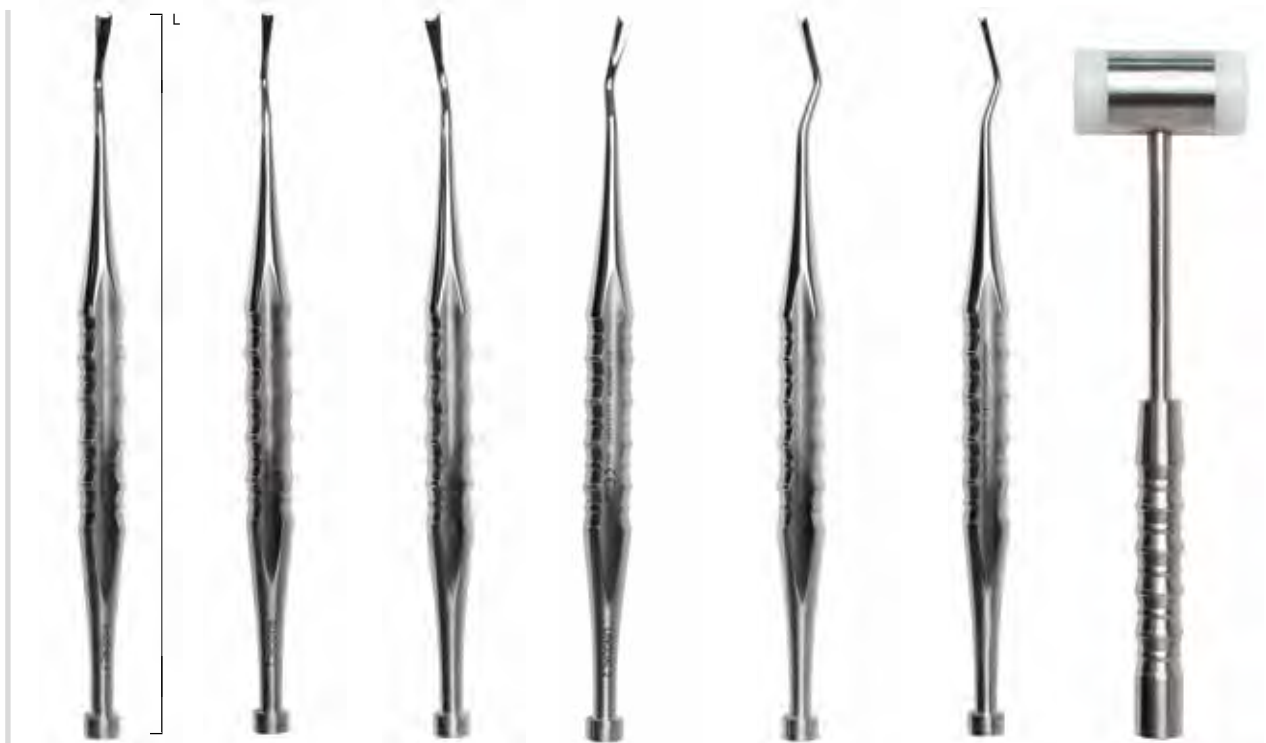


Fig.	MI201	MI202	MI203	MI204	MI205	MI206	MI155
Name	Luxationsinstrument Buccal 4,0 Luxation instrument Buccal 4.0	Luxationsinstrument Buccal 2,8 Luxation instrument Buccal 2.8	Luxationsinstrument Lingual, links gewinkelt Luxation instrument lingual, left angled	Luxationsinstrument Lingual, rechts gewinkelt Luxation instrument lingual, right angled	Luxationsinstrument 4,0 Luxation instrument 4.0	Luxationsinstrument 2,8 Luxation instrument 2.8	Hammer S Hammer S
Length mm	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	170.0	160.0

HALS-, NASEN-, OHREN-CHIRURGIE | EAR, NOSE, THROAT SURGERY | OTORRINOLARINGOLOGÍA

MEISINGER bietet für die Hals-, Nasen- und Ohrenchirurgie eine Vielzahl unterschiedlicher Spezialinstrumente aus verschiedenen Materialien (Stahl, Hartmetall, Diamant) an. Um den gezielten Einsatz in der Chirurgie sicherzustellen, stehen die Instrumente in der Schaftlänge von 70 mm bis 125 mm zur Verfügung.

For Ear, Nose, and Throat Surgery, MEISINGER offers a multitude of different special instruments made of various materials (steel, tungsten carbide, diamond). To guarantee the specific application in surgery, the instruments are available in a shank length from 70 mm to 125 mm.

MEISINGER ofrece una gran variedad de instrumentos especiales de diferentes materiales (acero, carburo, diamante) para la cirugía O.R.L.. Para garantizar un uso específico en la cirugía, los instrumentos están disponibles en longitudes de 70 mm a 125 mm.

Diamantinstrumente | Diamond Instruments | Instrumentos de diamante

242 mittel / medium

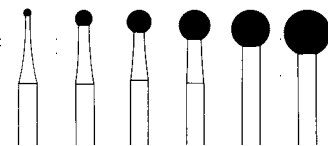



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1	1	1	1	1
242	HP XL	806 106 001 524		010	023	030	040	050	060



Kurzer Hals | Short neck | Cuello corto

LH242 mittel / medium

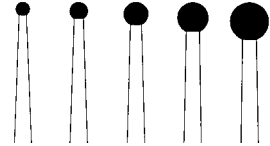



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1	1	1	1
LH242	HP XL	806 106 698 524		018	023	031	040	050



Langer Hals | Long neck | Cuello largo

Stahlinstrumente, rostfrei | Stainless Steel Instruments | Instrumentos de acero inoxidable

236RF Edelstahl / stainless steel

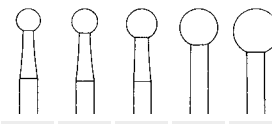



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1	1	1	1
236RF	HP XL	330 106 001 291		031	035	040	050	060



HNO-Bohrer | E.N.T. burs | Fresas O.R.L.

Hartmetallinstrumente | Tungsten Carbide Instruments | Instrumentos de carburo tungsteno

HM 236




Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1
HM 236	HP XL	500 106 001 291		050



HNO-Bohrer | E.N.T. burs | Fresas O.R.L.

INNENGEKÜHLTES INSTRUMENT | INTERNALLY COOLED INSTRUMENT |

INSTRUMENTOS DE IRRIGACIÓN INTERNA

Chirurgischer Fräser mit Innenkühlung, rostfrei, nach Kirschner. Spezialantrieb erforderlich (z.B. NSK, KaVo, W&H, Micro-Mega).

Hinweis: Innengekühlte Produkte und andere Produkte mit Lumen (Kanäle, Bohrungen, etc.):

- aktives Durchspülen der Lumen während der Vorreinigung und der manuellen Reinigung und Desinfektion
- Produkte mit nicht durchgängigen Lumen dürfen nicht weiter verwendet werden

Stainless steel surgical cutters with internal cooling system according to Kirschner. Special handpieces necessary (e.g. NSK, KaVo, W&H, Micro-Mega).

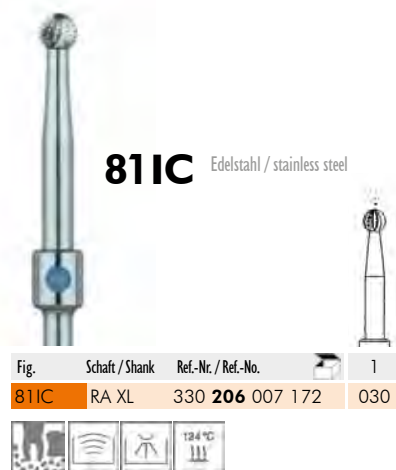
Note: Products equipped with a conduit to supply a cooling medium and other products with lumens (canals, drillings etc.):

- Actively rinse the lumen during pre-cleaning, manual cleaning and the disinfection process
- Products containing lumens without feed-through channels must not be re-used

Fresas quirúrgicas con refrigeración interna, de inoxidable, según Kirschner. Se requiere una pieza de mano especial (por ejemplo: NSK, KaVo, W&H, Micro-Mega).


Nota: Productos refrigerados internamente y otros productos con cavidades (canales, orificios, etc.):

- Enjuagar activamente las cavidades durante la limpieza previa y la limpieza manual y la desinfección.
- Está prohibido seguir utilizando los productos que tengan las cavidades obturadas.



SONSTIGES | MISCELLANEOUS | OTROS

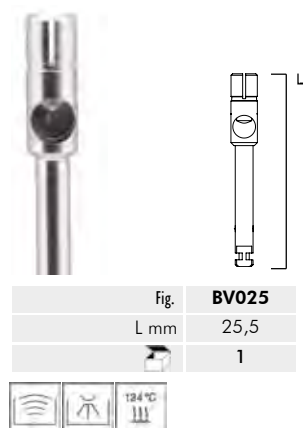BV025



RA-Bohrerverlängerung | RA-Drill extension |
RA-Extensión de fresa

BV024



RA-Bohrerverlängerung, kurz | RA-Drill extension,
short | RA-Extensión de fresa, corto

Einweginstrumente

Single Instruments | Instrumentos de un solo uso

Mit den MEISINGER SINGLE Diamonds & Carbides und den Einwegpolierern, ist eine Arbeitserleichterung deutlich spürbar, eine aufwändige Aufbereitung kann bei der Wahl dieser Instrumente eingespart werden. Die SINGLE Diamonds & Carbides sind bereits sterilisiert, einzeln verpackt und in einem praktischen Spender untergebracht und können somit direkt am Patienten angewendet werden. Die Einwegpolierer von MEISINGER lassen sich mit ihrem charakteristischen orangenen Schaft optimal von den herkömmlichen Polierern unterscheiden. Darüber hinaus leistet die Instrumentenreihe einen Beitrag zur Patientensicherheit, da das Risiko einer Kreuzkontamination deutlich gemindert wird. Mit diesem umfangreichen Programm wird ein großes Spektrum an täglichen Arbeiten in der Praxis abgedeckt; von der Präparation über die Prophylaxe bis hin zur finalen Politur von Kompositen kann der Arbeitsalltag erleichtert werden.

With the MEISINGER SINGLE Diamonds & Carbides and the disposable polishers, work is made much easier and time-consuming preparation can be saved by choosing these instruments. The SINGLE Diamonds & Carbides are already sterilised, individually packaged and housed in a practical dispenser and can therefore be used directly on the patient. The disposable polishers from MEISINGER can be optimally distinguished from conventional polishers with their characteristic orange shaft. In addition, the instrument series contributes to patient safety, as the risk of cross-contamination is significantly reduced. This comprehensive programme covers a wide range of daily tasks in the surgery; including preparation, prophylaxis and the final polishing of composites, the daily work can be made easier.

Con los diamantes y carburos MEISINGER SINGLE y los pulidores desechables, el trabajo es mucho más fácil: gracias a estos instrumentos se ahorra mucho tiempo de preparación. Los diamantes y carburos SINGLE ya están esterilizados, envasados individualmente y colocados en un práctico dispensador, por lo que pueden utilizarse directamente en el paciente. Los pulidores desechables de MEISINGER se distinguen perfectamente de los pulidores convencionales por su característico eje naranja. Además, la serie de instrumentos contribuye a la seguridad del paciente, ya que se reduce considerablemente el riesgo de contaminación cruzada. Este extenso programa cubre un amplio espectro de tareas diarias en la consulta; desde la preparación y la profilaxis hasta el pulido final de los composites, el trabajo diario resultará más fácil.



SINGLE DIAMONDS
SINGLE DIAMONDS
SINGLE DIAMONDS

168-171

SINGLE CARBIDES
SINGLE CARBIDES
SINGLE CARBIDES

172-173

PROPHYLAXEPOLIERER
POLISHERS FOR PROPHYLAXIS
PULIDORES PROFILÁCTICOS

174



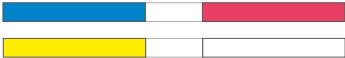
Prophy Twist Polishers
Prophy Twist Polishers
Prophy Twist Polishers

174



Prophy-Cups
Prophy-Cups
Prophy-Cups

174



Prophy-Strips
Prophy-Strips
Prophy-Strips

174

POLIERER FÜR PLASTISCHE FÜLLUNGSMATERIALIEN
POLISHERS FOR COMPOSITES
PULIDOR PARA MATERIALES DE OBTURACIÓN

175



Einweg Diamant Komposit Polierer
Disposable Diamond Composite Polisher
Pulidor de diamante composite de un solo uso

175



2-Stufen System Einweg Diamant Komposit Polierer
2-Step System Disposable Diamond Composite Polisher
Sistema de 2 niveles, pulidor de diamante composite de un solo uso

175

SINGLE DIAMONDS | SINGLE DIAMONDS | DIAMANTES SINGLE

Die MEISINGER Diamond SINGLES sind für die Einmalverwendung vorgesehen und bieten die perfekte Lösung für ein effizientes und hygienisches Arbeiten. Einzeln und steril verpackt sind die Diamond SINGLES Instrumente sofort einsatzfähig und können zudem in der Spenderbox praktisch verstaut werden. Eine aufwändige und zeitintensive Aufbereitung in der Praxis ist nicht notwendig. Erhältlich sind unsere Diamond SINGLES in den Diamantierungen Extra Grob, Grob, Mittel, Fein und Extra Fein.

The MEISINGER Diamond SINGLES are intended for single use and offer the perfect solution for efficient and hygienic working. Individually and packed sterile, the Diamond SINGLES instruments are ready for immediate use and can also be conveniently stored in the dispenser box. A costly and time-consuming reprocessing in the surgery is not necessary. Our Diamond SINGLES are available in the diamond grades Extra Coarse, Coarse, Medium, Fine and Extra Fine.

Los Diamond SINGLES MEISINGER están previstos para un solo uso y ofrecen la solución perfecta para un trabajo eficiente e higiénico. Envasados individualmente y esterilizados, los instrumentos Diamond SINGLES están listos para un uso inmediato y también se pueden guardar cómodamente en la caja dispensadora. No es necesario realizar un reacondicionamiento a trabajos y largo en la consulta. Nuestros Diamond SINGLES están disponibles en diamantado extragruoso, grueso, medio, fino y extrafino.

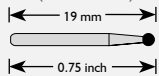
SINGLE DIAMONDS by MEISINGER




25 pro Box

Sterile packed

FG (ø 1,60 mm):



*=FG short (ø 1,60 mm):

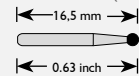

STERILE R



HINWEIS: Bei unseren Diamond SINGLES Instrumenten entspricht die Bestellnummer der Diamond Number / US Number.

COMMENT: For our Diamond SINGLES instruments, the order number corresponds to the Diamond Number / US Number.

NOTA: en nuestros instrumentos Diamond SINGLES, el número de pedido corresponde la número Diamond / US Number.

Rund
Round
Redonda



Fig.	801	801	801	801	801
Shank / Schaft	FG	FG	FG	FG	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	1.0	1.2	1.6	1.8	2.3
Länge (mm) / Length (mm)	-	-	-	-	-
Diamond Number	-	-	0116C	0118C	0123C
Diamond Number	0110M	0112M	0116M	0118M	-
Diamond Number	-	-	-	-	0123F



Umgekehrter Kegel
Inverted Cone
Cono invertido



Fig.	805	805
Shank / Schaft	FG	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	1.2	1.6
Länge (mm) / Length (mm)	0.9	1.5
Diamond Number	-	0316C
Diamond Number	0312M	-



Umgekehrter Kegel, lang
Inverted Cone, long
Cono invertido, largo



Fig.	807	807
Shank / Schaft	FG	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	1.6	1.8
Länge (mm) / Length (mm)	4.0	5.0
Diamond Number	0316.4C	0318.5C



Diabolo
Diabolo, Hourglass
Diábolo



Fig.	806
Shank / Schaft	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	1.4
Länge (mm) / Length (mm)	2.2
Diamond Number	0416C



Birne
Pear
Pera



Fig.	809	808	808
Shank / Schaft	FG / *FG short	FG / *FG short	FG / *FG short
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	0.8	1.2	1.2
Länge (mm) / Length (mm)	1.6	2.7	2.7
Diamond Number	-	-	0512C
Diamond Number	0508M	0512M	-
Diamond Number	*0508MS	*0512MS	-



Doppelkegel
Double Cone, Barrel
Cone doble



Fig.	811	811L
Shank / Schaft	FG	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	3.3	3.7
Länge (mm) / Length (mm)	4.5	7.0
Diamond Number	2133C	2137C



Rad
Wheel
Rueda



Fig.	909	909
Shank / Schaft	FG	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	3.5	4.0
Länge (mm) / Length (mm)	1.3	1.5
Diamond Number	2035C	2042C



Interdental
Interproximal
Interdental



Fig.	820
Shank / Schaft	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	1.6
Länge (mm) / Length (mm)	5.0
Diamond Number	1416M
Diamond Number	1416F



KnospeBud, Pointed Football
Capullo

Fig.	831	830	830	831	830
Shank / Schaft	FG	FG	FG	FG	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	1.6	2.1	2.3	1.6	2.3
Länge (mm) / Length (mm)	3.5	5.0	5.0	3.5	5.0
Diamond Number	-	-	1923C	-	-
	1916C	1920C	-	-	-
	-	-	1923M	-	-
	1916F	1920F	1923F	-	-
	-	-	-	3916VF	3923VF

**Ei**Egg
Huevo

Fig.	833	833	833
Shank / Schaft	FG	FG	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	1.8	2.3	2.3
Länge (mm) / Length (mm)	3.4	4.2	4.2
Diamond Number	-	1900C	-
	1908C	-	-
	-	1900M	-
	1908F	1900F	-
	-	-	3900VF

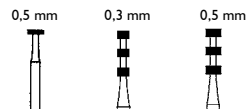
**Tiefenmarkierer**Depth Cutter
Marcadores de profundidadPräparationstiefe
Preparation depth
Profundidad de preparación

Fig.	815	834	834
Shank / Schaft	FG	FG	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	2.6	1.6	2.1
Länge (mm) / Length (mm)	-	-	-
Diamond Number	6005M	7003M	7005M

**Zylinder**Cylinder
Cilindrico

Fig.	836	836	836	837	837L	837
Shank / Schaft	FG short	FG	FG	FG	FG	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	1.0	1.0	1.2	1.2	1.4	1.6
Länge (mm) / Length (mm)	4.0	4.0	4.0	7.0	8.0	8.0
Diamond Number	0710CS	0710C	0712C	0712.7C	0714.8C	0716.8C
	0710MS	0710M	-	-	-	-

**Zylinder, rund**Cylinder, Round End
Cilindrico con
borde redondeado

Fig.	881	881	881	882	881
Shank / Schaft	FG	FG	FG	FG	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	1.0	1.2	1.4	1.4	1.6
Länge (mm) / Length (mm)	8.0	8.0	8.0	10.0	8.0
Diamond Number	-	1212.7C	1214.8C	-	-
	1210.7C	-	1214.8G	-	-
	-	-	-	1214.10M	-
	1210.7F	-	-	-	1216.8F
	-	-	1214.8VF	-	-

**Zylinder, Kante rund**Cylinder, Round Edge
Cilindrico de punta plana

Fig.	842	841	841
Shank / Schaft	FG	FG	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	1.4	0.8	1.0
Länge (mm) / Length (mm)	8.0	6.0	6.0
Diamond Number	0614.8C	-	-
	-	0608.6M	0610.6M
	0614.8F	-	-

**Zylinder, spitz**Cylinder, Pointed
Cilindrico con chafán

Fig.	885	886
Shank / Schaft	FG	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	1.2	1.2
Länge (mm) / Length (mm)	8.0	10.0
Diamond Number	1812.8C	1812.10C
	1812.8M	1812.10M
	1812.8F	-

**Zylinder, Stirn belegt**Cylinder, End Cutting Only
Cilindrico con revestimiento en
la punta

Fig.	839	839	839
Shank / Schaft	FG	FG	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	1.2	1.4	1.6
Länge (mm) / Length (mm)	-	-	-
Diamond Number	5012M	5014M	5016M

**Konisch**Tapered
Cónica

Fig.	847	848	847	848	847	848
Shank / Schaft	FG	FG	FG	FG	FG	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	1.4	1.4	1.6	1.6	1.8	1.8
Länge (mm) / Length (mm)	8.0	10.0	8.0	10.0	8.0	10.0
Diamond Number	0914.8C	-	0916.8C	0916.10C	0918.8C	0918.10C
	-	0914.9C	-	-	-	-
	0914.8M	-	0916.8M	0916.10M	0918.8M	0918.10M
	0914.8F	-	0916.8F	-	-	-

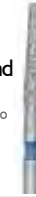
**Konisch, Kante rund**Tapered, Round End
Cónico con borde redondeado

Fig.	846R	847R	845R	847R	845R
Shank / Schaft	FG short	FG	FG	FG	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	1.6	1.6	1.8	1.8	2.5
Länge (mm) / Length (mm)	6.0	8.0	4.0	8.0	4.0
Diamond Number	0816.CS	0816.8C	-	0818.8C	-
	-	-	0818.4C	-	-
	816.6MS	0816.8M	0818.4M	-	2525M
	-	0816.8F	-	-	-



Konisch, rund

Tapered, Round End
Cónico con borde redondeado

Fig.	849	856	852	856	856	852	856	856	856	852	856	852	856	856	856	856
Shank / Schaft	FG	FG	FG	FG short	FG	FG	FG short	FG	FG	FG	FG	FG	FG	FG	FG short	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	1.2	1.2	1.2	1.4	1.4	1.4	1.6	1.6	1.6	1.6	1.8	1.8	2.1	2.4	2.5	1.6
Länge (mm) / Length (mm)	6.0	7.0	10.0	6.0	8.0	10.0	6.0	7.0	8.0	10.0	7.0	10.0	8.0	7.0	7.0	8.0
Diamond Number	1112.6CS	-	-	1114.6CS	-	-	1116.6CS	1116.7C	1116.8C	1116.10C	1118.7C	1118.9C	1121.8C	2424CS	2424C	-
	-	1112.7C	1112.10C	-	1114.8C	1114.10C	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-	1112.7M	1112.10M	-	1114.8M	1114.10M	1116.6MS	1116.7M	1116.8M	1116.10M	-	1118.9M	-	-	-	-
	-	-	-	-	1114.8F	1114.10F	-	-	1116.8F	1116.10F	1118.7F	1118.9F	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3116.8VF



Konisch, spitz, Nadel

Tapered Point, Needle
Cónica de punta, Aguja

Fig.	890	890L	859	859L	859L	858	859
Shank / Schaft	FG short	FG	FG	FG	FG	FG	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	0.8	0.8	1.0	1.0	1.2	1.4	1.4
Länge (mm) / Length (mm)	3.0	3.0	10.0	12.0	12.0	8.0	10.0
Diamond Number	-	-	-	-	1312.11C	1314.8C	1314.10C
	-	1310.3M	1310.10M	1310.12M	-	1314.8M	1314.10M
	1300FS	1310.3F	-	-	1312.11F	1314.8F	1314.10F



Flamme

Flame
Llama

Fig.	889L	862	862	862	863	862	862	863
Shank / Schaft	FG	FG	FG short	FG	FG	FG	FG	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	0.9	1.0	1.2	1.2	1.2	1.4	1.6	1.8
Länge (mm) / Length (mm)	3.5	8.0	6.0	8.0	10.0	8.0	8.0	10.0
Diamond Number	-	1510.8C	1512.6CS	1512.8C	1512.10C	1514.8C	1516.8C	1518.9C
	1509.3M	1510.8M	1512.6MS	1512.8M	1512.10M	-	1516.8M	-
	1509.3F	1510.8F	-	1512.8F	1512.10F	-	1516.8F	1518.9F



Torpedo

Torpedo
Torpedo

Fig.	868	868
Shank / Schaft	FG	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	1.2	1.4
Länge (mm) / Length (mm)	8.0	8.0
Diamond Number	1800.8C	1804.8C
	1800.8F	-



Torpedo, konisch

Torpedo, Tapered
Torpedo, cónico

Fig.	878	879	878	879	877	878	878	879	878
Shank / Schaft	FG	FG	FG	FG	FG short	FG	FG	FG	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	1.2	1.2	1.4	1.4	1.6	1.6	1.8	1.8	2.1
Länge (mm) / Length (mm)	8.0	10.0	8.0	10.0	6.5	8.0	8.0	10.0	8.0
Diamond Number	-	-	-	-	-	-	1718.8C	1718.10C	-
	1712.8C	1712.10C	1714.8C	1714.10C	1716.6CS	1716.8C	-	-	1721.8C
	1712.8M	1712.10M	1714.8M	1714.10M	1716.6MS	1716.8M	-	-	-
	-	-	1714.8F	-	-	1716.8F	1718.8F	-	-



Sterile packed

Spiral Diamanten, konisch, rundSpiral diamonds, conical, round
Diamantes en espiral, cónicos, esféricos

Fig.	850P	850P	852P	852P	852P
Shank / Schaft	FG	FG	FG	FG	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	1.4	1.6	1.6	1.8	1.8
Länge (mm) / Length (mm)	8.5	8.5	10.0	8.5	10.0
Diamond Number	8114.8C	8116.8C	8116.10C	8118.7C	8118.9C

**Knospe**Bud, Pointed Football
Capullo

Fig.	830P
Shank / Schaft	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	2.3
Länge (mm) / Length (mm)	5.2
Diamond Number	8923C

**Konisch, spitz, Nadel**Tapered Point, Needle
Cónica de punta, Aguja

Fig.	890L	858	859
Shank / Schaft	FG	FG	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	0.8	1.4	1.4
Länge (mm) / Length (mm)	3.0	8.0	10.0
Diamond Number	3310.3VF	3314.8VF	3314.10VF

**Flamme**Flame
Llama

Fig.	862	863	862	863
Shank / Schaft	FG	FG	FG	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	1.2	1.2	1.6	1.6
Länge (mm) / Length (mm)	8.0	10.0	8.0	10.0
Diamond Number	3512.8VF	3512.10VF	3516.8VF	3516.10VF

**CE Diamanten**CE Diamonds
Diamante CE

Fig.	512	518
Shank / Schaft	FG	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	1.8	1.8
Länge (mm) / Length (mm)	8.0	8.0
Diamond Number	2217C	2218C



SINGLE CARBIDES | SINGLE CARBIDES | CARBUROS SINGLE

Die MEISINGER Hartmetall SINGLES sind für die Einmalverwendung vorgesehen und bieten die perfekte Lösung für ein effizientes und hygienisches Arbeiten. Einzeln und steril verpackt sind die Hartmetall SINGLES Instrumente sofort einsatzfähig. Eine zeit- und mitarbeiterintensive Aufbereitung in der Praxis ist nicht notwendig. Die Instrumente sind in verschiedenen Arbeitsteilformen erhältlich, dabei weisen die Instrumente eine herausragende Schneidleistung auf.

The MEISINGER Carbide SINGLES are intended for single use and offer the perfect solution for maximum efficiency and hygiene. Packaged separately and sterile the carbide SINGLES dental instruments are ready for immediate use without time consuming and labor intensive sterilization and preparation. The instruments are available in different working part shapes, yet the instruments have outstanding cutting performance.

Los SINGLES MEISINGER de carburo de tungsteno están previstos para un solo uso y ofrecen la solución perfecta para un trabajo eficiente e higiénico. Envasados individualmente y esterilizados, los instrumentos SINGLES de carburo de tungsteno están listos para un uso inmediato. No es necesario realizar un reacondicionamiento trabajoso y largo en la consulta. Los instrumentos están disponibles en diferentes formas de piezas de trabajo y tienen un rendimiento de corte excepcional.

SINGLE CARBIDES by MEISINGER

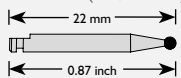


25 pro Box


Sterile packed

STERILE R


Schaft RA (ø 2,35 mm):




Schaft FG (ø 1,60 mm):

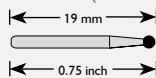

Schaft FG short (ø 1,60 mm):

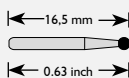

Schaft FG XL (ø 1,60 mm):

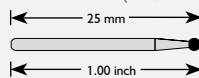

Rund

Round
Redonda


Fig.	HM1	HM1	HM1	HM1	HM1	HM1
Shank / Schaft	FG	FG	FG	FG	FG	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	0.5	0.6	1.0	1.4	1.8	2.3
Länge (mm) / Length (mm)	-	-	-	-	-	-
Bestellnummer / Order number	2600001314005	2600001314006	2600001314010	2600001314014	2600001314018	2600001314023
US Nummer / US number	FG1/4	FG1/2	FG2	FG4	FG6	FG8



Umgekehrter Kegel

Inverted Cone
Cono invertido


Fig.	HM2	HM2
Shank / Schaft	FG	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	0.8	1.0
Länge (mm) / Length (mm)	0.8	1.0
Bestellnummer / Order number	2600002314008	2600002314010
US Nummer / US number	FG34	FG35



Birne

Pear
Pera


Fig.	HM7	HM7
Shank / Schaft	FG	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	0.8	1.0
Länge (mm) / Length (mm)	1.8	2.0
Bestellnummer / Order number	2600007314008	2600007314010
US Nummer / US number	FG330	FG331



Zylinder

Cylinder
Cilindrico


Fig.	HM21	HM21	HM31	HM31	HM31	HM31R	HM31R	HMUN245
Shank / Schaft	FG	FG	FG	FG	FG	FG	FG	FG
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	0.9	1.0	0.9	1.0	1.2	0.9	1.0	0.9
Länge (mm) / Length (mm)	3.8	4.1	3.8	4.1	4.1	3.8	4.1	2.9
Bestellnummer / Order number	2600021314009	2600021314010	2600031314009	2600031314010	2600031314012	2600318314009	2600318314010	26UN245314009
US Nummer / US number	FG56	FG57	FG556	FG557	FG558	FG1556	FG1557	FG245



Sterile packed

BirnePear
Pera

Fig.	HM7
Shank / Schaft	FG S
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	0.8
Länge (mm) / Length (mm)	1.8
Bestellnummer / Order number	2600007313008
US Nummer / US number	FGS330

**Zylinder**Cylinder
Cilindrico

Fig.	HM31	HMUN245
Shank / Schaft	FG S	FG S
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	1.0	0.9
Länge (mm) / Length (mm)	4.1	2.9
Bestellnummer / Order number	2600031313010	2600031313009
US Nummer / US number	FGS557	FGS245

**Rund**Round
Redonda

Fig.	HM1	HM1	HM1	HM1
Shank / Schaft	FG XL	FG XL	FG XL	FG XL
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	1.0	1.4	1.8	2.3
Länge (mm) / Length (mm)	-	-	-	-
Bestellnummer / Order number	2600001316010	2600001316014	2600001316018	2600001316023
US Nummer / US number	FGXL2	FGXL4	FGXL6	FGXL8

**Zylinder**Cylinder
Cilindrico

Fig.	HM31	HM31
Shank / Schaft	FG XL	FG XL
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	0.9	1.0
Länge (mm) / Length (mm)	3.8	4.1
Bestellnummer / Order number	2600031316009	2600031316010
US Nummer / US number	FGXL556	FGXL557

**Konisch**Tapered
Cónico

Fig.	HM33	HM33	HM33
Shank / Schaft	FG XL	FG XL	FG XL
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	1.2	1.6	2.1
Länge (mm) / Length (mm)	4.1	4.5	4.9
Bestellnummer / Order number	2600033316012	2600033316016	2600033316021
US Nummer / US number	FGXL701	FGXL702	FGXL703

**Rund**Round
Redonda

Fig.	HM1	HM1	HM1	HM1
Shank / Schaft	RA	RA	RA	RA
Durchmesser (mm) / Diameter (mm)	1.0	1.4	1.8	2.3
Länge (mm) / Length (mm)	-	-	-	-
Bestellnummer / Order number	2600001204010	2600001204014	2600001204018	2600001204023
US Nummer / US number	RA2	RA4	RA6	RA8



PROPHYLAXEPOLIERER | POLISHERS FOR PROPHYLAXIS | PULIDORES PROFILÁCTICOS

Prophy Twist Polishers | Prophy Twist Polishers | Prophy Twist Polishers

PTP01

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		100	100
		L mm		1,6	1,6
PTP01	RA	653 204 000 511		100	140



Hinweis: Mit geringem Anpressdruck zu verwenden! | Note: To be used with little contact pressure! | Nota: Usar aplicando poca presión!

- Einmalinstrumente mit Kunststoffschaft
- Flexible Polierlamellen ermöglichen eine Anpassung an jede Oberflächenstruktur
- Speziell für die Politur von schwer zugänglichen Bereichen
- Makellose Ergebnisse innerhalb kürzester Anwendungszeit

Empfohlene Drehzahl: 7.000 - 12.000 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 20.000 min⁻¹

- Disposable instruments with plastic shank
- Flexible polishers lamellae allow adaptation to any surface structure
- Especially for polishing regions with difficult access
- Perfect results within the shortest time

Recommended Speed: 7.000 - 12.000 rpm
Maximum Speed: 20.000 rpm

- Instrumentos de un solo uso con mango
- Las láminas pulidoras flexibles permiten la adaptación a todas las estructuras superficiales
- Especial para el pulido de las zonas de difícil acceso
- Resultados perfectos en muy poco tiempo

Revoluciones recomendadas: 7.000 - 12.000 min⁻¹
Revoluciones máximas: 20.000 min⁻¹

Prophy-Cups | Prophy-Cups | Prophy-Cups

Hart Vorpulitur	Hard Pre-polishing	Duro Prepulido
Weich Politur	Soft Polishing	Blando Pulido
Super weich Hochglanzpolitur	Super soft High shine polishing	Super blando Pulido de brillo intenso
Empfohlene Drehzahl: 5.000 - 10.000 min ⁻¹ Maximale Drehzahl: 10.000 min ⁻¹	Recommended Speed: 5.000 - 10.000 rpm Maximum Speed: 10.000 rpm	Revoluciones recomendadas: 5.000 - 10.000 min ⁻¹ Revoluciones máximas: 10.000 min ⁻¹

PHA02 PSO03 PSS04

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		100	100	100
		L mm		10,0	10,0	10,0
PHA02	RA	653 204 034 514		070		
PSO03	RA	653 204 034 512			070	
PSS04	RA	653 204 034 511				070



Prophy-Strips | Prophy-Strips | Prophy-Strips

Die Streifen bestehen aus äußerst flexiblem Polyester-material und sind einseitig mit Aluminiumoxidpartikeln beschichtet.	The strips are made of high flexible polyester and are one-side coated with aluminium oxide particles.	Las tiras están hechas de material de poliéster altamente flexible y están recubiertas por un lado con partículas de óxido de aluminio.
Blau / Rot Grob / Medium	Blue / Red Coarse / Medium	Azul / Rojo Grueso / Mediano
Gelb / Weiß Fein / Extra Fein	Yellow / White Fine / Extra fine	Amarillo / Blanco Fino / Extra fino

PST01 PST02

Fig.	Ref.-Nr. / Ref.-No.		50	50
	Thickness mm		0,15	0,15
	Size mm		4 x 150	4 x 150
PST01	630 000 600 513		000	
PST02	630 000 600 511			000



POLIERER FÜR PLASTISCHE FÜLLUNGSMATERIALIEN | POLISHERS FOR COMPOSITES |

PULIDOR PARA MATERIALES DE OBTURACIÓN

Einweg Diamant Komposit Polierer | Single-Use Diamond Composite Polishers | Pulidores de diamante composite de uso único

Erzielen Hochglanz auf Ihrer Restauration

Empfohlene Drehzahl: 3.000 - 10.000 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 10.000 min⁻¹

Achieving the "high shine" on your restorations

Recommended Speed: 3.000 - 10.000 rpm
Maximum Speed: 10.000 rpm

Consiguen un brillo intenso en sus restauraciones

Revoluciones recomendadas: 3.000 - 10.000 min⁻¹
Revoluciones máximas: 10.000 min⁻¹D9780
D9781
D9782

Einmalgebrauch / Single Use / Desechable

USA 25

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
			L mm	8,0	7,0	6,0
D9780	RA	803 204 243 523		041		
D9781	RA	803 204 030 523			057	
D9782	RA	803 204 034 523				080



2-Stufen System Einweg Diamant Komposit Polierer | 2-Step System Disposable Diamond Composite Polisher | Pulidora de compuesto de diamante desechable con sistema de 2 niveles

Speziell für die einfache Politur von Kompositrestaurationen

1. Stufe
Glätten (mittel)2. Stufe
Hochglanzpolitur (fein)Empfohlene Drehzahl 9754M, 9754F: 3.000 - 5.000 min⁻¹
Alle anderen: 3.000 - 8.000 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 15.000 min⁻¹

Especially for simple polishing of composite restorations

1. Step
Polishing (medium)2. Step
High shine polishing (fine)Recommended Speed 9754M, 9754F: 3.000 - 5.000 rpm
All others: 3.000 - 8.000 rpm
Maximum Speed: 15.000 rpm

Especial para el pulido oclusal de restauraciones por compuesto

1ª escala
Pulido2ª escala
Pulido de brillo intensoRevoluciones recomendadas 9754M, 9754F: 3.000 - 5.000 min⁻¹
Los demás: 3.000 - 8.000 min⁻¹
Revoluciones máximas: 15.000 min⁻¹9754M
9754F

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		50	50
			L mm	8,7	8,7
9754M	RA	803 204 541 522		055	
9754F	RA	803 204 541 502			055

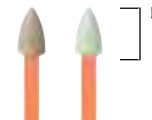
9755M
9755F

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		50	50
			L mm	6,9	6,9
9755M	RA	803 204 297 522		040	
9755F	RA	803 204 297 502			040

9756M
9756F

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		50	50
			L mm	6,4	6,4
9756M	RA	803 204 030 522		060	
9756F	RA	803 204 030 502			060

9757M
9757F

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		50	50
			L mm	1,6	1,6
9757M	RA	803 204 543 522		110	
9757F	RA	803 204 543 502			110



Hinweis: Mit geringem Anpressdruck zu verwenden! |

Note: To be used with little contact pressure! |

Nota: Usar aplicando poca presión!

Endodontie

Endodontia | Endodoncia

MEISINGER Spezialinstrumente und Sortimente für die Endodontie bieten dem Zahnarzt ein weites Instrumentenspektrum für die sichere und einfache Durchführung aller gängigen endodontischen Behandlungsmethoden.

MEISINGER special instruments and product lines for endodontics offer the dentist a wide range of instruments for the safe and simple implementation of all common endodontic treatment methods.

Los instrumentos especiales MEISINGER y las gamas para la endodoncia ofrecen al odontólogo un amplio espectro de instrumental para llevar a cabo todos los tratamientos de endodoncia actuales de forma segura y sencilla.



WURZELKANALINSTRUMENTE

ROOT CANAL INSTRUMENTS

ENSANCHADORES DE CONDUCTOS178-179

ENDO ACCESS BURS

ENDO ACCESS BURS

ENDO ACCESS BURS180

COMPREHENSIVE ACCESS KIT

COMPREHENSIVE ACCESS KIT

COMPREHENSIVE ACCESS KIT181

WURZELKANALINSTRUMENTE | ROOT CANAL INSTRUMENTS | ENSANCHADORES DE CONDUCTOS

176


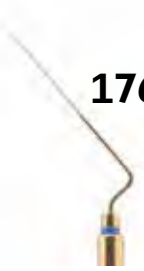



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		6	6	6	6	6	6
			L mm	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0	26,0
				0,15	0,20	0,25	0,30	0,35	0,40
176		340 814 655 453		015	020	025	030	035	040

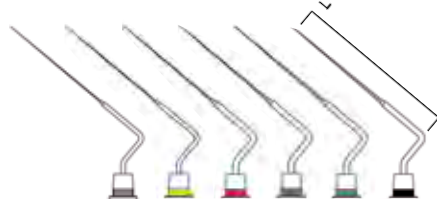

Feilen nach Hedstrom, langer Griff | Hedstrom files with long handle | Limas según Hedstrom con mango largo

Im Set erhältlich:

Sortiment, Art-Nr. 17610 (015-040)
Assortment, Art-No. 17610 (015-040)
Surtido, ref. 17610 (015-040)

180GR

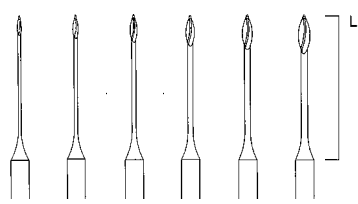



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10	10	10	10	10	10
			L mm	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
180GR	RA XL	330 206 679 336		050	070	090	110	130	150



Wurzelkanalweiterer "Gates", rostfrei | Root canal reamers "Gates", stainless | Ensanchadores radiculares, inoxidables "Gates"

Im Set erhältlich:

Sortiment, Art-Nr. 18001 (050-150)
Assortment, Art-No. 18001 (050-150)
Surtido, ref. 18001 (050-150)

182

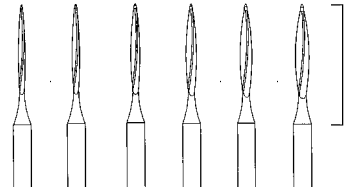



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10	10	10	10	10	10
			L mm	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
182	RA XL	310 206 680 336		090	100	120	140	160	180



Wurzelkanalweiterer „Beutelrock“ | Root canal reamers „Beutelrock“ | Ensanchadores radiculares „Beutelrock“

Im Set erhältlich:

Sortiment, Art-Nr. 18201 (090-180)
Assortment, Art-No. 18201 (090-180)
Surtido, ref. 18201 (090-180)

183LR

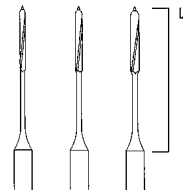



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10	10	10
			L mm	19,0	19,0	19,0
183LR	RA XL	330 206 682 336		070	090	110



Wurzelkanalweiterer "Peeso", rostfrei | Root canal reamers "Peeso", stainless | Ensanchadores radiculares, inoxidables "Peeso"

183PR

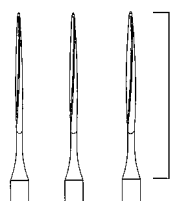



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10	10	10
			L mm	22,0	22,0	22,0
183PR	RA XL	330 206 708 336		090	100	120



Wurzelkanalweiterer "Peeso", rostfrei | Root canal reamers "Peeso", stainless | Ensanchadores radiculares, inoxidables "Peeso"

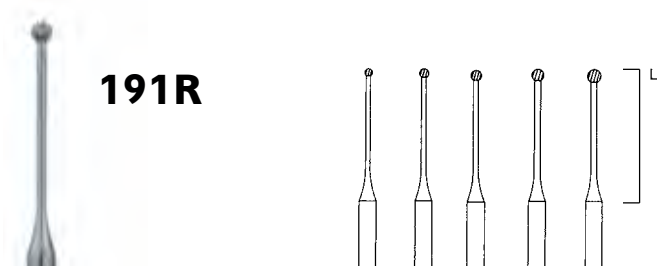
191R

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10	10	10	10	10
L mm				18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
191R	RA XL	330 206 698 001		100	120	140	160	180



Pulpakammerbohrer "Müller", rostfrei | Pulp chamber burs "Müller", stainless | Fresas para cámara de pulpa "Müller", inoxidable

Im Set erhältlich:

Sortiment, Art.-Nr. 19101 (100-180)
Assortiment, Art.-No. 19101 (100-180)
Surtido, ref. 19101 (100-180)

193

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		10	10
L mm				13,0	13,0
193	HP	310 104 692 006		140	
	RA XL	310 206 692 006			180



Wurzelkanalerweiterer "Kosel" | Root canal reamers "Kosel" | Ensanchadores radiculares "Kosel"

HM 151

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
L mm				10,7
HM 151	FG XL	500 316 199 295		016
HM 151	FG XXL	500 317 199 295		016

**HM 152**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
L mm				9,0
HM 152	FG L	500 315 210 295		014



Chirurgischer Fräser, Stirn nicht verzahnt, Hartmetall | Tungsten carbide surgical cutter, Safe end | Fresa quirúrgica de carburo, Punta no dentada

801L mittel / medium

801LG grob / coarse

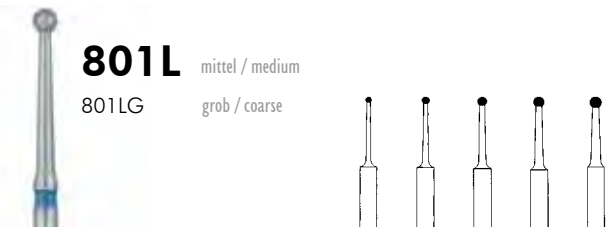


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5	5	5
L mm				008	010	012	014	016
801L	HP	806 104 697 524						
	FG	806 314 697 524						
801LG	FG	806 314 697 534						



Tungsten Carbide
Diamond

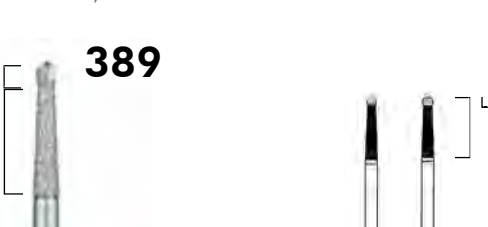
389

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
L mm				8,0	8,0
389	FG XL	806 316 494 020		012	014

**802KG** grob / coarse

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
L mm				8,5
802KG	FG	806 314 551 534		014
	FG L	806 315 551 534		014



Stirn nicht diamantiert, zur Schonung des zervikalen Bereichs | Safe end, for gentle administration of the cervical area | Punta no diamantada, para la protección del área cervical

802LG Endo Access

grob / coarse



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5	5	5
L mm				10,0	10,0	10,0
802LG	FG	806 314 494 534		012	016	019



ENDO ACCESS BURS | ENDO ACCESS BURS | ENDO ACCESS BURS



- Spezialinstrumente für die Wurzelkanalaufbereitung
- Lange schmale Hälse ermöglichen eine ausgezeichnete Sicht auf das Arbeitsfeld
- Optimaler, vibrationsarmer Rundlauf
- Hochstabile Konstruktion
- Geringere Staubentwicklung als Ultraschallspitzen
- Farbcode ermöglicht eine schnelle Identifizierung und Auswahl der Instrumente

- Special instruments for root canal preparation
- Long narrow necks allow for an excellent view onto the working field
- Optimal, low-vibration concentricity
- Highly-stable construction
- Less dust generation than ultrasonic tips
- Color code allows for quick identification and selection of the instruments

- Instrumentos especiales para la preparación de los conductos radiculares
- Los cuellos largos y estrechos permiten una visibilidad excelente del campo de trabajo
- Giro óptimo con apenas vibración
- Construcción muy estable
- Menos generación de polvo que las puntas ultrasónicas
- La codificación por colores permite identificar y seleccionar rápidamente los instrumentos

Empfohlene Drehzahl: 500 - 800 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 2.000 min⁻¹

Recommended Speed: 500 - 800 rpm
Maximum Speed: 2.000 rpm

Revoluciones recomendadas: 500 - 800 min⁻¹
Revoluciones máximas: 2.000 min⁻¹

HM 191A
31 mm total length

Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.	2	2	2	2	2	2	2
	L mm		16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
	US-No.		1/4	1/2	1	2	3	4	6
HM 191A	RAL	500 205 004 006	005						
HM 191A	RAL	500 205 004 006		006					
HM 191A	RAL	500 205 004 006			008				
HM 191A	RAL	500 205 004 006				010			
HM 191A	RAL	500 205 004 006					012		
HM 191A	RAL	500 205 004 006						014	
HM 191A	RAL	500 205 004 006							018

HM 191A
34 mm total length

Fig.	Schaft/Shank	Ref.-Nr./Ref.-No.	2	2	2	2	2	2
	L mm		16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
	US-No.		1/4	1/2	1	2	3	4
HM 191A	RAXL	500 206 004 006	005					
HM 191A	RAXL	500 206 004 006		006				
HM 191A	RAXL	500 206 004 006			008			
HM 191A	RAXL	500 206 004 006				010		
HM 191A	RAXL	500 206 004 006					012	
HM 191A	RAXL	500 206 004 006						014

Endo Access Bur Kit

Für einen optimierten Prozess der koronalen Wurzelkanalaufbereitung liefert Ihnen das Endo Access Bur Kit eine Zusammenstellung aller hochstabilen MEISINGER Endo Access Burs:

For an optimized process of coronal root canal preparation, the Endo Access Bur Kit provides you with a compilation of all highly stable MEISINGER Endo Access Burs:

Para un proceso óptimo de preparación del canal radicular, el Endo Access Bur Kit le ofrece un conjunto de las fresas más estables MEISINGER Endo Access Burs:

ENDO2



Top Seller!

COMPREHENSIVE ACCESS KIT

COMPREHENSIVE ACCESS KIT

COMPREHENSIVE ACCESS KIT

Der sichere Zugang zum Wurzelkanal ist für jede erfolgreiche Wurzelkanalbehandlung unerlässlich. Aus diesem Grund bietet MEISINGER das Comprehensive Access Kit an. Eine Auswahl sorgfältig zusammengestellter Diamant- und Hartmetallinstrumente ermöglicht eine sichere und planbare Wurzelkanaleröffnung. Das Comprehensive Access Kit enthält alle notwendigen Instrumente, um einen geraden Zugang zum Wurzelkanal durch verschiedene Materialien wie Zirkonoxid, Metallkeramik und Zahnschmelz zu schaffen und ist damit bei jeder Wurzelkanalbehandlung unentbehrlich.

Safe access into the root canal is imperative for any successful root canal treatment. That is why MEISINGER created the Comprehensive Access Kit, a carefully curated selection of diamond and tungsten carbide instruments necessary for a safe and predictable endodontic access preparation. This kit provides all the burs needed to obtain straight line access into the canal through different materials such as zirconia, PFM, and enamel. Conveniently organized in an autoclavable bur block, this kit is essential for any root canal treatment.

Un acceso seguro al canal radicular es indispensable para su tratamiento correcto. Por ello, MEISINGER ofrece el kit Comprehensive Access, una cuidadosa selección de instrumental de diamante y de carburo tungsteno con todo lo necesario para una apertura del canal radicular planificable y segura. El Comprehensive Access Kit contiene todos los instrumentos necesarios para lograr un acceso recto al canal radicular, gracias a los diversos materiales como óxido de circonio, cerámica con metal y esmalte dental, y por ello es fundamental en todo tratamiento del canal radicular.

Comprehensive Access Kit

ENDO1



									
Fig.	HM1	HM1	Z801L	856G	HMG152	801G	801G	833G	HM31A
Schaft / Shank	316	316	314	314	315	314	314	314	314
Größe / Size	010	014	014	016	016	010	014	023	012



Kieferorthopädie (KFO)

Orthodontia | Ortodoncia

Für den Bereich der Kieferorthopädie bietet MEISINGER eine Vielzahl unterschiedlicher Spezialinstrumente an. Diese unterstützen das einfache und schnelle Erreichen optimaler Arbeitsergebnisse im gesamten kieferorthopädischen Bereich.

MEISINGER offers a variety of instruments that support many different aspects and working needs in the area of Orthodontics.

Para el campo de ortodoncia MEISINGER ofrece una variedad múltiple de diferentes instrumentos especiales. Ayudan para alcanzar los óptimos resultados de trabajo de forma simple y rápida en todo el campo de ortodoncia.



INSTRUMENTE FÜR DIE PRAXIS

INSTRUMENTS FOR PRACTICE

INSTRUMENTOS PARA LA PRÁCTICA 184-185

Hartmetall

Tungsten carbide
Carburo Tungsteno

184

Prophy-Clean

Prophy-Clean
Prophy-Clean

184

Polierer

Polishers
Pulidores

185

INSTRUMENTE FÜR DAS LABOR

INSTRUMENTS FOR THE LABORATORY

INSTRUMENTOS PARA EL LABORATORIO 186-189

Hartmetall

Tungsten carbide
Carburo Tungsteno

186-188

Diamantscheibe

Diamond Disc
Lámina de diamante

189

Polierer

Polishers
Pulidores

189

INSTRUMENTE FÜR DIE PRAXIS | INSTRUMENTS FOR PRACTICE | INSTRUMENTOS PARA LA PRÁCTICA

Hartmetall | Tungsten Carbide | Carburo Tungsteno

Zur Entfernung von Kleberesten und zur Finitur der Zahnoberfläche

For removing adhesive residues and finishing the tooth surface

Para retirar los restos de adhesivo y para el acabado de la superficie dental

HM 21R





Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
	L mm		4,1	4,9
	US-No.		1158	
HM 21R	RA	500 204 137 006	012	018
	FG	500 314 137 006	012	



HM 23R





Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
	L mm		4,1	4,5
	US-No.		1171	1172
HM 23R	RA	500 204 194 006	012	016
	FG	500 314 194 006	012	016



HM 47L



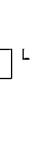


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
	L mm		4,0	
	US-No.		7303	
HM 47L	FG	500 314 238 072	012	



HM 48L



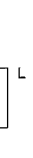


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
	L mm		8,0	
HM 48L	RA	500 204 249 072	012	
	FG	500 314 249 072	012	



HM D0132

HM D132F
HM D132U



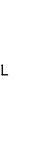


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
	L mm		3,1	
	US-No.		ET3	
HM D0132	FG	500 314 699 072	008	
HM D132F	FG	500 314 699 042	008	
HM D132U	FG	500 314 699 032	008	



Konisch, spitz | Tapered, Pointed "ET Series" | Cónica con punta

HM D0379

HM D379F
HM D379U



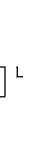


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
	L mm		3,5	4,2
	US-No.		7406	7408
HM D0379	FG	500 314 277 972	018	023
HM D379F	FG	500 314 277 942	018	023
HM D379U	FG	500 314 277 932	018	023



Ei | Egg | Huevo

Prophy-Clean | Prophy-Clean | Prophy-Clean

Besonders feste Polierer aus Edelkorund in einer Kunststoffbindung.

- grobe Körnung
- mittlere Körnung

- Entfernung von Zahnstein, Belägen und Verfärbungen
- Entfernung von Bracketkleberesten
- Entfernung von Zementüberschüssen
- Subgingivale Wurzelglättung

Empfohlene Drehzahl: 5.000 - 10.000 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 20.000 min⁻¹

Particularly robust polishers made of white corundum in a plastic bond.

- coarse grain
- medium grain

- Removal of tartar, plaque, and discolorations
- Removal of residues of bracket bonding
- Removal of excess cement
- Subgingival root smoothing

Recommended Speed: 5.000 - 10.000 rpm
Maximum Speed: 20.000 rpm

Pulidores especialmente firmes de corindón en aglomerante de plástico.

- graneado grueso
- graneado mediano

- Remoción del sarro, de placas y descoloraciones
- Remoción de residuos de pegamento para abrazaderas
- Remoción de los excesos de cemento
- Suavizamiento subgingival de la raíz

Revoluciones recomendadas: 5000 - 10.000 min⁻¹
Revoluciones máximas: 20.000 min⁻¹

PCL06

PCL01






Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
	L mm		9,0	9,0
PCL06	RA	633 204 172 537	023	
PCL01	RA	633 204 172 536		023



PCL07

PCL02






Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
	L mm		5,0	5,0
PCL07	RA	633 204 030 537	033	
PCL02	RA	633 204 030 536		033



PCL08

PCL03






Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
	L mm		7,5	7,5
PCL08	RA	633 204 249 537	023	
PCL03	RA	633 204 249 536		023



PCL09

PCL04






Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
	L mm		8,5	8,5
PCL09	RA	633 204 141 537	030	
PCL04	RA	633 204 141 536		030



PCL10

PCL05






Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.	5	5
	L mm		6,5	6,5
PCL10	RA	633 204 243 537	030	
PCL05	RA	633 204 243 536		030



Polierer | Polishers | Pulidores

9546P

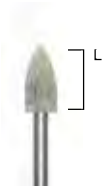


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	8,0
9546P	RA	633 204 288 544		055



Für die schonende Bracketkleberentfernung geeignet | Suitable for gentle removal of residual bracket glue | Apta para retirar los restos de adhesivo de la ortodoncia

9769M
9769F

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
			L mm	1,6	1,6
9769M	RA	803 204 000 523		100	
9769M	RA	803 204 000 523		140	
9769F	RA	803 204 000 503			100
9769F	RA	803 204 000 503			140



Für die schonende Bracketkleberentfernung, ohne die natürliche Zahnhartsubstanz zu verletzen.

Empfohlene Drehzahl: 5.000 - 7.000 min⁻¹
Maximale Drehzahl: 20.000 min⁻¹

For gentle residual bracket glue removal, without damaging the natural tooth structure.

Recommended Speed: 5.000 - 7.000 rpm
Maximum Speed: 20.000 rpm

Para una eliminación suave del adhesivo del bracket, sin dañar la sustancia dura natural del diente.

Revoluciones recomendadas: 5000 - 7 000 min⁻¹
Revoluciones máximas: 20 000 min⁻¹

9531P
9535P

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		100	10
			L mm	7,5	7,5
9531P	RA	635 204 297 544		030	
9535P	RA	635 204 297 544			030

9532P
9536P

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		100	10
			L mm	8,5	8,5
9532P	RA	635 204 030 544		060	
9536P	RA	635 204 030 544			060

9533P
9537P

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		100	10
			L mm	0,7	0,7
9533P	RA	635 204 307 544		100	
9537P	RA	635 204 307 544			100

9534P
9538P

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		100	10
			L mm	10,0	10,0
9534P	RA	635 204 243 544		055	
9538P	RA	635 204 243 544			055



Die Bracket Plus Polierer ermöglichen die Entfernung von Kleberesten sowie Klebepunkten von lichthärtendem Kleber und chemisch härtenden 2K-Klebstoffsystemen, ohne die Zahnschmelzoberfläche zu beschädigen. Dabei zeichnen sie sich durch eine besonders schonende, aber dennoch zügige Abtragung aus. Dank ihrer verschiedenen Formen sind sie für alle Stellen geeignet unabhängig davon, ob es sich um Molaren, Prämolaren oder Frontzähne handelt. Ein Vorteil ist die rückstandslose Reinigung und Politur mit demselben Instrument, wodurch ein Instrumentenwechsel überflüssig wird. Der Polierer kann ergänzend sowie alternativ zu unseren Hartmetall-Instrumenten angewendet werden.

Bracket Plus polishers enable the easy removal of adhesive residues and bonding spots from light-curing adhesives and chemically curing 2-component adhesive systems without damaging the enamel surface. They are characterized by a particularly gentle yet rapid removal. Since Bracket Plus polishers come in different shapes, they are suitable to be applied intraorally in all areas (molars, premolars, or anterior teeth). The biggest advantage of Bracket Plus polishers is the residue-free cleaning and polishing with only a single instrument thus eliminating the need to change. However, the polishers can still be used in addition (or as an alternative) to our carbide instruments.

Los pulidores Bracket Plus permiten eliminar fácilmente los restos de adhesivo y los puntos de unión de los adhesivos fotopolimerizables y los sistemas adhesivos de 2 componentes de curado químico sin dañar la superficie del esmalte. Se caracterizan por una eliminación especialmente suave, pero rápida. Dado que los pulidores Bracket Plus tienen diferentes formas, son adecuados para su aplicación intraoral en todas las zonas (molares, premolares o dientes anteriores). La mayor ventaja de los pulidores Bracket Plus es la limpieza y el pulido sin residuos con un solo instrumento, por lo que no es necesario cambiarlos. No obstante, los pulidores pueden seguir utilizándose como complemento (o alternativa) a nuestros instrumentos de carburo.



INSTRUMENTE FÜR DAS LABOR | INSTRUMENTS FOR THE LABORATORY | INSTRUMENTOS PARA EL LABORATORIO

Hartmetall | Tungsten Carbide | Carburo Tungsteno

Zum Ausarbeiten von Kunststoff, Gips und NEM-Legierungen

For finishing plastic, plaster and NEM alloys

Para trabajar plástico y aleaciones de metales no nobles


MX

Spezialverzahnung für NEM-Legierungen, grob | Special toothing for for non-precious metal alloys, coarse |
Dentado especial para aleaciones de metales no preciosos, grueso



GX

Kreuzverzahnht, standard | X-cut, medium |
Dentado cruzado, medio

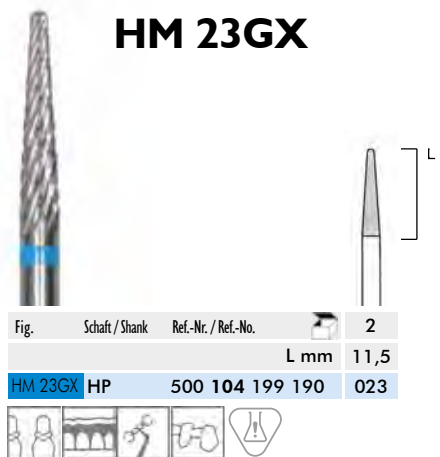

FX

Kreuzverzahnt, fein (Ref.-Nr. 140), roter Ring, für feines, diffiziles Ausarbeiten von harten Legierungen und Kunststoffen | X-cut, fine (Ref.-No. 140), red ring, for delicate and difficult trimming of hard alloys and acrylics | Dentado cruzado, fino (Ref.-No. 140), anillo rojo, para el desbaste fino y difícil sobre aleaciones duras y resinas

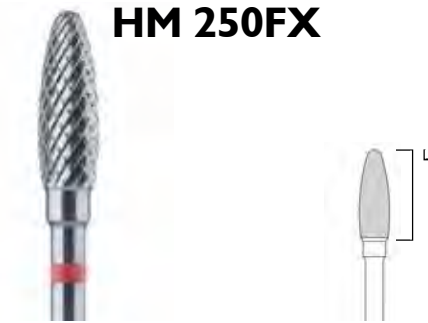
HM 250FX

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	12,0
HM 250FX	HP	500 104 275 140		040

**HM 251FX**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	14,5
HM 251FX	HP	500 104 275 140		060



Zum Bearbeiten von Kunststoff und Gips

For processing plastic and gypsum

Para trabajar plástico y yeso

FF

Facettenverzahnung mit Querhieb, fein | Faceted toothing with cross cut, fine | Filos bicelados con cortes transversales, fino

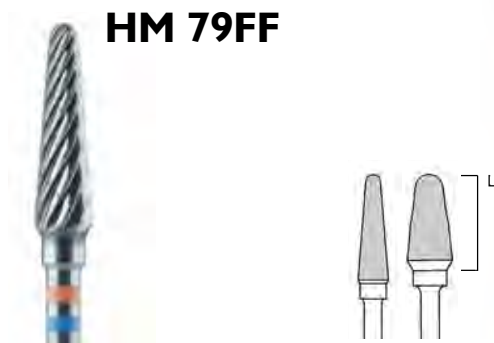
HM 79FF

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
			L mm	14,2	11,4
HM 79FF	HP	500 104 194 181		040	060

**HM 251FF**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
			L mm	9,3	14,7
HM 251FF	HP	500 104 274 181		040	060

**G**

Standardverzahnt, grob | Plain cut, coarse | Dentado simple

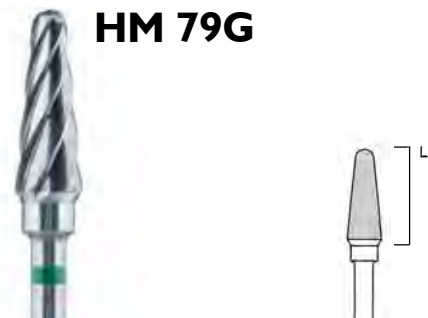
HM 79G

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	12,7
HM 79G	HP	500 104 194 215		045

**HM 251G**

Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	14,7
HM 251G	HP	500 104 274 215		060



Für die Bearbeitung von Tiefziehschienen, Kühlgrillen vermeiden das Zusetzen des Arbeitsteils

For the processing of deep-drawn rails, cooling grooves avoid clogging of the working part

Para la fabricación de férulas termoformadas, las ranuras refrigeradoras evitan la mezcla de la pieza de trabajo

QX

Spezialverzahnung für die Bearbeitung von thermoplastischem Kunststoff, blauer Ring, für die Ausarbeitung von Schienen | Special toothing for processing thermoplastic material, blue ring, for processing rails | Dentado especial para trabajar termoplásticos, anillo azul, para ferulización

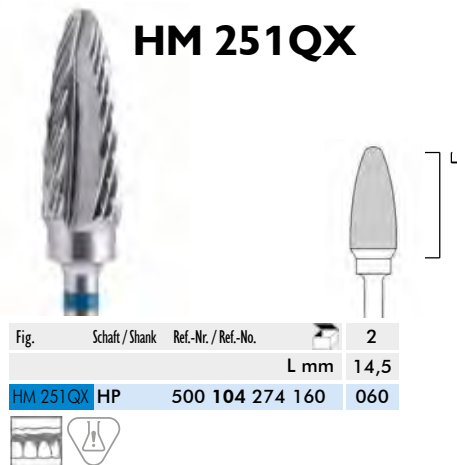


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	14,5
HM 251QX	HP	500 104 274 160		060

314RF stainless steel



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
314RF	HP L	330 105 622 444		042

Träger für Sandpapierstreifen | Mandrels for sand-paper strips | Mandriles para tiras de papel de lija

HM 515

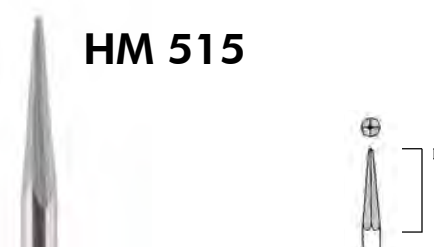


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2
			L mm	11,0
HM 515	HP	500 104 467 211		023



Labor-Stichfräser für Tiefziehfolien | Vacuum form acrylic cutter | Fresa acrílica moldeada al vacío

Diamantscheibe | Diamond Disc | Disco de diamante

940F

fine

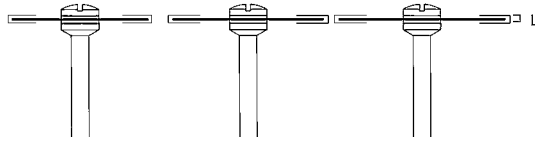


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1	1	1
			L mm	0,2	0,2	0,2
940F	HP	806 104 377 514		180	200	220
	unmounted	806 900 377 514		180	200	



Polierer | Polishers | Pulidores

Kunststoffpolierer für:

Kunststoffzähne, PMMA, Hybridkeramik, PEEK

- Besonders geeignet für die Politur von provisorischen Versorgung
- Gesamter Polierprozess in nur einem Schritt
- Erhöhter Druck für die Oberflächenvorbereitung
- Reduzierter Druck für die Hochglanzpolitur

Empfohlene Drehzahl: 3.000 - 10.000 min⁻¹Maximale Drehzahl: 20.000 min⁻¹

Polishers for acrylics for:

Acrylic Teeth, PMMA, Hybrid Ceramic, PEEK

- Particularly suitable for the polishing of provisional supplies
- Complete polishing process in just one step
- Elevated pressure for surface preparation
- Reduced pressure for high shine polishing

Recommended Speed: 3.000 - 10.000 rpm

Maximum Speed: 20.000 rpm

Pulidores para acrílico para:

Acrílico, PMMA, Cerámica híbrido, PEEK

- Particularmente apta para el pulido de tratamientos provisionales
- Proceso de pulido completo en solo un paso
- Presión aumentada para la preparación de la superficie
- Presión reducida para el pulido de brillo intenso

Revoluciones recomendadas: 3.000 - 10.000 min⁻¹Revoluciones máximas: 20.000 min⁻¹

9790



Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		2	2
			L mm	1,6	1,6
9790	HP	803 104 543 523		140	170



9791

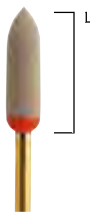


Fig.	Schaft / Shank	Ref.-Nr. / Ref.-No.		5
			L mm	16,0
9791	HP	803 104 284 523		050



Sortimente

Assortments | Freseros

Ob Präparation, Politur oder die gezielte Bearbeitung von CAD/CAM-Restaurationen, MEISINGER bietet perfekt aufeinander abgestimmte Systemlösungen in vorkonfigurierten Sortimenten an. Die sehr aufwändige Zusammenstellung von Instrumentensets entfällt somit für den Anwender. Aufgrund der engen Zusammenarbeit mit Praktikern und führenden Wissenschaftlern, die die Systeme mitentwickeln und erproben, sind diese optimal auf die alltäglichen Anforderungen abgestimmt.

Geht es um die optimale Politur von CAD/CAM-Restaurationen, führt kein Weg an MEISINGER vorbei. Die individuell zugeschnittenen Kits für jedes gängige Restaurationsmaterial sind dabei speziell auf die unterschiedlichen Anforderungen von z.B. Zirkonoxid, Lithium Disilikat, Hybridkeramiken oder zirkonverstärktem Lithium Disilikat abgestimmt. Für alle Materialien bietet MEISINGER sowohl ein Labor-Set für extraorales Arbeiten, als auch ein Praxis-Set für intraorales Arbeiten an. Die Kits bestehen aus ein- oder mehrstufigen Poliersystemen, welche ganz ohne Polierpaste angewendet werden können und im Ergebnis durch exzellenten Hochglanz und perfekte Anpassung an die natürliche Zahnoberfläche überzeugen. Neben den langlebigen Diamantpolierern enthalten viele Systeme weitere Instrumente zum Beschleifen von Kontaktpunkten oder -flächen. Im hochwertigen Bohrerständer werden die Instrumente gut organisiert und können nach der Anwendung bequem sterilisiert werden.

Whether preparation, polishing or targeted processing of CAD/CAM restorations, MEISINGER offers perfectly coordinated system solutions in pre-assembled product lines. The very time-consuming compilation of instrument sets is therefore no longer necessary for the user. Due to the close cooperation with practitioners and leading scientists, who co-develop and test the systems, they are optimally adapted to the everyday requirements.

When it comes to the optimum polishing of CAD/CAM restorations, MEISINGER is the first choice. The individually tailored kits for each common restoration material are specially adapted to the different requirements of e.g. zirconium oxide, lithium disilicate, hybrid ceramics or zirconium-reinforced lithium disilicate. For all materials MEISINGER offers both a laboratory set for extraoral work and a surgery set for intraoral work. The kits consist of single or multi-stage polishing systems, which can be used without polishing paste and which have proven to be good by having excellent high gloss and perfect adaptation to the natural tooth surface. In addition to the long-life diamond polishers, many systems contain other instruments for grinding contact points or contact surfaces. The instruments are well organised in the high-quality drill stand and can be conveniently sterilised after use.

Ya sea para la preparación, el pulido o un procesado concreto de restauraciones CAD/CAM, MEISINGER ofrece soluciones de sistemas perfectamente combinadas entre ellas en gamas prefabricadas. Así, la pesada tarea de tener que combinar conjuntos de instrumentos no recae sobre el usuario. Gracias a la estrecha colaboración con usuarios y con científicos líderes que colaboran en el desarrollo y el ensayo de los sistemas, son óptimos para los requisitos del trabajo diario.

Si se trata de un pulido óptimo para las restauraciones CAD/CAM, MEISINGER es una parada obligada. Los kits hechos a medida para todos los materiales de restauración habituales están especialmente adaptados para los diversos requisitos de, por ejemplo, el óxido de circonio, el disilicato de litio, las cerámicas híbridas o el disilicato de litio reforzado con circonio. Para todos los materiales, MEISINGER ofrece un set de laboratorio para el trabajo extraoral, así como un set para la práctica para el trabajo intraoral. Los kits se componen de sistemas de pulido de uno o varios escalones, que se pueden emplear sin pasta de diamante y cuyo resultado convence gracias a una intensidad de brillo excelente y a la adaptación perfecta a la superficie del diente natural. Además de las pulidoras de diamante de alta durabilidad, muchos sistemas contienen más instrumental para limar los puntos o las superficies de contacto. Los instrumentos se organizan a la perfección en freseros de alta calidad. Tras su uso, pueden esterilizarse cómodamente.

Zusätzlich erhältlich:
Additionally available:
Disponibles adicionalmente:



Politur & Bearbeitungs Kits für CEREC® Anwender	192-193	KM001 Art Oral Psychedelic Kit	206	ZIRKONVERSTÄRKTES LITHIUMSILIKAT ZIRCONIA REINFORCED LITHIUM SILICATE SILICATO DE LITIO REFORZADO CON CIRCONIO	219	DSP22 Primeprint™ Finishing & Polishing Kit	231		
	PRÄPARATION PREPARATION PREPARACIÓN		194-203		LUS05 LUSTER® Extraoral Twist Kit		207	2582 Temporary Solution Kit	231
	APP22 Anterior Precision Preparation Kit		194		LUS07 LUSTER® Extraoral Twist Kit Large		207	2638 Acrylic Adjustment Kit	232
PPP22 Anterior Precision Preparation Kit	194	JK03 LUSTER® CAD/CAM Lab Kit	208	HYBRIDKERAMIKEN / KOMPOSITE POLY CERAMICS / COMPOSITE CERÁMICAS HÍBRIDAS / COMPOSITE	220-225	VAL01 Flexible Acrylic Adjusting and Polishing Kit	232		
CLK01 Crown Lengthening Kit	195	SC01 CAD/CAM Finishing Kit	208		DTS01 DCS Thermo Splint Kit	233			
MC02 Onlay Preparation Kit DCO	196	DSU21 Dentsply Sirona Universal Extraoral Polishing & Shaping Kit	209		TITAN TITANIUM TITANIO	233-233			
2565 Occlusal Reduction Kit	196	SILIKAT KERAMIKEN SILICATE CERAMICS CERÁMICAS DE SILICATO	210-212	GC05 Twist Polisher Lab Kit for Hybrid Ceramics	221	1321 Titanium Power Kit	233		
2565T Tapered Occlusal Reduction Kit	197		LUS80 LUSTER® for Lithium Disilicate Adjusting and Polishing Kit	210	ACO23 Adaptive Composite Polishing Kit	221	ENDO ENDO ENDO	234	
2565M Micro-Occlusal Reduction Diamond Kit	197		LUS100 LUSTER® for Lithium Disilicate Intraoral Adjusting Kit	210	2663 Twist Polishing Kit	222	ENDO1 Comprehensive Access Kit	234	
SC02 CAD/CAM Prep Kit	198	GC01 Twist Polisher Kit for Silicate Ceramics	211	2571 Twist Finishing Kit	223	ENDO2 Endo Access Bur Kit	234		
BC02 Black Cobra Crown Preparation Kit	198	GC02 Intraoral Twist Polisher Kit for Silicate Ceramics	211	LUS66 LUSTER® Composite Finishing Kit	223	PERIIMPLANTITIS PERIIMPLANTITIS PERIIMPLANTITIS	235-236		
BB23 Bread & Butter Bur Block	199	DGS21 Dentsply Sirona Glass Ceramic Intraoral Polishing Kit	212	SF10 Super Flexible Discs (10 mm)	224	2575 Periimplantitis Kit	235		
2561 Athen Preparation Crown & Inlay Kit	199	ZIRKONOXID ZIRCONIA CIRCONIO	212-217	SF14 Super Flexible Discs (14 mm)	224	DEG00 Degranulation Kit	235		
2450 Athen Preparation Veneer Kit	200		LUS85 LUSTER® for Zirconia Adjusting and Polishing Kit	212	MC01 Ceramic Polishing Kit DCO	225	2580 The K Kit Implantoplasty	236	
2595 Opti-Shape Set	200		ZCS24 Zirconia Crown Seperators Kit	213	CBT01 Omni-Kit composite BIOTEAM Sud-Ouest	225	SONSTIGE MISCELLANEOUS OTRO	236-239	
2522 Preparation Set	201	CMC03 Zirconia Processing Kit	213	FELDSPATKERAMIKEN FELDSPATH CERAMICS CERÁMICAS DE FELDESPATO	226-228	BC04 Black CobraComplete Crown Removal Kit	236		
2413 Laminate Veneer Kit	201	LUS91 LUSTER® for Zirconia	214		LUS30 LUSTER® for Porcelain Intraoral Polishing Kit	226	2740 Black Cobra Cutter Set	237	
BBV23 450 AESTHETICS Veneer Burs	202	GC03 Twist Polisher Lab Kit for Zirconia	214		JK01 LUSTER® Intraoral Polishing Kit	226	2540 Plaque Set	237	
2531 Preparation Set	202	GC04 Intraoral Twist Polisher Kit for Zirconia	215	2609 CAD/CAM Polishing Kit	227	2530 Fuzzies Assortment Kit	238		
DB01 CAD/CAM Prep Kit Anterior	203	GC07 Adjusting and Polishing for Pre & Post Sintered Zirconia Extraoral Kit	215	1470 Ceramics Polishing Kit	227	JK05 Acryl / Resin Universal Kit	238		
DB02 CAD/CAM Prep Kit Posterior	203	2670 Zirkon Master Kit	216	2662 Intra Oral Porcelain Adjustment Kit	228	APA23 Acrylic Polishing and Adjusting Kit	239		
ALL CERAMICS ALL CERAMICS ALL CERAMICS	205-209	5901 Zirkon Diamond Kit	216	KUNSTSTOFFE ACRYLICS ACRÍLICO	228-233	2541 Pre-Surgery Teeth Polishing Kit	239		
CMC02 Final Touch & Polishing Kit	205	DSZ21 Dentsply Sirona Zirconia Intraoral Polishing Kit	217	PMMA1 PMMA/PEEK Adjusting and Polishing Kit	228				
ACE23 Adaptive Ceramic Polishing Kit	205	JK04 Zirconia Finishing Kit	217	PKA24 Peek Trimming & Adjusting Kit	229				
LUS06 LUSTER® Intraoral Twist Kit	206	DB03 Pre-Sintered Zirconia Kit	218	BC03 Black Cobra Crown Temporization Kit	229				
				2640 Implant Provisional and Zr Lab Shape & Polishing Kit	230				

Politur & Bearbeitungs Kits für CEREC® Anwender in Kooperation mit Dentsply Sirona

Polishing & Processing Kits for CEREC® Users in cooperation with Dentsply Sirona
Kits de pulido y mecanizado para usuarios CEREC® en colaboración con Dentsply Sirona



In Zusammenarbeit mit Dentsply Sirona präsentiert MEISINGER drei neue Politursets für den Intraoralen und Extraoralen Bereich. Die perfekt aufeinander abgestimmte Zusammenstellung der Instrumente erzeugt eine anatomisch korrekte Form sowie natürlichen Glanz auf den neuesten CAD/CAM Materialien, wie z. B. dem neuen CEREC MTL™ Zirconia und CEREC Tessera™ von Dentsply Sirona.

In cooperation with Dentsply Sirona, MEISINGER has developed a new line consisting of three different polishing kits for the intraoral and extraoral area. The composition and selection of the instruments are perfectly coordinated to create a natural shape and luster on the newest CAD/CAM materials, such as the new CEREC MTL™ Zirconia and CEREC Tessera™ from Dentsply Sirona.

En colaboración con Dentsply Sirona, MEISINGER presenta tres nuevos sets de pulido para el área intraoral y extraoral. La perfecta combinación de instrumentos crea una forma anatómicamente correcta y un brillo natural en los materiales CAD/CAM más modernos, como los nuevos CEREC MTL™ Zirconia y CEREC Tessera™ de Dentsply Sirona.

Dentsply Sirona Zirconia Intraoral Polishing Kit

- Enthalten sind die bewährten MEISINGER Twist Polisher für einen natürlichen Glanz
- Contains the MEISINGER Twist Polisher for a natural shine
- Se incluye el acreditado pulidor helicoidal de MEISINGER para un brillo natural
- Mit dem Diamanten Z850F gelingt eine schonende Anpassung von Rändern und Okklusallfläche
- The Z850F diamond is used to gently adjusting the margins and occlusal surface
- El diamante Z850F permite una suave adaptación de los márgenes y de la superficie oclusal
- Ideal für alle Zirkon Materialien, speziell für das Dentsply Sirona CEREC MTL™ Zirconia
- Ideal for all zirconia materials, especially for the Dentsply Sirona CEREC MTL™ Zirconia
- Ideal para todos los materiales de circonio, especialmente para el Dentsply Sirona CEREC MTL™ Zirconia



DSZ21

Stücklisten und weitere Infos finden Sie auf den folgenden Seiten.
You will find parts lists and further information on the following pages.
En las siguientes páginas encontrará listas de piezas y más información.

Dentsply Sirona Glass Ceramic Intraoral Polishing Kit

- Enthalten sind drei MEISINGER Twist Polisher für einen natürlichen Glanz mit geringer Hitzeentwicklung
- Included are three MEISINGER Twist Polishers for a natural shine with low heat development
- Se incluyen tres pulidores MEISINGER Twist para un brillo natural con poca producción de calor
- Präzise Formgebung anteriorer, lingualer oder posteriorer Okklusalfächen durch den Diamanten 833F
- Diamond 833F is ideal for precise shaping of anterior, lingual or posterior occlusal surfaces
- Conformación precisa de superficies oclusales anteriores, linguales o posteriores con el diamante 833F
- Geeignet für alle Glaskeramiken, wie z. B. CEREC Tessera™ von Dentsply Sirona
- Ideal for shaping and polishing all glass ceramics, such as Dentsply Sirona's CEREC Tessera™
- Apto para todas las cerámicas de vidrio, por ejemplo, CEREC Tessera™ de Dentsply Sirona



DSG21

Dentsply Sirona Universal Extraoral Polishing & Shaping Kit

- Enthält Twist Polisher, Diamantinstrumente und Hartmetallinstrumente für die Anwendung im Labor
- Contains twist polishers, diamond instruments and carbide instruments for laboratory use
- Contiene pulidores helicoidales, instrumentos de diamante e instrumentos de carburo tungsteno para su uso en el laboratorio
- Mit der ausgewählten Zusammenstellung der Instrumente werden höchste ästhetische Ansprüche erzielt
- The highest aesthetic standards are achieved with the selected composition of the instruments
- Con la composición seleccionada de los instrumentos, se alcanzan las más altas exigencias estéticas
- Hervorragend für alle CAD/CAM-Materialien, einschließlich CEREC MTL™ Zirkonia und CEREC Tessera™ von Dentsply Sirona
- Excellent for all CAD/CAM materials including CEREC MTL™ Zirconia and CEREC Tessera™ from Dentsply Sirona
- Excelente para todos los materiales CAD/CAM, incluyendo CEREC MTL™ Zirconia y CEREC Tessera™ de Dentsply Sirona.



DSU21

APP22 Anterior Precision Preparation Kit



Das Kit ist eine sorgfältige Zusammenstellung von Diamantfräsern für die präzise und sichere Präparation von Frontzähnen. Die konisch zulaufenden Diamantfräser mit runder Kante erzielen einen gleichmäßigen Präparationsrand. Zusätzlich kann der Zylinder mit belegter Stirn (839RF) für einen weiterführende Bearbeitung des Präparationsrandes eingesetzt werden, um so die Voraussetzung für eine langlebige Restauration zu schaffen.

The kit includes a carefully curated set of diamond burs designed for a precise and safe preparation for anterior restorations. The tapered, round-edge diamond burs allow for a convenient modified shoulder margin. Additionally, the margin refinement bur (839RF) facilitates a smooth margin for a successful and long-lasting restoration.

El kit incluye un conjunto cuidadosamente seleccionado de fresas de diamante diseñadas para una preparación precisa y segura de restauraciones anteriores. Las fresas de diamante cónicas y de filo redondo permiten un cómodo margen de hombro modificado. Además, la fresa de refinamiento del margen (839RF) facilita un margen liso para una restauración exitosa y duradera.

PPP22 Anterior Precision Preparation Kit



Das Kit ist eine sorgfältige Zusammenstellung von Diamantfräsern für die präzise und sichere Präparation von Zähnen im posterioren Bereich. Die konisch zulaufenden Diamantfräser mit runder Kante erzielen einen gleichmäßigen Präparationsrand. Zusätzlich kann der Zylinder mit belegter Stirn (839RF) für einen weiterführende Bearbeitung des Präparationsrandes eingesetzt werden, um so die Voraussetzung für eine langlebige Restauration zu schaffen.

The kit includes a carefully curated set of diamond burs designed for a precise and safe preparation for posterior restorations. The tapered, round-edge diamond burs allow for a convenient modified shoulder margin. Additionally, the margin refinement bur (839RF) facilitates a smooth margin for a successful and long-lasting restoration.

El kit incluye un conjunto cuidadosamente seleccionado de fresas de diamante diseñadas para una preparación precisa y segura de restauraciones posteriores. Las fresas de diamante cónicas y de filo redondo permiten un cómodo margen de hombro modificado. Además, la fresa de refinamiento del margen (839RF) facilita un margen liso para una restauración exitosa y duradera.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	833	FG	806 314 277 524	023	1
	833F	FG	806 314 277 514	023	1
	848W	FG	806 314 204 524	018	1
	848WF	FG	806 314 204 514	018	1
	847W	FG	806 314 204 524	020	1
	847WF	FG	806 314 204 514	020	1
	510W	FG	806 314 510 524	035	1
	510W	FG	806 314 510 524	045	1
	839RF	FG	806 314 839 514	012	1
	828TY	FG	L=2.0 mm	017	1
	828TR	FG	L=2.4 mm	017	1
	828TW	FG	L=1.0 mm	017	1


¹ 314=FG

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	897W	FG	806 314 203 524	016	1
	897WF	FG	806 314 203 514	016	1
	846W	FG	806 314 203 524	018	1
	846WF	FG	806 314 203 514	018	1
	897W	FG	806 314 203 524	020	1
	897WF	FG	806 314 203 514	020	1
	511W	FG	806 314 511 524	035	1
	511W	FG	806 314 511 524	040	1
	511W	FG	806 314 511 524	045	1
	839RF	FG	806 314 839 514	012	1
	828TY	FG	L=2.0 mm	017	1
	828TW	FG	L=1.0 mm	017	1

¹ 314=FG

CLK01 Crown Lengthening Kit

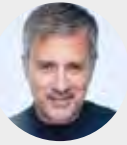by Stavros Pelekanos



New

Mit dem Crown Lengthening Kit lassen sich Kronenverlängerungen sicher und effizient durchführen. Das Kit enthält ideal aufeinander abgestimmte Diamanträser, die den Behandler bei der präzisen Formung der Krone unterstützen, während die Hartmetallbohrer eine exakte Tieferlegung der Präparationsstufe gewährleisten. Darüber hinaus sind alle im Kit enthaltenen Instrumente mit einem langen FG-XL-Schaft (25 mm) ausgestattet, der eine einfache Handhabung und präzise Führung ermöglicht.

The Crown Lengthening Kit allows for safe and efficient crown lengthening. The kit contains a perfectly matched selection of diamond cutters that support dentists in the precise shaping of crowns, while the carbide instruments ensure an exact lowering of the preparation level. All instruments in the kit have a long FG-XL-shank (size XL, 25 mm) which enables easy handling as well as precise instrument control.

El Crown Lengthening Kit permite un alargamiento de corona seguro y eficaz. El kit contiene una selección perfectamente adaptada de fresas de diamante que ayudan a los odontólogos a dar una forma precisa a las coronas, mientras que los instrumentos de carburo garantizan un rebaje exacto del nivel de preparación. Todos los instrumentos del kit tienen un mango FG largo (tamaño XL, 25 mm) que permite un fácil manejo, así como un control preciso del instrumento.



	Fig.	Schaft Shank¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	801G	FGXL	806 316 001 534	014	1
	801G	FGXL	806 316 001 534	018	1
	801G	FGXL	806 316 001 534	023	1
	801H	FGXL	806 316 001 544	029	1
	863L	FG	806 314 251 524	014	1
	863LF	FG	806 314 251 514	014	1
	830LF	FGXL	806 317 258 514	014	1
	HM207*	FGXL	500 316 150 001	012	1

¹ 314=FG, 316=FG XL



MC02 Onlay Preparation Kit DCO

by Marie Clément



Das in Zusammenarbeit mit Dr. Marie Clément entwickelte Onlay Preparation Kit DCO stellt von der Kariesentfernung bis zur Fertigstellung der Restauration die optimale Unterstützung dar. Die im Kit zusammengefassten Diamantinstrumente sowie ein Hartmetallbohrer wurden aufeinander abgestimmt, um Inlays, Onlays sowie Overlays präzise und effizient zu bearbeiten und dabei hochästhetische Ergebnisse zu erzielen.

The Onlay Preparation Kit, developed in cooperation with Dr. Marie Clément, offers optimal support beginning with caries removal and ending with the final restoration. The diamond instruments and the tungsten carbide bur included in the kit perfectly match to work precisely on inlays, onlays, as well as overlays and achieve remarkable aesthetic results.

El Onlay Preparation Kit, desarrollado en colaboración con la Dra. Marie Clément, ofrece un soporte óptimo que comienza con la eliminación de la caries y finaliza con la restauración definitiva. Los instrumentos de diamante y la fresa de carburo de tungsteno incluidos en el kit combinan a la perfección para trabajar con precisión sobre inlays, onlays y overlays y lograr resultados estéticos notables.

2565 Occlusal Reduction Kit

developed with Dr. Athas N. Kometas DMD, PA, Daytona Beach



Das patentierte Occlusal Reduction Kit (United States Patent Number 6,511,322) ermöglicht die Durchführung präziser okklusaler Reduktionen. Die vertikale Orientierung sorgt zudem für einen guten Zugang zur Okklusalfäche. Die Bohrer sind in 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,2 mm und 2,4 mm Tiefe verfügbar entsprechend der gewählten Restaurationsmaterialien. Ein Bohrer zur labialen Reduktion mit 1,0 mm Tiefe ist ebenfalls im Kit enthalten. Entwickelt von Athas N. Kometas, DMD.

The Patented Occlusal Reduction Burs (United States Patent number 6,511,322) allow for precise occlusal reductions to be achieved. The vertical orientation provides great access to the occlusal plane. The Occlusal Reduction Burs are available in 1.5 mm, 1.8 mm, 2.0 mm, 2.2 mm, and 2.4 mm depths corresponding to proper occlusal reduction for various restorative materials. A 1.0 mm bur is also available for labial reduction. Developed by Athas N. Kometas, DMD.

El kit patentado Occlusal Reduction Kit (patente estadounidense n.º 6 511 322) facilita la realización de reducciones oclusales. La orientación vertical logra un buen acceso a la superficie oclusal. Las fresas están disponibles en profundidades de 1,5 mm, 1,8 mm, 2,0 mm, 2,2 mm y 2,4 mm, en función del material de restauración correspondiente. Además, el kit contiene una fresa para la reducción labial de 1,0 mm de profundidad. Desarrollado por Athas N. Kometas, DMD.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	HM1SQL*	RA	500 204 697 002	018	1
	828TY	FG	n.a.	014	1
	856G	FG	806 314 194 534	018	1
	856F	FG	806 314 194 514	021	1
	889LC	FG	806 314 540 534	010	1
	830F	FG	806 314 257 514	021	1
	801G	FG	806 314 001 534	018	1
	845RF	FG	806 314 544 514	025	1
	845R	FG	806 314 544 524	025	1

¹ 314=FG, 204=RA



OKKUSALE REDUKTION | OCCLUSAL REDUCTION | REDUCCION OCLUSAL

Tiefe | Depth | Profundidad Anwendung | Indications | Indicación

	1,0 mm	Oberkiefer Frontzahnbereich, lingual und axial, Monolithisches, opakes Zirkonoxid Maxillary anterior lingual and axial, Monolithic opaque Zirconia Piezas frontales de la mandíbula superior, lingual y axial, circonio monolítico y opaco
	1,5 mm	Monolithisches, opakes Zirkonoxid Monolithic opaque Zirconia Circonio monolítico y opaco
	1,8 mm	Monolithisches, transluzentes Zirkonoxid Monolithic translucent Zirconia Circonio monolítico y translúcido
	2,0 mm	e.max, Geschichtete Keramik, Monolithische Keramik, Inzisale Reduktion e.max, Layered porcelain, Monolithic porcelain, Incisal reduction
	2,2 mm	e.max, cerámica laminada, cerámica monolítica, reducción incisal Geschichtete Keramik, 0,7 mm Kern + 1,5 mm Veneer Layered Porcelain, 0,7 mm Core + 1,5 mm Veneer
	2,4 mm	Cerámica laminada, 0,7 mm núcleo + 1,5 mm carilla Geschichtete Keramik, Inzisale Reduktion Layered porcelain, Incisal reduction Cerámica laminada, reducción incisal

	Fig.	Schaft Shank ¹	Länge Length	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	828G	FG	L=1.5 mm	017	1
	828O	FG	L=1.8 mm	017	1
	828Y	FG	L=2.0 mm	017	1
	828B	FG	L=2.2 mm	017	1
	828R	FG	L=2.4 mm	017	1
	828W	FG L	L=1.0 mm	017	1

¹ 314=FG, 315=FG L

* 828Y eignet sich hervorragend zum präzisen Erreichen der okklusalen Mindeststärke für CAD/CAM Restaurationen | 828Y is ideal for precisely achieving the occlusal minimum thickness for CAD/CAM restorations | 828Y está especialmente indicado para alcanzar de manera precisa el espesor mínimo oclusal para las restauraciones CAD/CAM

2565T Tapered Occlusal Reduction Kit



Die Tapered Occlusal Reduction Burs sind mit einem 8° Konus und einem einzigartigen Tiefenstop ausgestattet. Sie eignen sich hervorragend für die präzise Präparation von Veneers, Inlays und Onlays. Aufgrund der doppelten Farbkennzeichnung können die Tapered Occlusal Reduction Burs einfach von den Original Occlusal Reduction Burs unterschieden werden.

The Tapered Occlusal Reduction Diamonds have an 8° taper and a unique self-limiting angled collar. The Tapered Occlusal Reduction Diamonds are excellent for producing angled walls for inlay and onlay preparations, as well as standard occlusal depth reduction. The Tapered Occlusal Reduction Diamonds are available in 6 color-coded depths (1.0mm, 1.5mm, 1.8mm, 2.0mm, 2.2mm, and 2.4mm) and have two bands to signify the difference from the Original Occlusal Reduction Diamond Burs.

Las fresas Tapered Occlusal Reduction Burs cuentan con un cono de 8° y con un tope de profundidad único. Son ideales para la preparación precisa de carillas, incrustaciones y aposiciones. Gracias al marcado en dos colores, las fresas Tapered Occlusal Reduction Burs se distinguen a la perfección de las fresas Original Occlusal Reduction Burs.

2565M Micro-Occlusal Reduction Diamond Kit



Die Micro-Occlusal Reduction Diamonds sind die neueste Ergänzung der preisgekrönten Produktlinie der Occlusal Reduction Diamonds von MEISINGER. Der kleinere Durchmesser ermöglicht eine bessere Sicht auf das Arbeitsfeld und ermöglicht es dem Behandler, bei kleineren Zähnen leicht präzise Reduktionen zu erzielen. Dieses Kit enthält farbcodierte Mikro-Occlusal Diamonds mit einer Tiefe von 1,0 mm bis 2,4 mm, die bequem in einem autoklavierbaren Bohrerstand untergebracht sind.

The Micro-Occlusal Reduction Burs are MEISINGER's newest addition to the award-winning Occlusal Reduction Bur product line. The smaller diameter allows for increased visibility of the working site and enables practitioners to easily obtain precise reductions in smaller teeth. This kit features color-coded Micro-Occlusal Reduction burs ranging from depths of 1.0mm to 2.4mm, conveniently organized in an autoclavable bur block.

Los diamantes de reducción micro-oclusal son la última incorporación a la premiada línea de diamantes de reducción oclusal de MEISINGER. La reducción del diámetro ofrece una mejor visión del campo de trabajo y permite al profesional reducir con precisión en los dientes más pequeños. Este kit contiene diamantes micro-occlusales codificados por colores con una profundidad de 1,0 mm a 2,4 mm, colocados en un cómodo soporte de broca autoclavable.

OKKLUSALE REDUKTION | OCCLUSAL REDUCTION | REDUCCION OCLUSAL

Tiefe | Depth | Profundidad Anwendung | Indications | Indicación

□	1,0 mm	Oberkiefer Frontzahnbereich, lingual und axial, Monolithisches, opakes Zirkonoxid Maxillary anterior lingual and axial, Monolithic opaque Zirconia Piezas frontales de la mandíbula superior, lingual y axial, circonio monolítico y opaco
■	1,5 mm	Monolithisches, opakes Zirkonoxid Monolithic opaque Zirconia Circonio monolítico y opaco
■	1,8 mm	Monolithisches, transluzentes Zirkonoxid Monolithic translucent Zirconia Circonio monolítico y translúcido
■	2,0 mm	e.max, Geschichtete Keramik, Monolithische Keramik, Inzisale Reduktion e.max, Layered porcelain, Monolithic porcelain, Incisal reduction e.max, cerámica laminada, cerámica monolítica, reducción incisal
■	2,2 mm	Geschichtete Keramik, 0,7 mm Kern + 1,5 mm Veneer Layered Porcelain, 0,7 mm Core + 1,5 mm Veneer Cerámica laminada, 0,7 mm núcleo + 1,5 mm carilla
■	2,4 mm	Geschichtete Keramik, Inzisale Reduktion Layered porcelain, Incisal reduction Cerámica laminada, reducción incisal

OKKLUSALE REDUKTION | OCCLUSAL REDUCTION | REDUCCION OCLUSAL

Tiefe | Depth | Profundidad Anwendung | Indications | Indicación

□	1,0 mm	Oberkiefer Frontzahnbereich, lingual und axial, Monolithisches, opakes Zirkonoxid Maxillary anterior lingual and axial, Monolithic opaque Zirconia Piezas frontales de la mandíbula superior, lingual y axial, circonio monolítico y opaco
■	1,5 mm	Monolithisches, opakes Zirkonoxid Monolithic opaque Zirconia Circonio monolítico y opaco
■	1,8 mm	Monolithisches, transluzentes Zirkonoxid Monolithic translucent Zirconia Circonio monolítico y translúcido
■	2,0 mm	e.max, Geschichtete Keramik, Monolithische Keramik, Inzisale Reduktion e.max, Layered porcelain, Monolithic porcelain, Incisal reduction e.max, cerámica laminada, cerámica monolítica, reducción incisal
■	2,2 mm	Geschichtete Keramik, 0,7 mm Kern + 1,5 mm Veneer Layered Porcelain, 0,7 mm Core + 1,5 mm Veneer Cerámica laminada, 0,7 mm núcleo + 1,5 mm carilla
■	2,4 mm	Geschichtete Keramik, Inzisale Reduktion Layered porcelain, Incisal reduction Cerámica laminada, reducción incisal

	Fig.	Schaft Shank ¹	Länge Length	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	828TG	FG	L=1.5 mm	017	1
	828TO	FG	L=1.8 mm	017	1
	828TY	FG	L=2.0 mm	017	1
	828TB	FG	L=2.2 mm	017	1
	828TR	FG	L=2.4 mm	017	1
	828TW	FG	L=1.0 mm	017	1

¹ 314=FG

	Fig.	Schaft Shank ¹	Länge Length	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	828G	FG	L=1.5 mm	009	1
	828O	FG	L=1.8 mm	009	1
	828Y	FG	L=2.0 mm	009	1
	828B	FG	L=2.2 mm	009	1
	828R	FG	L=2.4 mm	009	1
	828W	FG	L=1.0 mm	009	1

¹ 314=FG

SC02 CAD/CAM Prep Kit



Das CAD/CAM Prep Kit enthält eine ideale Auswahl preisgekrönter Diamanten einschließlich aller notwendigen Formen für die Präparationen von Inlays, Onlays und Kronen. Im Set sind die MEISINGER Occlusal Reduction Burs mit der Tiefe 1,5 mm und 2 mm für einen planbaren okklusalen Abtrag enthalten.

The CAD/CAM Prep Kit contains an ideal selection of award-winning diamonds including all the necessary shapes for inlays, onlays and full coverage crowns. Included in the kit are MEISINGER's 1.5 mm and 2 mm depth limiting Occlusal Reduction Burs for predictable occlusal reductions.

El kit CAD/CAM Prep Kit contiene una selección de diamantes galardonados, así como todos los moldes necesarios para la preparación de carillas, incrustaciones y coronas. En el set se incluyen las fresas MEISINGER Occlusal Reduction Burs con profundidades de 1,5 mm y 2 mm para un desbaste oclusal planificable.

BC02 Black Cobra Crown Preparation Kit



Das MEISINGER BC02 Kit ist mit seinen Black Cobra Diamanten ein Mehrzweck Kit, dass sich für die schnelle und effiziente Präparation eignet. Zudem enthält es aufeinander abgestimmte Hartmetallfräsen zum Reduzieren und Glätten der Präparation.

MEISINGER's BC02 kit is a multi-purpose crown preparation kit that carries our exclusive Black Cobra diamonds for quick, efficient tooth reduction and includes matching trimming and finishing carbides to define and smooth the preparation.

El kit MEISINGER BC02, con sus diamantes Black Cobra, es un kit multiusos, apto para una preparación rápida y eficiente. Además contiene fresas de carburo tungsteno a juego para reducir y alisar la preparación.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	856F	FG	806 314 194 514	016	1
	856F	FG	806 314 194 514	018	1
	856F	FG	806 314 194 514	021	1
	856H	FG	806 314 194 544	016	1
	856H	FG	806 314 194 544	018	1
	801F	FG	806 314 001 514	018	1
	801F	FG	806 314 001 514	023	1
	845RH	FG	806 314 544 544	018	1
	845RH	FG	806 314 544 544	025	1
	845RF	FG	806 314 544 514	018	1
	828Y	FG	L=2.0mm	017	1
	833	FG	806 314 277 524	023	1
	833F	FG	806 314 277 514	023	1
	828G	FG	L=1.5mm	017	1
	850F	FG	806 314 198 514	012	1
	850H	FG	806 314 198 544	012	1
	850H	FG	806 314 198 544	021	1

¹ 314=FG


	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	B830	FG	809 314 257 544	023	1
	B847	FG	809 314 172 544	016	1
	B850	FG	809 314 198 544	016	1
	B850	FG	809 314 198 544	018	1
	B862	FG	809 314 249 544	014	1
	HM212LR	FG	500 314 585 072	016	1
	HM375R	FG	500 314 198 072	016	1
	HM375R	FG	500 314 198 072	018	1
	HM48L	FG	500 314 249 072	012	1
	B21R	FG	507 314 137 006	012	1

¹ 314=FG



BB23 Bread & Butter Bur Block

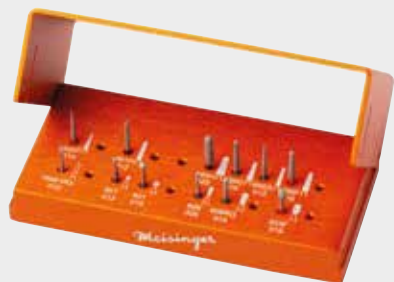by Dr. Brian Baliwas



Der von Dr. Brian Baliwas zusammengestellte Bread & Butter Bur Block ist mit seinen Diamantinstrumenten für den Einsatz in der zahnärztlichen Praxis konzipiert. Er umfasst Instrumente für die Entfernung von Kronen, für die direkte Entfernung von Restaurationen sowie für die Kronenpräparation.

This bur block by Dr Brian Baliwas is designed for use in the dental practice. It includes instruments for the removal of crowns, the direct removal of restorations and crown preparation.

Este bloque de fresas del Dr. Brian Baliwas está diseñado para su uso en la consulta dental. Incluye instrumentos para la extracción de coronas, la extracción directa de restauraciones y la preparación de coronas.

2561 Athen Preparation Crown & Inlay Kit

according to Stavros Pelekanos, DDS



Das Athen Preparation Crown & Inlay Kit bietet eine intelligente Zusammenstellung von Instrumenten zur optimalen Kronen- und Inlaypräparation. Für das Anlegen einer definierten Hohlkehle eignen sich die torpedoartigen Diamantinstrumente mit einem axial verlaufenden Führungsstift. Die Hohlkehle wird leicht supragingival zirkulär angelegt, während der polierte Führungsstift dabei ohne Druck um den Zahn geführt wird.

The Athens Preparation & Crown Inlay Kit provides an intelligent compilation of instruments for optimal crown and inlay preparation. The torpedo-like diamond instruments equipped with an axially extending locator pin are suited for the creation of a defined chamfer. The circular chamfer is easily prepared supragingivally, while the polished locator pin is guided around the tooth without pressure.

El Athen Preparation Crown & Inlay Kit ofrece una inteligente combinación de instrumentos para la preparación óptima de coronas e inlays. Para tallar el chánfer se recomienda usar los instrumentos diamantados en forma de torpedo con una espiga guía axial. El chánfer se talla primero circularmente un poco supragingival mientras que la espiga guía pulida recorre el diente sin ejercer presión.

	Fig.	Shaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	808	FG	806 314 233 524	009	1
	809RG	FG	806 314 237 534	014	1
	801	FG	806 314 001 524	012	1
	801	FG	806 314 001 524	018	1
	881H	FG	806 314 141 54	012	1
	833F	FG	806 314 277 514	018	1
	856F	FG	806 314 194 514	018	1
	856G	FG	806 314 194 534	012	1
	856G	FG	806 314 194 534	016	1
	858F	FG	806 314 165 514	014	1
	850H	FG	806 314 198 544	025	1
	21RX	FG	500 314 137 019	010	1

¹ 314=FG



	Fig.	Shaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	859	FG	806 314 166 524	010	1
	881G	FG	806 314 141 534	014	1
	869G	FG	806 314 290 534	012	1
	869G	FG	806 314 290 534	014	1
	833G	FG	806 314 277 534	023	1
	881F	FG	806 314 141 514	014	1
	869F	FG	806 314 290 514	012	1
	869F	FG	806 314 290 514	014	1
	833F	FG	806 314 277 514	023	1
	509F	FG	806 314 189 514	016	1
	811LG	FG	806 314 039 534	037	1
	847RG	FG	806 314 546 534	018	1
	847RF	FG	806 314 546 514	018	1
	847RF	FG	806 314 546 514	016	1

¹ 314=FG

2450 Athen Preparation Veneer Kit

according to Stavros Pelekanos, DDS



Das Athen Preparation Veneer Kit beinhaltet ein optimal abgestimmtes Sortiment für die Veneerapplikation im Frontzahnbereich. Die Tiefenmarkierer 834 unterstützen dabei die Schaffung einer definierten Schnitttiefe auf der Labialfläche der Zähne. Die Diamantinstrumente 852 dienen insbesondere zur schnellen Abtragung von Zahnhartsubstanz (labial) bis zur vorbestimmten Tiefe, wobei das Instrument auch palatinal / lingual eingesetzt werden kann.

The Athen Preparation Veneer Kit comprises an optimal selection for veneer application in the anterior region. At the same time, the 834 groove burs facilitate the preparation of a defined cutting depth on the labial surface of the teeth. The 852 diamond instruments are particularly conducive to the rapid removal of the hard dental tissue (labially) down to the predetermined depth, whereby the instrument can also be used palatally / lingually.

El Athen Preparation Veneer Kit para carillas incluye una gama de instrumentos perfectamente combinados entre sí para la colocación de carillas en la zona estética. Las fresas de carril 834 ayudan a crear una profundidad de carril definida en la superficie labial de los dientes. Los instrumentos diamantados 852 están diseñados para la reducción rápida de la sustancia dental (labial) hasta una profundidad determinada, aunque también se pueden usar en las regiones palatinas / linguales.

2595 Opti-Shape Set

according to Dr. Gabriele Diedrichs



Dieses Sortiment zur Präparation für Kronen, Teilkronen, Inlays und Onlays ist speziell für galvano-keramische, metallkeramische und Vollkeramik-Restaurationen konzipiert.

This assortment for preparation for crowns, partial crowns, inlays and onlays is especially designed for galvano-ceramic, metal-ceramic and all-ceramic restorations.

Este surtido para la preparación de coronas, coronas parciales, inlays y onlays ha sido desarrollado específicamente para restauraciones galvano cerámicas, de cerámica con metal y de cerámica sin metal.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	834^A	FG	806 314 552 524	016	1
	834^B	FG	806 314 552 524	021	1
	852	FG	806 314 199 524	012	1
	852F	FG	806 314 199 514	012	1
	864LF	FG	806 314 534 514	009	1
	898C	FG	806 314 164 504	014	1
	833C	FG	806 314 277 504	023	1
¹ 314=FG					
^A Präparationstiefe 0,3 mm / Cutting depth 0,3 mm / Profundidad del corte 0,3 mm					
^B Präparationstiefe 0,5 mm / Cutting depth 0,5 mm / Profundidad del corte 0,5 mm					

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	833	FG	806 314 277 524	023	1
	846KR	FG	806 314 584 524	023	1
	847KR	FG	806 314 546 524	016	1
	868	FG	806 314 289 524	014	1
	869	FG	806 314 290 524	014	1
	908	FG XL	806 316 072 524	036	1
	HM 212KR	FG	500 314 584 072	023	1
	HM 212LR	FG	500 314 184 072	016	1
	HM 244	FG	500 314 289 072	014	1
	HM 245	FG	500 314 289 072	014	1
	HM 379	FG	500 314 277 072	023	1
¹ 314=FG, 316=FG XL					



2522 Preparation Set

according to Prof. Dr. Karl-Peter Meschke



Einfach zu handhabender Präparationssatz für den definierten Materialabtrag im Bereich der Kronen- und Inlaypräparation.

An easy and user friendly preparation set for defined material removal for crowns and inlay preparation.

Fresero que simplifica la preparación con tallado definido en el campo de preparaciones de coronas e incrustaciones.

2413 Laminate Veneer Kit



Dieses Kit beinhaltet ein optimal abgestimmtes Sortiment für die Veneerapplikation im Frontzahnbereich. Die Tiefenmarkierer 834 unterstützen dabei die Schaffung einer definierten Präparationstiefe (0,3 bzw. 0,5 mm) auf der Labialfläche der Zähne. Die Diamantinstrumente 852 dienen insbesondere zur schnellen Abtragung von Zahnhartsubstanz (labial) bis zur vorbestimmten Tiefe, wobei das Instrument auch palatinal / lingual eingesetzt werden kann. Die Diamanten der Figur 820 beseitigen sicher überschüssige Substanz im interdentalen Bereich und die Diamanten 889L und 898C erlauben das effiziente Finieren des Randes, können zudem aber auch subgingival eingesetzt werden.

The two depth cutters 834-016 and 834-021 assist with creating pre defined depths on facial surfaces. The smaller creates a 0.3 mm depth on the central incisors and canines, while the larger head size creates a 0.5 mm depth on lateral incisors. The 852 series reduces the facial tooth structure to the pre determined depth. The 852 shaped diamond may also be used on the lingual wrap. The 820 shaped diamond removes interproximal flash and overhang. The 889L and 898 diamonds create an infinite margin and may assist subgingivally.

Las dos fresas 834-016 y 021 ayudan en la creación de ranuras predefinidas en las superficies labiales de los dientes. La más pequeña crea una ranura de 0,3 mm en profundidad, mientras que la fresa mayor crea una ranura de 0,5 mm en profundidad. Los instrumentos 852 reducen la sustancia labial del diente hasta la profundidad determinada. Este instrumento de diamante se puede utilizar también en las regiones palatinas y linguales. Los instrumentos 820 quitan material sobrante y el saliente del espacio interdental. Los instrumentos de diamante 889L y 898 acaban el margen (también subgingival).

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	809	FG	806 314 232 524	008	1
	838G	FG	806 314 138 534	012	1
	838F	FG	806 314 138 514	012	1
	838L	FG	806 314 140 524	012	1
	838LF	FG	806 314 140 514	012	1
	849G	FG	806 314 197 534	025	1
	855G	FG	806 314 196 534	016	1
	866	FG	806 314 287 524	009	1
	867F	FG	806 314 288 514	009	1
	868G	FG	806 314 289 534	012	1
	868G	FG	806 314 289 534	014	1
	868G	FG	806 314 289 534	016	1
	868F	FG	806 314 289 514	012	1
	868F	FG	806 314 289 514	014	1
	868F	FG	806 314 289 514	016	1
	899	FG	806 314 033 524	027	1
	HM 21RX*	FG	500 314 137 019	010	1

¹ 314=FG



	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	820C	FG	806 314 465 514	016	1
	833C	FG	806 314 277 504	023	1
	834^A	FG	806 314 552 524	016	1
	834^B	FG	806 314 552 524	021	1
	852	FG	806 314 199 524	016	1
	852	FG	806 314 199 524	018	1
	852G	FG	806 314 199 534	016	1
	852G	FG	806 314 199 534	018	1
	889LF	FG	806 314 540 514	009	1
	898C	FG	806 314 540 504	014	1

¹ 314=FG

^A Präparationstiefe 0,3 mm / Cutting depth 0,3 mm / Profundidad del corte 0,3 mm

^B Präparationstiefe 0,5 mm / Cutting depth 0,5 mm / Profundidad del corte 0,5 mm

BBV23 Veneer Kit

by Dr. Brian Baliwas



Das von Dr. Brian Baliwas zusammengestellte Veneer Kit ist eine reduzierte Zusammenstellung von Diamantbohrern, die eine effiziente Präparation der Zähne vor Anbringung von Veneers ermöglicht.

Curated by Dr Brian Baliwas, the Veneer Kit is a simplified but efficient set of diamond burs that facilitates optimal preparation of teeth prior to the application of veneers.

Elaborado por el Dr. Brian Baliwas, el Veneer Kit es un conjunto simplificado pero eficaz de fresas de diamante que facilita la preparación óptima de los dientes antes de la aplicación de las carillas.

2531 Preparation Set

according to Dr. Andres Baltzer



Dieses Präparations Set ermöglicht dem Zahnarzt erstmals, bei der Hohlkeh- und Stufenpräparation für Vollkeramik ohne spezielle Hilfsmittel eine optimale Materialstärke mit vordefiniertem Abtrag zu erreichen. Für das Anlegen einer definierten Hohlkehle eignen sich die torpedoartigen Diamantinstrumente mit einem axial verlaufenden Führungsstift. Die Hohlkehle wird leicht supragingival zirkular angelegt, während der polierte Führungsstift dabei ohne Druck rund um den Zahn geführt wird.

This preparation set enables the dentist, first of all, to achieve optimal material strength with predefined cutting during the chamfer and step preparation for all-ceramic without special aids. The torpedo-like diamond instruments with an axially extending locator pin are suitable for preparing a defined chamfer. The circular chamfer is easily prepared supragingivally, while the polished locator pin is guided around the tooth without pressure.

Este juego de preparación permite al dentista, por primera vez, conseguir un espesor del material óptimo con un desbaste predefinido en el tallado de chángers y de hombros para restauraciones de cerámica sin metal sin necesidad de instrumentos auxiliares especiales. Para tallar el chángfer se recomienda usar los instrumentos diamantados en forma de torpedo con una espiga guía axial. El chángfer se talla primero circularmente un poco supragingival mientras que la espiga guía pulida recorre el diente sin ejercer presión.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	907G	FG	806 314 067 534	041	1
	834^A	FG	806 314 552 524	016	1
	834^B	FG	806 314 552 524	021	1
	820F	FG	806 314 465 514	016	1
	881F	FG	806 314 141 514	016	1
	881C	FG	806 314 141 504	012	1

¹ 314=FG, 204=RA, 900=unmounted

^A Präparationstiefe 0,3 mm / Cutting depth 0,3 mm / Profundidad del corte 0,3 mm

^B Präparationstiefe 0,5 mm / Cutting depth 0,5 mm / Profundidad del corte 0,5 mm

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	508G	FG	806 314 508 534	016	1
	508G	FG	806 314 508 534	020	1
	508F	FG	806 314 508 514	016	1
	508F	FG	806 314 508 514	020	1
	801	FG	806 314 001 524	029	1
	830G	FG	806 314 257 534	023	1
	830F	FG	806 314 257 514	023	1
	837L	FG	806 314 111 524	012	1
	863	FG	806 314 250 524	016	1
	863F	FG	806 314 250 514	012	1
	878G	FG	806 314 298 534	016	1
	878F	FG	806 314 298 514	016	1
	909	FG	806 314 068 524	055	1
	661XF	FG	635 314 288 505	025	1

¹ 314=FG

DB01 CAD/CAM Prep Kit Anterior

according to Dr. Daniel Buttermann, DDS



Das MEISINGER CAD/CAM Prep Kit Anterior wurden in Zusammenarbeit mit Dr. Daniel Buttermann, DDS, FWCW entwickelt und eignet sich optimal für die Präparation von CAD/CAM Restaurationen im Frontzahnbereich. Für eine optimale Gestaltung des Präparationsrandes enthält das Kit aufeinander abgestimmte grobe und feine Diamantinstrumente. Dies optimiert Ihren Workflow und hilft Ihnen, so effizient und beständig wie möglich zu arbeiten. Für eine gleichmäßige Reduktion im Frontzahnbereich enthält das DB01 Kit Tiefenmarkierer und bietet so die optimale Basis für hochästhetische Restaurationen.

The MEISINGER CAD/CAM Prep Kit Anterior was developed in cooperation with Dr. Daniel Buttermann, DDS, FWCW and is ideally suited for the preparation of CAD/CAM restorations in the anterior region. For an optimal design of the preparation margin, the kit contains matched coarse and fine diamond instruments. This optimises your workflow and helps you to work as efficiently and consistently as possible. The DB01 Kit contains depth markers for even reduction in the anterior region, thus providing the optimum basis for highly esthetic restorations.

El MEISINGER CAD/CAM Prep Kit Anterior se desarrolló en colaboración con Dr. Daniel Buttermann, DDS, FWCW y es óptimo para la preparación de las restauraciones CAD/CAM en las piezas dentales frontales. El kit cuenta con instrumentos de diamante finos y gruesos combinados entre ellos para que el margen de preparación sea lo mejor posible. De este modo, optimizará su flujo de trabajo y trabajará con eficiencia y sostenibilidad máximas. Para una reducción uniforme de las piezas dentales frontales, el kit DB01 contiene marcadores de profundidad, y ofrece así una base óptima para restauraciones muy estéticas.

DB02 CAD/CAM Prep Kit Posterior

according to Dr. Daniel Buttermann, DDS



Das MEISINGER CAD/CAM Prep Kit Posterior wurden in Zusammenarbeit mit Dr. Daniel Buttermann, DDS, FWCW entwickelt und eignet sich optimal für die Präparation von CAD/CAM Restaurationen im Seitenzahnbereich. Für eine optimale Gestaltung des Präparationsrandes enthält das Kit aufeinander abgestimmte grobe und feine Diamantinstrumente. Dies optimiert Ihren Workflow und hilft Ihnen, so effizient und beständig wie möglich zu arbeiten. Das DB02 Kit enthält die patentierten MEISINGER „Occlusal Reduction Burs“, mit welchen eine definierte Reduktion der Okklusalfäche für Versorgungen aus Glaskeramik und Zirkonoxid realisiert werden kann. Mit den ausgewählten, längenreduzierten Instrumenten lassen sich selbst im posterioren Bereich ideale axiale Reduzierungen durchführen.

The MEISINGER CAD/CAM Prep Kit Posterior was developed in cooperation with Dr. Daniel Buttermann, DDS, FWCW and is ideally suited for the preparation of CAD/CAM restorations in the posterior region. For an optimal design of the preparation margin, the kit contains matched coarse and fine diamond instruments. This optimises your workflow and helps you to work as efficiently and consistently as possible. The DB02 Kit contains the patented MEISINGER „Occlusal Reduction Burs“, with which a defined reduction of the occlusal surface can be achieved for glass-ceramic and zirconium oxide restorations. With the selected, reduced-length instruments, ideal axial reductions can be achieved even in the posterior region.

El MEISINGER CAD/CAM Prep Kit Posterior se desarrolló en colaboración con Dr. Daniel Buttermann, DDS, FWCW y es óptimo para la preparación de las restauraciones CAD/CAM en las piezas dentales laterales. El kit cuenta con instrumentos de diamante finos y gruesos combinados entre ellos para que el margen de preparación sea lo mejor posible. De este modo, optimizará su flujo de trabajo y trabajará con eficiencia y sostenibilidad máximas. El kit DB02 contiene las fresas reducción oclusal patentadas de MEISINGER, con las que se puede conseguir una reducción definida de la superficie oclusal para tratamientos de vitrocerámica y óxido de circonio. Con los instrumentos seleccionados reducidos en longitud se pueden llevar a cabo reducciones axiales ideales incluso en la zona posterior.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	833G	FG	806 314 277 534	023	1
	834^A	FG	806 314 552 524	016	1
	834^B	FG	806 314 552 524	021	1
	850F	FG	806 314 198 514	012	1
	856F	FG	806 314 194 514	016	1
	856F	FG	806 314 194 514	018	1
	850H	FG	806 314 198 544	012	1
	856H	FG	806 314 194 544	016	1
	856H	FG	806 314 194 544	018	1

¹ 314=FG

^A Präparationstiefe 0,3 mm / Cutting depth 0,3 mm / Profundidad del corte 0,3 mm

^B Präparationstiefe 0,5 mm / Cutting depth 0,5 mm / Profundidad del corte 0,5 mm

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	849G	FG	806 314 197 534	012	1
	849F	FG	806 314 197 514	012	1
	849G	FG	806 314 197 534	016	1
	849F	FG	806 314 197 514	016	1
	849G	FG	806 314 197 534	018	1
	849F	FG	806 314 197 514	018	1
	845RH	FG	806 314 544 544	025	1
	845RF	FG	806 314 544 514	025	1
	833G	FG	806 314 277 534	023	1
	839	FG	806 314 150 524	012	1
	828TG	FG	-	017	1
	828TY	FG	-	017	1

¹ 314=FG

myplant

T W O



TWO PERFECT SOLUTIONS!



OKTAGON®



MEISINGER
IMPLANTS

Meisinger

ALL CERAMICS | ALL CERAMICS | ALL CERAMICS

CMC02 Final Touch & Polishing Kit

by Dr. Kurbad



Die Nutzung von modernen CAD/CAM-Materialien ermöglicht es, Restaurationen ohne zusätzlichen Brand zu finalisieren. Für CEREC®-Restaurationen bietet das Final Touch and Polishing Kit by Dr. Kurbad sorgfältig ausgewählte Instrumente, mit denen auf effiziente Weise höchstästhetische Ergebnisse erzielt werden können. Enthalten sind eine Diamantscheibe und ein Keramikschleifer für das Abtrennen und die Verblendung von Supportstrukturen sowie ein formgebender Diamant, mit dem das Material auf die folgende Bearbeitung vorbereitet werden kann. Für eine optimale Vorpulitur, Politur sowie das Hochglanz-Finish sorgt eine Kombination aus elastischen Polierern und unseren bewährten Twist-Polierern. Darüber hinaus sind im Kit zwei Ziegenhaarbürsten mit Lederschwabbel enthalten, mit denen unter der Verwendung einer geeigneten Polierpaste ein noch höherer Glanzgrad erzielt werden kann.

The use of modern CAD/CAM materials makes it possible to finalize restorations without additional firing. For CEREC® restorations, the Final Touch and Polishing Kit by Dr. Kurbad offers carefully selected instruments with which highly esthetic results can be achieved. It includes a diamond disk and a ceramic bur for separating support structures as well as a shaping diamond to prepare the material for subsequent processing. A combination of elastic polishers ensures optimum pre-polishing, polishing and a high-gloss finish. The kit also includes two goat hair brushes which can be used in combination with a suitable polishing paste to achieve an even higher gloss level.

El uso de modernos materiales CAD/CAM permite finalizar las restauraciones sin cociones adicionales. Para las restauraciones CEREC®, el Final Touch and Polishing Kit del Dr. Kurbad ofrece instrumentos cuidadosamente seleccionados con los que se pueden conseguir resultados muy estéticos. Incluye un disco de diamante y una fresa cerámica para separar las estructuras de soporte, así como un diamante moldeador para preparar el material para su posterior procesamiento. Una combinación de pulidores elásticos garantiza un prepulido, pulido y acabado de alto brillo óptimos. El kit también incluye dos cepillos de pelo de cabra que pueden utilizarse en combinación con una pasta de pulido adecuada para conseguir un nivel de brillo aún mayor.

ACE23 Adaptive Ceramic Polishing Kit



Das Kit beinhaltet Polierer, die sich durch ihre ausgefeilte Form auszeichnen, wodurch sie sich perfekt an die Konturen von tiefen okklusalen Strukturen anpassen. Die drei verschiedenen Polierstufen sorgen für einen natürlichen Glanz auf allen Keramikmaterialien.

The kit contains polishers that are characterized by their unique shape and therefore adapt easily to the contours of deep occlusal grooves. The three different polishing steps ensure a natural luster on all ceramic materials.

El kit contiene pulidores que se caracterizan por su forma única y, por lo tanto, se adaptan fácilmente a los contornos de los surcos oclusales profundos. Los tres pasos diferentes de pulido garantizan un brillo natural en todos los materiales cerámicos.

	Fig.	Shank Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	852	HP	806 104 199 524	023	1
	930DF*	HP	806 104 345 514	190	1
	9734G	HP	805 104 173 525	040	1
	9771M	HP	803 104 000 524	170	1
	9771F	HP	803 104 000 514	170	1
	9771C	HP	803 104 000 504	170	1
	9770M	HP	803 104 303 524	260	1
	9770F	HP	803 104 303 503	260	1
	9770C	HP	803 104 303 493	260	1
	130	HP	090 104 543 002	220	1
	140	HP	090 104 910 000	220	1

¹ 104 = HP *Artikel wird montiert auf einem Träger geliefert | Article comes mounted on an mandrel | El artículo se entrega montado en un soporte

	Fig.	Shank Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	9771G	RA	803 204 000 534	140	1
	9745G	RA	803 204 000 534	055	1
	9771M	RA	803 204 000 524	140	1
	9745M	RA	803 204 000 524	055	1
	9771F	RA	803 204 000 514	140	1
	9745F	RA	803 204 000 514	055	1

¹ 204 = RA

LUS06 LUSTER® Intraoral Twist Kit



THE DENTAL
ADVISOR

Das LUSTER® Intraoral Twist Kit wurde speziell für die intraorale Hochglanzpolitur aller Keramikrestorationen entwickelt. Die flexiblen Polierlamellen ermöglichen eine Anpassung an jede Oberflächenstruktur und erzeugen auch in schwer zugänglichen Bereichen wie der Okklusalfäche makellose Ergebnisse. Aufgrund des materialschonenden Designs bleibt die ursprüngliche Oberflächenstruktur der Restauration erhalten. Die vierteilige Abstufung der Diamantkörnung sorgt zudem für kurze Bearbeitungszeiten und äußerst hohe Standzeiten.

The LUSTER® Intraoral Twist Kit has been especially developed for intraoral high-gloss polishing of all ceramic restorations. The flexible polishing discs make it possible to adapt to any surface structure and also render flawless results in areas that are difficult to reach, such as occlusal surfaces. Due to designs that are gentle on materials, the original surface structure of the restoration is maintained. In addition, the grades of diamond grit separated into four parts provide for short processing times and extremely high levels of durability.

El LUSTER® Intraoral Twist Kit se ha concebido especialmente para el pulido brillante intraoral de todas las restauraciones cerámicas. Las láminas flexibles de pulido permiten la adaptación a cada estructura superficial y ofrecen resultados sin defectos también en áreas de difícil acceso como es la superficie oclusal del diente o masticatoria. Gracias a un diseño cuidadoso del material, la estructura superficial original de la restauración se puede conservar. La graduación cuádrupartida del grano de diamante garantiza además tiempos cortos de elaboración, combinados con una durabilidad extraordinariamente elevada.

KM001 Art Oral Psychedelic Kit

by Klaus Mütterthies



New

In Zusammenarbeit mit dem international renommierten Zahntechniker Klaus Mütterthies hat MEISINGER ein neues Instrumenten-Kit für das Labor auf den Weg gebracht. Das Psychedelic Kit bietet dem Anwender eine passgenaue Auswahl an Instrumenten für Zirkon und CAD/CAM-Restaurationen. Die im Set enthaltenen keramischen Schleifer dienen der Formgebung der Zahn Anatomie. Mit verschiedenförmigen Diamanten kann zudem die charakteristische Textur von natürlichen Zähnen reproduziert werden. Für die interdental Konturierung und das Abtrennen von Verbindern enthält das Set zudem die Diamantscheibe 915D. Die flexiblen Twist Polisher erzeugen Hochglanz auf Restaurationen, während die Ziegenhaarbürste mit Leder für ein perfektes Finish sorgt.

Developed in cooperation with the international renowned dental technician Klaus Mütterthies, MEISINGER has launched a new instrument kit for the laboratory. The Psychedelic Kit offers the user a precisely fitting selection of instruments for zirconia and CAD/CAM restorations. The ceramic abrasives included in the set are used to shape the tooth anatomy. Different shaped diamonds can also be used to reproduce the characteristic texture of natural teeth. The set also includes the 915D diamond disc for interdental contouring and cutting off connectors. The flexible twist polishers create a high gloss on restorations while the goat hair brush with leather ensures a perfect finish.

En colaboración con el técnico dental de renombre internacional Klaus Mütterthies, MEISINGER ha lanzado un nuevo kit de instrumentos para el laboratorio. El Kit Psychedelic ofrece al usuario una selección de instrumentos a medida para restauraciones de circonio y CAD/CAM. Los abrasivos cerámicos incluidos en el kit se utilizan para dar forma a la anatomía del diente. También se pueden utilizar diamantes de diferentes formas para reproducir la textura característica de los dientes naturales. El kit también incluye el disco de diamante 915D para el contorno interdental y el corte de conectores. Los pulidores helicoidales flexibles crean un alto brillo en las restauraciones, mientras que el cepillo de pelo de cabra con cuero proporciona un acabado perfecto.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	9771G	RA	803 204 000 534	140	1
	9771M	RA	803 204 000 524	140	1
	9771F	RA	803 204 000 514	140	1
	9771C	RA	803 204 000 504	140	1

¹ 204=RA



Verkaufsversion - US
Selling-version - US
Versión la venta - US

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	9770G	HP	803 104 303 533	260	1
	9770M	HP	803 104 303 524	260	1
	9770F	HP	803 104 303 503	260	1
	9771G	HP	803 104 000 534	170	1
	9771M	HP	803 104 000 524	170	1
	9771F	HP	803 104 000 514	170	1
	9771C	HP	803 104 000 504	170	1
	9617V*	-	658 900 372 525	220	1
	9736G	HP	805 104 042 525	150	1
	9734G	HP	805 104 173 525	040	1
	140	HP	090 104 910 000	220	1
	915D	HP	806 104 355 524	190	1
	882L	HP	806 104 143 524	018	1
	801	HP	806 104 001 524	033	1
	848	HP	806 104 173 524	016	1
	858	HP	806 104 165 524	014	1

¹ 104=HP *Artikel wird montiert auf einem Träger geliefert | Article comes mounted on an mandrel | El artículo se entrega montado en un soporte

LUS05 LUSTER® Extraoral Twist Kit



LUS07 LUSTER® Extraoral Twist Kit Large




Das LUSTER® Extraoral Twist Kit LUS05 und LUSTER® Extraoral Twist Kit Large LUS07 wurden speziell für die extraorale Hochglanzpolitur aller Keramikrestaurationen entwickelt. Die flexiblen Polierlamellen ermöglichen eine Anpassung an jede Oberflächenstruktur und erzeugen auch in schwer zugänglichen Bereichen wie der Okklusalfäche makellose Ergebnisse. Aufgrund des materialschonenden Designs bleibt die ursprüngliche Oberflächenstruktur der Restauration erhalten. Die vierteilige Abstufung der Diamantkörnung sorgt zudem für kurze Bearbeitungszeiten und äußerst hohe Standzeiten.

The Luster® Extraoral Twist Kit LUS05 and Luster® Extraoral Twist Kit Large LUS07 have been specially developed for extra-oral high gloss polishing of all ceramic restorations. The flexible polishing flaps allow adaptation to any surface structure and produce flawless results even in hard-to-reach areas such as the occlusal surface. Because of the material-friendly design, the original surface structure of the restoration is preserved. The four-part gradation of the diamond grit also ensures short machining times and extremely long tool service life.

El kit LUSTER® Extraoral Twist Kit LUS05 y el kit grande LUSTER® Extraoral Twist LUS07 han sido diseñados especialmente para el pulido extraoral de alto brillo de todas las restauraciones de cerámica. Las láminas pulidoras flexibles permiten adaptarse a cualquier estructura de superficie y ofrecen resultados impecables, incluso en zonas de difícil acceso, como la superficie oclusal. Gracias a un diseño cuidadoso del

material, la estructura superficial original de la restauración se puede conservar. La gradación en cuatro partes del grano de diamante también garantiza tiempos de mecanizado cortos y una durabilidad extraordinaria de las herramientas.

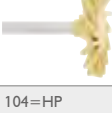	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	9771G	HP	803 104 000 534	170	1
	9771M	HP	803 104 000 524	170	1
	9771F	HP	803 104 000 514	170	1
	9771C	HP	803 104 000 504	170	1

¹ 104=HP

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	9771G	HP	803 104 000 534	260	1
	9771M	HP	803 104 000 524	260	1
	9771F	HP	803 104 000 514	260	1
	9771C	HP	803 104 000 504	260	1

¹ 104=HP



Verkaufsversion - US
Selling-version - US
Versión la venta - US



Verkaufsversion - US
Selling-version - US
Versión la venta - US

JK03 LUSTER® CAD/CAM Lab Kit

according to Dr. James Klim, DDS



„Die Kombination aus formgebenden Labordiamanten und Diamantpolierern wurde für ein effizientes und sicheres Finish Ihrer CAD/CAM-Restaurationen konzipiert. Ich nutze dieses Kit zur finalen Bearbeitung meiner CEREC® Restaurationen in meiner Praxis oder bei Hands-On Kursen.“, nach Dr. James Klim, DDS.

According to James Klim, DDS, "The combination of laboratory quality shaping diamonds and diamond polishers are designed for efficient and safe CAD/CAM ceramic finishing. This kit is what I use for finishing my CEREC® restorations in my clinical dental theater and hands-on teaching classes".

«La combinación de moldeadoras con diamantes de laboratorio y pulidoras de diamante se ha concebido para un acabado eficiente y seguro de las restauraciones CAD/CAM. Utilizo este kit para el acabado final de las restauraciones CEREC® en mi clínica, o para cursos prácticos», afirma el Dr. James Klim, DDS.

SC01 CAD/CAM Finishing Kit



Dieses universelle Bearbeitungs- und Finishing Kit wurde entwickelt, um ein breites Spektrum an Lösungen bereitzustellen. Das Kit bietet alle erforderlichen Instrumente für die Erzeugung von hervorragenden Ergebnissen sowohl bei Front- als auch Seitenzahnkronen. Das Kit enthält Diamanten und Schleifkörper zum Beschleifen von Kontaktpunkten, Konturieren der Zahnanatomie. Ausarbeitung der Okklusalfäche und Definition der Interdentalräume. Anschließend erfolgt die Politur mit den hochwertigen MEISINGER Diamantpolierern. Die flexiblen Twist Polisher erzeugen dabei Hochglanz auf Ihren Restaurationen und erhalten aufgrund des materialschonenden Designs die ursprüngliche Oberflächenstruktur.

This universal contouring and finishing kit was created to provide a wide range of solutions for today's ceramic restorations. The kit provides all of the necessary tools to produce excellent results for both anterior and posterior crowns. Included in the kit are diamonds and abrasives for sprue removal and contouring of line angles, including adjusting and contouring anatomy. Our newest Twist Polishers for Ceramics bring out the luster of your restorations entirely without paste while removing minimal material and safe enough to use over the margins without damage. The instruments are labeled and organized for easy reference in an anodized bur block.

Este kit universal de acabado y procesado se ha desarrollado para preparar un amplio espectro de soluciones. El kit incluye todos los instrumentos necesarios para conseguir unos resultados sobresalientes tanto en las coronas anteriores como posteriores. Incluye diamantes y abrasivos para pulir los puntos de contacto y contornear la anatomía dental. A continuación se procede al pulido con los pulidores de diamante MEISINGER de alta calidad. Los Twist Polisher flexibles proporcionan alto brillo a las restauraciones y recuperan la estructura superficial original gracias a su diseño respetuoso con el material.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	9770G	HP	803 104 303 533	260	1
	9770M	HP	803 104 303 524	260	1
	9771G	HP	803 104 000 534	170	1
	9771M	HP	803 104 000 524	170	1
	9771F	HP	803 104 000 514	170	1
	9771C	HP	803 104 000 504	170	1
	9736G	HP	805 104 042 525	150	1
	9735G	HP	805 104 107 525	050	1
	9734G	HP	805 104 173 525	040	1
	110	HP	100 104 543 000	190	1
	882L	HP	806 104 143 524	018	1
	850	HP	806 104 198 524	018	1
	S805	HP	807 104 010 524	018	1
	S936C	HP	807 104 394 504	200	1
	943DC	HP	806 104 361 504	100	1

¹ 104=HP

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	9770G	HP	803 104 303 533	260	1
	9770M	HP	803 104 303 524	260	1
	9770F	HP	803 104 303 503	260	1
	9771G	HP	803 104 000 534	170	1
	9771M	HP	803 104 000 524	170	1
	9771F	HP	803 104 000 514	170	1
	9771C	HP	803 104 000 504	170	1
	9736G	HP	805 104 042 525	150	1
	9613V*	HP	658 104 303 525	220	1
	9734G	HP	805 104 173 525	040	1
	882L	HP	806 104 143 524	018	1
	943DC	HP	806 104 361 504	100	1
	863	HP	806 104 250 524	016	1
	850	HP	806 104 198 524	018	1
	S805	HP	807 104 010 524	018	1
	S936C	HP	807 104 395 504	200	1

¹ 104=HP *Artikel wird montiert auf einem Träger geliefert | Article comes mounted on an mandrel | El artículo se entrega montado en un soporte

DSU21 Dentsply Sirona Universal Extraoral Polishing & Shaping Kit

Dentsply Sirona



In Zusammenarbeit mit Dentsply Sirona hat MEISINGER ein universelles extraorales Polier- und Bearbeitungskit entwickelt, um Zahnärzten und Zahntechnikern eine präzisere Arbeitsweise zu bieten, und das sich an ihre spezifischen Bedürfnisse anpasst. Enthalten sind die MEISINGER Twist Polierer, Diamanten und Hartmetallfräser zum Bearbeiten und Polieren verschiedener Restaurationen. Dieses Kit ist ideal für alle CAD/CAM-Materialien, einschließlich CEREC MTL™ Zirkonia und CEREC Tessera™ von Dentsply Sirona.

In conjunction with Dentsply Sirona, MEISINGER has created this universal extraoral polishing and shaping kit to provide dental professionals with a precision-enhanced experience that is adaptable to their specific procedural needs. Included are MEISINGER's best-selling twist polishers, diamonds, and lab carbides to shape and polish various restorations. This kit is ideal for all CAD/CAM materials, including Dentsply Sirona's CEREC MTL™ Zirconia and CEREC Tessera™.

En colaboración con Dentsply Sirona, MEISINGER ha diseñado un kit universal de pulido y mecanizado extraoral para ofrecer a los odontólogos y técnicos dentales una metodología más precisa y adaptada a sus necesidades específicas. Incluye pulidores MEISINGER helicoidales, diamantes y fresas de carburo de tungsteno para el mecanizado y el pulido de diversas restauraciones. Este kit es ideal para todos los materiales CAD/CAM, incluidos CEREC MTL™ Zirkonia y CEREC Tessera™ de Dentsply Sirona.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	9771G	HP	803 104 000 534	170	1
	9771F	HP	803 104 000 514	170	1
	9771M	HP	803 104 000 524	170	1
	9769F	HP	803 104 000 503	170	1
	9752G	HP	803 104 372 533	170	1
	DCA06	HP	803 104 373 524	170	1
	9617V*	HP	658 104 372 525	220	1
	9681P*	HP	330 104 603 391	220	1
	DCA12	HP	658 104 372 511	170	1
	DCA04	HP	803 104 373 514	040	1
	DCA10	HP	803 104 243 524	040	1
	9736G	HP	803 104 243 514	150	1
	850F	HP	805 104 042 525	025	1
	S936C	HP	806 104 198 514	200	1
	HM 488FX	HP	807 104 394 504	016	1
	HM 79EX	HP	500 104 184 140	040	1

¹ 104=HP *Artikel wird montiert auf einem Träger geliefert | Article comes mounted on an mandrel | El artículo se entrega montado en un soporte



SILIKATKERAMIKEN | SILICATE CERAMICS | CERÁMICAS DE SILICATO

LUS80 LUSTER® for Lithium Disilicate Adjusting and Polishing Kit



Dieses Kit enthält die speziell für Lithiumsilikat-Restaurationen entwickelten MEISINGER Polierer. Mit dem radförmigen Instrument (9736G) können beispielsweise Kontaktpunkte und -flächen beschliffen werden. Mit dem 2-Stufen Poliersystem kann ein erneuter Hochglanz erreicht werden.

This kit features the MEISINGER specially designed polishers for Lithium Silicate restorations. The 9736G wheel allows for adjustments, and the two-step polishing system will re-gaze the restoration.

Este kit incluye los pulidores diseñados especialmente por MEISINGER para las restauraciones de Silicato de litio. Con el instrumento en forma de rueda (9736G) se puede, por ejemplo, alisar los puntos y las superficies de contacto. El sistema de pulido de dos pasos da brillo a la restauración.



Verkaufsversion - US
Selling-version - US
Versión la venta - US

LUS100 LUSTER® for Lithium Disilicate Intraoral Adjusting Kit



Das Kit enthält diamantierte und in der Form optimierte Instrumente für das Bearbeiten von Lithiumsilikat Versorgungungen sowie ein 2-Stufen Lithiumsilikat Poliersystem zur oralen Politur, um ein Hochglanz-Ergebnis zu erreichen.

This kit contains specially formulated diamonds to make adjustments to Lithium Silicate as well as the two-step Lithium Silicate polishing system to re-gaze Lithium Silicate intraorally after the restoration has been placed.

El kit contiene instrumentos diamantados y con forma optimizada para de restauraciones Lithium Silicate, además de un sistema de pulido Lithium Silicate de dos pasos para el pulido oral y para conseguir un resultado de alto brillo.



Verkaufsversion - US
Selling-version - US
Versión la venta - US

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	9736G	HP	805 104 042 525	150	1
	DPO02	HP	803 104 243 522	040	1
	DPO03	HP	803 104 372 522	110	1
	DPO05	HP	803 104 243 512	040	1
	DPO06	HP	803 104 372 512	110	1

¹ 104=HP

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	Z0801	FG	806 314 001 324	010	1
	Z850F	FG	806 314 198 314	018	1
	Z833F	FG	806 314 277 314	023	1
	DPO02	RA	803 204 244 522	040	1
	DPO07	RA	803 204 030 592	060	1
	DPO05	RA	803 204 244 512	040	1
	DPO08	RA	803 204 030 512	060	1

¹ 204=RA, 314=FG

GC01 Twist Polisher Kit for Silicate Ceramics

according to Greg Campbell, DDS



Die MEISINGER Twist Polisher Kits for Silicate Ceramics enthalten die von Greg Campbell, DDS, empfohlenen Instrumente für die einfache und effiziente Bearbeitung von Silikat Keramiken. Das Labor-Set enthält einen keramischen Schleifer um Kontaktpunkte zu beschleifen, sowie einen langlebigen Sinterdiamanten für zusätzliche Definition der Okklusalfäche. Die flexiblen Twist Polisher erzeugen Hochglanz auf Ihren Silikatrestaurationen und erhalten aufgrund des materialschonenden Designs die ursprüngliche Oberflächenstruktur. Alle Instrumente erzeugen sowohl auf ungesinterter, als auch auf gesinterter Material bemerkenswerte Ergebnisse.

Developed in collaboration with Greg Campbell, DDS, the MEISINGER Twist Polisher Kit for Silicate Ceramics is designed to be simple and efficient. Included in the kit are the necessary tools to adjust and polish Silicate Ceramics including an abrasive and diamond for sprue removal and contouring anatomy and a sintered (layered) diamond S805-018 for enhancing occlusal anatomy. MEISINGER's new Twist Polishers for Ceramics bring out the luster of your restorations and safe enough to use over the margins without damage. This entire complement of tools can be used on pre-crystallized and crystallized restorations with remarkable results.

Los kits MEISINGER Twist Polisher for Silicate Ceramics contienen los instrumentos recomendados por el cirujano dental Greg Campbell, DDS, para el mecanizado sencillo y eficaz de la cerámica de silicato. El set para el laboratorio incluye un abrasivo cerámico para pulir los puntos de contacto, y un diamante sinterizado duradero para la definición adicional de la superficie oclusal. Los Twist Polisher flexibles proporcionan alto brillo a las restauraciones de silicato y recuperan la estructura superficial original gracias a su diseño respetuoso con el material. Todos los instrumentos ofrecen unos resultados sobresalientes tanto en material sin sinterizar como sinterizado.

GC02 Intraoral Twist Polisher Kit for Silicate Ceramics

according to Greg Campbell, DDS



Die MEISINGER Twist Polisher Kits for Silicate Ceramics enthalten die von Greg Campbell, DDS, empfohlenen Instrumente für die einfache und effiziente Bearbeitung von Silikat Keramiken. Das Praxis-Set bietet die perfekten Instrumente für ein intraorales Bearbeiten und Polieren der Silikatoberfläche. Die Diamantinstrumente ermöglichen ein sanftes Anpassen von Okklusalfächen und Kronenrändern. Mithilfe der hochwertigen Polierer erfolgt abschließend eine finale Hochglanzpolitur.

Developed in collaboration with Greg Campbell, DDS, the MEISINGER Twist Polisher Kit for Silicate Ceramics is designed to be simple and efficient. This kit provides the proper diamonds and polishers for adjusting and polishing Silicate Ceramics. The diamonds will gently adjust the occlusal surfaces and the margins in preparation for polishing. Two Polishing points and MEISINGER's Twist polishers are included for blending and polishing the margins, cusps, and occlusal surfaces.

Los kits MEISINGER Twist Polisher for Silicate Ceramics contienen los instrumentos recomendados por el cirujano dental Greg Campbell, DDS, para el mecanizado sencillo y eficaz de la cerámica de silicato. Este set para el consultorio ofrece los instrumentos perfectos para el procesamiento intraoral y el pulido de la superficie de silicato. Los instrumentos de diamante permiten ajustar cuidadosamente las superficies oclusales y de los márgenes de las coronas. Por último, el pulido final de alto brillo se hace con los pulidores de excelente calidad.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	S805	HP	807 104 010 524	018	1
	9735G	HP	805 104 107 525	050	1
	DPO03	HP	803 104 372 522	110	1
	9771M	HP	803 104 000 524	170	1
	DPO06	HP	803 104 372 512	110	1
	9771C	HP	803 104 000 504	170	1

¹ 104=HP

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	805F	FG	806 314 012 514	014	1
	862F	FG	803 314 249 514	010	1
	830F	FG	806 314 257 514	021	1
	DPO02	RA	803 204 244 522	040	1
	9771M	RA	803 204 000 524	140	1
	DPO05	RA	803 204 244 512	040	1
	9771C	RA	803 204 000 504	140	1

¹ 314=FG, 204=RA

DSG21 Dentsply Sirona Glass Ceramic Intraoral Polishing Kit

Dentsply Sirona



New

Dentsply Sirona und MEISINGER haben gemeinsam das intraorale Glaskeramik Kit entwickelt. Der enthaltene Diamant 833F ist ideal für die präzise Formgebung von anterioren, lingualen oder posterioren Okklusalfächen, während die enthaltenen Twist Polierer einen natürlichen Glanz bei minimaler Wärmeentwicklung erzeugen - ein großer Vorteil für die erfolgreiche Politur von Glaskeramiken. Dieses Kit ist eine hervorragende Lösung für die Bearbeitung und Politur von CEREC Tessera™ von Dentsply Sirona.

Dentsply Sirona and MEISINGER have collaborated to create the perfect glass ceramic intraoral polishing kit. The included football-shaped diamond bur is ideal for the precise shaping of anterior lingual or posterior occlusal surfaces, while the included three twist polishers produce a natural luster with minimal heat generation - a huge influence in successfully polishing glass ceramics. This kit is an excellent solution for shaping and polishing Dentsply Sirona's CEREC Tessera™.

Dentsply Sirona y MEISINGER han diseñado conjuntamente el kit intraoral de cerámica de vidrio. El diamante 833F incluido en el kit es ideal para dar forma precisa a las superficies oclusales anteriores, linguales o posteriores, mientras que los pulidores helicoidales proporcionan un brillo natural con una generación de calor mínima, lo cual favorece el éxito del pulido de las cerámicas de vidrio. Este kit es una solución excelente para el mecanizado y el pulido de CEREC Tessera™ de Dentsply Sirona.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	9771G	RA	803 204 000 534	140	1
	9771M	RA	803 204 000 524	140	1
	9771F	RA	803 204 000 514	140	1
	833F	FG	806 314 277 514	016	1

¹ 204=RA, 314=FG

ZIRKONOXID | ZIRCONIA | CIRCONIO

LUS85 LUSTER® for Zirconia Adjusting and Polishing Kit

BruxZir® is a registered trademark of Glidewell Laboratories



Das MEISINGER LUSTER® für Zirconia Poliersystem wurde speziell für den Einsatz auf geschichteten und monolithischen Zirkonoxid-Restaurationen entwickelt. Das System umfasst Diamantpolierer für extraorale Anwendung. Die Härte der Zirkon Materialien reicht von 850 MPa bis 1200 MPa. Ein Schlüssel zur Bearbeitung von Zirkonoxid ist ein schnelles Vorgehen mit minimaler Wärmeentwicklung. MEISINGER hat das LUSTER® Kit speziell für die extraorale Politur von Zirkonoxid entwickelt. Dadurch wird die Wärmeentwicklung minimiert und Mikrorisse vermieden. Das Kit enthält Vorpolierer und Hochglanzpolierer, die ohne Polierpaste genutzt werden können. Weitere Instrumente zum Beschleifen von Kontaktpunkten runden das System ab. Das zweistufige Poliersystem besticht durch einfache Handhabung und hochglänzende Resultate.

The MEISINGER LUSTER® for Zirconia has been specially developed for use on layered and monolithic Zirconium Oxide restorations. The hardness of Zirconia materials ranges from 850 MPa to 1200 MPa. One of the keys to adjusting and polishing these materials is to perform the tasks quickly and without creating excessive heat. MEISINGER has formulated these zirconia polishers to minimize heat buildup and thus minimize the possibilities of micro-fractures without excessive wear and tear of the polishing materials. The kit contains two-step polishers that can be used without polishing paste. Further instruments for adjusting and contouring are included.

El sistema de pulido MEISINGER LUSTER® for Zirconia se ha desarrollado especialmente para el uso en restauraciones de óxido de circonio, tanto en revestimientos como monolíticas. El sistema comprende pulidoras de diamante para aplicación extraoral. La dureza de los materiales de circonio va de 850 MPa a 1200 MPa. La clave para trabajar el óxido de circonio es un proceso rápido con una generación de calor mínima. MEISINGER ha desarrollado el LUSTER® Kit especialmente para el pulido extraoral del óxido de circonio. Gracias a él se minimiza la generación de calor y se evitan las microfisuras. El kit contiene prepulidoras y pulidoras de brillo intenso, que se pueden utilizar sin pasta de diamante. El sistema se completa con instrumental adicional para el limado de puntos de contacto. El sistema de pulido en dos escalones convence gracias a su fácil manejo y sus resultados de brillo intenso.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	9736H	HP	805 104 042 535	150	1
	Z652R	HP	655 104 199 526	035	1
	DCA04	HP	803 104 243 524	040	1
	DCA06	HP	803 104 373 524	170	1
	DCA10	HP	803 104 243 514	040	1
	DCA12	HP	803 104 373 514	170	1

¹ 104=HP



Verkaufsversion - US
Selling-version - US
Versión la venta - US

ZCS24 Zirconia Crown Separators Kit Intraoral Adjusting Kit



Das Kit beinhaltet die neuen Hochleistungs-Diamantscheiben und ist speziell für das Auftrennen von Zirkonkronen und Keramikrestorationen konzipiert. Je nach Indikation steht sowohl eine mittlere Körnung als auch eine grobe Körnung zur Auswahl. Aufgrund der unterschiedlichen Durchmesser der Scheiben kann die Tiefe des Schnittes im Vorfeld bestimmt werden und ermöglicht so ein kontrolliertes Arbeiten.

The kit contains the new high-performance diamond discs and is especially suitable for cutting zirconium crowns and ceramic restorations. Depending on the indication, both a medium grit and a coarse grit are available. Due to the different sizes, the depth of the cut can be determined in advance and enables controlled work.

El kit contiene los nuevos discos diamantados de alto rendimiento y está especialmente indicado para cortar coronas de circonio y restauraciones cerámicas. Dependiendo de la indicación, dispone de un grano medio y de un grano grueso. Gracias a los diferentes tamaños, la profundidad de corte puede determinarse de antemano y trabajo es controlado.

CMC03 Zirconia Processing Kit by Dr. Kurbad



Korrekturen an Zirkon werden normalerweise vor dem Sintern durchgeführt. Dabei ist das Material zu diesem Zeitpunkt sehr empfindlich, so dass es schnell zu unerwünschten Defekten kommen kann. Das Initial Zirconia Processing Kit by Dr. Kurbad enthält einen Hartmetallfräser sowie drei unterschiedlich geformte elastische Polierer, die sich optimal für die Bearbeitung des empfindlichen Materials eignen. Der kreuzverzahnte Hartmetallfräser kommt bei der Abtrennung von Supportstrukturen zum Einsatz, die dann mit einem Universalpolierer der Größe 050 eingeebnet werden können. Ein schlanker, konischer Polierer dient der Korrektur der Präparationsgrenze, um ausgefrante Ränder sowie unebene Bereiche zu glätten. Für die Bearbeitung der Interdentalbereiche enthält das Kit zudem eine flexible Polierscheibe, die sich passgenau an das Profil anlegt.

Modifications and corrections of zirconia are normally carried out before sintering. The brittleness of the material at this stage can easily lead to defects. The Initial Zirconia Processing Kit by Dr. Kurbad contains a carbide bur and three differently shaped elastic polishers which are ideal for processing the sensitive material. The cross-cut carbide bur is used to cut off support structures which can then be further smoothed with an universal polisher of size 050. A slim, conical polisher is used to correct the preparation margin in order to smooth frayed edges and uneven areas. The kit also contains a flexible polishing disk for processing interdental areas which precisely fits the profile.

Las modificaciones y correcciones del óxido de circonio se realizan normalmente antes de la sinterización. Es fácil que la fragilidad del material provoque defectos en esta fase. El Initial Zirconia Processing Kit del Dr. Kurbad contiene una fresa de carburo y tres pulidores elásticos de diferentes formas que resultan idóneos para procesar el material delicado. La fresa transversal de carburo se utiliza para cortar las estructuras de soporte que, a continuación, se pueden alisar con una pulidora universal de tamaño 050. Para corregir el margen de la preparación se utiliza un pulidor cónico delgado que alisa los bordes deshilachados y las zonas irregulares. El kit también contiene un disco de pulido flexible para procesar las zonas interdental que se ajusta con precisión al perfil.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	Z818	FG	806 314 140 526	050	1
	Z818	FG	806 314 041 324	060	1
	Z818	FG	806 314 041 324	080	1
	Z818G	FG	806 314 041 334	050	1
	Z818G	FG	806 314 041 334	060	1
	Z818G	FG	806 314 041 334	080	1

¹ 314=FG

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	HM23MF	HP	500 104 196 140	014	1
	9501V	HP	652 104 257 533	055	1
	9508V	HP	652 104 303 533	145	1
	9507V	HP	652 104 292 533	050	1

¹ 104=HP



LUS91 LUSTER® for Zirconia Intraoral Adjusting Kit



Das MEISINGER LUSTER® for Zirconia Poliersystem wurde speziell für den Einsatz auf geschichteten und monolithischen Zirkonoxid-Restaurationen entwickelt. Das System umfasst Diamantpolierer für intraorale Anwendung. Die Härte der Zirkon Materialien reicht von 850 MPa bis 1200 MPa. Ein Schlüssel zur Bearbeitung von Zirkonoxid ist ein schnelles Vorgehen mit minimaler Wärmeentwicklung. MEISINGER hat das LUSTER® Kit speziell für die intraorale Politur von Zirkonoxid entwickelt. Dadurch wird die Wärmeentwicklung minimiert und Mikrorisse vermieden. Das Kit enthält Vorpulierer und Hochglanzpolierer, die ohne Polierpaste genutzt werden können. Weitere Instrumente zum Beschleifen von Kontaktpunkten runden das System ab. Das zweistufige Poliersystem besticht durch einfache Handhabung und hochglänzende Resultate.

The MEISINGER LUSTER® for Zirconia has been specially developed for use on layered and monolithic Zirconium Oxide restorations. The hardness of Zirconia materials ranges from 850 MPa to 1200 MPa. One of the keys to adjusting and polishing these materials is to perform the tasks quickly and without creating excessive heat. MEISINGER has formulated these zirconia polishers to minimize heat buildup and thus minimize the possibilities of micro-fractures without excessive wear and tear of the polishing materials. The kit contains two-step polishers that can be used without polishing paste. Further instruments for adjusting and contouring are included.

El sistema de pulido MEISINGER LUSTER® for Zirconia se ha desarrollado especialmente para el uso en restauraciones de óxido de circonio, tanto en revestimientos como monolíticas. El sistema comprende pulidoras de diamante para aplicación intraoral. La dureza de los materiales de circonio va de 850 MPa a 1200 MPa. La clave para trabajar el óxido de circonio es un proceso rápido con una generación de calor mínima. MEISINGER ha desarrollado el LUSTER® Kit especialmente para el pulido intraoral del óxido de circonio. Gracias a él se minimiza la generación de calor y se evitan las microfisuras. El kit contiene prepulidoras y pulidoras de brillo intenso, que se pueden utilizar sin pasta de diamante. El sistema se completa con instrumental adicional para el limado de puntos de contacto. El sistema de pulido en dos escalones convence gracias a su fácil manejo y sus resultados de brillo intenso.

GC03 Twist Polisher Lab Kit for Zirconia according to Greg Campbell, DDS



Die MEISINGER Twist Polisher Kits for Zirconia Ceramics enthalten die von Greg Campbell, DDS, empfohlenen Instrumente für die einfache und effiziente Bearbeitung von Zirkonoxid. Das Labor-Set enthält einen keramischen Schleifer um Kontaktpunkte zu Beschleifen, sowie einen langlebigen Sinterdiamanten für zusätzliche Definition der Okklusalfäche. Die flexiblen Twist Polisher erzeugen Hochglanz auf Ihren Zirkonrestaurationen und erhalten aufgrund des materialschonenden Designs die ursprüngliche Oberflächenstruktur.

Developed in collaboration with Greg Campbell, DDS, the Twist Polisher Kit for Zirconia is designed to be simple and efficient. Included in the kit are only the necessary tools to adjust and polish Zirconia and aid in creating beautiful and healthy smiles. The abrasives and diamonds are perfect for sprue removal and contouring anatomy. A sintered (layered) diamond S807-018 is included for long service life for enhancing occlusal anatomy. MEISINGER's new Twist Polishers for Zirconia bring out the luster of the restoration while removing minimal material. These Twist polishers are safe enough to use over the margins without damage.

Los kits MEISINGER Twist Polisher for Zirconia Ceramics contienen los instrumentos recomendados por el cirujano dental Greg Campbell para el mecanizado sencillo y eficaz de la cerámica de óxido de circonio. El set para el laboratorio incluye un abrasivo cerámico para pulir los puntos de contacto, y un diamante sinterizado duradero para la definición adicional de la superficie oclusal. Los Twist Polisher flexibles proporcionan alto brillo a las restauraciones de circonio y recuperan la estructura superficial original gracias a su diseño respetuoso con el material.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	Z0801	FG	806 314 001 324	010	1
	Z0850	FG	806 314 198 324	018	1
	Z0833	FG	806 314 277 324	023	1
	DCA04	RA	803 204 244 524	040	1
	DCA13	RA	803 204 030 525	060	1
	DCA10	RA	803 204 244 514	040	1
	DCA14	RA	803 204 030 514	060	1

¹ 204=RA, 314=FG

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	S805	HP	807 104 010 524	018	1
	9735H	HP	805 104 107 535	050	1
	DCA06	HP	803 104 373 524	170	1
	9771G	HP	803 104 000 534	170	1
	DCA12	HP	803 104 373 514	170	1
	9771F	HP	803 104 000 514	170	1

¹ 104=HP



GC04 Intraoral Twist Polisher Kit for Zirconia

according to Greg Campbell, DDS



Die MEISINGER Twist Polisher Kits for Zirconia Ceramics enthalten die von Greg Campbell, DDS, empfohlenen Instrumente für die einfache und effiziente Bearbeitung von Zirkonoxid. Das Praxis-Set bietet die perfekten Instrumente für ein intraorales Bearbeiten und Polieren der Zirkonoberfläche. Die Diamantinstrumente ermöglichen ein sanftes Anpassen von Okklusalfächen und Kronenrändern. Mithilfe der hochwertigen Polierer erfolgt abschließend eine finale Hochglanzpolitur.

Developed in collaboration with Greg Campbell, DDS, the Twist Polisher Kit for Zirconia is designed to be simple and efficient. Included in the kit are only the necessary tools to adjust and polish Zirconia and aid in creating beautiful and healthy smiles. The Intraoral kit contains the perfect diamonds and polishers for the adjustment and polishing of Zirconia. The polishing points and Twist polishers polish and blend the restoration to produce the perfect luster.

Los kits MEISINGER Twist Polisher for Zirconia Ceramics contienen los instrumentos recomendados por el cirujano dental Greg Campbell para el mecanizado sencillo y eficaz de la cerámica de óxido de circonio. Este set para el consultorio ofrece los instrumentos perfectos para el procesamiento intraoral y el pulido de la superficie de circonio. Los instrumentos de diamante permiten ajustar cuidadosamente las superficies oclusales y de los márgenes de las coronas. Por último, el pulido final de alto brillo se hace con los pulidores de excelente calidad.

GC07 Adjusting and Polishing for Pre & Post Sintered Zirconia Extraoral Kit

according to Greg Campbell, DDS



Das Adjusting and Polishing Kit wurde in Zusammenarbeit mit Greg Campbell, DDS, entwickelt und dient der schnellen und vorhersagbaren Bearbeitung und Politur von Zirkonrestaurationen. Dr. Campbell hat dazu spezielle Instrumente zur Bearbeitung und Politur von sowohl ungesinterter als auch gesinterter Zirkon ausgewählt. Diese tragen dazu bei, ein schönes und gesundes Lachen zu schaffen. Das Kit enthält die notwendigen Instrumente zum Bearbeiten und Polieren sowohl vor als auch nach dem Sinterprozess.

Developed in collaboration with Greg Campbell, DDS, the Adjusting and Polishing for Pre & Post Sintered Zirconia Extraoral Kit for Zirconia is designed to be fast, repeatable, and predictable. Dr. Campbell has specifically selected instruments to adjust and polish pre-sintered Zirconia as well as post-sintered Zirconia and aid in creating beautiful and healthy smiles. The kit contains the necessary tools to adjust and polish both pre & post sintered Zirconia.

El kit Adjusting and Polishing Kit se ha desarrollado en colaboración con Greg Campbell, DDS, y sirve para trabajar y pulir de forma rápida y predecible las restauraciones de circonio. Para ello, el dr. Campbell ha seleccionado instrumentos especiales para el trabajo y el pulido de circonio sinterizado y sin sinterizar. Todo ello contribuye a crear una sonrisa bella y saludable. El kit contiene los instrumentos necesarios para trabajar y pulir, tanto antes como después del proceso de sinterización.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	805F	FG	806 314 012 514	014	1
	862F	FG	806 314 249 514	010	1
	830F	FG	806 314 257 514	021	1
	DCA04	RA	803 204 244 524	040	1
	9771G	RA	803 204 000 534	140	1
	DCA10	RA	803 204 244 514	040	1
	9771F	RA	803 204 000 514	140	1

¹ 314=FG, 204=RA

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	HM79EX	HP	500 104 194 141	040	1
	HM488FX	HP	500 104 184 140	016	1
	DCA02	HP	803 104 292 524	140	1
	DCA08	HP	803 104 292 514	140	1
	DCA04	HP	803 104 243 524	040	1
	DCA10	HP	803 104 243 514	040	1
	9771M	HP	803 104 000 524	170	1
	9771C*	HP	803 104 000 504	170	1
	9769F	HP	803 104 000 503	170	1
	110*	HP	100 104 543 000	190	1
	150	HP	080 104 045 000	220	1

¹ 104=HP

* Für gesinterter Zirkon | for Post-Sintered Zirconia | Para circonio sinterizado



2670 Zirkon Master Kit



Sortiment zur sicheren Bearbeitung von Zirkonoxid-Restaurationen. Dieser Hightech-Werkstoff lässt sich mit den neuen Zirkon-Schleifkörpern äußerst leicht und sehr präzise bearbeiten. Ein besserer Abtrag und ein geringerer Anpressdruck machen diese Schleifkörper zu einem idealen Instrument für die Gestaltung in der CAD/CAM-Technik. Die spezielle Zusammensetzung der Schleifer reduziert signifikant die Bildung von Mikrorissen selbst bei Trockenbearbeitung.

The Zirkon Master Kit for use on zirconium oxide restorations. These high-tech materials give pleasure to an ever growing popularity and allow the new zirconium abrasives to be used easily and precisely. Minimal grinding pressure makes this an ideal instrument for designing in CAD/CAM-technology with minimal heat buildup. The special composition of the grinders significantly reduces the formation of microcracks even during dry processing.

Fresero para restauraciones de óxido de circonio. Este material de alta técnica „hightech“ se hace cada vez más popular y es fácil para elaborar con nuestros abrasivos especiales para circonio. Son los instrumentos ideales para el diseño en la técnica CAD/CAM gracias al mejor tallado con menos presión de trabajo. La composición especial de las fresas reduce significativamente la formación de microfisuras, incluso en el tratamiento en seco.

5901 Zirkon Diamond Kit



Die Instrumente des Zirkon Diamond Kits wurden speziell für die Anforderungen der Bearbeitung empfindlicher Zirkondioxid-Oberflächen entwickelt. Verschiedene Körnungen und eine Vielzahl unterschiedlicher Formen bieten einen flexiblen und effizienten Einsatz bei unterschiedlichen Indikationen. Die Diamantkörner sind dabei so auf das Zirkondioxid abgestimmt, dass die empfindliche Materialoberfläche optimal abgetragen wird.

The instruments of the Zirkon Diamond Kit have been specifically developed for working on Zirconium Dioxide surfaces. Various grain sizes and a number of different shapes offer flexible and efficient use for different indications. The diamond grains are well adapted to adjust Zirconium Oxide Ceramics.

Los instrumentos del kit de diamantes de circonio se han desarrollado especialmente para los requisitos del procesamiento de superficies sensibles de dióxido de circonio. Los diferentes grados de grano y su gran variedad de formas permiten usarlo de forma flexible y eficiente en diversas indicaciones. Los granos de diamante están tan bien ajustados al dióxido de circonio, que la sensible superficie del material se desbasta de forma óptima.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	Z602	HP	655 104 001 526	040	1
	Z623	HP	655 104 043 526	060	1
	Z638	HP	655 104 110 526	025	1
	Z652R	HP	655 104 199 526	035	1
	Z667	HP	655 104 257 526	035	1
	Z722	HP	655 104 304 526	180	1
	Z732	HP	655 104 107 526	050	1
	Z736	HP	655 104 012 526	065	1

¹ 104=HP

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	Z0850	FG	806 314 198 324	018	2
	Z850F	FG	806 314 198 314	018	1
	Z0863	FG	806 314 250 324	012	2
	Z863F	FG	806 314 250 314	012	1
	Z0833	FG	806 314 277 324	023	2
	Z833F	FG	806 314 277 314	023	1
	Z801L	FG	806 314 697 324	014	2
	Z0801	FG	806 314 001 324	010	3
	Z838L	FG	806 314 140 526	014	3

¹ 314=FG

JK04 Zirconia Finishing Kit

according to Dr. James Klim, DDS



Das mit Dr. James Klim, DDS, entwickelte Zirconia Finishing Kit stellt eine Kombination aus verschiedenen Hartmetallfräsern, einem Schleifer, Sinterdiamanten und Polierern dar. Diese ausgewählten Instrumente sind optimal für die Bearbeitung von vorgesintertem Zirkonoxid geeignet und ermöglichen ein ideales Finishing von Zirkonoxid-Restaurationen. Alle Instrumente sind für den Einsatz im Labor geeignet und können im hochwertigen Bohrerständer praktisch verstaut werden.

The Zirconia Finishing Kit was developed by Dr. James Klim, DDS, and is a combination of tungsten carbide instruments, an abrasive, sintered diamonds and polishers. These selected instruments are ideal for pre-sintered zirconia and the finishing of zirconia restorations. All instruments are suitable for use in the laboratory and can be conveniently stored in a high quality bur block.

El kit Zirconia Finishing, desarrollado con el Dr. James Klim, DDS, crea una combinación de distintas fresas de carburo tungsteno, una lija, diamantes sinterizados y pulidoras. Esta selección de instrumentos es óptima para la manipulación del óxido de circonio presinterizado, y facilitan un acabado ideal para restauraciones de óxido de circonio. Todos los instrumentos son aptos para el uso en el laboratorio y se pueden organizar de forma práctica en freseros de alta calidad.

DSZ21 Dentsply Sirona Zirconia Intraoral Polishing Kit

Dentsply Sirona



New

MEISINGER hat mit Dentsply Sirona zusammen, ein intraorales Politur Kit für alle Zirkoniumdioxid-Restaurationen, wie z. B. das neue CEREC MTL™ Zirconia von Dentsply Sirona, verwirklicht. Dieses Kit enthält drei MEISINGER Twist Polierer, die bei der Fertigstellung einer intraoralen Restauration einen brillanten, natürlichen Glanz bei minimaler Wärmeentwicklung erzeugen. Der konische Diamantschleifer ist ideal für die Anpassung von Rändern und Okklusalfächen für eine korrekte Passform und Funktion der Restauration.

MEISINGER has partnered with Dentsply Sirona to create the perfect Intraoral Polishing Kit for all zirconia's, such as Dentsply Sirona's new CEREC MTL™ Zirconia. This kit includes three of MEISINGER's best-selling twist polishers to produce a brilliant, natural luster with minimal heat production when finishing an intraoral restoration. The tapered diamond bur is ideal for adjusting margins and occlusal surfaces for a proper restoration fit and function.

MEISINGER ha colaborado con Dentsply Sirona para crear un kit de pulido intraoral para todas las restauraciones de dióxido de circonio, como el nuevo CEREC MTL™ Zirconia de Dentsply Sirona. Este kit contiene tres pulidores helicoidales MEISINGER que producen un brillo natural y brillante con una generación de calor mínima durante el acabado de la restauración intraoral. El abrasivo diamantado cónico es ideal para adaptar los márgenes y las superficies oclusales de modo que la restauración se ajuste y funcione correctamente.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	HM489FX	HP	500 104 187 140	023	1
	HM78MF	HP	500 104 257 140	023	1
	S861	HP	807 104 245 524	016	1
	S862	HP	807 104 284 524	031	1
	253G	HP	030 104 045 005	250	1
	253M	HP	030 104 045 003	250	1
	9769F	HP	803 104 000 503	170	1
	9769M	HP	803 104 000 523	170	1
	Z652R*	HP	655 104 199 526	035	1
	9770G*	HP	803 104 303 533	260	1
	105*	HP	100 104 543 005	190	1
	9771G*	HP	803 104 000 534	260	1
	9771M*	HP	803 104 000 524	260	1

¹ 104=HP * for Post-Sintered Zirconia



	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	9771G	RA	803 204 000 534	140	1
	9771M	RA	803 204 000 524	140	1
	9769F	RA	803 204 000 514	140	1
	Z850F	FG	806 314 198 314	018	1

¹ 204=RA, 314=FG

DB03 Pre-Sintered Zirconia Kit

by Dr. Dan Buttermann, DDS



New

Das Pre-Sintered Zirconia Kit wurde in Zusammenarbeit mit Dr. Dan Buttermann, DDS, entwickelt und dient der Bearbeitung und Politur von ungesintertem Zirkon. Mit den enthaltenen Hartmetallinstrumenten lässt sich die Oberfläche optimal vorbereiten und bearbeiten, während das enthaltene 2-Stufen Diamantpoliersystem auf Zirkon ein perfektes Finish hinterlässt. Die bereits mehrfach ausgezeichneten MEISINGER Twist Polierer runden das Kit vollkommen ab. Mit dieser von Dr. Dan Buttermann, DDS, zusammengestellten Kombination stehen dem Anwender alle wichtigen Instrumente für die extra Orale Bearbeitung von Zirkon zu Verfügung.

The Pre-Sintered Zirconia Kit was developed in collaboration with Dr. Dan Buttermann, DDS, and is used for processing and polishing Pre-Sintered Zirconia. The included carbide instruments allow the surface to be optimally prepared and processed, while the included 2-step diamond impregnated polishing system leaves a perfect finish on zirconia. The MEISINGER Twist polishers, which have already won several awards, round off the kit perfectly. With this combination put together by Dr. Dan Buttermann, DDS, the user has all the important instruments for extra oral processing of zirconia.

El kit de zirconia presinterizada ha sido diseñado en colaboración con el Dr. Dan Buttermann, DDS, y se utiliza para procesar y pulir el circonio no sinterizado. Los instrumentos de carburo de tungsteno incluidos en el kit permiten una preparación y un acabado óptimo de la superficie, mientras que el sistema de pulido de diamante de dos etapas ofrece un perfecto acabado de la zirconia. Los pulidores helicoidales de Meisinger, que ya han sido premiados en varias ocasiones, completan el kit a la perfección. Esta combinación, elaborada por el Dr. Dan Buttermann, DDS, proporciona al usuario todos los instrumentos importantes para el mecanizado extraoral de la zirconia.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	HM79EX	HP	500 104 194 141	040	1
	HM488FX	HP	500 104 184 140	016	1
	9681P*	-	658 900 372 511	220	1
	9771F	HP	803 104 000 514	170	1
	9771M	HP	803 104 000 524	170	1
	DCA04	HP	803 104 243 524	040	1
	DCA10	HP	803 104 243 514	040	1
	9769F	HP	803 104 000 503	170	1

¹ 104=HP *Artikel wird montiert auf einem Träger geliefert | Article comes mounted on an mandrel | El artículo se entrega montado en un soporte



ZIRKONVERSTÄRKTES LITHIUMSILIKAT (ZLS) | ZIRCONIA REINFORCED LITHIUM SILICATE |

SILICATO DE LITIO REFORZADO CON CIRCONIO

LUS03 LUSTER® for Zirconium reinforced Lithium Silicate

Extraoral HP Laboratory Set



Das MEISINGER LUSTER® for Zirconium reinforced Lithiumsilikat-Poliersystem wurde speziell für die Anwendung auf zirkonverstärktem entwickelt. In diesem Set sind Vor- und Hochglanzpolierer enthalten, die in Form und Körnung optimal aufeinander abgestimmt sind. Das 2-Stufen-System kann einfach und ohne Polierpaste auf Kauflächen, Höcker und Fissuren eingesetzt werden und überzeugt im Ergebnis durch absoluten Hochglanz.

The MEISINGER LUSTER® for Zirconium reinforced lithium silicate polishing system was specially developed for use on zirconium reinforced lithium silicate. This set contains pre- and high-gloss polishers, which are optimally matched to each other in shape and grain. The 2-stage system can be used simply and without polishing paste on occlusal surfaces, cusps and fissures and demonstrates excellence with absolute high gloss.

El sistema de pulido de silicato de litio MEISINGER LUSTER® for Zirconium reinforced Lithium se ha desarrollado especialmente para la aplicación de silicato de litio reforzado con circonio. Este set contiene prepulidoras y pulidoras de brillo intenso totalmente a juego en forma y grado de grano. El sistema en dos etapas se puede usar fácilmente sin pasta de diamante sobre las superficies de masticación, cúspides y fisuras y su resultado convence gracias a la intensidad del brillo.

LUS04 LUSTER® for Zirconium reinforced Lithium Silicate

Intraoral Adjusting and Polishing Set



Das MEISINGER LUSTER® for Zirconium reinforced Lithiumsilikat-Poliersystem wurde speziell für die Anwendung auf zirkonverstärktem Lithiumsilikat entwickelt. In diesem Set sind Vor- und Hochglanzpolierer enthalten, die in Form und Körnung optimal aufeinander abgestimmt sind. Das 2-Stufen-System kann einfach und ohne Polierpaste auf Kauflächen, Höcker und Fissuren eingesetzt werden und überzeugt im Ergebnis durch absoluten Hochglanz.

The MEISINGER LUSTER® for Zirconium reinforced lithium silicate polishing system was specially developed for use on zirconium reinforced lithium silicate. This set contains pre- and high-gloss polishers, which are optimally matched to each other in shape and grain. The 2-stage system can be used simply and without polishing paste on occlusal surfaces, cusps and fissures and demonstrates excellence with absolute high gloss.

El sistema de pulido de silicato de litio MEISINGER LUSTER® for Zirconium reinforced Lithium se ha desarrollado especialmente para la aplicación de silicato de litio reforzado con circonio. Este set contiene prepulidoras y pulidoras de brillo intenso totalmente a juego en forma y grado de grano. El sistema en dos etapas se puede usar fácilmente sin pasta de diamante sobre las superficies de masticación, cúspides y fisuras y su resultado convence gracias a la intensidad del brillo.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	DCA03	HP	803 104 303 524	200	1
	DCA04	HP	803 104 243 524	040	1
	DCA06	HP	803 104 373 524	170	1
	9524V	-	653 900 114 524	023	1
	DCA09	HP	803 104 303 514	200	1
	DCA10	HP	803 104 243 514	040	1
	DCA12	HP	803 104 373 514	170	1
	9524P	-	653 900 114 514	023	1

¹ 104=HP; 900=unmounted

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	DCA15	RA	803 204 303 525	100	1
	DCA04	RA	803 204 244 524	040	1
	DCA13	RA	803 204 030 525	060	1
	DCA16	RA	803 204 303 514	100	1
	DCA10	RA	803 204 244 514	040	1
	DCA14	RA	803 204 030 514	060	1

¹ 204=RA

GBK23 Green and Brown Polishing Kit



Das Kit enthält Universalpolierer, die für eine Vielzahl von Materialien geeignet sind. Die verschiedenen Formen wie Becher, Spitze und Twist gewährleisten, dass jede Form effizient und ergonomisch poliert werden kann. Die enthaltenen Universalpolierer eignen sich für ein effizientes, dreistufiges Polieren von allen Acryl-, Amalgam-, Zement-, Komposit- und Goldlegierungen.

The kit features universal polishers that work great on a wide variety of materials. The cups, point and twist polisher shapes ensure that you can polish any surface area efficiently and ergonomically. Universal Polishers for simple three step polishing of all Acrylics, Amalgam, Cement, Composite, and Gold Alloys.

El kit incluye pulidores universales que funcionan muy bien en una amplia variedad de materiales. Los pulidores en forma de copa, punta y espiral permiten pulir cualquier superficie de forma eficaz y ergonómica. Pulidores universales para el pulido sencillo en tres pasos de todos los acrílicos, amalgamas, cementos, composites y aleaciones de oro.

CPP22 Comprehensive Precision Depth Control Kit



Das Comprehensive Precision Depth Control Kit enthält eine Reihe von Diamantinstrumenten, die für die präzise Tiefenmarkierung bei der Vorbereitung aller Arten von Restaurationen einschließlich Glaskeramik, Zirkoniumdioxid, Hybridkeramik, Veneers und mehr konzipiert sind:

- Diamantinstrumente für eine präzise Präparation für alle gängigen Restaurationsmaterialien
- 3-fach tiefenmarkierende Diamanten für Frontzahnkronen und Veneers
- 2-fach tiefenmarkierende Diamanten für Seitenzahnkronen

The kit features a series of diamond instruments that are designed for the precise depth cutting when preparing for all types of restorations, including glass ceramics, zirconia, hybrid ceramics, veneers, and more:

- Instruments designed for an accurate preparation for all restorative materials
- 3-tiered depth-controlled diamonds for anterior crowns and veneers
- 2-tiered depth-controlled diamonds for posterior crowns

El kit cuenta con una serie de instrumentos de diamante que están diseñados para el corte de profundidad precisa en la preparación de todo tipo de restauraciones, incluidos cerámica de vidrio, óxido de circonio, cerámica híbrida, carillas, y más:

- Instrumentos diseñados para una preparación precisa de todos los materiales de restauración
- Diamantes de profundidad controlada de 3 niveles para coronas anteriores y carillas
- Diamantes de 2 niveles de profundidad controlada para coronas posteriores

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	9517P	RA	652 204 543 513	140	1
	9517H	RA	652 204 543 503	140	1
	9981V	RA	658 204 243 513	30	1
	9981P	RA	658 204 243 512	30	1
	9981H	RA	658 204 243 503	30	1
	9980V	RA	658 204 030 513	060	1
	9980P	RA	658 204 030 512	060	1
	9980H	RA	658 204 030 503	060	1

¹ 204=RA

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	828TW	FG	n.a.	017	1
	828TG	FG	n.a.	017	1
	828TY	FG	n.a.	017	1
	828TR	FG	n.a.	017	1
	510W	FG	806 314 510 524	025	1
	510W	FG	806 314 510 524	030	1
	510W	FG	806 314 510 524	035	1
	510W	FG	806 314 510 524	045	1
	511W	FG	806 314 511 524	035	1
	511W	FG	806 314 511 524	040	1
	511W	FG	806 314 511 524	045	1
	839KF	FG	806 314 839 514	006	1
	839RF	FG	806 314 839 514	012	1
	839F	FG	806 314 839 514	014	1

¹ 314=FG

GC05 Twist Polisher Lab Kit for Hybrid Ceramics

according to Greg Campbell, DDS



Die MEISINGER Twist Polisher Kits for Hybrid Ceramics enthalten die von Greg Campbell, DDS, empfohlenen Instrumente für die einfache und effiziente Bearbeitung von Hybridkeramiken. Das Labor-Set enthält einen keramischen Schleifer um Kontaktpunkte zu Beschleifen, sowie einen langlebigen Sinterdiamanten für zusätzliche Definition der Okklusallfläche. Die speziell für Hybridkeramiken ausgelegten Polierer erzeugen in kürzester Zeit ein makelloses Hochglanz-Finish.

The Twist Polisher Kit for Hybrid Ceramics is simple and efficient and was developed in collaboration with Greg Campbell, DDS, specifically to adjust and polish Hybrid Ceramics. The Lab kit contains an abrasive and diamond for sprue removal and refining and defining all surfaces. The sintered diamond S805-018 provides long service life and is excellent for enhancing occlusal anatomy. Twist Polishers specifically designed for Poly Ceramics bring out the luster of your restorations. The 9787-145 high shine wheel was specially developed to enhance the facial surfaces with stunning luster.

Los kits MEISINGER Twist Polisher for Hybrid Ceramics contienen los instrumentos recomendados por Greg Campbell, DDS, para una manipulación sencilla y eficiente de las cerámicas híbridas. El conjunto de laboratorio contiene una lija cerámica para lijar puntos de contactos, así como un diamante sinterizado de alta durabilidad para una mayor definición de la superficie oclusal. Las pulidoras especiales para cerámicas híbridas crean un acabado de alto brillo inmaculado en muy poco tiempo.


ACO23 Adaptive Composite Polishing Kit



Das Kit wurde entwickelt, um allen gängigen Kompositmaterialien einen hohen und natürlichen Glanz zu verleihen. Das einzigartige Design der Polierer ermöglicht das Polieren jeder Oberfläche, einschließlich der tiefen Fissuren. Mit grober, mittlerer und feiner Körnung sorgt dieses Kit für ein schnelles und effizientes Polierverfahren. Es ist zur Verwendung auf allen Hybridkompositen, mikrogefüllten Komposit-Restaurierungsmaterialien und hochdichten Restaurierungsmaterialien vorgesehen.

The kit is designed to provide a high, natural luster on all composite materials. The unique polisher shape designs allow for the ergonomic polishing of any surface, including deep occlusal grooves. Featuring coarse medium and fine grits, this kit ensures a fast and efficient polishing procedure. The kit is intended for use with all hybrid composites, micro filled composite restoratives and high-density restorative materials.

El kit está diseñado para proporcionar un brillo intenso y natural en todos los materiales compuestos. Los exclusivos diseños de la forma del pulidor permiten el pulido ergonómico de cualquier superficie, incluidos los surcos oclusales profundos. Con granos gruesos, medios y finos, este kit garantiza un procedimiento de pulido rápido y eficaz. El kit está diseñado para su uso con todos los composites híbridos, materiales de restauración de composite microrrellenos y materiales de restauración de alta densidad.

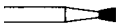	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	S805	HP	807 104 010 524	018	1
	9735G	HP	805 104 107 525	050	1
	9769M	HP	803 104 000 523	170	1
	9769F	HP	803 104 000 503	170	1
	9787	HP	803 104 372 523	145	1

¹ 104=HP

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	9769M	RA	803 204 000 523	100	1
	9769M	RA	803 204 000 523	140	1
	9765M	RA	803 204 000 523	055	1
	9769F	RA	803 204 000 503	100	1
	9769F	RA	803 204 000 503	140	1
	9765F	RA	803 204 000 503	055	1

¹ 204=RA

2663 Twist Polishing Kit



THE DENTAL
ADVISOR



Das Twist Polishing Kit wurde speziell für die einfache Hochglanzpolitur aller Kompositrestaurationen entwickelt. Die flexiblen Polierlamellen ermöglichen eine Anpassung an jede Oberflächenstruktur und erzeugen auch in schwer zugänglichen Bereichen wie der Okklusalfäche makellose Ergebnisse. Aufgrund des materialschonenden Designs bleibt die ursprüngliche Oberflächenstruktur der Restauration erhalten. Die zweiteilige Abstufung der Diamantkörnung sorgt zudem für kurze Bearbeitungszeiten und äußerst hohe Standzeiten.

The Twist Polishing Kit has been especially developed for simple high-gloss polishing of all composite restorations. The flexible polishing discs make it possible to adapt to any surface structure and also render flawless results in areas that are difficult to reach, such as occlusal surfaces. Due to designs that are gentle on materials, the original surface structure of the restoration is maintained. In addition, the grades of diamond grit separated into two parts provide for short processing times and extremely high levels of durability.

El Twist Polishing Kit se ha concebido especialmente para el pulido abrillantado simple de todas las restauraciones compuestas. Las láminas flexibles de pulido permiten la adaptación a cada estructura superficial y ofrecen resultados sin defectos también en áreas de difícil acceso como es la superficie oclusal del diente o masticatoria. Gracias a un diseño cuidadoso del material, la estructura superficial original de la restauración se puede conservar. La graduación bipartida del grano de diamante garantiza además tiempos cortos de elaboración, combinados con una durabilidad extraordinariamente elevada.

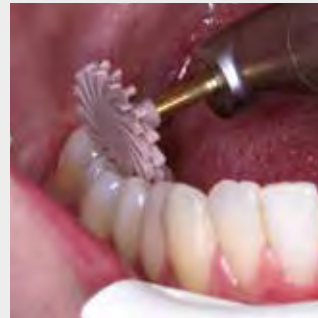
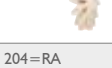


	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	9769M	RA	803 204 000 523	100	2
	9769M	RA	803 204 000 523	140	2
	9769F	RA	803 204 000 503	100	2
	9769F	RA	803 204 000 503	140	2

¹ 204=RA

Diamantpolierer:

Speziell für die einfache Politur aller Kompositrestaurationen auch in schwer zugänglichen Bereichen.

- Flexible Polierlamellen
- Speziell für Okklusalfächen
- Materialschonend
- Kurze Bearbeitungszeiten
- Äußerst hohe Standzeiten

Diamond polishing system:

Especially for simple polishing of all composite restorations, also in regions difficult to access.

- Flexible polishing lamellae
- Specifically for occlusal surfaces
- Material-saving
- Short processing times
- Extremely high service life

Sistema de pulido de diamante:

Especial para el pulido sencillo de todas las restauraciones de composite, también en las zonas de difícil acceso.

- Láminas pulidoras flexibles
- Especial para las superficies de oclusión
- Respetuosos con el material
- Tiempos de pulido cortos
- Durabilidad extremadamente alta



Verkaufsversion - US
Selling-version - US
Versión la venta - US

2571 Twist Finishing Kit



twist finishers

TF02 - Verkaufsversion - US
TF02 - Selling-version - US
TF02 - Versión la venta - US

Die MEISINGER Twist Finierer sorgen für ein perfektes Arbeitsergebnis und eine extrem glatte Oberfläche auf Kompositen und anderen Füllmaterialien. Durch die einzigartige Schneidengeometrie haben die Instrumente eine äußerst hohe Laufruhe und schneiden deutlich feiner als Standard Hartmetallfinierer. Die Instrumente sind zur deutlichen Unterscheidung mit Farbringen gekennzeichnet. Das Twist Finishing Kit vereint alle verfügbaren Instrumente in einem Sortiment, mit den gelaserten Bezeichnungen der Instrumente auf den Bur Block ist ein Sortieren der Twist Finierer problemlos möglich.

The MEISINGER Twist Finishers ensure a perfect working result and an extremely smooth surface on composites and other filling materials. Thanks to the unique cutting geometry, the instruments run extremely quietly and cut much finer than standard carbide finishers. The instruments are marked with colour rings for clear differentiation. The Twist Finishing Kit combines all available instruments in one assortment, with the lasered labels of the instruments on the Bur Block a sorting of the Twist Finisher is easily possible.

Los escariadores MEISINGER Twist Finierer procuran un resultado de trabajo perfecto y una superficie extremadamente lisa en los compositos y otros materiales de relleno. Gracias a su geometría de corte única, los instrumentos funcionan con mucha suavidad y hacen unos cortes mucho más precisos que los escariadores de carburo tungsteno estándar. Para distinguirlos con facilidad, los instrumentos están provistos de anillos de colores. El Twist Finishing Kit reúne todos los instrumentos disponibles en una gama, que gracias a los nombres inscritos con láser en los instrumentos del bloque de fresas permiten ordenar los instrumentos de acabado Twist fácilmente.

LUS66 LUSTER® Composite Finishing Kit



Das MEISINGER LUSTER® Composite-Finishing-Kit wurde speziell für die Bearbeitung und Politur moderner Hochleistungskomposite entwickelt. Die enthaltenen MEISINGER Twist Finishing Burs wurden speziell für Hybridwerkstoffe und Komposite der neuen Generation entwickelt. Das spiralförmige Design der Twist Finierer gewährleistet einen stetigen Kontakt des Instruments mit der Zahnoberfläche und erzeugt so ein extrem glattes Finish ohne Rillenbildung. Die zweistufigen Twist Polisher passen sich aufgrund ihrer Flexibilität an jede Oberflächenstruktur an und erhalten diese durch das materialschonende Design. So bietet das Kit das optimale Instrumentarium für die Bearbeitung von Kompositen.

MEISINGER LUSTER® Composite Finishing Kit was created to adjust and polish today's advanced composite materials. The contained MEISINGER Twist Finishing Burs were specifically designed for both hybrid and new generation composite materials. The helical design of the Twist Finishers ensures that the instrument stays in contact with the tooth surface to eliminate chatter, which results in an extremely smooth finish. The two-step polishing system allows for short processing times and long service life for the Twist Polishers, which are flexible enough to adapt to any surface structure while gentle enough to preserve that structure.

El MEISINGER LUSTER® Composite-Finishing-Kit se ha desarrollado especialmente para trabajar y pulir compositos de alto rendimiento modernos. Contiene las fresas MEISINGER Twist Finishing Burs, creadas especialmente para materiales híbridos y compositos de nueva generación. El diseño en espiral de los escariadores Twist garantizan un contacto constante del instrumento con la superficie del diente y crea un acabado extremadamente liso sin que se formen surcos. Los pulidores Twist, de dos etapas, se adaptan a todas las estructuras de superficie gracias a su flexibilidad y la conservan mediante su diseño suave. Así, el kit ofrece un instrumental óptimo para el trabajo sobre compositos.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	HM D0132	FG	500 314 699 072	008	1
	HM D132F	FG	500 314 699 042	008	1
	HM D132U	FG	500 314 699 032	008	1
	HM D0133	FG	500 314 159 072	010	1
	HM D133F	FG	500 314 159 042	010	1
	HM D133U	FG	500 314 159 032	010	1
	HM D0134	FG	500 314 164 072	014	1
	HM D134F	FG	500 314 164 042	014	1
	HM D134U	FG	500 314 164 032	014	1
	HM D0135	FG	500 314 166 072	014	1
	HM D135F	FG	500 314 166 042	014	1
	HM D135U	FG	500 314 166 032	014	1
	HM D0379	FG	500 314 277 972	023	1
	HM D379F	FG	500 314 277 942	023	1
	HM D379U	FG	500 314 277 932	023	1

¹ 314=FG



	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	HM D0132	FG	500 314 699 072	008	1
	HM D0133	FG	500 314 159 072	010	1
	HM D0134	FG	500 314 164 072	014	1
	HM D0135	FG	500 314 166 072	014	1
	HM D0379	FG	500 314 277 972	023	1
	9769M	RA	803 204 000 523	100	1
	9769M	RA	803 204 000 523	140	1
	9769F	RA	803 204 000 503	100	1
	9769F	RA	803 204 000 503	140	1

¹ 204=RA, 314=FG



SF10 Super Flexible Discs (10 mm)



Flexible Polierscheiben für die Bearbeitung von Kompositen, Keramiken und Metallen. Dieses Set enthält jeweils 25 Polierscheiben in vier unterschiedlichen Körnungen im Ø 10 mm sowie einen Träger.

Flexible polishing discs for processing composites, ceramics and metals. This set contains 25 polishing discs of four different grits in Ø 10 mm and a carrier.

Discos pulidores flexibles para trabajar composite, cerámica y metal. Este set contiene 25 discos pulidores en los cuatro grados de granodiferentes con un Ø de 10 mm y un mandril.

SF14 Super Flexible Discs (14 mm)



Flexible Polierscheiben für die Bearbeitung von Kompositen, Keramiken und Metallen. Dieses Set enthält jeweils 25 Polierscheiben in vier unterschiedlichen Körnungen im Ø 14 mm sowie einen Träger.

Flexible polishing discs for processing composites, ceramics and metals. This set contains 25 polishing discs of four different grits in Ø 14 mm and a carrier.

Discos pulidores flexibles para trabajar composite, cerámica y metal. Este set contiene 25 discos pulidores en los cuatro grados de granodiferentes con un Ø de 14 mm y un mandril

	Körnung Grain	Fig	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	grob coarse	SF1010	-	620 900 371 531	100	25
	mittel medium	SF1020	-	620 900 371 521	100	25
	fein fine	SF1030	-	620 900 371 511	100	25
	super fein super-fine	SF1040	-	620 900 371 501	100	25
	-	SF1RF	RA	330 204 608 000	000	1

¹ 204=RA, 900=unmounted



	Körnung Grain	Fig	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	grob coarse	SF1410	-	620 900 371 531	140	25
	mittel medium	SF1420	-	620 900 371 521	140	25
	fein fine	SF1430	-	620 900 371 511	140	25
	super fein super-fine	SF1440	-	620 900 371 501	140	25
	-	SF1RF	RA	330 204 608 000	000	1

¹ 204=RA, 900=unmounted



MC01 Ceramic Polishing Kit DCO

by Marie Clément



Das Ceramic Polishing Kit DCO bietet dem Behandler eine abgestimmte Auswahl an Instrumenten, um höchstesthetische Ergebnisse bei Keramikrestorationen zu erzielen. Die von Dr. Marie Clément entwickelte Kombination aus Diamantinstrumenten und Polierern sowie einem Hartmetallinstrument ermöglicht eine effiziente Restauration mit perfektem Glanz. Die Diamantinstrumente unterstützen bei der Ausbesserung, während das Hartmetallinstrument eine einfache Entfernung von Kleberesten ermöglicht. Das Highlight des Sets sind die vier Twist-Polierer, die sich dank flexibler Polierlamellen jeder Oberflächenstruktur perfekt anpassen und auch in schwer zugänglichen Bereichen wie der Okklusallfläche makellose Ergebnisse erzielen.

The Ceramic Polishing Kit DCO offers a smart selection of instruments for dentists to achieve outstanding aesthetic results for ceramic restorations. The combination of diamond instruments, polishers and a tungsten carbide instrument developed by Dr. Marie Clément enables efficient restorations with a perfect gloss. The diamond instruments assist with corrections, while the tungsten carbide instrument ensures easy removal of adhesive residues. The highlight of the set is a selection of four twist polishers which adapt perfectly to any surface structure thanks to flexible polishing lamellae and achieve flawless results even on the occlusal surface.

El Ceramic Polishing Kit DCO ofrece una selección de los mejores instrumentos para que los odontólogos consigan unos resultados estéticos excepcionales en las restauraciones cerámicas. La combinación de instrumentos diamantados, pulidores y un instrumento de carburo de tungsteno desarrollado por la Dra. Marie Clément permite realizar restauraciones eficaces con un brillo perfecto. Los instrumentos de diamante ayudan en las correcciones, mientras que el instrumento de carburo de tungsteno garantiza una fácil eliminación de los restos de adhesivo. Lo más destacado del juego es una selección de cuatro pulidores helicoidales que se adaptan perfectamente a cualquier estructura de superficie gracias a las láminas de pulido flexibles y consiguen resultados impecables incluso en la superficie oclusal.

CBT01 Omni-Kit composite BIOTEAM

Sud-Ouest



Das Omni-Kit composite BIOTEAM Sud-Ouest ist ein praktisches Universal-Kit für die Bearbeitung von Kompositen. Es bietet dem Behandler eine Auswahl flexibler Polierscheiben, mit denen Komposite konturiert, geglättet und poliert werden können. Zwei Diamantinstrumente ermöglichen darüber hinaus einen sanften Abtrag. Abgerundet wird das Kit durch die MEISINGER Twist Polisher, die sich dank ihrer flexiblen Polierlamellen an jede Oberflächenstruktur anpassen.

The Omni-Kit composite BIOTEAM Sud-Ouest is a versatile and convenient universal kit for working with composites. It offers practitioners a selection of flexible polishing discs which can be used to contour, smooth, and polish composites. Two additional diamond instruments allow for gentle material removal. The kit is completed with Twist Polishers by MEISINGER, which easily adapt to any intraoral surface structure thanks to their flexible polishing lamellae.

El Omni-Kit composite BIOTEAM Sud-Ouest es un kit universal versátil y práctico para trabajar con composites. Ofrece a los profesionales una selección de discos de pulido flexibles que pueden utilizarse para contornear, alisar y pulir composites. Dos instrumentos diamantados adicionales permiten una eliminación suave del material. El kit se completa con los Twist Polishers de MEISINGER, que se adaptan fácilmente a cualquier estructura de superficie intraoral gracias a sus láminas de pulido flexibles.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	830F	FG	806 314 257 514	023	1
	830G	FG	806 314 257 534	023	1
	HM48L*	FG	500 314 249 072	012	1
	9771G	RA	803 204 000 534	140	1
	9771M	RA	803 204 000 524	140	1
	9771F	RA	803 204 000 514	140	1
	9771C	RA	803 204 000 504	140	1

¹ 314=FG, 204=RA



	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	833F	FG	806 314 277 514	016	1
	863F	FG	806 314 250 524	014	1
	SF1RF	FG	330 204 608 000	0	1
	SF1410*	-	620 900 371 531	140	100
	9769M	RA	803 204 000 523	140	1
	9769F	RA	803 204 000 503	140	1

¹ 314=FG, 204=RA *Artikel wird unmontiert geliefert | Article comes unassembled | El artículo se suministra desmontado

FELDSPATKERAMIKEN | FELDSPATH CERAMICS | CERÁMICAS DE FELDESPATO

LUS30 LUSTER® for Porcelain Intraoral Polishing Kit



Das LUSTER® Intraoral Porcelain Polishing Kit wurde speziell für die Politur von Feldspatkeramik entwickelt. Die Instrumente dieses Systems sind in verschiedenen Körnungen von grob bis extra fein erhältlich und ermöglichen eine schnelle und systematische Bearbeitung aller Feldspatkeramiken. Dieses dreistufige Poliersystem liefert nach sehr kurzer Bearbeitungszeit Hochglanzergebnisse. Die Verwendung von Polierpaste ist nicht erforderlich.

The LUSTER® Intraoral Porcelain Polishing Kit is specially developed for the polishing of porcelain ceramics. The instruments of this system are available in different grits, from coarse to extra fine, and allow rapid and systematic processing of all porcelain ceramics. This three-step polishing system produces high-shine results after a very short processing time. The use of polishing paste is not necessary.

El LUSTER® Intraoral Porcelain Polishing Kit fue concebido especialmente para el pulido de la cerámica de feldespato. Los instrumentos de este sistema están disponibles en distintos grados de grano, desde el grueso hasta el extrafino, y permiten trabajar de forma rápida y sistemática todas las cerámicas de feldespato. Este sistema de pulido en tres etapas da como resultado un alto brillo en muy poco tiempo. No es necesario emplear pasta de diamante.

JK01 LUSTER® Intraoral Polishing Kit according to Dr. James Klim, DDS



Der letzte Schritt jeder Restauration ist die finale Politur. Dr. James Klim, DDS, entwickelte das LUSTER® Intraoral Polishing Kit, um diesen Schritt so einfach und effizient wie möglich zu machen. Dem Anwender stehen hierbei Polierer in drei unterschiedlichen Formen und vier verschiedenen Körnungen zur Verfügung.

The last step in any indirect cementation appointment is the final polish. Dr. James Klim, DDS, developed the LUSTER® Intra Oral Polishing Kit to make this step as seamless and efficient as possible. These polishers come in three shapes and in four different grits.

El último paso de todas las restauraciones es el pulido final. El Dr. James Klim, DDS, desarrolló el LUSTER® Intraoral Polishing Kit para que este paso fuese lo más sencillo y eficaz posible. El usuario dispone de pulidores de tres formas diferentes y cuatro granulados distintos.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	9746G	RA	803 204 303 533	100	1
	9743G	RA	803 204 243 533	040	1
	9744G	RA	803 204 030 533	060	1
	9746F	RA	803 204 303 503	100	1
	9743F	RA	803 204 243 503	040	1
	9744F	RA	803 204 030 503	060	1
	9746C	RA	803 204 304 514	100	1
	9743C	RA	803 204 243 930	040	1
	9744C	RA	803 204 030 493	060	1

¹ 204 = RA

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	9771G	RA	803 204 000 534	140	1
	9771M	RA	803 204 000 524	140	1
	9771F	RA	803 204 000 514	140	1
	9771C	RA	803 204 000 504	140	1
	9744G	RA	803 204 030 533	060	1
	9744M	RA	803 204 030 524	060	1
	9744F	RA	803 204 030 503	060	1
	9744C	RA	803 204 030 493	060	1
	9746G	RA	803 204 303 533	100	1
	9746M	RA	803 204 303 524	100	1
	9746F	RA	803 204 303 503	100	1
	9746C	RA	803 204 304 514	100	1

¹ 204 = RA

2609 CAD/CAM Polishing Kit

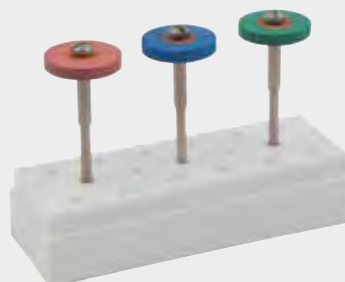


Ein speziell auf die Bedürfnisse der zahnärztlichen Praxis und des zahntechnischen Labors zusammengestelltes Kit zum Bearbeiten und Polieren von Hochleistungs-Dental-Keramiken wie Aluminiumoxid und Zirkonoxid.

One kit for machining and polishing high-performance dental ceramics, such as aluminium oxide and zirconium oxide. This kit were specially designed for both the dental practitioner and the laboratory technician.

Un kit nuevo y especial para atender las necesidades de las clínicas dentales y laboratorios para elaborar y pulir cerámica dental de alto rendimiento como óxido de aluminio y óxido de zirconio. Todos los instrumentos pueden ser aplicados sin refrigerantes.

1470 Ceramics Polishing Kit



Das Ceramics Polishing Kit ist ein dreistufiges System zum Polieren von Keramiken im Dentallabor. Die Diamantpolierer sind in grober, mittlerer und feiner Körnung enthalten und ermöglichen somit eine Hochglanzpolitur in drei Schritten.

The Ceramics Polishing Kit is a three-tier system for polishing ceramics in dental laboratories. Diamond polishers in coarse, medium and fine grit are included, thus enabling a high-gloss finish in three steps.

El Ceramics Polishing Kit es un sistema de tres fases para pulir la cerámica en el laboratorio dental. Los pulidores diamantados están disponibles con un tamaño de grano grueso, medio y fino, lo que permite conseguir el pulido de alto brillo en tres pasos.



1471 Ceramics Polishing Kit

- wie 1470, aber mit OR702GEL (S.222)
- like 1470, just with OR702GEL (page 222)
- como 1470 pero con OR702GEL (pagina 222)

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	9742M	HP	803 104 300 524	040	1
	9753M	HP	803 104 303 524	150	1
	9749M	HP	803 104 044 524	110	1
	9742F	HP	803 104 300 503	040	1
	9753F	HP	803 104 303 503	150	1
	9749F	HP	803 104 044 503	110	1
	9735H	HP	803 104 107 535	050	1
	9736H	HP	803 104 042 535	150	1
	9734H	HP	803 104 173 535	040	1
	9735G	HP	803 104 107 525	050	1
	9736G	HP	803 104 042 525	150	1
	9734G	HP	803 104 173 525	040	1

¹ 104=HP

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	9752G	HP	803 104 372 533	170	1
	9752M	HP	803 104 372 524	170	1
	9752F	HP	803 104 372 503	170	1

¹ 104=HP

2662 Intra Oral Porcelain Adjustment Kit



Dieser Satz bietet eine breite Auswahl an speziellen Instrumenten für das intraorale Bearbeiten, Finieren und Polieren von Keramikrestorationen. Der Diamantschleifer 820F gestattet die sichere und schnelle Entfernung von überschüssigem Material im Interdentalbereich. Zur Verbesserung der Anatomie und der Zwischenräume im Molarenbereich wurde der Feinkorndiamant 890F entworfen. Figur 833F bietet die Chance zum effizienten Finieren sowohl von Frontzähnen (palatal / lingual) und Okklusallflächen, als auch von Molaren. Für die perfekte Politur der Restaurationen sind Diamant-Keramik-Polierer in zwei Formen und drei verschiedenen Körnungsarten im Satz enthalten.

This set offers a wide selection of special instruments for intraoral processing, finishing and polishing of ceramic restorations. The 820F diamond grinder allows the safe and fast removal of excess material in the interdental region. The 890F fine-grained diamond was designed to improve the anatomy and interspaces in the molar region. Figure 833F offers the opportunity to efficiently finish both anterior teeth (palatal / lingual) and occlusal surfaces as well as molars. The set includes diamond ceramic polishers in two shapes and three different grain types for perfect polishing of the restorations.

Este conjunto ofrece una amplia gama de instrumentos especiales para el trabajo, el acabado y el pulido intraoral de restauraciones cerámicas. La pulidora de diamante 820F permite retirar de forma segura y rápida el material sobrante en el espacio interdental. Para mejorar la anatomía y los espacios entre molares, se ha diseñado el diamante de grano fino 890F. La figura 833F ofrece la oportunidad de un acabado eficiente, tanto en superficies frontales (palatina/lingual) como oclusales, y también en los molares. Para un pulido perfecto de las restauraciones, las pulidoras de cerámica de diamante vienen en dos formas y con tres grados de grano.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	820F	FG	806 314 465 514	016	1
	833F	FG	806 314 277 514	023	1
	890F	FG	806 314 160 514	010	1
	9743G	RA	803 204 243 533	040	1
	9744G	RA	803 204 030 533	060	1
	9743M	RA	803 204 243 524	040	1
	9744M	RA	803 204 030 524	060	1
	9743F	RA	803 204 243 503	040	1
	9744F	RA	803 204 030 503	060	1

¹ 204=RA, 314=FG

KUNSTSTOFFE | ACRYLICS | ACRÍLICO

PMMA1 PMMA/PEEK Adjusting and Polishing Kit



Das MEISINGER PMMA / PEEK Adjusting and Polishing Kit enthält ein umfassendes Instrumentarium für die Bearbeitung von Provisorien. Im Kit enthalten sind unter anderem die feine Hartmetallfräse HM75FX für eine präzise definierte Bearbeitung sowie MEISINGER's neue Kunststoffpolierer, welche speziell für die Anwendung auf PEEK und PMMA entwickelt wurden. Die Baumwoll-Polierbürste vervollständigt das Kit und verleiht dem Provisorium ein überlegenes Finish. Im hochwertigen Bohrerstandort können die Instrumente gut organisiert werden.

MEISINGER's PMMA / PEEK Adjusting and Polishing Kit includes all the necessary instruments for adjusting and polishing temporaries and partials. MEISINGER's fine cross-cut lab carbide HM75FX-040-HP for adjusting is included in this kit as well as MEISINGER's new polishers specifically designed for the polishing of PMMA and PEEK material. The cotton polishing brush completes the kit and provides a superior finish to the temporary/partial. The instruments are well organized in a high quality bur block.

El kit MEISINGER PMMA / PEEK Adjusting and Polishing Kit contiene un instrumental exhaustivo para la manipulación de piezas provisionales. El kit contiene, entre otros, las fresas de carburo tungsteno finas HM75FX, para una manipulación precisa y definida, así como las nuevas pulidoras de plástico de MEISINGER, que se han desarrollado especialmente para la aplicación de PEEK y PMMA. El cepillo pulidor de algodón completa este kit y otorga a las piezas provisionales un acabado cuidado. En los freseros de alta calidad se pueden organizar bien los instrumentos.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	9792	HP	803 104 041 523	145	1
	9791	HP	803 104 284 523	050	1
	9790	HP	803 104 543 523	170	1
	HM75FX	HP	500 104 260 140	040	1
	150	HP	080 104 045 000	220	1

¹ 104=HP



Verkaufsversion - US
Selling-version - US
Versión la venta - US

PKA24 Peek Trimming & Adjusting Kit



Das Kit umfasst eine Auswahl an Fräsern, die mit einer PX-Verzahnung ausgestattet sind. Die innovative Spezialverzahnung eignet sich in besonderem Maße für die präzise Bearbeitung von PEEK-Materialien. Die vielseitigen Formen eröffnen ein breites Spektrum an Bearbeitungsmöglichkeiten und gewährleistet eine hohe Präzision.

The kit includes a well-chosen collection of cutters equipped with PX toothing. The innovative special toothing is particularly suitable for the precise machining of PEEK materials. The versatile shapes open up a wide range of machining options and therefore guarantee high precision.

El kit incluye una colección selecta de fresas equipadas con dentado PX. El innovador dentado especial es específicamente adecuado para el mecanizado preciso de materiales PEEK. Las formas versátiles abren una amplia gama de opciones de mecanizado y, por tanto, garantizan una gran precisión.

BC03 Black Cobra Crown Temporization Kit



Das MEISINGER Black Cobra Crown Temporization Kit beinhaltet alle Instrumente zur Bearbeitung und Politur von provisorischen Kronen. Die feinen Black Cobra Hartmetallfräser eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von Kunststoffen. Die einzigartige CARBOCER®-(diamond-like carbon) Beschichtung sorgt für extreme Härte, geringen Verschleiß, niedrigste Reibwerte sowie Korrosionsfestigkeit bei gleichbleibenden Oberflächeneigenschaften. Die enthaltenen Diamantscheiben werden für die Definition von Kanten, Ecken und Rundungen eingesetzt. Die drei Polierer runden das Set ab und erzeugen ein exzellentes Finish auf Ihren Provisorien. Im hochwertigen Bohrerständer werden die Instrumente gut organisiert und können auch nach der Anwendung bequem sterilisiert werden.

MEISINGER's Black Cobra Crown Temporization Kit includes all the instruments for adjusting and polishing temporaries. MEISINGER's Black Cobra fine lab carbides for adjusting acrylics are included in this kit. The unique Black Cobra carbides are notable for their increased longevity, a result of the low-friction coating that protects the carbide surface of the bur. Two diamond discs are included. The smaller disc is ideal for defining the embrasures, edges and corners. The three polishers complete the kit and provide a superior finish to the temporary.

El kit MEISINGER Black Cobra Crown Temporization contiene todos los instrumentos para la manipulación y el pulido de las coronas provisionales. Las fresas de carburo tungsteno Black Cobra se adaptan a la perfección a la manipulación de plásticos. El revestimiento único CARBOCER® (carbono como diamante) procura una dureza extrema, un desgaste bajo, coeficientes de reducción muy bajos y resistencia a la corrosión siempre que se mantengan las propiedades de la superficie. Las láminas de diamante que contiene se utilizan para definir bordes, esquinas y bordes redondos. Las tres pulidoras completan el set y crean un acabado excelente en las piezas provisionales. Los instrumentos se organizan a la perfección en freseros de alta calidad, que también permiten esterilizarlos cómodamente tras su uso.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	73PX	HP	500 104 277 146	014	1
	77PX	HP	500 104 237 146	023	1
	79PX	HP	500 104 194 146	040	1
	129PX	HP	500 104 140 146	023	1
	138PX	HP	500 104 198 146	023	1
	261PX	HP	500 104 200 146	023	1
¹ 104=HP					



	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	940F	HP	806 104 377 514	200	1
	943DC	HP	806 104 361 504	100	1
	9580H	HP	658 104 300 524	056	1
	9580P	HP	658 104 300 534	056	1
	9580V	HP	658 104 300 536	056	1
	B23F	HP	507 104 199 140	023	1
	B251F	HP	507 104 274 140	060	1
	B79F	HP	507 104 194 140	040	1
¹ 104=HP					



2640 Implant Provisional and Zr Lab Shape & Polishing Kit

according to Dr. Stavros Pelekanos and Dr. Venci Stankov



New

Das in Zusammenarbeit mit Dr. Stavros Pelekanos und Dr. Venci Stankov entwickelte Implant Provisional & Zr Lab Shape & Polishing Kit wurde speziell für das Labor und die Anfertigung von ansprechenden prothetischen Provisorien konzipiert. Es enthält optimal aufeinander abgestimmte Instrumente für die präzise Bearbeitung und Politur u.a. von PMMA und kann für provisorische Einzelkronen, Brücken und Full-Arch-Restorationen eingesetzt werden. Als besonderes Feature enthält das Kit Polierpaste in einer praktischen und wiederverschließbaren Dose zur Anwendung in Kombination mit der enthaltenen Bürste.

Developed in collaboration with Dr. Stavros Pelekanos and Dr. Venci Stankov, the Implant Provisional & Zr Lab Shape & Polishing Kit was specifically designed for laboratory use and the production of highly aesthetic provisional prosthetics. It includes matching instruments for the precise shaping and polishing of provisional materials such as PMMA and others. Whether for provisional single crowns, bridges, or full-arch restorations, this set enables the user to achieve a satisfying outcome in each case. As a special feature, the kit includes polishing paste to be used in combination with the brush in a practical container.

Desarrollado en colaboración con el Dr. Stavros Pelekanos y el Dr. Venci Stankov, el Implant Provisional & Zr Lab Shape & Polishing Kit está especialmente diseñado para su uso en el laboratorio y para la elaboración de prótesis provisionales de gran estética. Incluye instrumentos armonizados para el conformado y pulido de precisión de materiales provisionales, como el PMMA y otros. Ya sea para coronas individuales, puentes o restauraciones de arcada completa provisionales, este juego permite al usuario lograr un resultado satisfactorio en todos los casos. Como característica especial, el kit incluye pasta de pulido para su uso en combinación con el cepillo en un práctico recipiente.



	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	HM487GX	HP	500 104 292 190	023	1
	9579V	HP	658 104 300 536	100	1
	9579H	HP	658 104 300 524	100	1
	9770F	HP	803 104 303 503	260	1
	9770G	HP	803 104 303 533	260	1
	915D	HP	806 104 355 524	190	1
	584*	-	653 900 358 534	220	1
	305RF	HP	330 104 604 391	050	1
	100	HP	90 104 543 000	220	1
	DP2	-	6400DP2	-	1

¹ 104=HP *Artikel wird montiert auf einem Träger geliefert | Article comes mounted on an mandrel | El artículo se entrega montado en un soporte



DSP22 Primeprint™ Finishing & Polishing Kit



Nachdem der Druck des Werkstücks abgeschlossen ist, muss die Oberfläche bearbeitet und je nach Einsatz poliert werden. Hierfür bietet dieses neue Kit, welches in Zusammenarbeit mit Dentsply Sirona erstellt wurde, die optimale Lösung. Zur Entfernung von Supportstrukturen ist im Kit die Diamantscheibe S941G-220 enthalten. Für die weitere Entfernung der Supportstrukturen, gerade in Bereichen, die schwer mit der Scheibe zu erreichen sind, ist der enthaltene Hartmetallfräser HM489FX-023 eine hervorragende Ergänzung. Zur Glättung der Oberfläche ist der Hartmetallfräser HM79EX-040 mit feiner Verzahnung enthalten. Dieser kann zusammen mit dem Instrument 9736H-150 verwendet werden, um übrig gebliebene Verbindungsstellen zu glätten. Zum Glätten und Polieren von Schienen ist der PMMA Twist Polisher 9790-170 optimal geeignet. Für die Vorpolitur von Provisorien eignet sich das Instrument 9769M und für die Hochglanzpolitur 9769F.

Once the printing process is accomplished, the surface of the workpiece must be processed and, depending on the application, polished. This new kit created in collaboration with Dentsply Sirona offers the ideal solution for this purpose. The diamond disk is included in the kit for removing support structures. The HM489FX tungsten carbide bur is an excellent additional tool for further removal of support structures, especially in areas that are difficult to reach. The HM79EX tungsten carbide bur with fine toothing is included for a final smoothing of the surface. It can be used together with 9736H in order to smoothen remaining contact points of the support structures. The PMMA Twist Polisher 9790 is ideal for smoothing and polishing splints. The 9769M instrument is suitable for pre-polishing temporary restorations and the 9769F instrument is suited for high-gloss polishing.

Una vez realizado el proceso de impresión, la superficie de la pieza debe procesarse y, en función de la aplicación, pulirse. Este nuevo kit creado en colaboración con Dentsply Sirona ofrece la solución ideal para este fin. El disco de diamante se incluye en el kit para retirar las estructuras de soporte. La fresa de carburo de tungsteno HM489FX es una excelente herramienta adicional para seguir eliminando estructuras de soporte, especialmente en zonas de difícil acceso. Se incluye la fresa de carburo de tungsteno HM79EX con dentado fino para un alisado final de la superficie. Puede utilizarse junto con la 9736H para alisar los puntos de contacto restantes de las estructuras de soporte. El PMMA Twist Polisher 9790 es ideal para alisar y pulir férulas. El instrumento 9769M es adecuado para el prepolido de restauraciones provisionales y el instrumento 9769F es adecuado para el pulido de alto brillo.

2582 Temporary Solution Kit

developed with ZTM Rainer Michel



Das Temporary Solution Kit dient der einfachen Bearbeitung und Erstellung von Provisorien in der Zahnarztpraxis.

The Temporary Solution Kit is used for the simple processing and creation of provisionals in the dental practice.

El Temporary Solution Kit está pensado para la preparación sencilla y la elaboración de restauraciones provisionales en el gabinete dental.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	HM79EX	HP	500 104 194 141	040	1
	HM489FX	HP	500 104 187 140	023	1
	S941G	HP	807 104 345 534	220	1
	9736H	HP	805 104 042 535	150	1
	9790	HP	803 104 543 523	170	1
	150	HP	080 104 045 000	220	1
	9769M	HP	803 104 000 523	170	1
	9769F	HP	803 104 000 503	170	1
¹ 104=HP					



	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	HM 79GX	HP	500 104 194 190	040	1
	HM488FX	HP	500 104 184 140	016	1
	402	HP	030 104 543 514	220	1
	110	HP	100 104 543 000	190	1
	150	HP	080 104 045 000	220	1
¹ 104=HP					



2638 Acrylic Adjustment Kit



Das Acrylic Adjustment Kit bietet ein umfassendes Instrumentarium für die einfache und schnelle Durchführung verschiedenster Korrekturen am Kunststoff in der Praxis. Die innovative Verzahnungsgeometrie der im Sortiment enthaltenen Hartmetallfräser sichert dabei bereits beim Einsatz dieser Instrumente die Erzielung ungewöhnlich glatter Oberflächen. Die verschiedenen Kunststoffpolierer sind das Ergebnis langjähriger Entwicklungen und zeichnen sich durch außergewöhnlich hohe Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit aus.

The Acrylic Adjustment Kit correction set offers a comprehensive instrument kit for the quick and easy implementation of various corrections to synthetic materials in the practice. The innovative gear geometry of the hard metal burs included in the range of products thus already ensures the achievement of unusually smooth surfaces with the use of these instruments. The various synthetic material polishers are the result of years of development and are characterized by exceptionally high performance and durability.

El juego para la corrección de prótesis ofrece todo el instrumental necesario para realizar de forma fácil y rápida las diferentes correcciones del material en el gabinete dental. La innovadora geometría del dentado de las fresas de carburo de tungsteno del juego asegura unas superficies increíblemente lisas ya con el empleo de estos instrumentos. Los diferentes pulidores para acrílico son el resultado de años de desarrollo y se caracterizan por un rendimiento y una durabilidad excepcionalmente altas.

VAL01 Flexible Acrylic Adjusting and Polishing Kit



MEISINGER's Flexible Adjustment and Polishing Kit ist das einzige Set, das Sie für die Anpassung und Politur von Valplast®, DuraFlex™ und tcs® Teilen benötigen. Die dünne, flexible und leichte Art dieser Werkstoffe erfordert eine rasche und effiziente Bearbeitung ohne große Wärmeentwicklung. Grobe und feine Hartmetallfräser sowie feine Polierer runden dieses Sortiment ab. Im hochwertigen Bohrerständer werden die Instrumente gut organisiert.

MEISINGER's Flexible Acrylic Adjustment and Polishing kit is the only kit you will ever need for adjusting and polishing Valplast®, DuraFlex™ and tcs® partials. The thin, flexible, and lightweight nature of these products requires rapid and efficient reduction without excess heat build-up. Lab carbides for both coarse and fine adjustments are included in addition to a fine polisher and cotton buffing wheel. The instruments are well organized.

MEISINGER's Flexible Adjustment and Polishing Kit es el único set que usted necesita para ajustar y pulir las piezas de Valplast®, DuraFlex™ y tcs®. Estos materiales son finos, flexibles y ligeros, y permiten un mecanizado rápido y eficaz sin que se genere mucho calor. El surtido los completan las fresas de carburo de tungsteno gruesas y finas y los pulidores finos. Los instrumentos se pueden organizar óptimamente en el fresero de alta calidad.

	Fig.	Shaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	HM 79FX	HP	500 104 194 140	040	1
	HM 251FX	HP	500 104 274 140	060	1
	9572V	HP	658 104 201 536	150	1
	9573V	HP	658 104 273 536	100	1
	9572P	HP	658 104 201 534	150	1
	9573P	HP	658 104 273 534	100	1
	9572H	HP	658 104 201 524	150	1
	9573H	HP	658 104 273 524	100	1

¹ 104=HP


	Fig.	Shaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	HM79FT	HP	500 104 194 142	040	1
	HM79HT	HP	500 104 194 221	040	1
	150	HP	080 104 045 000	220	1
	9507H	HP	652 104 292 503	050	1

¹ 104=HP


TITAN | TITANIUM | TITANIO

DTS01 DCS Thermo Splint Kit



New

Mit dem Thermo Splint Kit steht dem Behandler eine ideale Zusammenstellung aus Instrumenten zur Verfügung, die eine präzise und effiziente Bearbeitung von thermoplastischen Materialien ermöglichen. Die Kombination der Instrumente unterstützt sowohl bei groben als auch bei feinen Arbeiten und trägt gleichzeitig zu einer Verbesserung der Oberflächenqualität bei.

The Thermo Splint Kit provides dentists with a perfectly matched selection of instruments for precise and efficient processing of thermoplastic materials. The combination of instruments offers support with both coarse and fine processing and helps to improve the quality of the surface.

El Thermo Splint Kit ofrece a los odontólogos una selección de instrumentos perfectamente armonizados para el procesamiento preciso y eficaz de materiales termoplásticos. La combinación de instrumentos ofrece ayuda tanto en el tratamiento grueso como en el fino y contribuye a mejorar la calidad de la superficie.

1321 Titanium Power Kit

developed together with RWTH Aachen University



Die KOMPROMISSLOSEN zur Titanbearbeitung.

Die ST-Hartmetallfräser zeichnen sich durch die speziell für Titan entwickelte, supergrobe Schneidengeometrie und eine extrem schnelle Volumenreduzierung aus.

UNCOMPROMISING for the processing of titanium.

The ST hard metal burrs are characterized by the super-coarse cutting geometry specially developed for titanium and an extremely rapid reduction in volume.

Los INTACHABLES en la mecanización del titanio.

Las fresas de carburo de tungsteno ST se caracterizan por la geometría supergruesa de los filos, desarrollada específicamente para el titanio, y por una reducción extraordinariamente rápida del volumen.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	515	HP	310 104 467 211	023	1
	HM251QX	HP	500 104 274 160 060	060	1
	HM79PX	HP	500 104 194 146	040	1
	9513U	/	658 900 303 523	180	1
	303RF	HP	330 104 603 391	035	1
	253M	HP	030 104 045 003	250	1
	9580H	HP	658 104 300 524	056	1
¹ 104=HP					



	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	HM 79ST	HP	500 104 194 226	040	1
	HM 79ST	HP	500 104 194 227	060	1
	HM 251ST	HP	500 104 274 227	060	1
¹ 104=HP					



ENDO1 Comprehensive Access Kit



Der sichere Zugang zum Wurzelkanal ist für jede erfolgreiche Wurzelkanalbehandlung unerlässlich. Aus diesem Grund bietet MEISINGER nun das Comprehensive Access Kit an, eine Auswahl sorgfältig zusammengestellter Diamant- und Hartmetallinstrumente, die für eine sichere und planbare Wurzelkanalöffnung notwendig sind. Das Comprehensive Access Kit enthält alle notwendigen Instrumente, um einen geraden Zugang zum Wurzelkanal durch verschiedene Materialien wie Zirkonoxid, Metalleramik und Zahnschmelz zu schaffen und ist damit unentbehrlich bei jeder Wurzelkanalbehandlung.

Safe access into the root canal is imperative for any successful root canal treatment. That is why MEISINGER created the Comprehensive Access Kit, a carefully curated selection of diamond and tungsten carbide instruments necessary for a safe and predictable endodontic access preparation. This kit provides all the burs needed to obtain straight line access into the canal through different materials such as zirconia, PFM's, and enamel. Conveniently organized in an autoclavable bur block, this kit is essential for any root canal treatment.

Un acceso seguro al canal radicular es indispensable para su tratamiento correcto. Por ello, MEISINGER ofrece el kit Comprehensive Access, una cuidadosa selección de instrumental de diamante y de carburo tungsteno con todo lo necesario para una apertura del canal radicular planificable y segura. El kit Comprehensive Access contiene todos los instrumentos necesarios para lograr un acceso recto al canal radicular, gracias a los diversos materiales como óxido de circonio, cerámica con metal y esmalte dental, y por ello es fundamental en todo tratamiento del canal radicular.

ENDO2 Endo Access Bur Kit



Optimieren Sie den Prozess der koronalen Wurzelkanalaufbereitung mit dem MEISINGER Endo Access Bur Kit. Das Kit beinhaltet eine Zusammenstellung aller Meisinger Endo Access Burs, mit denen der sichere Zugang zum Wurzelkanal ermöglicht wird. Anders als Standardbohrer, die die Sicht auf das Arbeitsfeld einschränken, ermöglichen die Endo Access Burs dank ihrer langen, dünnen Hälse uneingeschränkte Sicht. Diese einzigartigen Bohrer erlauben dem Anwender die einfache und sichere Eröffnung und Erweiterung der Kanallöffnung für einen idealen, geradlinigen Zugang zum Wurzelkanal.

Improve your endodontic access by improving visibility with Meisinger's Endo Access Bur Kit. This kit is a complete set of Meisinger Endo Access Burs designed for safe access into the root canal. Unlike traditional burs that obstruct your vision into the working area, these burs have long, thin necks allowing for an excellent, unobstructed view. These unique burs allow the practitioner to safely and easily remove dentinal triangles and flare the canal orifice for optimal straight line access into the root canal. Due to their very stable construction, the Endo Access Burs have optimal low-vibration concentricity and are designed to create less heat and debris than traditional ultrasonic tips. The color bands on the shank allow for quick identification and selection of the instruments.

Optimice el proceso de la preparación de la corona del canal radicular con el kit MEISINGER Endo Access Bur. El kit contiene un conjunto de todas las fresas Meisinger Endo Access, con las que se facilita el acceso seguro al canal radicular. Al contrario que las fresas estándar, que limitan la visión sobre el campo de trabajo, las fresas Endo Access permiten una visión sin obstáculos gracias a sus cuellos largos y finos. Estas fresas únicas permiten que el usuario abra y amplíe el canal para un acceso recto e ideal al canal radicular.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	HM1	FG XL	500 316 001 001	010	1
	HM1	FG XL	500 316 001 001	014	1
	Z801L	FG	806 314 697 324	014	1
	856G	FG	806 314 194 534	016	1
	HMG152	FG L	504 315 210 295	016	1
	801G	FG	806 314 001 534	010	1
	801G	FG	806 314 001 534	014	1
	833G	FG	806 314 277 534	023	1
	HM31A	FG	500 314 139 008	012	1

¹ 314=FG, 315=FGL, 316=FG XL



	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	HM191A	RA L	500 205 004 006	005	1
	HM191A	RA L	500 205 004 006	006	1
	HM191A	RA L	500 205 004 006	008	1
	HM191A	RA L	500 205 004 006	010	1
	HM191A	RA L	500 205 004 006	012	1
	HM191A	RA L	500 205 004 006	014	1
	HM191A	RA L	500 205 004 006	018	1
	HM191A	RA XL	500 206 004 006	005	1
	HM191A	RA XL	500 206 004 006	006	1
	HM191A	RA XL	500 206 004 006	008	1
	HM191A	RA XL	500 206 004 006	010	1
	HM191A	RA XL	500 206 004 006	012	1
	HM191A	RA XL	500 206 004 006	014	1

¹ 205=RA L, 206=RA XL



PERIIMPLANTITIS | PERIIMPLANTITIS | PERIIMPLANTITIS

2575 Periimplantitis Kit



Das Periimplantitis Kit beinhaltet acht perfekt aufeinander abgestimmte Hartmetallfinierer in Ei- und Flammenform zur optimalen Periimplantitis-Behandlung. Beide Formen liegen in zwei Größen und jeweils in Standard- und ultra feiner Verzahnung vor. Die Arbeitsteilformen, -größen, und -verzahnungen eignen sich optimal zur intraoralen Bearbeitung von Titan und für verschiedene Formen von Implantatals und -schulter. Alle enthaltenen Finierer besitzen einen extra langen FG Schaft (Gesamtlänge 32 mm), mit dem insbesondere schwer zugängliche, tiefe Bereiche erreicht werden können. Für die Behandlung der Periimplantitis werden die Finierer rechtsläufig gegen den Uhrzeigersinn um den freiliegenden Teil des Implantats herumgeführt, um die Implantatoberfläche zu glätten.

The Periimplantitis Kit contains eight perfectly matched tungsten carbide finishing burs in egg and flame shapes for the ideal peri-implantitis treatment. Both shapes come in two sizes and each in standard and ultra-fine tooththing. The shapes, sizes and toothings of the working parts are perfectly suited for the intraoral treatment of titanium and for different shapes of implant neck and shoulder. All finishers have an extra-long FG shank (total length 32 mm) which allows particularly the treatment of difficult-to-access deep areas. For the peri-implantitis treatment, the finishers are used clockwise and are guided around the exposed implant counterclockwise so the implant surface is smoothed.

El kit Periimplantitis contiene ocho escariadores de carburo tungsteno a juego, en forma de huevo y de llama para un tratamiento óptimo de la periimplantitis. Ambas formas están disponibles en dos tamaños, y en dentado estándar y fino. Las formas, los tamaños y los dentados de las piezas de trabajo se adaptan a la perfección a la manipulación intraoral de titanio y a diferentes formas de cuello y hombros del implante. Todos los escariadores incluidos poseen un mango extralargo FG (longitud total 32 mm), con el que se pueden alcanzar zonas particularmente profundas y de difícil acceso. Para el tratamiento de la periimplantitis, los escariadores se desplazan en sentido antihorario alrededor de la parte libre del implante, a fin de alisar la superficie.

DEG00 Degranulation Kit



Das Degranulation Kit beinhaltet vier extra grobe, kugelförmige Diamantinstrumente in den Durchmessern 1,0, 2,5, 3,0 und 3,5 mm. Diese wurden speziell entwickelt, um ein schnelles und einfaches Knochenabridement zu ermöglichen. Mit Hilfe der Diamanten kann am Knochen anhaftendes Degranulationsgewebe schnell und einfach entfernt werden, ohne den umgebenden Knochen zu beschädigen, sodass anschließend eingesetztes Augmentationsmaterial direkt mit gesundem Knochen in Kontakt kommt. Damit ist das Degranulation Kit eine entscheidende Ergänzung im Degranulations-Prozess.

The Degranulation Kit contains four extra coarse, round diamond instruments with a diameters of 1.0, 2.5, 3.0 and 3.5 mm. The instruments have been specially developed to enable quick and easy bone debridement. With the help of these diamonds, degeneration tissue adhering to the bone can be removed quickly and easily without damaging the surrounding bone, so that subsequently inserted grafting material comes into direct contact with healthy bone. This makes the Degranulation Kit a crucial addition to the degeneration process.

El Kit de degranulación contiene cuatro instrumentos diamantados extragrosos y esféricos de diámetros de 1,0, 2,5, 3,0 y 3,5 mm. Se han diseñado especialmente para permitir un desbridamiento óseo rápido y fácil. Con la ayuda de los diamantes, el tejido de degranulación adherido al hueso puede eliminarse fácil y rápidamente sin dañar el hueso circundante, de modo que el material de aumento insertado posteriormente entra en contacto directo con el hueso sano. Por ello, el Kit de Degranulación es un complemento esencial para el proceso de degranulación.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	HM379	FGXXL	500 317 277 072	014	1
	HM379	FGXXL	500 317 277 072	023	1
	HM48L	FGXXL	500 317 249 072	014	1
	HM48L	FGXXL	500 317 249 072	023	1
	HM379U	FGXXL	500 317 277 032	014	1
	HM379U	FGXXL	500 317 277 032	023	1
	HM48LU	FGXXL	500 317 249 032	014	1
	HM48LU	FGXXL	500 317 249 032	023	1
¹ 317 = FGXXL					



	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	801LD	RAXL	806 206 697 534	010	1
	801LD	RAXL	806 206 697 594	025	1
	801LD	RAXL	806 206 697 594	030	1
	801LD	RAXL	806 206 697 594	035	1
¹ 206 = RAXL					

2580 The K Kit Implantoplasty

developed with Dr. Philippe Khayat



Das Kit umfasst fünf perfekt aufeinander abgestimmte Hartmetallfinierer sowie ein hochwertiges Diamantinstrument. Gemeinsam mit dem französischen Meinungsbildner Dr. Philippe Khayat wurden diese Instrumente zusammengestellt, um eine präzise Bearbeitung und Glättung verschiedener Implantatthals- und schulterformen zu ermöglichen. Durch die Glättung des freiliegenden Teils des Implantats ermöglicht es im Rahmen der Implantoplastik den Erhalt des Implantats und somit eine minimalinvasive Behandlung der Perimplantitis. Der extra lange Schaft gewährleistet die einfache Handhabung auch in schwer zugänglichen Bereichen, während die unterschiedlichen Arbeitsteilformen und -größen die Bearbeitung jeglicher Implantatgeometrie vereinfachen.

The kit comprises five carbide finishers and a high-quality diamond instrument. All instruments have been assembled with Dr. Philippe Khayat in one kit to enable precise and effective smoothing of rough and contaminated implant surfaces. By smoothing the exposed part of the implant and treating the area appropriately, it enables implant preservation and therefore minimally invasive treatment of periimplantitis. The extra-long shank on all instruments ensures easy handling in hard-to-reach areas, while the different working part shapes provide an optimized equipment for smoothing of all types of implant geometries.

El kit incluye cinco fresas de acabado de carburo y un instrumento diamantado de alta calidad. Todos los instrumentos han sido ensamblados con el Dr. Philippe Khayat en un kit para permitir un alisado preciso y eficaz de superficies de implantes rugosas y contaminadas. Al alisar la parte expuesta del implante y tratar la zona de forma adecuada, permite conservar el implante y, por tanto, realizar un tratamiento mínimamente invasivo de la perimplantitis. El vástago extralargo de todos los instrumentos garantiza un fácil manejo en zonas de difícil acceso, mientras que las diferentes formas de la pieza de trabajo proporcionan un equipo optimizado para el alisado de todo tipo de geometrías de implante.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	HM379	FGXXL	500 317 277 072	023	1
	HM379	FGXXL	500 317 277 072	014	1
	HM379U	FGXXL	500 317 277 032	023	1
	HM49LKR	FGXXL	500 317 158 072	012	1
	HM48L	FGXXL	500 317 249 072	023	1
	833L	FGXXL	806 317 278 524	018	1

¹ 317=FGXXL



SONSTIGE | MISCELLANEOUS | OTRO

BC04 Black Cobra Complete Crown Removal Kit



Das BC04 Black Cobra Complete Crown Removal Kit ist das einzige Kit, das Sie zum Entfernen jeglicher Zahnrestorationen benötigen werden. Das Kit enthält sechs hochleistungsstarke Black Cobra Diamanten, die selbst das härteste Kronenmaterial durchtrennen. Die vier enthaltenen Hartmetallinstrumente sind optimal zum Durchtrennen von Metallunterkonstruktionen oder VMK-Kronen geeignet.

The BC04 Black Cobra Complete Crown Removal Kit is the only kit you will need for the removal of any dental restoration. Included in the kit are six Black Cobra diamonds for efficiently removing the hardest of crown materials such as Zirconia, as well as four special carbides for cutting through metal substructures or PFM crowns.

El kit BC04 Black Cobra Complete Crown Removal es el único conjunto que necesita para retirar cualquier restauración dental. El kit contiene seis diamantes Black Cobra de alto rendimiento, que pueden separar incluso el material de corona más duro. Los cuatro instrumentos de carburo tungsteno incluidos son ideales para separar construcciones metálicas o coronas VMK.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	HMG34RS	FG	500 314 138 008	012	1
	HM21RX	FG	500 314 139 019	012	1
	HM31A	FG	500 314 139 008	012	1
	HM31C	FG	500 314 134 015	012	1
	B850	FG	809 314 198 544	016	1
	B850	FG	809 314 198 544	018	1
	B850	FG	809 314 198 544	021	1
	B850	FG	809 314 198 544	025	1
	B852	FG	809 314 199 544	016	1
	B852	FG	809 314 199 544	018	1

¹ 314=FG



Verkaufsversion - US
Selling-version - US
Versión la venta - US

2740 Black Cobra Cutter Set

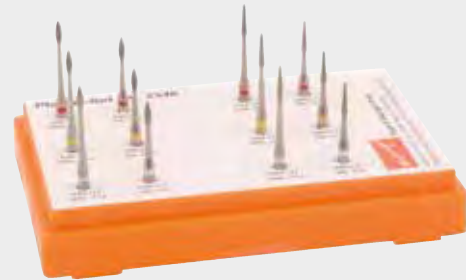


Sortiment mit ausgewählten Hartmetallfräsern der MEISINGER Black Cobra Line für die Nutzung im Dentallabor. Die besondere CABOCER® Beschichtung optimiert die Leistung der Instrumente und besticht durch extreme Härte, geringen Verschleiß und niedrigste Reibwerte. Die charakteristische schwarze Farbe der Instrumente ermöglicht Ihnen zusätzlich blendfreies Arbeiten.

Range of products with selected hard metal burrs of the MEISINGER Black Cobra Line for use in the dental laboratory. The special CABOCER® coating optimizes the performance of instruments and boasts extreme hardness, low wear and low friction values. The characteristic black color of the instruments allows you additional glare-free work.

Surtido con fresas de carburo de tungsteno seleccionadas de la MEISINGER Black Cobra Line para su uso en el laboratorio dental. El revestimiento CABOCER® especial optimiza el rendimiento de los instrumentos y convence por su extrema dureza, su desgaste mínimo y su baja fricción. Además, el característico color negro de los instrumentos permite trabajar sin reflejos.

2540 Plaque Set



Für die optimale Entfernung von Restplaque im subgingivalen Bereich. Zur Behandlung von zwei- oder dreiwurzeligen Zähnen mit starkem Knochenschwund, die mit Kurette oder Scaler nicht erreicht werden können. Unzugängliche Stellen werden mit Diamanten mit rotem Ring erweitert. Beläge und Zahnstein auf der Wurzeloberfläche werden mit Diamanten mit gelbem Ring entfernt. Beste Oberflächenglättung der Wurzel ist mit Diamanten mit weißem Ring zu erreichen. Eine optimale Ergänzung für die perfekte Wurzeloberflächenbehandlung bei der Parodontitis-Therapie.

For removing residual plaque from subgingival areas. For treating teeth with two or three roots and severe bone recession which cannot be reached with a curette or scaler. Inaccessible areas should be extended with red ring diamonds. Deposits and calculus should be removed from the root surface with yellow ring diamonds. Best smoothing of root surfaces can be obtained with the white ring diamonds. Root surface treatment, when treating periodontitis, can be achieved minimally invasively utilizing this kit.

Óptimo para remover restos de placa en el área subgingival. Para el tratamiento de dientes con dos ó tres raíces y con gran retroceso del hueso, que no se puedan alcanzar con cureta ó escarificador. Los diamantes con anillo rojo sirven para ensanchar los áreas inaccesibles. La placa y el sarro en la superficie radicular se remueven con diamantes con anillo amarillo. El mejor suavizado de superficies se consigue con diamantes con anillo blanco. ¡Un complemento ideal para el tratamiento perfecto de superficies radiculares en una terapia de periodontitis!

	Fig.	Shank Shank¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	B23F	HP	507 104 199 140	023	1
	B23G	HP	507 104 199 190	023	1
	B79G	HP	507 104 194 190	040	1
	B79G	HP	507 104 194 190	060	1
	B250G	HP	507 104 275 190	040	1
	B251G	HP	507 104 274 190	060	1
	B251H	HP	507 104 274 220	060	1
	B79F	HP	507 104 194 140	040	1
	B79F	HP	507 104 194 140	060	1
	B250F	HP	507 104 275 140	040	1
	B251F	HP	507 104 274 140	060	1
	B251S	HP	507 104 274 224	060	1

¹ 104=HP

	Fig.	Shank Shank¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	830LF	RA L	806 205 258 514	014	1
	830LF	RA XL	806 206 258 514	014	1
	830LC	RA L	806 205 258 504	014	1
	830LC	RA XL	806 206 258 504	014	1
	830LU	RA L	806 205 258 494	014	1
	830LU	RA XL	806 206 258 494	014	1
	849LC	RA L	806 205 693 504	012	1
	849LC	RA XL	806 206 693 504	012	1
	849LF	RA L	806 205 693 514	012	1
	849LF	RA XL	806 206 693 514	012	1
	849LU	RA L	806 205 693 494	012	1
	849LU	RA XL	806 206 693 494	012	1

¹ 205=RA L, 206=RA XL



Verkaufsversion - US
Selling-version - US
Versión la venta - US

2530 Fuzzies Assortment Kit



Die im Fuzzies Assortment Kit enthaltenen Polierbürsten erzielen einen erstklassigen Hochglanz auf Edelmetallen, Kompositen und Kunststoffen. Bei Anwendung mit geringer Drehzahl und unter leichtem Anpressdruck wird die Oberfläche optimal geschont.

MEISINGER's Fuzzies polishing wheels, when used with low speeds and light pressure, create a fine finish without overheating due to friction. The polishing wheels provide the user the ability to polish precious metals, composites and acrylics without damaging the surfaces.

Los cepillos pulidores que contiene el kit Fuzzies Assortment logran un brillo intenso de alta calidad en metales nobles, compositos y plásticos. Para respetar la superficie de forma óptima, lo ideal es emplear bajas revoluciones y una ligera presión.

JK05 Acryl / Resin Universal Kit

developed with Dr. James Klim, DDS



Das mit Dr. James Klim, DDS, entwickelte Acryl/ Resin Universal Kit ist speziell für die Bearbeitung und Politur von Prothesenkunststoffen, Schienen und Tiefziehschienen geeignet. Die enthaltenen Hartmetallfräsen ermöglichen ein problemloses Ausarbeiten von Schienen und Prothesen. Mit den Faserflies Bürsten lässt sich ein erstklassiger Hochglanz erzielen, ohne das Material zu überhitzen oder die Oberfläche zu beschädigen. Für ein makelloses Oberflächenfinish ist der Polierer 9573H im Kit enthalten. Alle Instrumente sind für den extraoralen Einsatz geeignet und können im hochwertigen Bohrerständer praktisch verstaut werden.

The Acryl/ Resin Universal Kit developed by Dr. James Klim, DDS, is especially suitable for the treatment and polishing of denture plastics, splints and aligners. With the included tungsten carbide instruments, it is easy to work out rails and dentures. The fiber fleece brushes provide a high-quality finish without overheating the material and damaging the surface. For a mark less surface, is the polisher 9573H included in the kit. All instruments are suitable for extraoral use and can be conveniently stored in the bur block.

El kit Acryl/ Resin Universal, desarrollado el colaboración con el Dr. James Klim, DDS, es especialmente apto para la manipulación y el pulido de plásticos de prótesis, ferulización y ferulización termoformada. Las fresas de carburo tungsteno facilitan una manipulación fluida de ferulizaciones y prótesis. Con los cepillos Faserflies se logra un brillo intenso de primera calidad, sin que el material se sobrecaliente ni se dañe la superficie. El kit también contiene la pulidora 9573H, para un acabado de superficie imaculado. Todos los instrumentos son aptos para el uso extraoral y se pueden organizar de forma práctica en freseros de alta calidad.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	253	HP	030 104 045 000	250	1
	253F	HP	030 104 045 001	250	1
	253M	HP	030 104 045 003	250	1
	253G	HP	030 104 045 005	250	1

¹ 104=HP

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	HM251FF	HP	500 104 274 181	060	1
	HM79FF	HP	500 104 194 181	040	1
	HM515	HP	500 104 467 211	023	1
	9573H	HP	658 104 273 524	100	1
	253	HP	030 104 045 000	250	1
	253M	HP	030 104 045 003	250	1
	253G	HP	030 104 045 005	250	1

¹ 104=HP



APA23 Acrylic Polishing and Adjusting Kit



Das Kit bietet einen überschaubaren Satz an Instrumenten, um den Prozess der Acrylbearbeitung zu optimieren. Die enthaltenen Hartmetaller verfügen über eine innovative Verzahnung, die effizient abträgt und gleichzeitig eine glatte Oberfläche hinterlässt. Die zweistufigen Acrylpolierer erzeugen in kurzer Bearbeitungszeit ein brillantes Hochglanzfinish für ein ansprechendes ästhetisches Ergebnis.

The Kit offers a simplified set of instruments to streamline the process of adjusting and polishing acrylic materials. The Acrylic Carbides offer innovative tooth patterns that cuts efficiently while leaving a smooth surface to expedite the procedure. The two-step acrylic polishers quickly produce brilliant high shine finish for an appealing aesthetic result.

El kit ofrece un conjunto simplificado de instrumentos para agilizar el proceso de ajuste y pulido de materiales acrílicos. Los carburos acrílicos ofrecen innovadores patrones de dientes que cortan eficazmente dejando una superficie lisa para agilizar el procedimiento. Los pulidores acrílicos de dos pasos producen rápidamente un acabado brillante de alto brillo para un resultado estético atractivo.

2541 Pre-Surgery Teeth Polishing Kit

by Dr. Hélène Arnal



Das Pre-Surgery Teeth Polishing Kit wurde in Kooperation mit Hélène Arnal entwickelt und dient der zuverlässigen Reinigung und Politur der Zähne unmittelbar vor einem operativen Eingriff. Die sorgfältige Auswahl der im Kit enthaltenen Hartmetall- und Diamantinstrumente sowie Schleifer und Polierer zielt darauf ab, auf der Zahnoberfläche anhaftende Mikroorganismen zu entfernen, um somit das postoperative Infektionsrisiko zu senken. Mithilfe der Hartmetallinstrumente werden die Zahnbeläge gründlich abgetragen, während die Diamantinstrumente dazu dienen, die Zahnoberfläche sanft zu glätten. Ein Arkansas-Schleifer sowie zwei Universalpolierer sorgen für ein perfektes Finish.

The Pre-Surgery Teeth Polishing Kit was developed in collaboration with Hélène Arnal and is designed for reliable cleaning and polishing of teeth prior to surgical procedures. The selection of carbide and diamond instruments, as well as abrasives and polishers included in the kit, is intended to reduce the adhesion of bacteria and other microbes to the tooth surface, thereby minimizing the risk of infections due to plaque and deposits. The carbide instruments allow for precise plaque removal, while the diamond instruments are used to gently smooth the surface. An Arkansas polisher and two universal polishers ensure a flawless finish.

El Pre-Surgery Teeth Polishing Kit ha sido desarrollado en colaboración con Hélène Arnal y está diseñado para limpiar y pulir los dientes de forma fiable antes de las intervenciones quirúrgicas. La selección de instrumentos de carburo y diamante, así como de abrasivos y pulidores incluidos en el kit, tiene por objeto reducir la adhesión de bacterias y otros microbios a la superficie dental, minimizando así el riesgo de infecciones debidas a la placa y los depósitos. Los instrumentos de carburo permiten eliminar la placa con precisión, mientras que los de diamante se utilizan para alisar suavemente la superficie. Una fresa abrasiva y dos pulidores universales garantizan un acabado impecable.

	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	9572U	HP	658 104 201 523	150	1
	9573U	HP	658 104 273 523	100	1
	9579U	HP	658 104 300 523	100	1
	9572S	HP	658 104 201 533	150	1
	9573S	HP	658 104 273 533	100	1
	9579S	HP	658 104 300 533	100	1
	HM79FF	HP	500 104 194 181	040	1
	HM251FF	HP	500 104 274 181	060	1

¹ 104=HP



	Fig.	Schaft Shank ¹	Ref.-Nr. Ref.-No.	Größe Size	Stück/Set Pieces/Kit
	Z0850	FG	806 314 198 324	018	1
	Z850F	FG	806 314 198 314	018	1
	HMG21RX	FG	504 314 137 019	010	1
	HMD0133	FG	500 314 159 072	010	1
	HM274	FG	500 314 274 072	018	1
	660XF	FG	635 204 297 505	025	1
	9981V	FG	658 104 243 513	030	1
	9981H	FG	658 104 243 503	030	1

¹ 314=FG, 104=HP



Bohrerstände und Zubehör

Bur Blocks and Accessories | Freseros vacíos y accesorio

Stellen Sie sich ganz individuelle Sets aus den Instrumenten zusammen, die Sie tagtäglich bei Ihrer Arbeit benötigen. Die große Auswahl an verschiedenen MEISINGER Bohrerständen bietet Ihnen eine hohe Flexibilität bei der Sortierung Ihrer Instrumente.

In den hochwertigen Bohrerständen von MEISINGER sind Ihre Dentalinstrumente nicht nur gut organisiert, sie können nach der Anwendung auch bequem sterilisiert werden. Die unterschiedlichen Bohrerreinigungsbürsten sorgen zudem für eine perfekte Reinigung.

Create your own individual sets from the instruments you need for your daily work. The large selection of different MEISINGER drill stands offers you a high degree of flexibility when sorting your instruments.

Not only are your dental instruments well organized in MEISINGER's high-quality drill stands, they can also be conveniently sterilized after use. The different drill cleaning brushes also ensure perfect cleaning.

Cree sus propios sets personalizados con los instrumentos que necesite diariamente para su trabajo. La amplia variedad de freseros distintos de MEISINGER le ofrece una gran flexibilidad a la hora de organizar su instrumental. Con los freseros de alta calidad de MEISINGER, el instrumental odontológico no solo estará bien organizado, sino que podrá esterilizarlo cómodamente tras su uso. Los distintos cepillos de limpieza de fresas le garantizan una limpieza perfecta.



MEISINGER'S ELITE SERIES II

MEISINGER'S ELITE SERIES II

MEISINGER'S ELITE SERIES II

242-243

IHR MEISINGER ORDNUNGSSYSTEM

MEISINGER ORGANIZATION SYSTEM

SISTEMA DE ORGANIZACIÓN MEISINGER

244

BOHRERSTÄNDER, STERILISIERBAR, ORANGE

BUR BLOCKS, STERILIZABLE, ORANGE

FRESEROS VACIOS, ESTERILIZABLE, NARANJA

245-246

BOHRERSTÄNDER, STERILISIERBAR, BLAU

BUR BLOCKS, STERILIZABLE, BLUE

FRESEROS VACIOS, ESTERILIZABLE, AZUL

247

BOHRERSTÄNDER, STERILISIERBAR, GRÜN

BUR BLOCKS, STERILIZABLE, GREEN

FRESEROS VACIOS, ESTERILIZABLE, VERDE

247

BOHRERSTÄNDER, STERILISIERBAR, SCHWARZ

BUR BLOCKS, STERILIZABLE, BLACK

FRESEROS VACIOS, ESTERILIZABLE, NEGRO

247

EDELSTAHL BOHRERSTÄNDER, ROSTFREI, STERILISIERBAR

STAINLESS STEEL BUR BLOCK, NON-CORROSIVE, STERILIZABLE

FRESEROS DE ACERO FINO, INOXIDABLES, ESTERILIZABLES

248-249

BOHRERSTÄNDER, NICHT STERILISIERBAR, PLEXIGLAS

BUR BLOCKS, NON STERILIZABLE, PLEXIGLASS

FRESEROS VACIOS, NO ESTERILIZABLE, PLEXIGLÁS

250

ROSTSCHUTZSPRAY

RUST PREVENTING SPRAY

SPRAY ANTICORROSIVO

251

BOHRERREINIGUNGS-BÜRSTE

BUR CLEANING BRUSHES

CEPILLO PARA LIMPIAR FRESAS

251

SPEZIALÖL FÜR DIE FRÄSTECHNIK

SPECIAL OIL FOR MILLING TECHNIQUE

ACEITE ESPECIAL PARA TÉCNICA DE MICROFRESADO

251

ELITE SERIES II

Serie tragbarer Handstücke | Portable Handpiece Series | Serie de piezas de mano portátiles



Handstück Set



#MHP02

Straight Handpiece Set / Juego de piezas de mano rectas

- Praktisch und transportierbar
- Inklusive Steuergerät und geradem Handstück
- Max. 30.000 U/min
- Langlebige Lithium-Batterie
- LED-Drehzahlanzeige
- Practical and portable
- Includes control unit and straight handpiece
- Max. 30,000 rpm
- Long-lasting lithium battery
- LED RPM display
- Práctico y portátil
- Incluye unidad de control y pieza de mano recta
- Máx. 30 000 r. p. m.
- Batería de litio de larga duración
- Indicador LED de r. p. m.

E-Type Motor Set



#MEM02

E-Type Motor Set / Conjunto motor tipo E

- Praktisch und transportierbar
- Inklusive Steuergerät und E-Type-Motor
- Max. 30.000 U/min
- Langlebige Lithium-Batterie
- LED-Drehzahlanzeige
- Practical and portable
- Includes control unit and E-type motor
- Max. 30,000 rpm
- Long-lasting lithium battery
- LED RPM display
- Práctico y portátil
- Incluye unidad de control y motor tipo E
- Máx. 30 000 r. p. m.
- Batería de litio de larga duración
- Indicador LED de r. p. m.

Elite Series II Steuergerät

Elite Series II Control Unit / Unidad de control Elite Serie II

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Tragbares Steuergerät • Läuft bis zu 30.000 rpm • Vorwärts- und Rückwärtslauf • Geeignet für E-Type-Motor der Elite Series II | <ul style="list-style-type: none"> • Portable control unit • Runs up to 30,000 rpm • Forward and reverse • Accepts the Elite Series II straight handpiece and E-type motor | <ul style="list-style-type: none"> • Unidad de control portátil • Funciona hasta 30 000 r.p.m. • Avance y retroceso • Acepta la pieza de mano recta Elite Series II y el motor tipo E |
|--|--|---|



Elite Series II Gerades Handstück

Elite Series II Straight Handpiece / Pieza de mano recta Elite Series II

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Für alle Bohrer und Polierer mit Handstück geeignet • Geringes Gewicht • Spannange mit Drehverriegelung | <ul style="list-style-type: none"> • Accepts all HP (handpiece) shank burs and polishers • Lightweight • Twist locking chuck mechanism | <ul style="list-style-type: none"> • Admite todas las fresas y pulidores de mango HP (pieza de mano) • Ligero • Mecanismo de bloqueo por giro |
|---|---|--|



Elite Series II E-Type Motor

Elite Series II E-Type Motor / Motor Elite Serie II Tipo E

- | | | |
|--|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Geeignet für alle ISO E-Type-Anbaugeräte • Geringes Gewicht | <ul style="list-style-type: none"> • Accepts all ISO E-Type attachments • Lightweight | <ul style="list-style-type: none"> • Acepta todas las fijaciones ISO de tipo E • Ligero |
|--|---|---|



Elite Series II HP mit Nasenkonus

Elite Series II HP Nose Cone / Cono de nariz Elite serie II HP

- | | | |
|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Geeignet für alle Bohrer und Polierer mit HP-Schaft • Passt auf alle ISO E-Type-Motoren • Drehverriegelung des Spannfutters | <ul style="list-style-type: none"> • Accepts all HP (handpiece) shank burs and polishers • Fits on all ISO E-type motors • Twist locking chuck mechanism | <ul style="list-style-type: none"> • Admite todas las fresas y pulidores de mango HP (pieza de mano) • Se adapta a todos los motores ISO tipo E • Mecanismo de bloqueo por giro |
|---|---|--|



Elite Series II FG

Elite Series II FG Contra Angle / Contraángulo Elite serie II FG

- | | | |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Geeignet für alle Instrumente mit FG-Schaft • Passt auf alle ISO E-Type-Motoren • Druckknopf-FG-Kopf | <ul style="list-style-type: none"> • Accepts all FG (friction grip) instruments • Fits on all ISO E-type motors • Push button FG head | <ul style="list-style-type: none"> • Acepta todos los instrumentos FG (friction grip) • Se adapta a todos los motores ISO tipo E • Pulsador cabeza FG |
|--|--|--|



Elite Serie II RA

Elite Series II RA Contra Angle / Contraángulo RA Elite serie II

- | | | |
|--|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Geeignet für alle Instrumente mit RA-Schaft • Passt auf alle ISO E-Type-Motoren • Druckknopf-RA-Kopf | <ul style="list-style-type: none"> • Accepts all RA (right angle) instruments • Fits on all ISO E-type motors • Push button RA head | <ul style="list-style-type: none"> • Acepta todos los instrumentos RA (ángulo recto) • Se adapta a todos los motores ISO tipo E • Pulsador cabeza RA |
|--|--|---|



IHR MEISINGER-ORDNUNGSSYSTEM | MEISINGER ORGANIZATION SYSTEM | SISTEMA DE ORGANIZACIÓN MEISINGER

Und so funktioniert 's! Die effiziente Lösung für Ihre Lagerorganisation und Bestandsführung in 3 Schritten

And this is how it works! The efficient solution for your inventory management in 3 steps

Y así es como funciona La solución eficaz para la gestión de su inventario en 3 pasos

Sie möchten immer die Instrumente zur Hand haben, die Sie gerade benötigen? Mit dem Ordnungssystem von MEISINGER wird die Produktlagerung und -nachbestellung jetzt noch einfacher – damit Sie sich ganz auf Ihre Patienten und Kunden konzentrieren können.

Would you like to always have an instrument to hand when you need it? With the MEISINGER organization system, product storage and reordering is now even easier – so you can concentrate fully on your patients and customers.

¿Le gustaría tener siempre a mano un instrumento cuando lo necesita? Con el sistema de organización MEISINGER, almacenar y reordenar productos es ahora aún más fácil, para que pueda concentrarse plenamente en sus pacientes y clientes.



1. Kontaktieren Sie uns unter Tel.: 02131 2012-303 oder vereinbaren Sie einen Termin mit einem unserer Außendienstmitarbeitenden und nennen Sie uns die Artikel, mit denen Sie derzeit arbeiten. Wir suchen für Sie die entsprechenden MEISINGER-Produkte heraus und liefern Ihnen Ihr individuelles MEISINGER-Ordnungssystem.

Contact us on: 0049 2131 2012-303 or make an appointment with one of our sales representatives and let us know which burs are part of your daily practice. We will select the matching MEISINGER products for you and supply you with your individual MEISINGER organization system.

Póngase en contacto con nosotros en el 0049 2131 2012-303 o concierte una cita con uno de nuestros comerciales y díganos qué fresas forman parte de su día a día. Seleccionaremos los productos MEISINGER adecuados y le suministramos su sistema de organización MEISINGER individual.

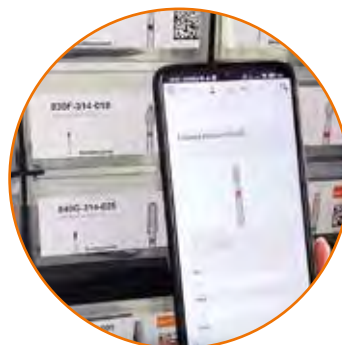
2. Auf den Schubladenetiketten ist der darin enthaltene Artikel mit Abbildung und Bestellnummer aufgeführt sowie ein entsprechender QR-Code für unsere MEISINGER Dental App. Einfach scannen und nachbestellen. So wird Ihre Nachbestellung noch einfacher und komfortabler.

The drawers are labeled with the respective item they contain. On the label you find an image and the order number of the instrument as well as a QR code for our MEISINGER Dental App. When using the app, simply scan and re-order in a easy and convenient way.

Los cajones están etiquetados con el artículo que contienen. En la etiqueta encontrará una imagen y el número de pedido del instrumento, así como un código QR para nuestra MEISINGER Dental App. Al utilizar la aplicación, basta con escanear para volver a pedir de forma fácil y cómoda.

MEISINGER-APP

Download now!



STERILISIERBARE BOHRERSTÄNDER AUS ALUMINIUM | STERILIZABLE BUR BLOCKS, ALUMINIUM | FRESEROS VACIOS, ESTERILIZABLE, ALUMINIO

Diese Produkte sind aus farbig eloxiertem Aluminium hergestellt. Durch die Verwendung einiger chemischer Reinigungslösungen können sich die Produkte leicht verfärben. Zu verwenden sind deshalb keine zu alkalisch oder zu sauren Reinigungslösungen (empfohlener pH-Wert 5,5-8,5).

Folgende Sterilisationsmethode ist bedenkenlos anzuwenden: Sterilisation mit feuchter Hitze im Autoklaven (z.B. bei 134 °C / 273 °F). Bitte beachten Sie bei der Sterilisation unbedingt die Bedienungsanleitung des Geräteherstellers und die Hinweise bezüglich der Sterilisationsdauer.

Die Bohrerstände sind nur für Instrumente mit angegebenen Schaftarten optimal geeignet. Instrumente mit kürzeren Schaften sind nicht ausreichend gesichert und können hinausfallen.

These products are manufactured from colored anodized aluminum. When using chemical cleaning solutions, a slight discoloring may occur. Therefore, when using cleaning solution (recommended pH-value 5.5-8.5), it is advisable not to use those which have high contents of alkaline or acid.

The following sterilization method can be used without hesitation: Sterilizing with humid heat in the autoclave (e.g. at 134 °C / 273 °F). Please follow the operating instructions of the appliance according to the manufacturer and observe the recommendations regarding the duration of sterilization.

These Bur Blocks are only suitable for instruments with the specified shanks. Instruments with shorter shanks are not adequately secured and may fall out.

Estos instrumentos son de aluminio anodizado de color. Con la utilización de algunos detergentes químicos, los instrumentos pueden descolorarse fácilmente. Por lo tanto, no utilizar detergentes muy alcalinos o soluciones de limpieza muy ácidos (valor de pH recomendado 5,5-8,5).

El método siguiente de esterilización puede ser utilizado sin problemas: Esterilización con vapor en autoclaves (p. e. con 134 °C / 273 °F). Obsérvense las instrucciones de utilización del fabricante de equipo y las advertencias con respecto a la esterilización.

Solo se deben usar para los instrumentos con los tipos de vástago indicados. Los instrumentos con vástagos cortos no se pueden asegurar bien en estos freseros y se pueden caer.

Für Produkte aus Aluminium gelten folgende Anwendungshinweise:

- Beachten Sie genau die Vorschriften der Desinfektionsmittelhersteller: Einige sind für Aluminium nicht geeignet!

The following application tips apply for aluminum products:

- Observe the regulations precisely of the disinfectant manufacturer: some are not suitable for aluminum!

Para los productos de aluminio se aplican las instrucciones de utilización siguientes:

- Tener en cuenta las regulaciones de los fabricantes de desinfectantes: algunos no son apropiados para el aluminio!

ERLÄUTERUNG DER MASSANGABEN | EXPLANATION OF DIMENSIONS | MEDIDAS



BOHRERSTÄNDER, STERILISIERBAR, ORANGE | BUR BLOCKS, STERILIZABLE, ORANGE | FRESEROS VACIOS, ESTERILIZABLE, NARANJA

OR100GEL



ca. B 41 x H 33 x T 25 mm

Für 5 Winkelstück- (205) und 10 FG-Instrumente (316, 317)
For 5 RA instruments (205) and 10 FG instruments (316, 317)
Para 5 instrumentos RA (205) y 10 instrumentos FG (316, 317)

OR102GEL



ca. B 54 x H 30 x T 25 mm

Für 7 Winkelstück- (204, 205) und 14 FG-Instrumente (314, 315, 316)
For 7 RA instruments (204, 205) and 14 FG instruments (314, 315, 316)
Para 7 instrumentos RA (204, 205) y 14 instrumentos FG (314, 315, 316)


OR202GEL



ca. B 41 x H 33 x T 25 mm

Für 15 Winkelstück-Instrumente (205)
For 15 RA instruments (205)
Para 15 instrumentos RA (205)

Für alle | For all | Para todos

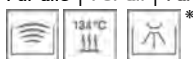

* Materialeignung der eingesetzten Mittel beachten (pH-Wert neutral, Eignung für Al) | Observe suitability of the material for means used (pH value, suitability for Al) | Es preciso tener en cuenta la idoneidad para el material del producto utilizado (valor pH neutro, adecuado para Al)

OR300GEL



ca. B 41 x H 30 x T 25 mm

Für 15 FG-Instrumente (314, 315, 316)
For 15 FG instruments (314, 315, 316)
Para 15 instrumentos FG (314, 315, 316)

OR302GEL



ca. B 54 x H 30 x T 25 mm

Für 21 FG-Instrumente (314, 315, 316)
For 21 FG instruments (314, 315, 316)
Para 21 instrumentos FG (314, 315, 316)

OR603GEL



ca. B 73 x H 30 x T 25 mm

Für 6 Winkelstück- (204, 205) und 12 FG-Instrumente (314, 315, 316)
For 6 RA instruments (204, 205) and 12 FG instruments (314, 315, 316)
Para 6 instrumentos RA (204, 205) y 12 instrumentos FG (314, 315, 316)

OR402GEL



ca. B 63 x H 31 x T 25 mm

Für 21 Winkelstück- (204) und 21 FG-Instrumente (314)
For 21 RA instruments (204) and 21 FG instruments (314)
Para 21 instrumentos RA (204) y 21 instrumentos FG (314)

OR606GEL



ca. B 73 x H 30 x T 25 mm

Für 30 FG-Instrumente (314, 315, 316)
For 30 FG instruments (314, 315, 316)
Para 30 instrumentos FG (314, 315, 316)

OR638GEL



ca. B 85 x H 29 x T 39 mm

Für 10 Winkelstück- (204, 205) und 10 FG-Instrumente (314, 315, 316)
For 10 RA instruments (204, 205) and 10 FG instruments (314, 315, 316)
Para 10 instrumentos RA (204, 205) y 10 instrumentos FG (314, 315, 316)

OR700GEL



ca. B 50 x H 69 x T 40 mm

Für 15 Handstück-Instrumente (104, 105)
For 15 Handpiece instruments (104, 105)
Para 15 instrumentos pieza de mano (104, 105)

OR702GEL



ca. B 100 x H 69 x T 40 mm

Für 23 Handstück-Instrumente (104, 105)
For 23 Handpiece instruments (104, 105)
Para 23 instrumentos pieza de mano (104, 105)

OR703GEL



ca. B 140 x 69 H x T 40 mm

Für 34 Handstück-Instrumente (104, 105)
For 34 Handpiece instruments (104, 105)
Para 34 instrumentos pieza de mano (104, 105)

Für alle | For all | Para todos



* Materialeignung der eingesetzten Mittel beachten (ph-Wert neutral, Eignung für Al) | Observe suitability of the material for means used (ph value, suitability for Al) | Es preciso tener en cuenta la idoneidad para el material del producto utilizado (valor pH neutro, adecuado para Al)

BOHRERSTÄNDER, STERILISIERBAR, BLAU | BUR BLOCKS, STERILIZABLE, BLUE | FRESEROS VACIOS, ESTERILIZABLE, AZUL

BL300GEL



ca. B 41 x H 30 x T 25 mm

Für 15 FG-Instrumente (314, 315, 316)
For 15 FG instruments (314, 315, 316)
Para 15 instrumentos FG (314, 315, 316)

BL700GEL



ca. B 50 x H 69 x T 40 mm

Für 15 Handstück-Instrumente (104, 105)
For 15 Handpiece instruments (104, 105)
Para 15 instrumentos pieza de mano (104, 105)

BL702GEL



ca. B 100 x H 69 x T 40 mm

Für 23 Handstück-Instrumente (104, 105)
For 23 Handpiece instruments (104, 105)
Para 23 instrumentos pieza de mano (104, 105)

BOHRERSTÄNDER, STERILISIERBAR, GRÜN | BUR BLOCKS, STERILIZABLE, GREEN | FRESEROS VACIOS, ESTERILIZABLE, VERDE

BL703GEL



ca. B 140 x 69 H x T 40 mm

Für 34 Handstück-Instrumente (104, 105)
For 34 Handpiece instruments (104, 105)
Para 34 instrumentos pieza de mano (104, 105)

GR102GEL



ca. B 54 x H 30 x T 25 mm

Für 7 Winkelstück- (204, 205) und 14 FG-Instrumente (314, 315, 316)
For 7 RA (204, 205) instruments and 14 FG instruments (314, 315, 316)
Para 7 instrumentos RA (204, 205) y 14 instrumentos FG (314, 315, 316)

GR202GEL



ca. B 41 x H 33 x T 25 mm

Für 15 Winkelstück-Instrumente (205)
For 15 RA instruments (205)
Para 15 instrumentos RA (205)

BOHRERSTÄNDER, STERILISIERBAR, SCHWARZ | BUR BLOCKS, STERILIZABLE, BLACK | FRESEROS VACIOS, ESTERILIZABLE, NEGRO

GR300GEL



ca. B 41 x H 30 x T 25 mm

Für 15 FG-Instrumente (314, 315, 316)
For 15 FG instruments (314, 315, 316)
Para 15 instrumentos FG (314, 315, 316)

GR606GEL



ca. B 73 x H 30 x T 25 mm

Für 30 FG-Instrumente (314, 315, 316)
For 30 FG instruments (314, 315, 316)
Para 30 instrumentos FG (314, 315, 316)

SW703GEL



ca. B 140 x 69 H x T 40 mm

Für 34 Handstück-Instrumente (104, 105)
For 34 Handpiece instruments (104, 105)
Para 34 instrumentos pieza de mano (104, 105)

Für alle | For all | Para todos



* Materialeignung der eingesetzten Mittel beachten (ph-Wert neutral, Eignung für Al) | Observe suitability of the material for means used (ph value, suitability for Al) | Es preciso tener en cuenta la idoneidad para el material del producto utilizado (valor pH neutro, adecuado para Al)

EDELSTAHL BOHRERSTÄNDER, ROSTFREI, STERILISIERBAR | STAINLESS STEEL BUR BLOCKS, NON-CORROSIVE, STERILIZABLE | FRESEROS DE ACERO FINO, INOXIDABLES, ESTERILIZABLES

BS441



ca. B 60 x H 40 x T 45 mm

Für 8 Winkelstück oder 8 FG-Instrumente
For 8 RA instruments or 8 FG instruments
Para 8 instrumentos RA o 8 instrumentos FG

BS541



ca. B 120 x H 40 x T 45 mm

Für 18 Winkelstück oder 18 FG-Instrumente
For 18 RA instruments or 18 FG instruments
Para 18 instrumentos RA o 18 instrumentos FG

BS440



ca. B 60 x H 40 x T 45 mm

Für 12 Winkelstück oder 12 FG-Instrumente
For 12 RA instruments or 12 FG instruments
Para 12 instrumentos RA o 12 instrumentos FG

BS540



ca. B 120 x H 40 x T 45 mm

Für 24 Winkelstück oder 24 FG-Instrumente
For 24 RA instruments or 24 FG instruments
Para 24 instrumentos RA o 24 instrumentos FG

BS470



ca. B 60 x H 65 x T 45 mm

Für 12 Handstück-Instrumente (103 & 104)
For 12 Handpiece instruments (103 & 104)
Para 12 instrumentos pieza de mano (103 & 104)

BS570



ca. B 120 x H 65 x T 45 mm

Für 24 Handstück-Instrumente (103 & 104)
For 24 Handpiece instruments (103 & 104)
Para 24 instrumentos pieza de mano (103 & 104)

BS151*



ca. B 162 x H 51 x T 85 mm

Für 40 Winkelstück oder 40 FG-Instrumente
For 40 RA instruments or 40 FG instruments
Para 40 instrumentos RA o 40 instrumentos FG

BS141*



ca. B 125 x H 40 x T 90 mm

Für 20 Winkelstück oder 20 FG-Instrumente
For 20 RA instruments or 20 FG instruments
Para 20 instrumentos RA o 20 instrumentos FG

BS171*




ca. B 125 x H 70 x T 90 mm

Für 20 Handstück-Instrumente
For 20 Handpiece instruments
Para 20 instrumentos pieza de mano

Für alle | For all | Para todos



* Vor der Reinigung muss der Boden entfernt werden. | The base must be removed prior to cleaning. | Antes de la limpieza se debe desmontar la base.

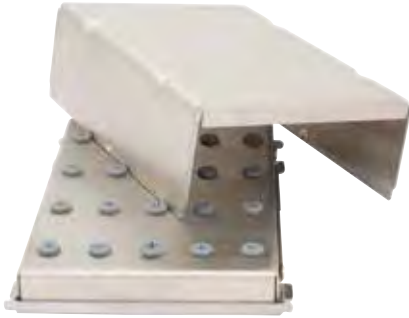BS140*

ca. B 125 x H 40 x T 90 mm

Für 20 Winkelstück oder 20 FG-Instrumente
For 20 RA instruments or 20 FG instruments
Para 20 instrumentos RA o 20 instrumentos FG

BS240*

ca. B 165 x H 40 x T 125 mm

Für 40 Winkelstück oder 40 FG-Instrumente
For 40 RA instruments or 40 FG instruments
Para 40 instrumentos RA o 40 instrumentos FG

BS170

ca. B 125 x H 70 x T 90 mm

Für 20 Winkelstück oder 20 FG-Instrumente oder 20 Handstück-Instrumente
For 20 RA instruments or 20 FG instruments or 20 Handpiece instruments
Para 20 instrumentos RA o 20 instrumentos FG o 20 instrumentos pieza de mano

BS270*

ca. B 165 x H 70 x T 125 mm

Für 40 Handstück-Instrumente
For 40 Handpiece instruments
Para 40 instrumentos pieza de mano

BS340*

ca. B 245 x H 40 x T 125 mm

Für 60 Winkelstück-Instrumente oder 60 FG-Instrumente
For 60 RA instruments or 60 FG instruments
Para 60 instrumentos RA o 60 instrumentos FG

BS370*

ca. B 245 x H 70 x T 125 mm

Für 60 Handstück-Instrumente
For 60 Handpiece instruments
Para 60 instrumentos pieza de mano

Für alle | For all | Para todos



* Vor der Reinigung muss der Boden entfernt werden. | The base must be removed prior to cleaning. |
Antes de la limpieza se debe desmontar la base.

BOHRERSTÄNDER, NICHT STERILISIERBAR, PLEXIGLAS | BUR BLOCKS, NON STERILIZABLE, PLEXIGLASS | FRESEROS VACIOS, NO ESTERILIZABLE, PLEXIGLÁS

2807



ca. B 163 x H 20 x T 107 mm

Sockel – Für 50 Hand- oder 50 Winkelstück-Instrumente
Base – For 50 Handpiece or 50 RA instruments
Base – Para 50 instrumentos 50 RA o pieza de mano

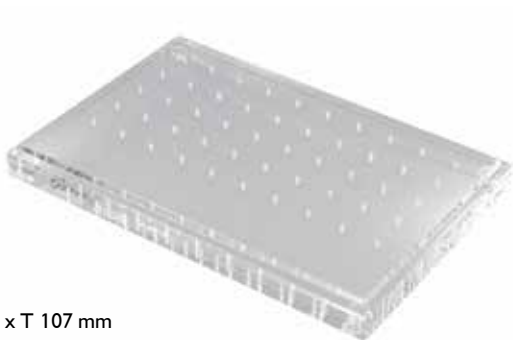
D2807



ca. B 163 x H 62 x T 107 mm

Deckel Handstück
Cover HP
Tapadera HP


2808



ca. B 163 x H 20 x T 107 mm

Sockel – Für 50 FG-Instrumente
Base – For 50 FG instruments
Base – Para 50 instrumentos FG

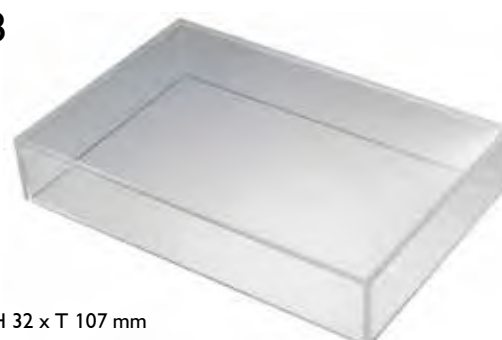D2808



ca. B 163 x H 32 x T 107 mm

Deckel FG
Cover FG
Tapadera FG

2813



ca. B 163 x H 20 x T 107 mm

Sockel – Für 25 Hand- oder 25 Winkelstück-Instrumente und 25 FG-Instrumente
Base – For 25 Handpiece or 25 RA instruments and 25 FG instruments
Base – Para 25 instrumentos 25 RA y pieza de mano o 25 instrumentos FG

D2813



ca. B 163 x H 43 x T 107 mm

Deckel Winkelstück
Cover RA
Tapadera RA

ROSTSCHUTZSPRAY | RUST PREVENTING SPRAY | SPRAY ANTICORROSIVO

**2820**

Sterilisierbares Rostschutzspray für Stahlinstrumente.

Anwendungszweck: Verhindert zuverlässig die Bildung von Rost während und nach der Sterilisation.

Für alle Sterilisationsverfahren geeignet: Autoklaven: max. 134 °C / 273,2 °F

Rust preventing spray, sterilizable, for steel instruments

Purpose of application: The rust preventing spray prevents rusting during and after sterilization.

Applicable for all methods of sterilization. Autoclave max. 134 °C / 273.2 °F

Spray anticorrosivo esterilizable para los instrumentos de acero

Aplicación: El Spray Anticorrosivo esterilizable evita de un modo eficaz la oxidación durante y después de la esterilización.

Indicado para todo tipo de esterilización. Autoclave - max. 134 °C / 273,2 °F

BOHRERREINIGUNGS-BÜRSTE | BUR CLEANING BRUSHES | CEPILLO PARA LIMPIAR FRESAS

430

Bohrerreinigungs-Bürste,
Schiebebürste, Messingdraht

Bur cleaning brush, scrubbing
brush, brass

Cepillo para limpiar fresas, cepillo
manual, alambre de latón

**431**

Bohrerreinigungs-Bürste,
Schiebebürste, Nylon

Bur cleaning brush, scrubbing
brush, nylon

Cepillo para limpiar fresas, cepillo
manual, nylon



Fig.	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1
430	200 000 599 000		250

Fig.	Ref.-Nr. / Ref.-No.		1
431	110 000 599 000		200
			250



Hinweis: Die Reinigungsbürsten sind nicht demontierbar, daher sollten die Bürsten bei Rückständen, die bei der Reinigung nicht entfernt werden können, entsorgt werden.

Note: The cleaning brushes are not detachable. Therefore, brushes with residue that cannot be removed during cleaning should be discarded.

Nota: Los cepillos de limpieza no son desmontable, por eso se deben separar aquellos que presenten restos que no se puedan eliminar.

SPEZIALÖL FÜR DIE FRÄSTECHNIK | SPECIAL OIL FOR MILLING TECHNIQUE |

ACEITE ESPECIAL PARA TÉCNICA DE MICROFRESADO

- Inhalt: 50 ml
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Metallen und Legierungen
- Gute Schmierwirkung
- Mit wässrigen und lösungsmittelhaltigen Reinigern leicht zu entfernen

- Content: 50 ml
- Compatible with a variety of metals and alloys
- Good lubricating effect
- Easy to remove with aqueous and solvent-based cleaners

- Contenido: 50 ml
- Compatible con distintos metales y aleaciones
- Buenas propiedades lubricantes
- Fácil de retirar con limpiadores acuosos y con disolventes

**2823**

Drehzahlen

Speed of rotating | Velocidades de giro

Rotierende Instrumente von MEISINGER umfassen das komplette Spektrum dentalmedizinischer Anwendungen. Die jeweilige Richtdrehzahl ist ein theoretischer Wert, der basierend auf der Geometrie der Instrumente und des grundsätzlichen Anwendungszwecks angegeben wird. Spezifische maximale und empfohlene Richtdrehzahlen finden sich bei den produktbezogenen Informationen (siehe Broschüre bzw. produktbezogene Verpackung).

- Eine Überschreitung der maximal zulässigen Drehzahl kann zu einer Beeinträchtigung der Leistungsfähigkeit der Produkte und/ oder zu einer Gefährdung des Patienten bzw. Anwenders führen.
- Lange und spitze Instrumente neigen bei Überschreitung der maximal zulässigen Drehzahl zu Schwingungen, die zur Zerstörung des Instrumentes führen können.
- Bei Arbeitsteil-Durchmessern über Schaftstärke können bei zu großen Drehzahlen starke Fliehkräfte auftreten, die zu Verbiegungen des Schaftes und/ oder zum Bruch des Instrumentes führen können. Aus diesem Grund darf die maximal zulässige Drehzahl keinesfalls überschritten werden.
- Die empfohlenen Drehzahlen und maximal zulässigen Drehzahlen entnehmen Sie bitte den produktbezogenen Informationen.
- Bitte beachten Sie die Anpassung der Drehzahlen in Abhängigkeit der vorliegenden Indikation und des Materials sowie des Arbeitsteildurchmessers und der Verzahnungsart. Die Auswahl der Arbeitsdrehzahl für einen konkreten Anwendungsfall richtet sich insbesondere auch nach dem verwendeten Instrumentenantrieb sowie den maximalen Anpresskräften und liegt im Ermessen des Anwenders.

Generell gilt:

- Je größer das Arbeitsteil eines Instrumentes, desto niedriger die Drehzahl.
- Je größer das Arbeitsteil eines Instrumentes, desto größer die Anpresskraft.
- Je größer die Verzahnung des Artikels, desto geringer sollte die Drehzahl gewählt werden.
- Instrumente mit maximaler Drehzahl 450.000 min⁻¹: Geeignet für Mikromotor-Handstücke und Turbinen mit stabiler Kugellagerung. Für Turbinen mit Luftlagerung nicht zu empfehlen.
- Instrumente mit maximaler Drehzahl 30.000–160.000 min⁻¹: Geeignet für Mikromotor-Handstücke bzw. Technik-Handstücke bis zur angegebenen Drehzahl. Für Turbinen nicht zu empfehlen.
- Chirurgische Instrumente: Geeignet für unteretzte Mikromotor-Hand- und Winkelstücke 10:1 mit stabiler Kugellagerung, ggf. mit steriler Außenkühlung oder Innenkühlung bei Verwendung eines entsprechenden Handstückes.

Rotating instruments by MEISINGER cover the entire spectrum of applications in dentistry. The respective speed is a theoretical value given on the basis of the geometry of the instruments and the principal application. You can find the specific maximum and recommended speeds in the product-related information.

- Exceeding the maximum permissible speed can lead to an impairment in the performance of the products and/or to a risk for the patient or the user.
- In particular, the long and sharp instruments tend to vibrate if the maximum permitted rotational speed is exceeded and this can lead to destroying the instruments.
- In the case of workpiece diameters which exceed the shaft strength, excessive speeds can lead to pronounced centrifugal forces which can lead to distortion of the shaft and/ or breaking of the instrument. For this reason, the admissible maximum number of revolutions must never be exceeded.
- The recommended speeds and maximum permissible speeds are given in the manufacturer's instructions (see brochure and product-related packaging).
- Please observe adapting the rotation speed in relation to the prevailing indication and the material as well as the diameter of the working part and the type of tooth connection. The selection of a working speed for a concrete application depends specifically on the instrument drive used as well as the maximum application forces and lies within the discretion of the user.

As a general rule:

- the larger the working part of an instrument, the lower the speed should be set.
- the larger the working part of an instrument, the greater the application force.
- the rougher the tooth connection of the article, the lower the selected speed should be.
- Instruments with a maximum speed 450,000 rpm: suitable for micro-motor handpieces and turbines with stable ball-bearings. Not recommended for air-cushioned turbines.
- Instruments with a maximum speed 30,000–160,000 rpm: suitable for micro-motor handpieces and technical handpieces up to the given speed. Not recommended for turbines.
- Surgical instruments: suitable for geared-down micro-motor handpieces and angled handpieces 10:1 with stable ball bearings, if applicable, with external cooling or internal cooling when using the appropriate handpiece.

Los instrumentos rotatorios de MEISINGER abarcan todo el espectro de las indicaciones dentales. La velocidad orientativa en cada caso es un valor teórico para el que se han tenido en cuenta la geometría de los instrumentos y la finalidad de uso fundamental. Las velocidades orientativas máximas y recomendadas se encuentran en los folletos informativos de los productos.

- Si se supera la máxima velocidad de giro permitida se puede causar una merma en la potencia de los productos, o poner en peligro al paciente o al usuario.
- Los instrumentos largos y con punta tienden a vibrar cuando se supera la velocidad de giro máxima permitida, lo que puede provocar su destrucción.
- Cuando el diámetro de los extremos activos supera el del vástago, una velocidad de giro excesiva puede generar fuertes fuerzas centrífugas que pueden doblar el vástago o romper el instrumento. Por este motivo no debe superarse en ningún caso la velocidad de giro máxima permitida.
- Consulte en la información proporcionada por el fabricante las velocidades de giro recomendadas y las velocidades de giro máximas permitidas (en el folleto o en el envase del producto).
- Tenga en cuenta que la velocidad de giro se debe adaptar a la indicación concreta y al material, así como al diámetro del extremo activo y al tipo de dentado. El usuario deberá seleccionar la velocidad de trabajo en cada caso en función de la pieza de mano que se usa con el instrumento y de las fuerzas de aplicación máximas.

Por lo general:

- Cuanto mayor es la parte activa de un instrumento, menor es la velocidad de giro.
- Cuanto mayor es la parte activa de un instrumento, mayor es la fuerza de aplicación.
- Cuanto mayor es el dentado del instrumento menor debe ser la velocidad de giro seleccionada.
- Los instrumentos con una velocidad máxima de giro de 450.000 min⁻¹: están indicados para las piezas de mano con micromotor y las turbinas con cojinete de bolas. No están recomendados para las turbinas con cojinete neumático.
- Los instrumentos con una velocidad máxima de giro de 30.000–160.000 min⁻¹: están indicados para las piezas de mano con micromotor y las piezas de mano técnicas hasta la velocidad indicada. No están recomendados para las turbinas.
- Instrumentos quirúrgicos: indicados para las piezas de mano y contraángulos con micromotor de velocidad reducida 10:1 con cojinete de bolas, dado el caso con refrigeración externa o interna estéril usando la pieza de mano correspondiente.

Besondere Hinweise

Diamantinstrumente Praxis:

Auf harten Materialien wie Zahnschmelz empfiehlt sich eine feinere Körnung bei einer hohen Drehzahl zu wählen, wenn die Oberfläche fein bearbeitet werden soll. Die endgültige Wahl der Körnung und der Drehzahl obliegt dem Anwender.

Diamantinstrumente Labor:

Bei graziilen Arbeiten sollte die Drehzahl je nach Oberflächenbeschaffenheit und Arbeitsziel gewählt werden, hierbei sollte die Erfahrung des Anwenders beachtet werden. Beachten Sie bitte, dass die Diamant-Instrumente bei einer höheren Drehzahl die beste Schneidleistung entwickeln, durch den Selbstschärfer Effekt. Die endgültige Wahl der Körnung und der Drehzahl obliegt dem Anwender.

Keramische Schleifer

Bei harten Werkstoffen (z.B. gebrannte Keramik, Edelmetall-(Co-Cr-Mo-Legierungen) wird der Einsatz weicher Schleifkörper bei hohen Drehzahlen empfohlen, um eine Abnutzung, aber kein „Verschmieren“ zu erreichen. Für weiche Werkstoffe wird die Bearbeitung mit hartgebundenen Schleifkörpern bei niedrigen Drehzahlen empfohlen.

Chirurgische Instrumente

Nachfolgende Drehzahlrichtwerte sind generell in der Chirurgie gültig:

Handstück:

- empfohlen: 6.000 - 10.000 min⁻¹
- maximal: 40.000 - 50.000 min⁻¹

Winkelstück:

- empfohlen: 6.000 - 10.000 min⁻¹
- maximal: 40.000 - 50.000 min⁻¹

FG:

- empfohlen: 80.000 min⁻¹
- maximal: 100.000 - 120.000 min⁻¹

231DC:

- empfohlen: 800 min⁻¹
- maximal: 1.000 min⁻¹

Trepane

Beim Einsatz von Trepanen ist mit besonderer Sorgfalt vorzugehen. Insbesondere sollten die empfohlenen Drehzahlen nicht überschritten werden. Zur Vorbereitung des eigentlichen Einsatzes eines Trepan sollte dieser im Linkslauf so eingesetzt werden, dass eine Nut im Knochen entsteht. Danach kann der Trepan in diese Nut eingesetzt werden und mit Rechtslauf weiter in die Tiefe vorgegangen werden.

Empfohlene Drehzahlen:

300 - 500 min⁻¹

Special notes

Diamond Instruments Practice:

On hard materials such as dental enamel, it is recommended to use a finer grain at a higher speed for precision machining of the surface. The final decision as to graining and speed lies with the user.

Diamond Instruments Laboratory:

For delicate work, the speed should be selected according to the surface quality and the intended result of the work, taking into account the experience of the user. Please note that diamond instruments develop their best cutting quality at higher speeds due to the self-sharpening effect. The final decision as to graining and speed lies with the user.

Ceramic grinders

For hard materials (e.g. fired ceramics, precious metal (Co-Cr-Mo alloys) the use of soft grinding tools at high speeds is recommended to achieve abrasion but not „smudging“. For soft materials, machining with hard-bonded grinding tools at low speeds is recommended.

Surgical instruments

The following reference values for rotation speeds apply to surgery in general:

Handpiece

- recommended: 6,000 - 10,000 rpm
- maximum: 40,000 - 50,000 rpm

Angled handpiece:

- recommended: 6,000 - 10,000 rpm
- maximum: 40,000 - 50,000 rpm

FG:

- recommended: 80,000 rpm
- maximum: 100,000 - 120,000 rpm

231DC:

- recommended: 800 rpm
- maximum: 1,000 rpm

Trepans

Special care should be exercised when using trepans. Specifically, the recommended speeds are not to be exceeded. When preparing the use of a trepan, this should be inserted counter-clockwise to create a groove in the bone. Then the trepan can be inserted deeper into groove with clockwise rotation.

Recommended speeds:

300 - 500 rpm

Notas especiales

Instrumentos de diamante Consultorio:

Si los materiales son duros, como el esmalte, se recomienda usar grano fino y ajustar una velocidad de giro alta si lo que se desea es un mecanizado fino de la superficie. La selección final del grano y de la velocidad es decisión del usuario.

Instrumentos de diamante Laboratorio:

En las piezas delicadas, la velocidad de giro se debe seleccionar en función de las características de la superficie y del objetivo del trabajo. Tenga en cuenta que los instrumentos de diamante desarrollan el mejor rendimiento de corte a una mayor velocidad de giro debido al efecto autoafilante. La selección final del grano y de la velocidad es decisión del usuario.

Abrasivos de cerámica

Para los materiales duros (p. ej. cerámica cocida, aleaciones de metales preciosos-[Co-Cr-Mo]) se recomienda usar abrasivos blandos a alta velocidad de giro para conseguir el desgaste sin „embotamiento“. En el caso de los materiales blandos se recomienda trabajar con abrasivos duros a velocidades de giro bajas.

Instrumentos quirúrgicos

En general, las velocidades siguientes son válidas para la cirugía:

Pieza de mano:

- recomendación: 6.000 - 10.000 min⁻¹
- máximo: 40.000 - 50.000 min⁻¹

Contraángulo:

- recomendación: 6.000 - 10.000 min⁻¹
- máximo: 40.000 - 50.000 min⁻¹

FG:

- recomendación: 80.000 min⁻¹
- máximo: 100.000 - 120.000 min⁻¹

231DC:

- recomendación: 800 min⁻¹
- máximo: 1.000 min⁻¹

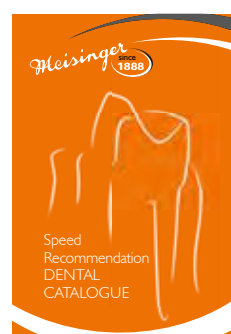
Trépano

Si se usan trépanos es preciso tener especial cuidado. En ningún caso deberán superarse las velocidades de giro recomendadas. Como preparación inicial para usar el trépano se recomienda ajustarlo primero para que gire hacia la izquierda, de modo que el instrumento labre una muesca en el hueso. Y después colocar el trépano en esta muesca, cambiar el giro hacia la derecha e ir perforando en el hueso.

Velocidades de giro recomendadas:

300 - 500 min⁻¹

Detaillierte Informationen zu Drehzahlerefehlungen finden Sie in unserer separaten erhältlichlichen Drehzahl-Broschüre und unter www.meisinger.de | For detailed information on speed of rotating see separately available brochure or www.meisingerusa.com | Para información detallada sobre velocidades de giro véase se vende por separado folleto o www.meisinger.de



Index Figure

Fig.	Page	Fig.	Page	Fig.	Page	Fig.	Page	Fig.	Page	Fig.	Page												
HM 1	58	HM 48	L 155	HM 129	FX 75		229	KH 159	HM 408	MG 152		661	pink 129										
HM 1	S 59	HM 48	LU 155	HM 129	GX 76		229	FS 160		411	G 156		662	XF white 123									
HM 1	SQ 59	HM 48	L 184	HM 129	PX 78		229		161	HM 416		74		662	green 128								
HM 1	SQ 59		48 141		130 116		229	L 161		HM 416	GX 76		662	pink 129									
HM 1	S 153	HM 49	LXR 69	HM DO 132	67		229	XL 161		430		251		663	green 128								
HM 1	T 153	HM 71		59	HM 132	70		230	KH 159		431		251		663	pink 130							
SF 1	RF 98	HM 71		74	HM DO 133	67		231		450		144		665	green 128								
SF 1	RF 145	HM 71	GX 76		HM 133	70		231	DC 157		452	RF 144		665	pink 130								
	1 138		71 142		HM 134	70		232	RF 144		452	S 144		666	XF white 123								
	1 RF 138	HM 72		74	HM DO 134	67		234		144		453	white 132		666	green 128							
HM 2		HM 72	FX 75		HM 135	70	HM 236		164	HM 460	GX 76		666	pink 130		666	pink 130						
3	138	HM 72	GX 76		HM DO 135	67		236	RF 164	HM 486	FX 75		Z 667		125		667	green 128					
HM 4	C 56	HM 72	SX 77		HM 138	FX 75	LH 242		164	HM 486	GX 76			667	pink 130		667	pink 130					
HM 4	CL 56	HM 72	FS 80		HM 138	GX 76		242		164	HM 486	HT 81					667	pink 130					
HM 4	CXL 56	HM 72	GX 152		HM 138	MX 78	HM 243		71	HM 486	GT 81		KB 671	green 131			671	green 131					
HM 4	CXXL 56		72 142		HM 138	PX 78	HM 243	K 71		HM 486	FT 81		KB 671	brown 131			671	orange 132					
HM 7	RX 56	HM 73		74	HM 138	FQ 79	HM 244		71	HM 486	ET 81		S 671	green 128			671	green 128					
HM 7		HM 73	MF 76		HM 139	FX 75	HM 244	K 71		HM 487	FX 75			671	pink 130			671	pink 130				
HM 7	L 61	HM 73	GX 76		HM 139	GX 76	HM 245		71	HM 487	GX 76			712	green 128			712	green 128				
SF 10	224	HM 73	MG 77		HM 139	PX 78	HM 245	K 71		HM 488	FX 75		KB 716	green 131					716	green 131			
	11 138	HM 73	MX 78			140 116	HMUN 245		62	HM 489		74		717	green 128					717	green 128		
	11 RF 138	HM 73	PX 78		HM 141		153	HM 246		71	HM 489	FX 75		KB 722	green 131					722	green 131		
SF 14	224	HM 73	brown 152		HM 141	A 153	HM 247		70		508		39		722	green 131					722	green 131	
HM 17	55	HM 73	GQ 152		HM 141	F 153	B 250	G 82			509		39		Z 722		125				722		125
HM 18	CR 55	HM 75		74	HM 141	AS 153	B 250	F 82			514		145		KB 727	green 131					727	green 131	
B 21	R 62	HM 75	G 74		HM 141	RF 155	HM 250	FX 75		HM 515		65		KB 728	green 131					728	green 131		
HM 21	RX 54	HM 75	FX 75			150 116	HM 250	GX 76			515		145		KB 731	green 131					731	green 131	
HM 21	CX 54	HM 75	GX 76		HM 151		150		82	B 251	S 82			KB 731	brown 131					731	brown 131		
HM 21		61	HM 75	HX 77	HM 151		179		82	B 251	H 82			731	white 132					731	white 132		
HM 21	L 61	62	HM 75	SX 77	HM 152		150		82	B 251	F 82			731	pink 133					731	pink 133		
HM 21	R 62		75	Q 79	HM 152		150		82					731	brown 133					731	brown 133		
HM 21		74		142	HM 152		179		74	HM 251				731	pink 133					731	pink 133		
HM 21	R 184	HM 77		74		155 116	HM 251	G 74			529	S 134			731	brown 133					731	brown 133	
HMG 21	RX 54	HM 77	EX 75			160 116	HM 251	FX 75			529	D 134			D 732	F 126					732	F 126	
	21 139	HM 77	FX 75		HM 161		150		76	HM 251	GX 76			Z 732		125				732		125	
B 23	G 82	HM 77	MF 76		HM 161	RX 150	HM 251	HX 77			601	XF white 123			732	white 132					732	white 132	
B 23	F 82	HM 77	GX 76		HM 161		154		77	HM 251	SX 77			732	pink 133					732	pink 133		
HM 23	RX 54	HM 77	MG 77		HM 162		150		78	HM 251	MX 78			732	brown 133					732	brown 133		
HM 23	CX 54	HM 77	HX 77		HM 162	A 150	HM 251	QX 78			601	green 127			732	pink 133					732	pink 133	
HM 23		63	HM 77	MX 78	HM 162	SL 150	HM 251	FQ 79			601	pink 129			732	brown 133					732	brown 133	
HM 23	L 63	64	HM 77	PX 78	HM 162	ST 150	HM 251	Q 79			601	pink 129			732	pink 133					732	pink 133	
HM 23	R 64	65	HM 77	GX 152	HM 162	SX 150	HM 251	GM 79			601	green 127			732	pink 133					732	pink 133	
HM 23	SR 65		77 142		HM 162		154		80	HM 251	FF 80			732	pink 133					732	pink 133		
HM 23	SRX 65	HM 78		74	HM 162	RF 154	HM 251	GF 80			603	green 127			732	pink 133					732	pink 133	
HM 23	LR 74	HM 78	MF 76		HM 163		151		80	HM 251	FS 80			732	pink 133					732	pink 133		
HM 23	FX 75	HM 78	GX 76		HM 163	A 151	HM 251	DF 80			613	pink 129			732	pink 133					732	pink 133	
HM 23	GX 76	HM 78	MG 77		HM 163	RF 154	HM 251	DG 81			622	green 127			732	pink 133					732	pink 133	
HM 23	FQ 79		78 142		HM 164		151		81	HM 251	ST 81			Z 736		125				736		125	
HM 23	R 184	B 79	G 82		HM 164	RF 154	HM 251	GX 152			624	green 127			736	pink 133					736	pink 133	
HMG 23	RX 55	B 79	F 82		HM 165		151		117		624	pink 129			743	S pink 134					743	S pink 134	
HM 25	60	HM 79		74	HM 165	RF 154		253	G 117		633	green 127			743	S brown 134					743	S brown 134	
HM 30	MF 76	HM 79	G 74		HM 166		151		117		637	pink 129			744	green 134					744	green 134	
HM 30	MG 77	HM 79	EX 75		HM 166	A 151		253	M 117		Z 638		125		744	pink 134					744	pink 134	
HM 31	C 55	HM 79	FX 76		HM 166	ST 151		253	MF 117		638	XF white 123			751	pink 134					751	pink 134	
HM 31	CL 55	HM 79	GX 75		HM 166	RX 151		253	F 117		638	F green 126			M 801		44				801		44
HM 31	A 58	HM 79	HX 77		HM 166		154		152	HM 254	E 152			S 801		50				801		50	
HM 31	C 58	HM 79	SX 77		HM 166	RF 154		254	LE 152		638	pink 129			801	L 14					801	L 14	
HM 31		61	HM 79	MX 78	HM 167		152		78	HM 254	MX 78			801	L 179					801	L 179		
HM 31	L 61		HM 79	PX 78	HM 167		154		78	HM 261	PX 78			802		14				802		14	
HM 31	R 62		HM 79	FQ 79	HM 168		154		68	HM 274				802	LG 15					802	LG 15		
HM 31	RS 62		HM 79	GM 79	HM 168	RF 154		280		65				802	KG 29					802	KG 29		
HM 31	LR 62		HM 79	FF 80	HM 169	RF 154		301	LR 146		640	green 127			802	KG 179					802	KG 179	
HM 33	C 55		HM 79	GF 80		176 178		303	S 146		640	pink 129			802	LG 179					802	LG 179	
HM 33		63	HM 79	ST 81		180 GR 178		303	RF 146		645	XF white 123			S 805		50				805		50
HM 33	L 63		HM 79	HT 81		182 178		305	RF 146		645	F green 126			805		15				805		15
HM 33	R 64		HM 79	GT 81		183 LR 178		306	RF 146		649	pink 129			806		16				806		16
HM 33	IL 150		79 142			186 RF 158		307	RF 146		649	green 127			S 807		50				807		50
HM 33	T 150					187 RF 158		309	RF 146		649	pink 129			807		15				807		15
HM 34	IL 150		81 RF 142			188 RF 158		313	SR 145		650	green 127			808		16				808		16
HMG 34	RS 55		81 IC 165			191 A 180		314	RF 147		650	pink 129			808	L 16					808	L 16	
HMG 35	RS 55		82 RF 142		HM 191		180		147		651	green 128			808	R 16					808	R 16	
HM 36	R 55		84 RF 143			191 R 179		318	RF 147		B 652	R 132			808	D 43					808	D 43	
	36 139		85 RF 143			193 179		320	A 147		KB 652	R 131			808	LD 43					808	LD 43	
HMG 37	RS 55		89 RF 143			194 143		327	RF 147		KB 652	brown 131			809		16				809		16
	37 139		91 RF 143			202 RF 158		329		146	S 652	R 132			809	R 17					809	R 17	
	38 R 139		92 RF 143		HSS 203		140		47		Z 652	R 125			B 811		12				811		12
	39 139		95 RF 143			203 RF 140			70		652	green 128			811	L 17					811	L 17	
	39 RF 139		100 116			203 RF 158			69		652	green R 128			813		15				813		15
HM 41			105 116			2																	

Fig.	Page	Fig.	Page	Fig.	Page	Fig.	Page	Fig.	Page	Fig.	Page										
	829	19		863	L	35		2582	231		9569	P	112		9744	M	102		A2001	159	
B	830	12		863	KG	35		2595	200		9569	H	112		9744	F	102		ACE23	205	
	830	19		866		36		2609	227		9571	V	112		9744	C	102		ACO23	221	
	830	LF	19	867		36		2638	232		9571	P	112		9745	G	102		APA23	239	
	831	19	B	868		13		2640	230		9571	H	112		9745	M	102		APP22	194	
	833	12		868		36		2656	M	197		9572	S	111		9745	F	102		B1001	159
M	833	44	B	869		13		2662	228		9572	U	111		9746	G	103		B2001	159	
	833	20		869		36		2663	222		9572	V	112		9746	M	103		BB23	199	
	833	KH	20	869	L	36		2670	216		9572	P	112		9746	F	103		BBV23	202	
	833	L	20	870		16		2740	237		9572	H	112		9746	C	103		BC02	198	
	834	21		872		37		2807	250		9573	S	111		9749	G	103		BC03	229	
	834	W	21	873		37		2808	250		9573	U	111		9749	M	103		BC04	236	
	835	22		875		31		2813	250		9573	V	112		9749	F	103		BL300GEL	247	
	836	22		876	F	37		2820	147		9573	P	112		9752	H	103		BL700GEL	247	
B	837	12		877		37		2820	251		9573	H	112		9752	G	103		BL702GEL	247	
B	837	L	12	B	878	13		2823	251		9573	X	134		9752	M	103		BL703GEL	247	
B	837	R	12		878	37		5901	216		9577	V	112		9752	F	103		BRSS1	163	
S	837	50	B	879	13			9119	145		9577	P	112		9752	C	103		BRSS2	163	
	837	22	S	879	51			9120	145		9577	H	112		9753	G	103		BS140	249	
	837	XL	22		879	37		9501	V	92		9578	V	112		9753	M	103		BS141	248
	837	L	22	B	880	13		9501	P	92		9578	P	112		9753	F	103		BS151	248
	837	R	24	M	880	44		9501	H	92		9578	H	112		9760	M	100		BS170	249
	837	D	43		880	23		9501	U	95		9579	S	111		9760	F	100		BS171	248
	837	LD	43		881	23		9502	V	92		9579	U	111		9762	M	100		BS240	249
M	838	44		881	Z	42		9502	P	92		9579	V	113		9762	F	100		BS270	249
S	838	50		882		23		9502	H	92		9579	P	113		9765	M	101		BS340	249
Z	838	L	56	882	L	23		9502	U	95		9579	H	113		9765	F	101		BS370	249
	838	23		883	H	23		9503	V	92		9580	V	113		9766	M	100		BS440	248
	838	L	23	884		26		9503	P	92		9580	P	113		9766	F	100		BS441	248
	839	25		885		26		9503	H	92		9580	H	113		9767	M	100		BS470	248
	839	R	25	B	886	13		9504	V	92		9581	P	113		9767	F	100		BS540	248
	839	KF	25		886	26		9504	P	92		9613	V	108		9768	M	100		BS541	248
	840	24		888		35		9504	H	92		9613	P	108		9768	F	100		BS570	248
	841	24	M	889		44		9504	U	95		9613	H	108		9769	M	101		BV024	165
	842	24		889	L	35		9506	V	92		9617	V	108		9769	F	101		BV025	165
	843	25	M	890		44		9507	V	92		9617	P	108		9770	H	103		C1001	159
	845	26		890	F	33		9507	P	92		9617	H	108		9770	G	103		CBE00	162
	845	R	28	890	LF	33		9507	H	92		9619	V	108		9770	M	103		CBT01	225
	846	26		891		22		9507	U	95		9619	P	108		9770	F	103		CLK01	195
	846	W	27		893	38		9508	V	93		9619	H	108		9770	C	103		CMC02	205
	846	R	28		894	20		9508	P	93		9652	V	108		9771	G	105		CMC03	213
	846	KR	28	M	895	44		9508	H	93		9652	P	108		9771	M	105		CP22	220
B	847	13		895		38		9508	U	95		9652	H	108		9771	F	105	HM	D0132	184
B	847	R	13	M	896	44		9509	P	93		9653	V	108		9771	C	105	HM	D0379	184
S	847	50		896	F	38		9509	H	93		9653	P	108		9780		101		D1001	159
	847	27		897	W	27		9509	U	95		9653	H	108		9781		101		D2807	250
	847	W	27	897	R	31		9511	V	93		9681	V	96		9782		101		D2808	250
	847	R	28	898		33		9511	P	93		9681	P	96		9790		110		D2813	250
	847	KR	28	899		38		9511	H	93		9681	H	96		9791		110		DB01	203
	847	D	43	907		18		9511	U	95		9683	V	96		9810		104		DB02	203
	848	27		908		21		9513	V	93		9683	P	96		9811		104		DB03	218
	848	R	28	909		18		9513	P	93		9683	H	96		9812		104		DCA01	107
	848	W	28	910	D	48		9513	H	93		9687	V	96		9961		94		DCA010	107
	848	D	43	911	D	48		9513	U	95		9687	P	96		9962		94		DCA011	107
	849	29		915	D	48		9514	V	93		9712	G	99		9963		94		DCA012	107
	849	LF	29	915	MG	157		9514	P	93		9712	M	99		9964		94		DCA014	107
B	850	13		921	DF	48		9514	H	93		9712	F	99		9965		94		DCA016	107
B	850	56		930	D	49		9515	U	95		9713	M	99		9966		94		DCA02	107
S	850	50		932	D	49		9516	U	95		9713	F	99		9967		94		DCA03	107
	850	29	S	935	C	51		9517	V	93		9714	G	99		9968		94		DCA04	107
	851	30		935	D	47		9517	P	93		9714	M	99		9969		94		DCA05	107
	851	L	30	S	936	C	51	9517	H	93		9714	F	99		9970		94		DCA06	107
B	852	13	S	937	C	51		9518	P	93		9718	G	99		9991	C	97		DCA07	107
B	852	56	S	941	G	51		9518	H	93		9718	M	99		9995		97		DCA08	107
S	852	50		943	DC	157		9526	V	100		9718	F	99		9995	C	97		DCA09	107
	852	30		943	DC	47		9526	P	100		9734	H	124		9995	M	97		DEG00	235
	852	GF	30	947	DF	49		9527	V	100		9734	G	124		9996		97		DP22	117
	852	Z	42	SF	1010	98		9527	P	100		9735	H	124				42		DP4	117
B	855	13	SF	1020		98		9528	V	100		9735	G	124	Z	0801		42		DP001	106
	855	30	SF	1030		98		9528	P	100		9736	H	124	Z	0818		57		DP0010	106
	855	LF	30	SF	1040		98	9531	P	185		9736	G	124	Z	0833		42		DP002	106
	856	31		1321		233		9532	P	185		9738	H	124	Z	0850		42		DP003	106
	857	31		1470		227		9533	P	185		9738	G	124	Z	0863		42		DP004	106
	858	32		2413		201		9534	P	185		9741	G	102	D	203		45		DP005	106
	859	32		2450		200		9535	P	185		9741	M	102		405	S	45		DP006	106
	859	L	32		2522		201	9536	P	185		9741	F	102		510W		21		DP007	106
	859	W	32		2530		238	9537	P	185		9742	H	102		511W		21		DP008	106
	860	34		2531		202		9538	P	185		9742	G	102	Z	801	L	42		DP009	106
S	861	50		2540		237		9546	P	185		9742	M	102	Z	818	G	57		DSG21	212
	861	34		2541		239		9561	P	109		9742	F	102	Z	838	L	42		DSP22	231
	861	KF	35		2561		199	9561	U	109		9742	C	102		881	PS	45		DSU21	209
B	862	13		2565		196		9562	P	109		9743	G	102		915	DM	48		DS221	217
S	862	50		2565	T	197		9564	P	109		9743	M	102		916	D	47		DS01	233
	862	34		2571		223		9564	U	110		9743	F	102		918	D	47		E1001	159

Index Singles

Fig.	Page
F1001	159
G2001	159
GBK23	220
GC01	211
GC02	211
GC03	214
GC04	215
GC05	221
GC07	215
GR102GEL	247
GR202GEL	247
GR300GEL	247
GR606GEL	247
JK01	226
JK03	208
JK04	217
JK05	238
KD01 G	157
KD02 G	157
KM001	206
LUS03	219
LUS04	219
LUS05	207
LUS06	206
LUS07	207
LUS100	210
LUS30	226
LUS66	223
LUS80	210
LUS85	212
LUS91	214
MC01	225
MC02	196
MCHP2	243
MCPL2	243
MCU02	243
MEAFG	243
MEAHP	243
MEARA	243
MEM02	242
MHP02	242
OR100GEL	245
OR102GEL	245
OR202GEL	245
OR300GEL	246
OR302GEL	246
OR402GEL	246
OR603GEL	246
OR606GEL	246
OR638GEL	246
OR700GEL	246
OR702GEL	246
OR703GEL	246
PCL01	97
PCL03	97
PCL04	97
PCL05	97
PCL06	97
PCL07	97
PCL08	97
PCL09	97
PCL10	97
PKA24	229
PMMA1	228
PPP22	194
RCB00	155
SC01	208
SC02	198
SW703GEL	247
VAL01	232
ZCS24	213

Fig.	Art.No	US No.	Page
512	2217	C	171
518	2218	C	171
801	0110	M	168
801	0112	M	168
801	0116	C	168
801	0116	M	168
801	0118	C	168
801	0118	M	168
801	0123	C	168
801	0123	F	168
805	0312	M	168
805	0316	C	168
806	0416	C	168
807	0316.4	C	168
807	0318.5	C	168
808	0512	C	168
808	0512	M	168
808	0512	MS	168
809	0508	M	168
809	0508	MS	168
811	2133	C	168
815	6005	M	169
820	1416	M	168
820	1416	F	168
830	1920	C	169
830	1920	F	169
830	1923	C	169
830	1923	M	169
830	1923	F	169
830	3923	VF	169
831	1916	C	169
831	1916	F	169
831	6916	VF	169
833	1900	C	169
833	1900	M	169
833	1900	F	169
833	1908	C	169
833	1908	F	169
833	3900	VF	169
834	7003	M	169
834	7005	M	169
836	0710	CS	169
836	0710	C	169
836	0710	MS	169
836	0710	M	169
836	0712	C	169
837	0712.7	C	169
837	0716.8	C	169
839	5012	M	169
839	5014	M	169
839	5016	M	169
841	0608.6	M	169
841	0610.6	M	169
842	0614.8	C	169
842	0614.8	F	169
847	0914.8	C	169
847	0914.8	M	169
847	0914.8	F	169
847	0916.8	C	169
847	0916.8	M	169
847	0916.8	F	169
847	0918.8	C	169
847	0918.8	M	169
848	0914.9	C	169
848	0916.10	C	169
848	0916.10	M	169
848	0918.10	C	169
848	0918.10	M	169
849	1112.6	CS	170
849	1114.6	CS	170
852	1112.10	C	170
852	1112.10	M	170
852	1114.10	C	170
852	1114.10	M	170
852	1116.10	C	170
852	1116.10	M	170
852	1116.10	F	170
852	1118.9	C	170
852	1118.9	M	170
852	1118.9	F	170
852	114.10	F	170
856	2424	C	170
856	2424	C	170
856	1112.7	C	170
856	1112.7	M	170
856	1114.8	C	170

Fig.	Art.No	US No.	Page
856	1114.8	M	170
856	1114.8	F	170
856	1116.6	CS	170
856	1116.6	MS	170
856	1116.7	C	170
856	1116.7	M	170
856	1116.8	C	170
856	1116.8	M	170
856	1116.8	F	170
856	1118.7	C	170
856	1118.7	F	170
856	1121.8	C	170
856	3116.8	VF	170
858	1314.8	C	170
858	1314.8	M	170
858	1314.8	F	170
858	3314.8	VF	171
859	1310.10	M	170
859	1314.10	C	170
859	1314.10	M	170
859	1314.10	F	170
859	3314.10	VF	171
862	1510.8	C	170
862	1510.8	M	170
862	1510.8	F	170
862	1512.6	C	170
862	1512.6	M	170
862	1512.8	C	170
862	1512.8	M	170
862	1512.8	F	170
862	1514.8	C	170
862	1516.8	C	170
862	1516.8	M	170
862	1516.8	F	170
862	3512.8	VF	171
862	3516.8	VF	171
863	1512.10	C	170
863	1512.10	M	170
863	1512.10	F	170
863	1518.9	C	170
863	1518.9	F	170
863	3512.10	VF	171
863	3516.10	VF	171
868	1800.8	C	170
868	1800.8	F	170
868	1804.8	C	170
877	1716.6	CS	170
877	1716.6	MS	170
878	1712.8	M	170
878	1714.8	C	170
878	1714.8	M	170
878	1714.8	F	170
878	1716.8	C	170
878	1716.8	M	170
878	1716.8	F	170
878	1717.8	C	170
878	1718.8	C	170
878	1718.8	F	170
878	1721.8	C	170
879	1712.10	C	170
879	1712.10	M	170
879	1714.10	C	170
879	1714.10	M	170
879	1718.10	C	170
881	1210.7	C	169
881	1210.7	F	169
881	1212.7	C	169
881	1214.8	C	169
881	1214.8	G	169
881	1214.8	VF	169
881	1216.8	F	169
882	1214.10	M	169
885	1812.8	C	169
885	1812.8	M	169
885	1812.8	F	169
886	1812.10	C	169
886	1812.10	M	169
890	1300	FS	170
909	2035	C	168
909	2042	C	168
811L	2137	C	168
830P	8923	C	171
837L	0714.8	C	169
845R	2525	M	169
845R	0818.4	C	169
845R	0818.4	M	169

Fig.	Art.No	US No.	Page
846R	816	CS	169
846R	0816.6	MS	169
847R	0816.8	C	169
847R	0816.8	M	169
847R	0816.8	F	169
847R	0818.8	C	169
850P	8114.8	C	171
850P	8116.8	C	171
852P	8116.10	C	171
852P	8118.7	C	171
852P	8118.9	C	171
859L	1310.12	M	170
859L	1312.11	C	170
859L	1312.11	F	170
889L	1509.3	M	170
889L	1509.3	F	170
890L	1310.3	M	170
890L	1310.3	F	170
890L	3310.3	VF	171
HM1	2600001204010	RA2	173
HM1	2600001204014	RA4	173
HM1	2600001204018	RA6	173
HM1	2600001204023	RA8	173
HM1	2600001314005	FG1/4	172
HM1	2600001314006	FG1/2	172
HM1	2600001314010	FG2	172
HM1	2600001314014	FG4	172
HM1	2600001314018	FG6	172
HM1	2600001314023	FG8	172
HM1	2600001316010	FGXL2	173
HM1	2600001316014	FGXL4	173
HM1	2600001316018	FGXL6	173
HM1	2600001316023	FGXL8	173
HM2	2600002314008	FG34	172
HM2	2600002314010	FG35	172
HM2	2600021314009	FG56	172
HM2	2600021314010	FG57	172
HM3	2600031313010	FGS557	173
HM3	2600031314009	FG556	172
HM3	2600031314010	FG557	172
HM3	2600031314012	FG558	172
HM3	2600031316009	FGXL556	173
HM3	2600031316010	FGXL557	173
HM3	260031R314009	FG1556	172
HM3	260031R314010	FG1557	172
HM3	2600033316012	FGXL701	173
HM3	2600033316016	FGXL702	173
HM3	2600033316021	FGXL703	173
HM7	2600007313008	FGS330	173
HM7	2600007314008	FG330	172
HM7	2600007314010	FG331	172
HMUN245	26UN245313009	FGS245	173
HMUN245	26UN245314009	FG245	172
9754	M		175
9754	F		175
9755	M		175
9755	F		175
9756	M		175
9756	F		175
9757	M		175
9757	F		175
D9780			175
D9781			175
D9782			175
PHA02			174
PS003			174
PSS04			174
PST01			174
PTP01			174

Index US-No.

US-No.	Fig.	Size	Page
1	HM 1	8	58
2	HM 1	10	58
3	HM 1	12	58
4	HM 1	14	58
5	HM 1	16	58
6	HM 1	18	58
7	HM 1	21	58
8	HM 1	23	58
10	HM 1	27	58
33 1/2	HM 2	6	60
34	HM 2	8	60
35	HM 2	10	60
36	HM 2	12	60
37	HM 2	14	60
38	HM 2	16	60
39	HM 2	18	60
41	HM 2	23	60
56	HM 21	9	61
57	HM 21	10	61
58	HM 21	12	61
59	HM 21	14	61
60	HM 21	16	61
61	HM 21	18	61
168	HM 23	8	63
169	HM 23	9	63
170	HM 23	10	63
171	HM 23	12	63
172	HM 23	16	63
245	HMMUN 245	9	62
274	HM 274	16	68
329	HM 7	6	60
330	HM 7	8	60
331	HM 7	10	60
332	HM 7	12	60
555	HM 31	8	61
556	HM 31	9	61
557	HM 31	10	61
558	HM 31	12	61
559	HM 31	14	61
560	HM 31	16	61
561	HM 31	18	61
562	HM 31	21	61
563	HM 31	23	61
698	HM 33	8	63
699	HM 33	9	63
700	HM 33	10	63
701	HM 33	12	63
702	HM 33	16	63
703	HM 33	21	63
1155	HM 21 R	8	62
1156	HM 21 R	10	62
1157	HM 21 R	12	62
1158	HMB 21 R	12	56
1158	HM 21 R	18	62
1158	HMB 21 R	12	62
1170	HM 23 R	10	64
1171	HM 23 R	12	64
1172	HM 23 R	16	64
1556	HM 31 R	9	62
1557	HM 31 R	10	62
1558	HM 31 R	12	62
1559	HM 31 R	14	62
1702	HM 33 R	16	64
1931	HM 17	10	55
1932	HM 17	12	55
1958	HM 36 R	12	55
7004	HM 41	14	68
7006	HM 41	18	68
7008	HM 41	23	68
7205	HM 212 L	16	69
7303	HM 47 L	12	68
7404	HM 379	14	69
7406	HMD0 379	18	67
7406	HM 379	18	69
7408	HMD0 379	23	67
7408	HM 379	23	69
7653	HM 375 R	12	70
7664	HM 375 R	14	70
7675	HM 375 R	16	70
7686	HM 375 R	18	70
7801	HM 247	9	70
7901	HM 246	9	71
7902	HM 246	10	71
7903	HM 246	12	71
7904	HM 246	14	71
1/2	HM 1	6	58

US-No.	Fig.	Size	Page
1/4	HM 1	5	58
155BMXHMG	21 RX	12	54
169L	HM 23 L	9	63
1701MXHMG	23 RX	12	54
170L	HM 23 L	10	63
171L	HM 23 L	12	63
1S	HM 1 S	8	59
2S	HM 1 S	10	59
330L	HM 7 L	8	60
331L	HM 7 L	10	60
332L	HM 7 L	12	60
37L	HM 25	14	60
3S	HM 1 S	12	59
4S	HM 1 S	14	59
557L	HM 31 L	10	61
558L	HM 31 L	12	61
57L	HM 21 L	10	61
58L	HM 21 L	12	61
5S	HM 1 S	16	59
669L	HM 33 L	9	63
6S	HM 1 S	18	59
700L	HM 33 L	10	63
701L	HM 33 L	12	63
702L	HM 33 L	16	63
703L	HM 33 L	21	63
7S	HM 1 S	21	59
8S	HM 1 S	23	59
957L	HM 207	12	62
9S	HM 1 S	27	59
ET3	HMD0 132	8	67
ET3	HM 132	8	70
ET4	HMD0 133	10	67
ET4	HM 133	10	70
ET6	HMD0 134	14	67
ET6	HM 134	14	70
ET9	HMD0 135	14	67
ET9	HM 135	14	70



BESTELLFAX

ORDERFAX / FAX DE PEDIDO

+49 (0) 2131-2012 222

Kundennr. / Customer no. / N.º de cliente:

Datum / Date / Fecha:

Phone / Phone / Teléfono:

Herr / Frau / Sir / Madame / Señor / Señora:

Fax / Fax / Fax:

E-mail / E-mail / Correo electrónico:

Adresse / Address / Dirección:

Anmerkung / Note / Nota:

Verrechnung über / Settlement via / Facturación por:

Nr.	Figur Figure / Figura	Schaft Shank / Mango	Größe Size / Tamaño	Anzahl Verpackungen Number of packages / Número de embalajes
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				

Unterschrift / Signature / Firma:

Hager & Meisinger GmbH

Hansemannstr. 10
41468 Neuss | Germany
Phone: +49 2131 2012-0
Fax: +49 2131 2012-222
E-Mail: info@meisinger.de
Internet: www.meisinger.de

Meisinger USA. L.L.C.

10150 E. Easter Avenue
Centennial, Colorado 80112 | USA
Phone: +1 (303) 268-5400
Toll free: +1 (866) 634-7464
Fax: +1 (303) 268-5407
E-Mail: info@meisingerusa.com
Internet: www.meisingerusa.com



BESTELLFAX

ORDERFAX / FAX DE PEDIDO

+49 (0) 2131-2012 222

Kundennr. / Customer no. / N.º de cliente:

Datum / Date / Fecha:

Phone / Phone / Teléfono:

Herr / Frau / Sir / Madame / Señor / Señora:

Fax / Fax / Fax:

E-mail / E-mail / Correo electrónico:

Adresse / Address / Dirección:

Anmerkung / Note / Nota:

Verrechnung über / Settlement via / Facturación por:

Nr.	Figur Figure / Figura	Schaft Shank / Mango	Größe Size / Tamaño	Anzahl Verpackungen Number of packages / Número de embalajes
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
18.				
19.				

Unterschrift / Signature / Firma:

Hager & Meisinger GmbH

Hansemannstr. 10
41468 Neuss | Germany
Phone: +49 2131 2012-0
Fax: +49 2131 2012-222
E-Mail: info@meisinger.de
Internet: www.meisinger.de

Meisinger USA. L.L.C.

10150 E. Easter Avenue
Centennial, Colorado 80112 | USA
Phone: +1 (303) 268-5400
Toll free: +1 (866) 634-7464
Fax: +1 (303) 268-5407
E-Mail: info@meisingerusa.com
Internet: www.meisingerusa.com



Alle Rechte vorbehalten.
Nachdruck, auch auszugsweise, und reprografische Vervielfältigungen sind nur mit schriftlicher Genehmigung der Hager & Meisinger GmbH, Neuss, zulässig.
Für sämtliche Angebote, Verkäufe und Lieferungen gelten ausschließlich unsere „Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen“.
Programm- und Konstruktionsänderungen sowie Abweichungen der tatsächlichen Ausführungen von den Abbildungen und Angaben bleiben vorbehalten.

All rights reserved.
Reproduction, also by extract and reproducing photos, are only permitted with written authorization of Hager & Meisinger GmbH, Neuss.
All offers, orders, and deliveries are subject to Meisinger's "General Sales and Delivery Terms."
We reserve the right to modify our range of products and their design as well as to deviate from the illustrations and data shown.

Todos los derechos reservados.
Reproducción, también en extracto y fotografías reproductoras sólo se permiten con la autorización escrita de Hager & Meisinger GmbH, Neuss.
Para todas las ofertas, ventas y entregas rigen exclusivamente nuestras "Condiciones generales de venta y entrega".
Queda reservado el derecho de modificaciones en la gama de productos y en los modelos así como desviaciones entre los productos verdaderos y sus diseños ilustrados y caracterizados.



eingetragenes Warenzeichen



registered trademark



marca registrada

Hager & Meisinger GmbH

Hansemannstr. 10
41468 Neuss | Germany
Phone: +49 2131 2012-0
Fax: +49 2131 2012-222
E-Mail: info@meisinger.de
Internet: www.meisinger.de

Meisinger USA. L.L.C.

10150 E. Easter Avenue
Centennial, Colorado 80112 | USA
Phone: +1 (303) 268-5400
Toll free: +1 (866) 634-7464
Fax: +1 (303) 268-5407
E-Mail: info@meisingerusa.com
Internet: www.meisingerusa.com

